

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

TOILET HANDRAIL

MODEL:FBL210212

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILET HANDRAIL

MODEL:FBL210212



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.


IMPORTANT


1. Don not exceed the weight capacity - 300 lbs max.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.

Model	FBL210212
Rated Load(lbs / kg)	300 / 136

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

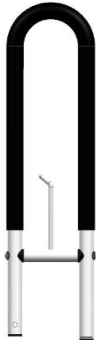NO	PICTURE	PART NAME	QTY	NO	PICTURE	PART NAME	QTY
①		Rail	1	⑥		Bolt	1

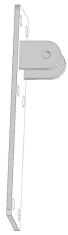
②		Plate	1	⑦		Hex nut	1
③		Bolt Protection Cap	2	⑧		Sleeve Anchor	6
④		Flat washer	2	⑨		Hexagon Keys	1
⑤		Plastic washer	2	⑩		Outer Spanner	2

Installation Procedures


Tools You'll Need:




Step 1: Place the plastic washers on either side of the plate, then put the rail in the center of the washers.

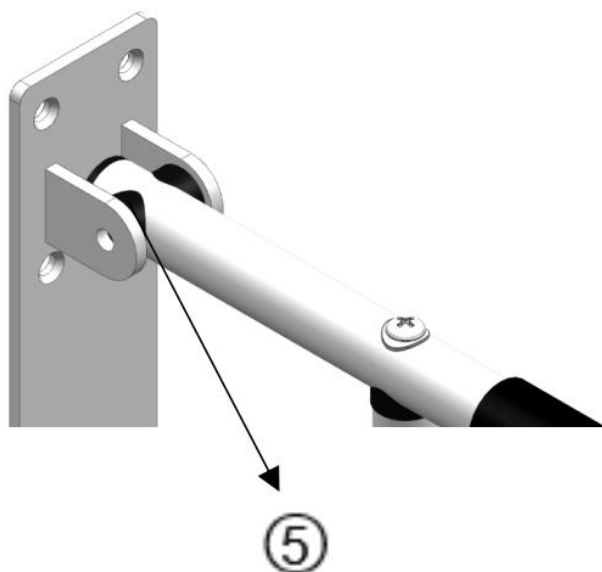


Step 2: Assemble the parts as shown in the diagram.

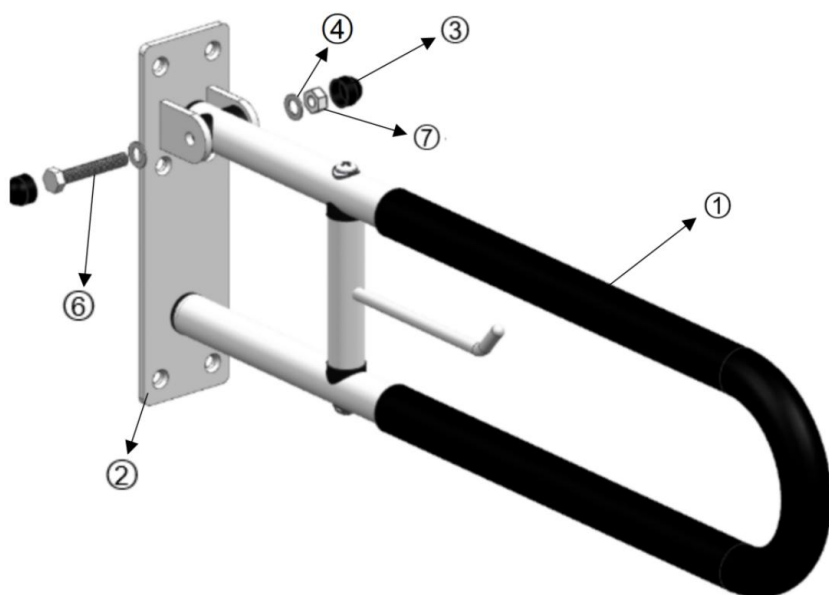


Step 3:Offer the rail up to the wall at the height required, ensuring the fixing plate is straight. Mark the fixing hole locations.

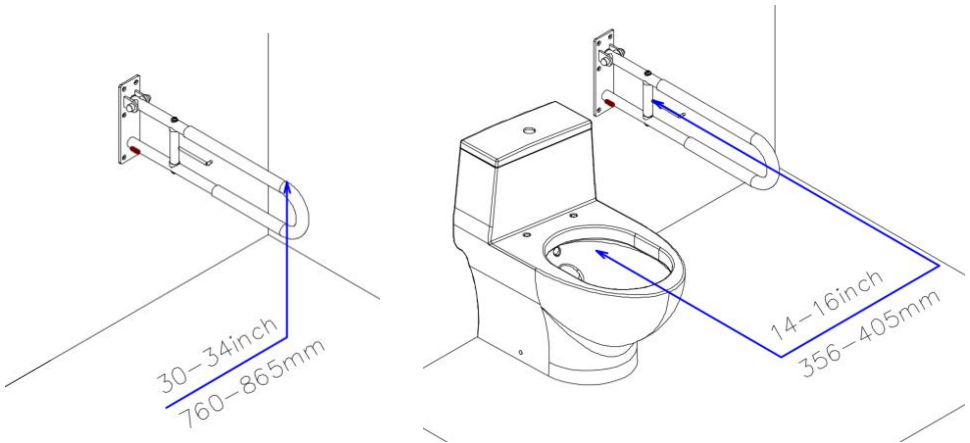


Step 4:Drill the holes in the wall.

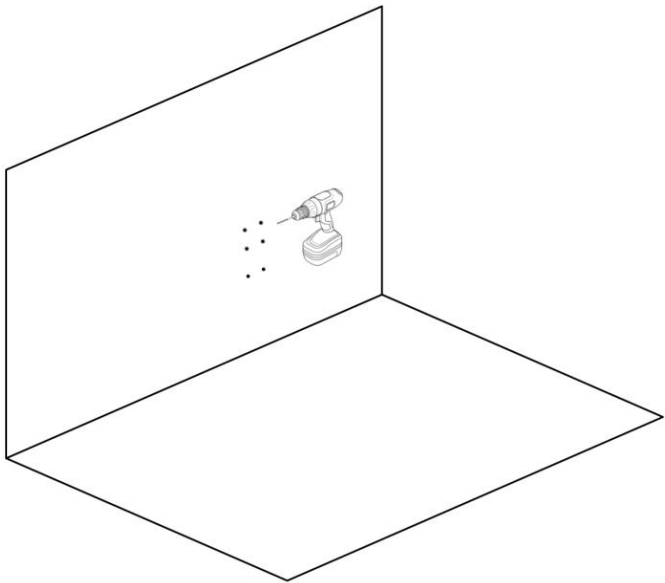

Step 5:Thread the sleeve anchor through the holes in the fixing plate and align them with the holes punched in the wall.

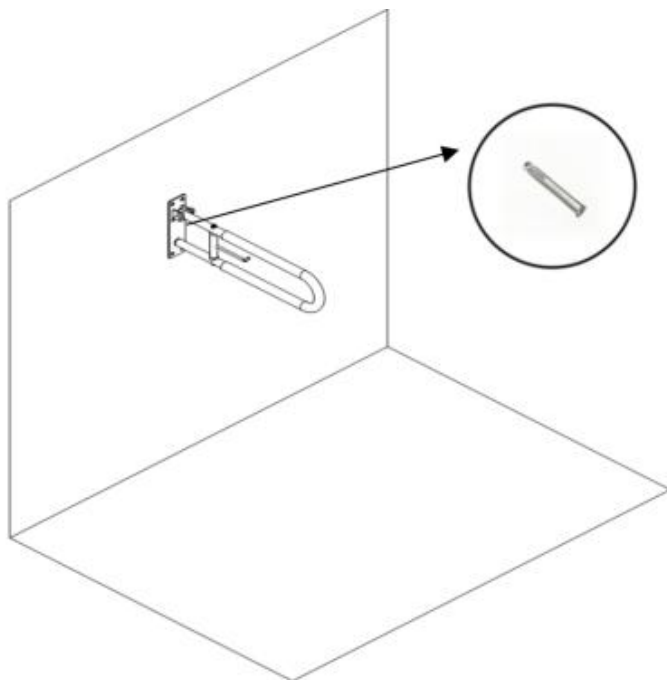

Step 6: Lock the sleeve anchors with a hexagon key to complete the installation.

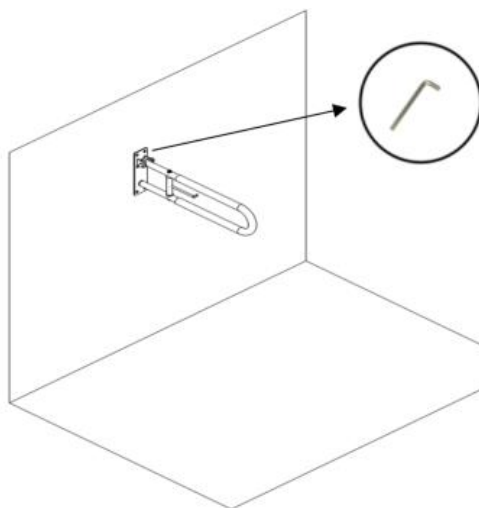

Folding Storage

As shown in the picture, the handrail can be folded upwards to save space.

Note: If the handrail cannot be kept in the storage state, it is necessary to slightly tighten the screw at the rotating shaft pointed by the arrow to keep it in the storage state.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

RAMPE DE TOILETTE

MODÈLE : FBL210212

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAMPE DE TOILETTE

MODÈLE : FBL210212



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

IMPORTANT

1. Ne pas dépasser la capacité de poids - 300 lb max.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement pour détecter des signes d'usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, rincez tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.

Modèle	FBL210212
Charge nominale (lb/kg)	300 / 136

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de assembler ou utiliser le produit.

PAS D'IMAGE	PARTIE NOM	QTY	PAS D'IMAGE	PARTIE NOM	Qté
	Rail	1		Boulon	1


	Plaque	1			Écrou hexagonal	1
	Boulon Protégé sur le Cap	2			Manche Ancre	6
	Plat rondelle	2			Clés hexagonales	1
	Plastique rondelle	2			Extérieur Équipes I	2

Procédures d'installation


Outils dont vous aurez besoin :



Étape 1 : Placez les rondelles en plastique de chaque côté de la plaque, puis placez le rail au centre des rondelles.

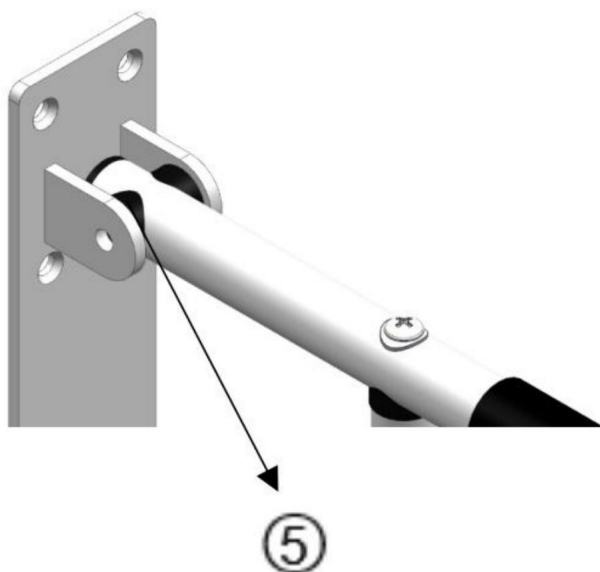


Étape 2 : Assemblez les pièces comme indiqué sur le schéma.

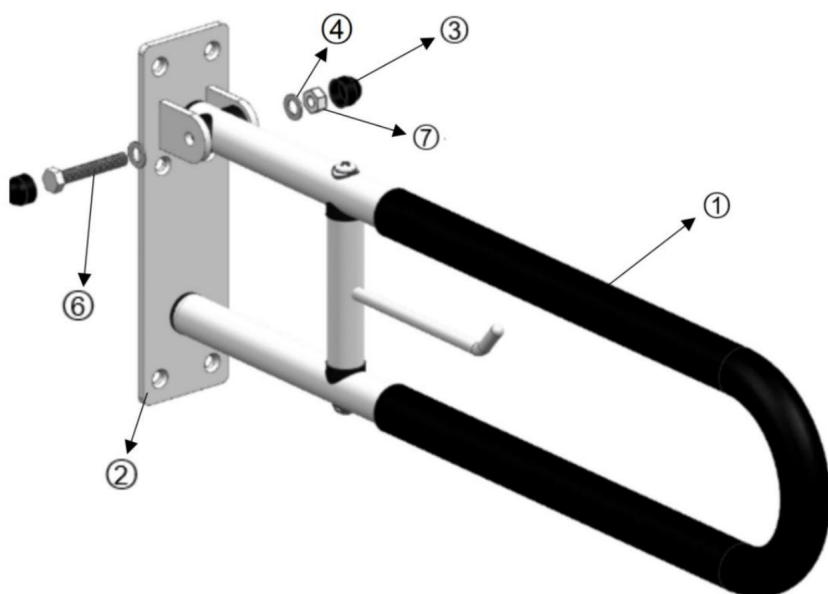


Étape 3 : Proposez le rail jusqu'au mur à la hauteur requise, en assurant la fixation


la plaque est droite. Marquez les emplacements des trous de fixation.

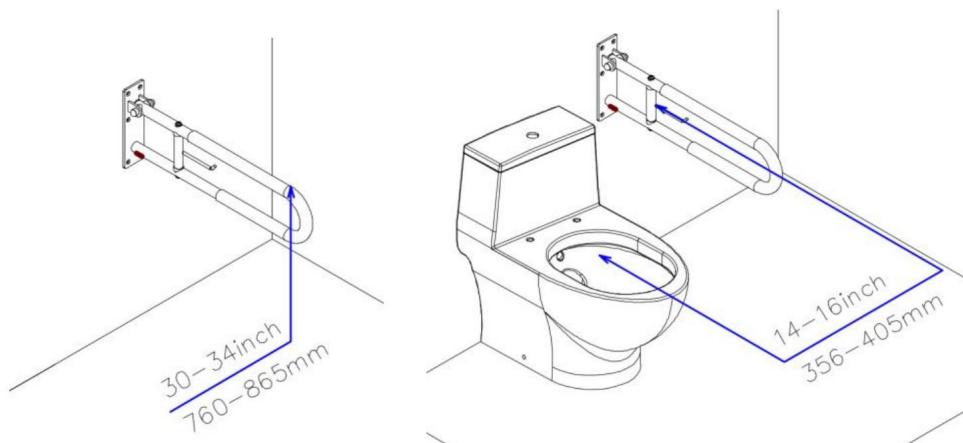


Étape 4 : Percez les trous dans le mur.

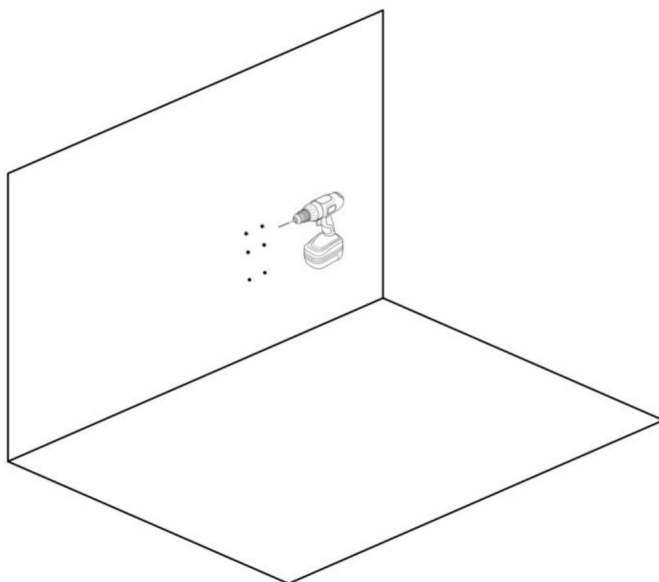

Étape 5 : Enfilez le manchon d'ancrage dans les trous de la plaque de fixation et alignez-les avec les trous percés dans le mur.

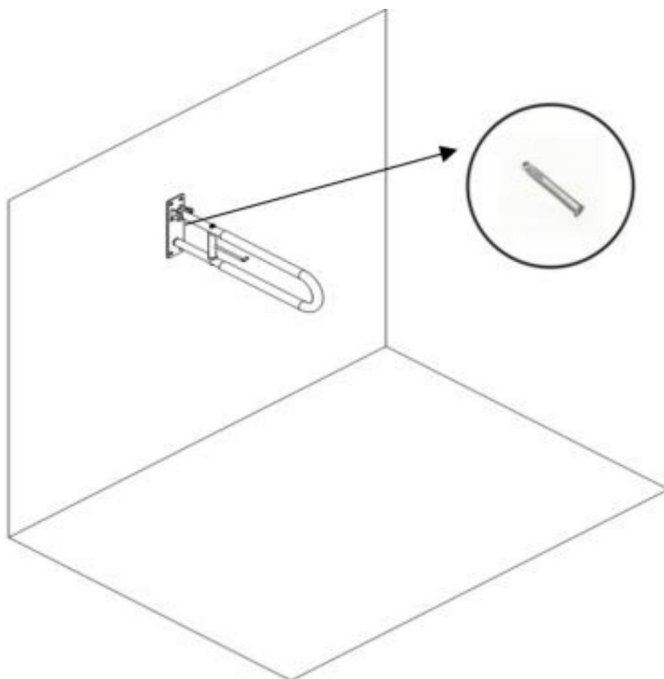

Étape 6 : Verrouillez les ancrages du manchon avec une clé hexagonale pour terminer l'installation.

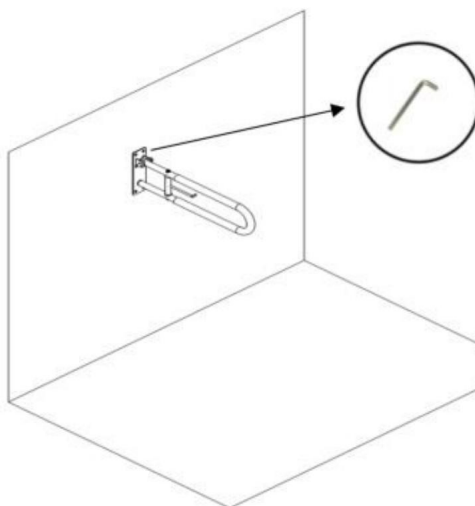

Rangement pliable

Comme le montre l'image, la main courante peut être repliée vers le haut pour gagner de la place.

Remarque : Si la main courante ne peut pas être conservée dans l'état de stockage, il est nécessaire de serrer légèrement la vis au niveau de l'arbre rotatif indiqué par la flèche pour la maintenir dans l'état de stockage.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

WC-HALTER

MODELL:FBL210212

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WC-HALTER

MODELL:FBL210212



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität von maximal 300 Pfund.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
- 3.Regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder losen Teilen prüfen.
- 4.Reinigen Sie regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser, spülen Sie Seifenreste. Nach der Reinigung gründlich trocknen.

Modell	FBL210212
Nennlast (lbs/kg)	300 / 136

TEILELISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile sind im Lieferumfang enthalten und prüfen Sie sorgfältig auf eventuelle Schäden während des Transports. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder verwenden.

KEIN	BILD	TEIL NAME	MENGE	KEIN	BILD	TEIL NAME	Menge
ÿ		Schiene	1 ÿ			Bolzen	1


ÿ		Platte	1 ÿ			Sechskantmutter	1
ÿ		Bolzen Geschützt auf Cap	2 ÿ			Ärmel Anker	6
ÿ		Wohnung Waschmaschine	2 ÿ			Inbusschlüssel	1
ÿ		Plastik Waschmaschine	2 ÿ			Äußere Manschaften R	2

Installationsverfahren


Benötigte Werkzeuge:



Schritt 1: Platzieren Sie die Kunststoffscheiben auf beiden Seiten der Platte und legen Sie dann die Schiene in die Mitte der Scheiben.

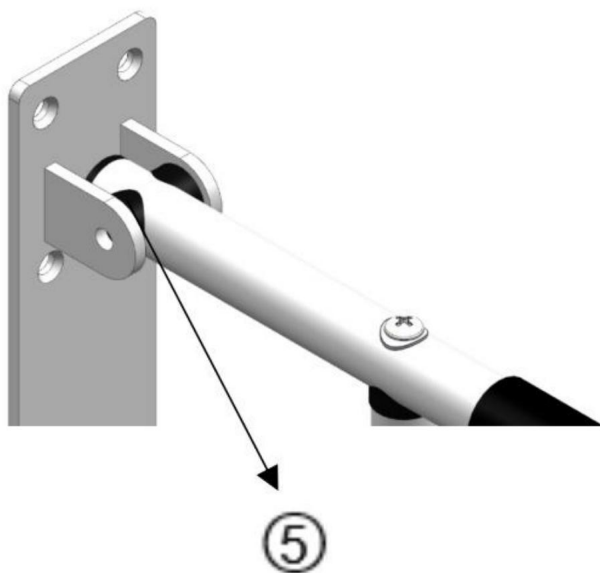


Schritt 2: Setzen Sie die Teile wie in der Abbildung gezeigt zusammen.

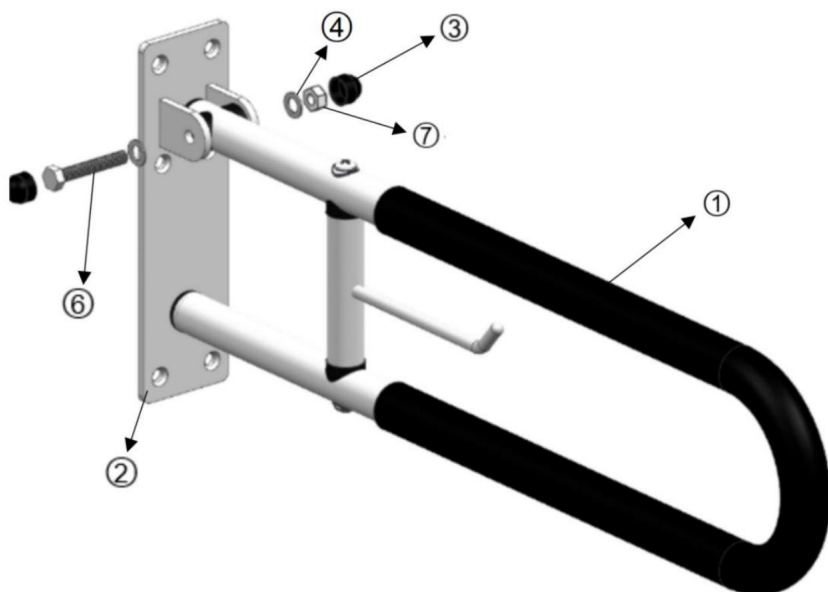


Schritt 3: Bringen Sie die Schiene in der erforderlichen Höhe an der Wand an und stellen Sie sicher, dass sie befestigt ist.


Platte gerade ist. Markieren Sie die Positionen der Befestigungslöcher.

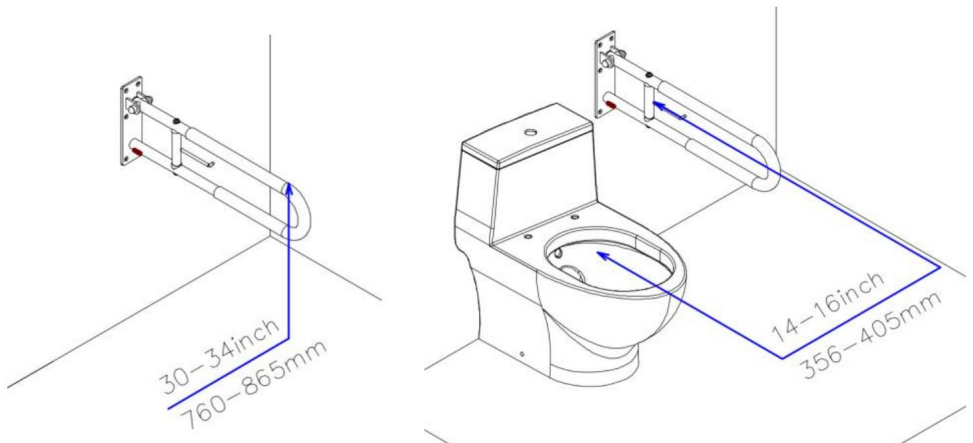


Schritt 4: Bohren Sie die Löcher in die Wand.

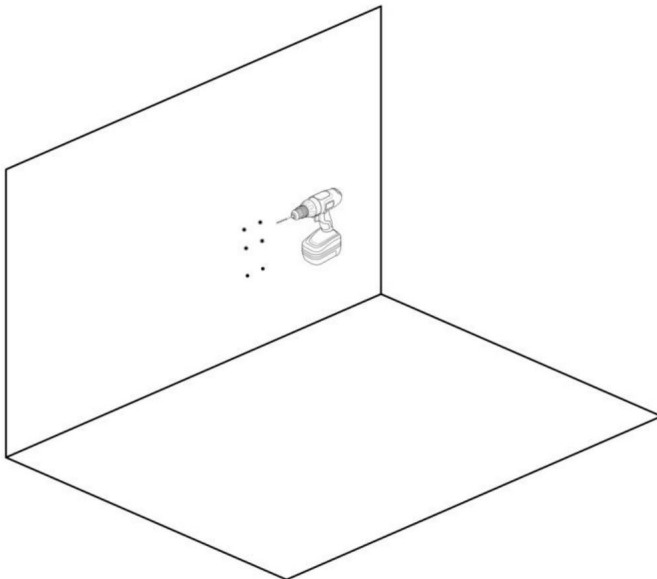

Schritt 5: Fädeln Sie den Hülseanker durch die Löcher in der Befestigungsplatte und richten Sie ihn an den in der Wand gestanzten Löchern aus.

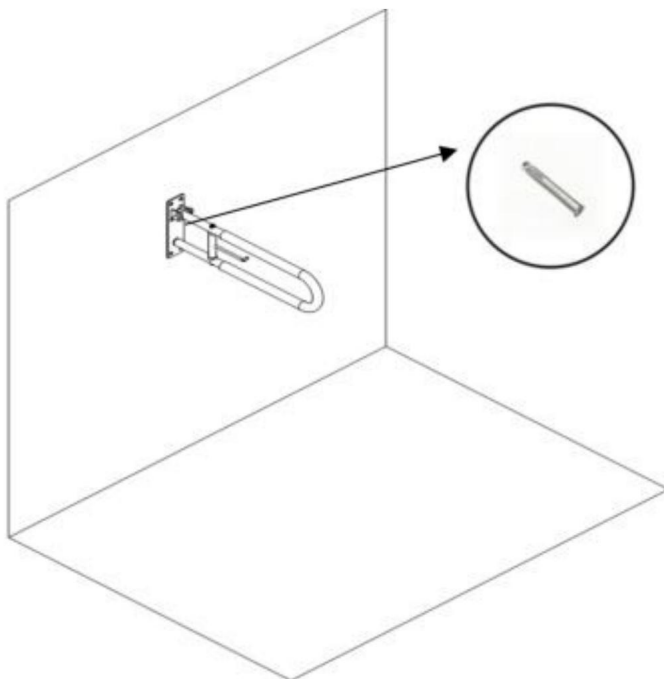

Schritt 6: Verriegeln Sie die Hülsenanker mit einem Inbusschlüssel, um die Installation abzuschließen.

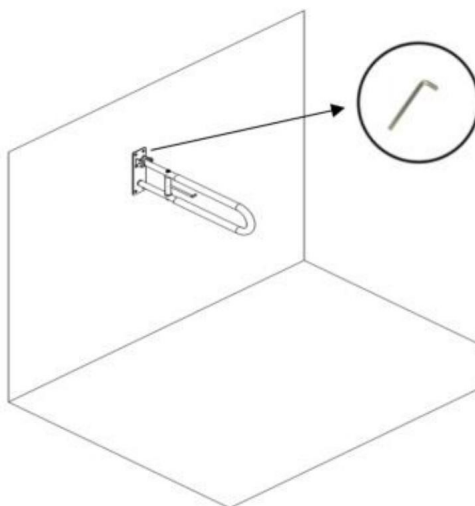

Zusammenklappbare Aufbewahrung

Der Handlauf lässt sich, wie auf dem Bild zu sehen, platzsparend nach oben klappen.

Hinweis: Wenn der Handlauf nicht im Lagerzustand gehalten werden kann, ist es notwendig, die Schraube an der Drehwelle, auf die der Pfeil zeigt, leicht anzuziehen, um ihn im Lagerzustand zu halten.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

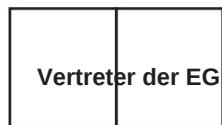

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CORRIMANO PER WC

MODELLO:FBL210212

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi

se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORRIMANO PER WC

MODELLO:FBL210212



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso: massimo 300 libbre.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Controllare regolarmente che non vi siano segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente utilizzando un detergente delicato e acqua calda, risciacquare eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.

Modello	FBL210212
Carico nominale (libbre/kg)	300 / 136

ELENCO DEI PEZZI

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito sono inclusi e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.

NESSUNA IMMAGINE	PARTE NOME	QTY	NESSUNA IMMAGINE	PARTE NOME	Quantità
	Sbarra	1		Bullone	1


•		Piatto	1 •			Dado esagonale	1
•		Bullone Protetto sul tappo	2 •			Manica Ancorare	6
•		Piatto rondella	2 •			Chiavi esagonali	1
•		Plastica rondella	2 •			Esterno Squadre R	2

Procedure di installazione


Strumenti necessari:




Fase 1: Posizionare le rondelle di plastica su entrambi i lati della piastra, quindi posizionare la rotaia al centro delle rondelle.

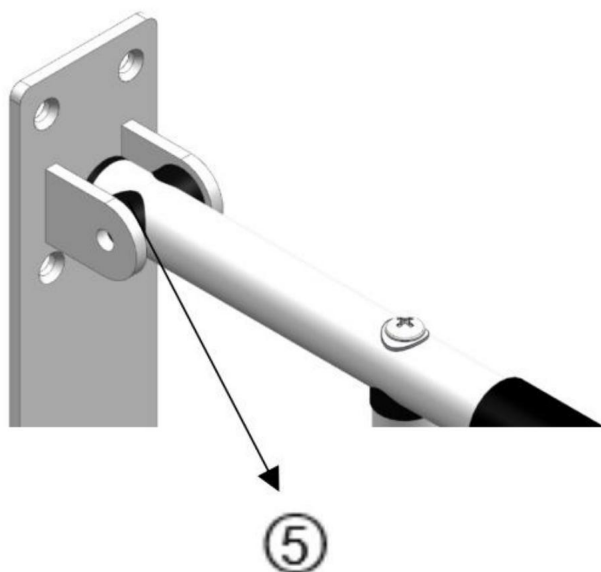


Fase 2: assemblare le parti come mostrato nello schema.

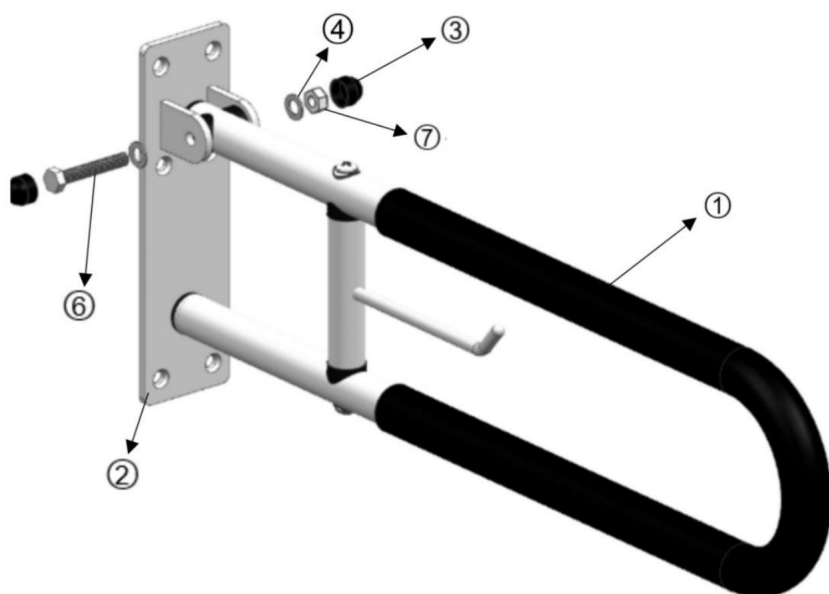


Fase 3: Posizionare la rotaia sul muro all'altezza richiesta, assicurandosi del fissaggio la piastra è dritta. Segnare le posizioni dei fori di fissaggio.

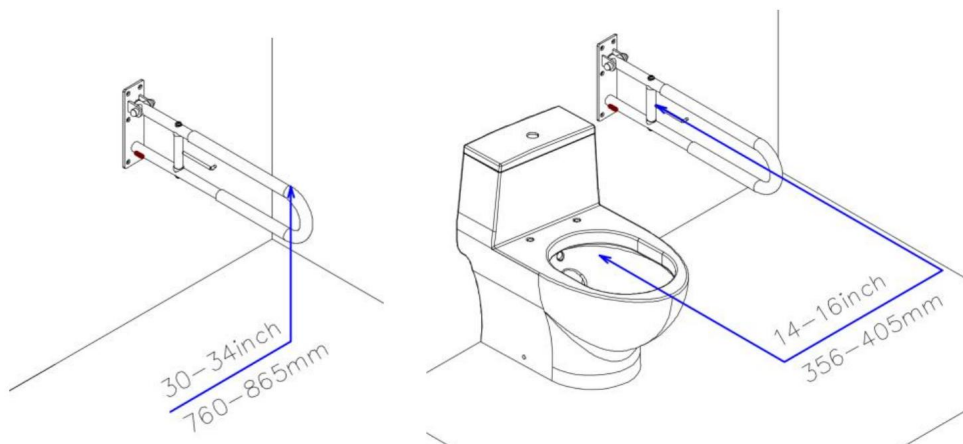


Fase 4: Praticare i fori nel muro.

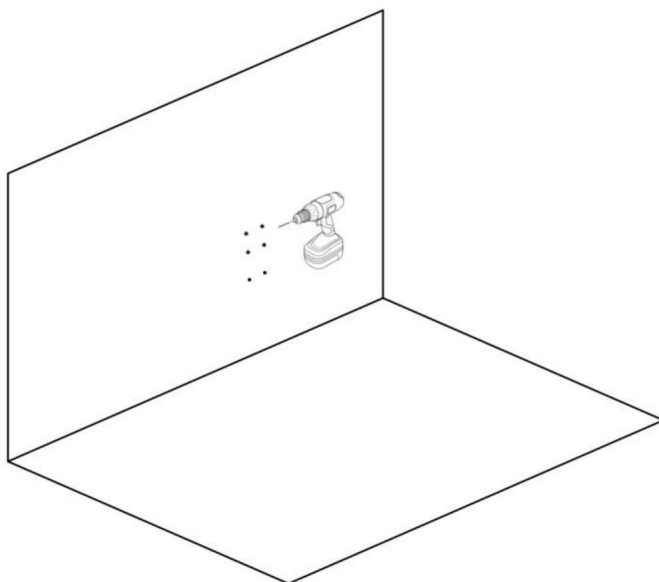

Fase 5: Infilare il tassello di ancoraggio attraverso i fori nella piastra di fissaggio e allinearli con i fori praticati nel muro.

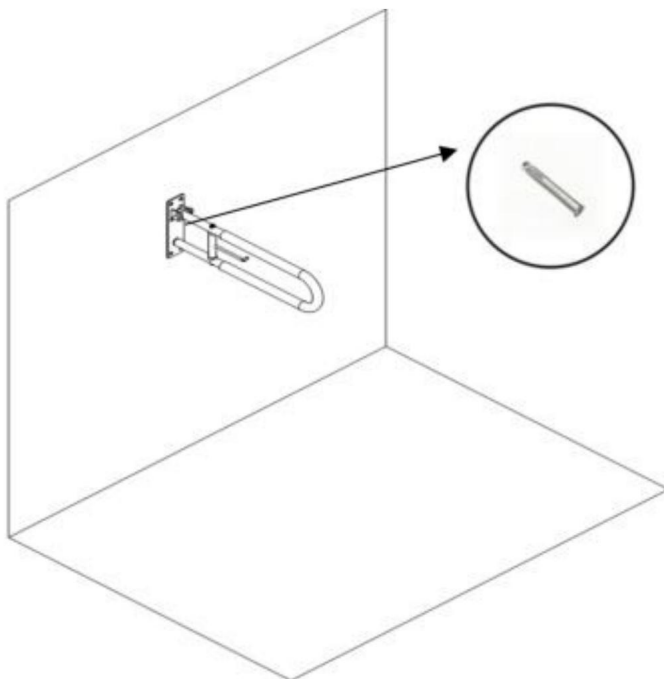

Fase 6: Bloccare gli ancoraggi a manicotto con una chiave esagonale per completare l'installazione.

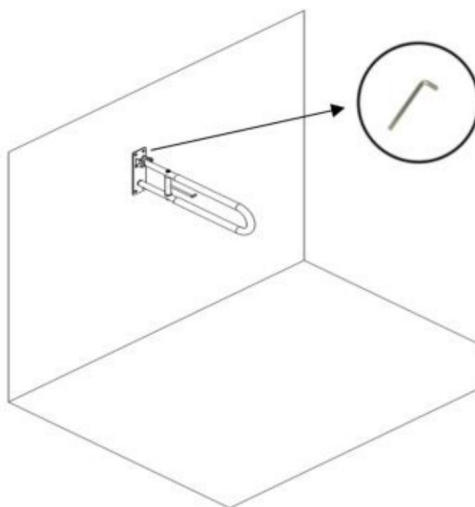

Contenitori pieghevoli

Come mostrato nell'immagine, il corrimano può essere ripiegato verso l'alto per risparmiare spazio.

Nota: se il corrimano non può essere mantenuto nello stato di stoccaggio, è necessario stringere leggermente la vite sull'albero rotante indicato dalla freccia per mantenerlo nello stato di stoccaggio.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

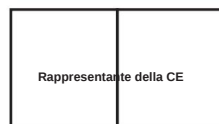

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

PASAMANOS DE INODORO

MODELO:FBL210212

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASAMANOS DE INODORO

MODELO:FBL210212



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones.

IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad de peso: 300 libras máximo.
2. Úselo únicamente en superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuague cualquier Residuos de jabón. Después de limpiar, secar bien.

Modelo	FBL210212
Carga nominal (lbs/kg)	300 / 136

LISTA DE PIEZAS

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación Se incluyen y se inspeccionan cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido. durante el transporte. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar o utilizar el producto.

SIN IMAGEN	PARTE NOMBRE	CANTIDAD	SIN IMAGEN	PARTE NOMBRE	CANTIDAD
	Carril	1		Tornillo	1


	Lámina	1			Tuerca hexagonal	1
	Tornillo Protegido En la tapa	2			Manga Ancla	6
	Departamento arandela	2			Hexágono y llaves	1
	Plástico arandela	2			Exterior equipos a	2

Procedimientos de instalación


Herramientas que necesitarás:



Paso 1: Coloque las arandelas de plástico a cada lado de la placa, luego coloque el riel en el centro de las arandelas.

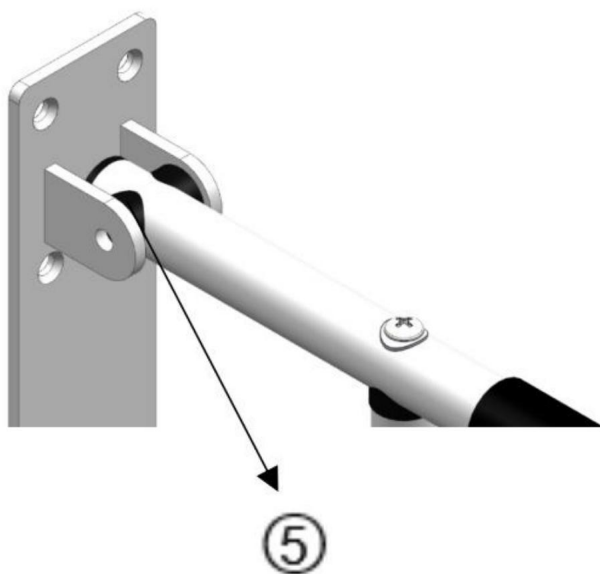


Paso 2: Ensamble las piezas como se muestra en el diagrama.

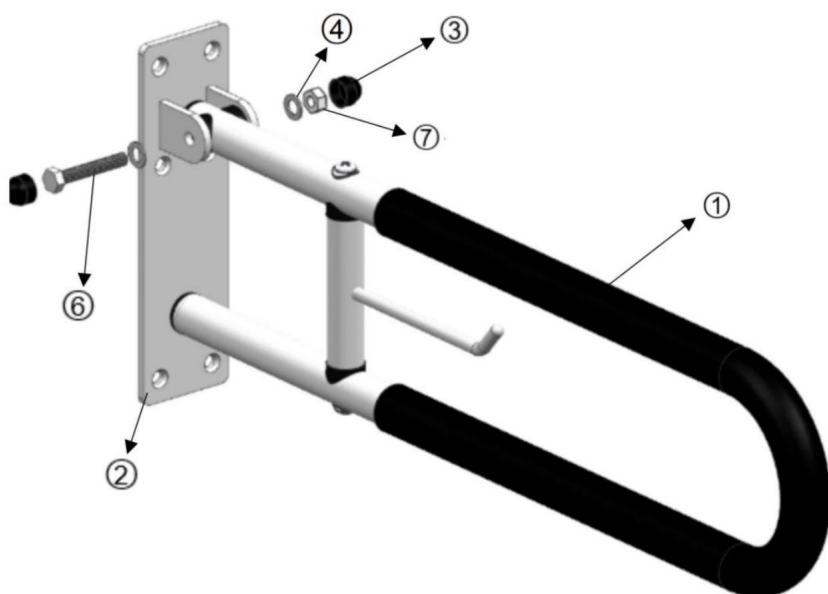


Paso 3: Coloque el riel en la pared a la altura requerida, asegurando la fijación.


La placa está recta. Marque la ubicación de los orificios de fijación.

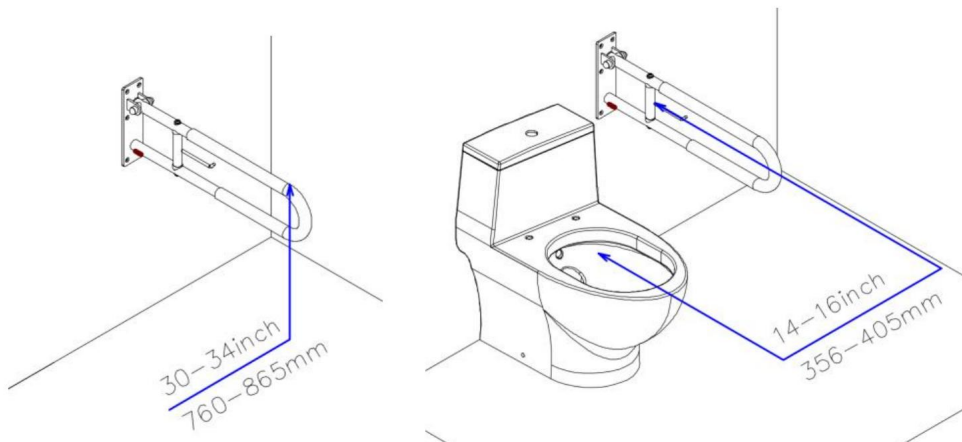


Paso 4: Perfora los agujeros en la pared.

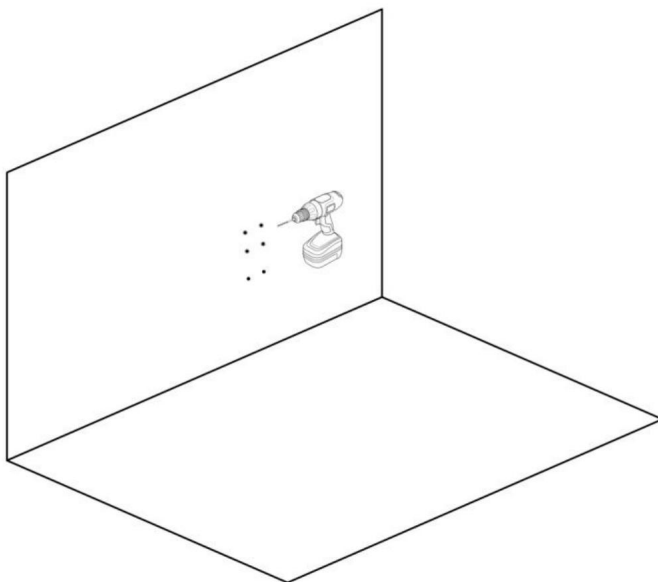

Paso 5: Pase el anclaje de manguito a través de los orificios en la placa de fijación y alinéelos con los orificios perforados en la pared.

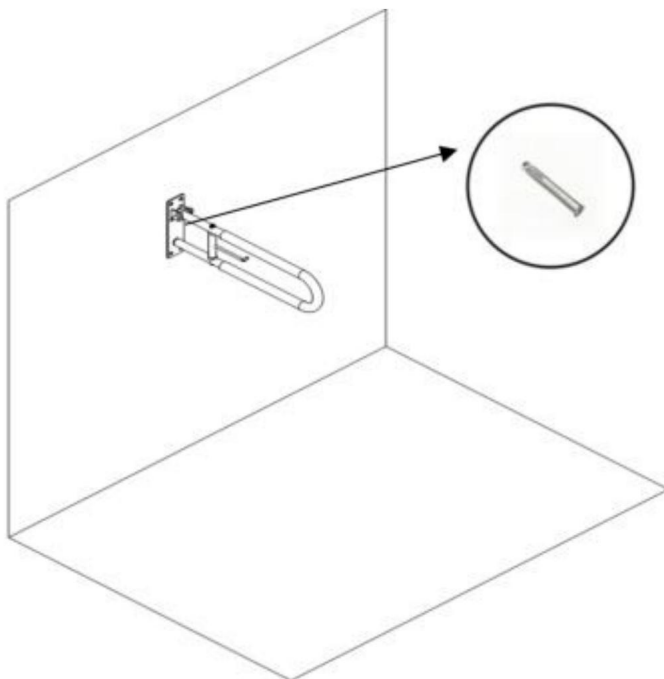

Paso 6: Bloquee los anclajes de la manga con una llave hexagonal para completar la instalación.

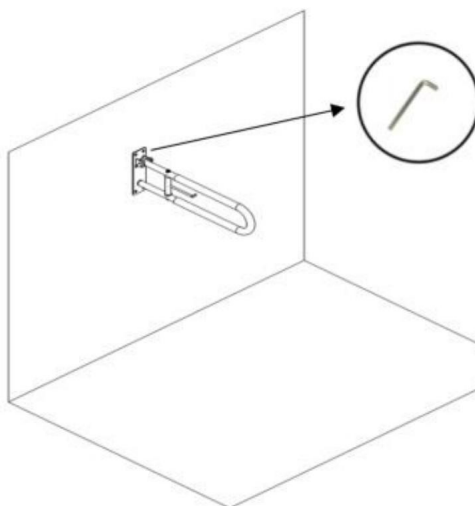

Almacenamiento plegable

Como se muestra en la imagen, el pasamanos se puede plegar hacia arriba para ahorrar espacio.


Nota: Si el pasamanos no se puede mantener en el estado de almacenamiento, es necesario apretar ligeramente el tornillo en el eje giratorio señalado por la flecha para mantenerlo en el estado de almacenamiento.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

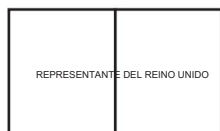

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

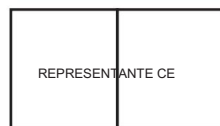

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

PORĘCZ TOALETY

MODEL:FBL210212

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORĘCZ TOALETY

MODEL:FBL210212



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WAŻNY

1. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia – maks. 300 funtów.
2. Stosować wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub poluzowanych części.
4. Regularnie czyść łagodnym detergentem i ciepłą wodą, spłucz wszelkie zabrudzenia. pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie osuszyć.

Model	FBL210212
Nośność znamionowa (funty/kg)	300 / 136

LISTA CZĘŚCI

Podczas rozpakowywania tego produktu należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części są kompletne są dołączone i dokładnie sprawdzone pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Jeśli jakaś część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj złożyć lub używać produktu.

BRAK	OBRAZU	CZĘŚĆ NAZWA	ILOŚĆ	BRAK	OBRAZKA	CZĘŚĆ NAZWA	ILOŚĆ
		Kolej	1			Śruba	1


	Płyta	1			Nakrętka sześciokątna	1
	Śruba Chroniony na czapce	2			Rękaw Kotwica	6
	Płaski pralka	2			Sześciokąt i klucze	1
	Plastikowy pralka	2			Zewnętrzny Zespoły R	2

Procedury instalacyjne


Narzędzia, których będziesz potrzebować:




Krok 1: Umieść plastikowe podkładki po obu stronach płyty, a następnie umieść szynę na środku podkładek.

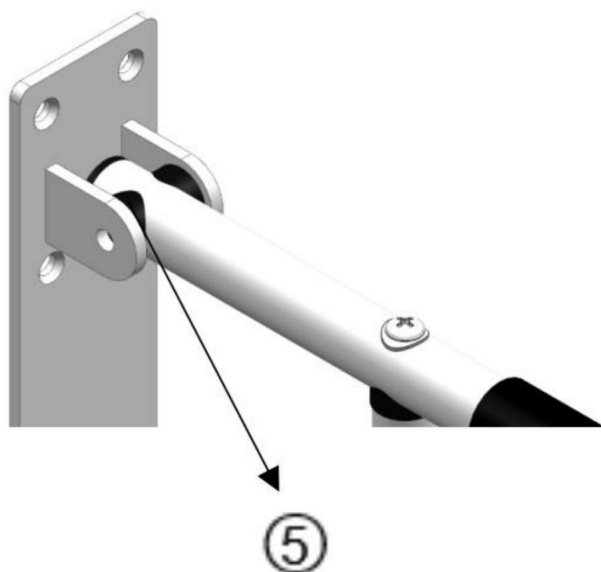


Krok 2: Złóż części tak, jak pokazano na schemacie.

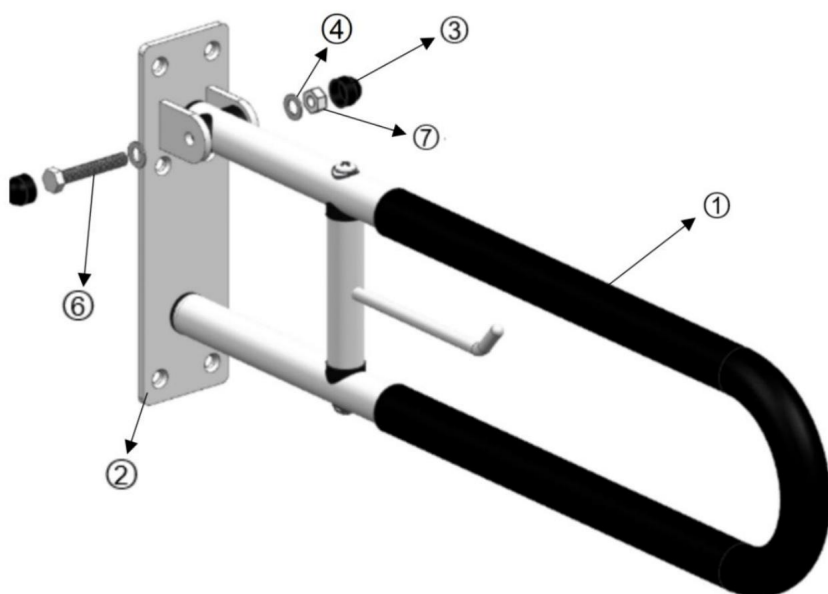


Krok 3: Przymocuj szynę do ściany na wymaganej wysokości, upewniając się, że jest dobrze zamocowana. płyta jest prosta. Zaznacz miejsca otworów mocujących.

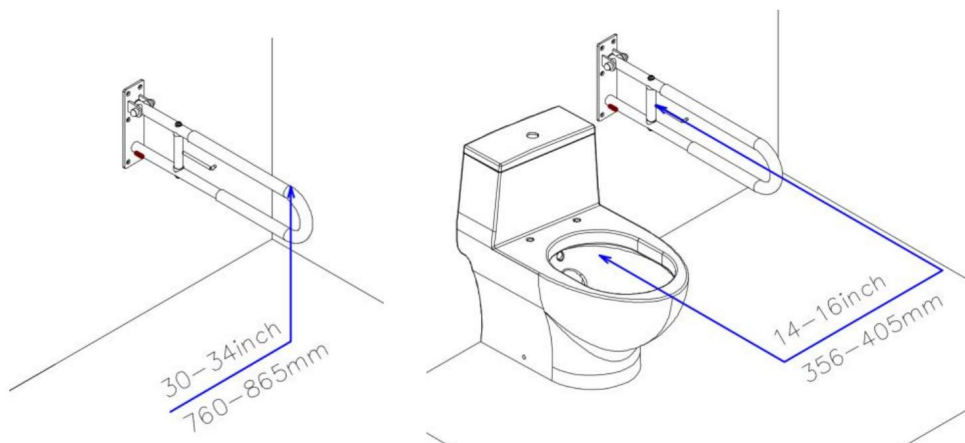


Krok 4: Wywierć otwory w ścianie.

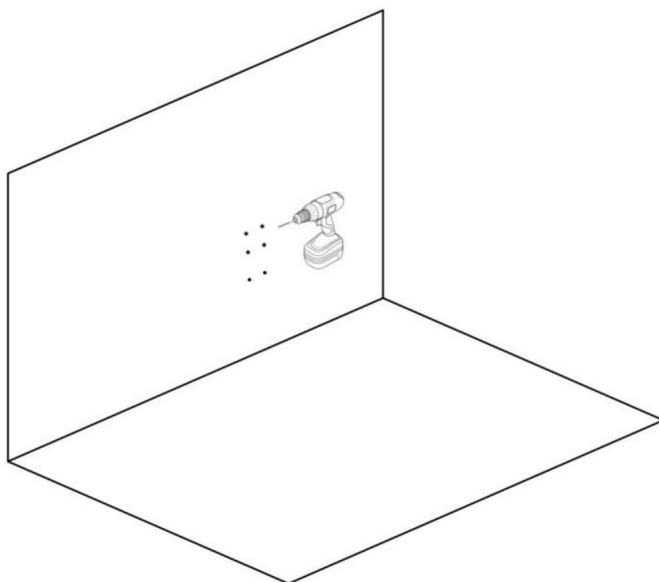

Krok 5: Przeciągnij kołek rozporowy przez otwory w płytce mocującej i wyrównaj je z otworami wyciętymi w ścianie.

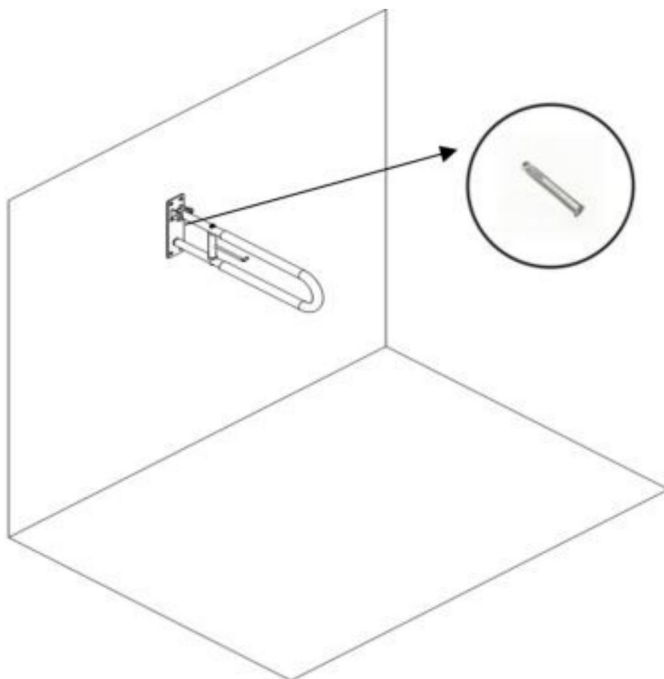

Krok 6: Zablokuj kotwy tulejowe kluczem imbusowym, aby dokończyć montaż.

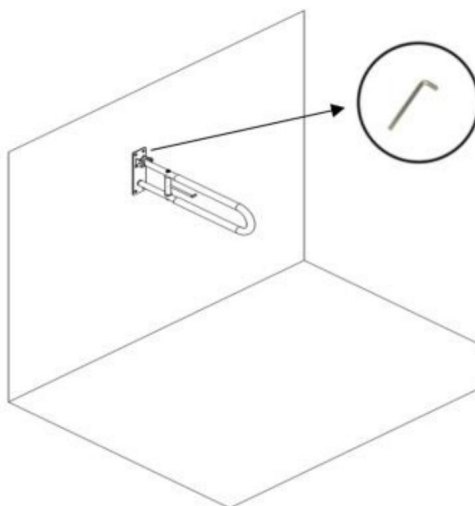

Składane przechowywanie

Jak pokazano na rysunku, poręcz można złożyć do góry, aby zaoszczędzić miejsce. Uwaga: Jeżeli poręcz nie można przechowywać w stanie przechowywanym, należy lekko dokręcić śrubę na obrotowym wale wskazanym strzałką, aby utrzymać ją w stanie przechowywanym.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

TOILETLEUNING

MODEL:FBL210212

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILETLEUNING

MODEL:FBL210212



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

BELANGRIJK

1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet: 300 lbs.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Maak het regelmatig schoon met een mild reinigingsmiddel en warm water, spoel eventuele resten af met zeepresten. Na het schoonmaken goed laten drogen.

Model	FBL210212
Nominale belasting (lbs / kg)	300 / 136

ONDERDELENLIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn zijn inbegrepen en worden zorgvuldig geïnspecteerd op eventuele schade die is opgetreden tijdens het transport. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dan niet het product in elkaar zetten of gebruiken.

GEEN FOTO	DEEL NAAM	AANTAL	GEEN FOTO	DEEL NAAM	Hoeveelheid
ÿ		1	ÿ		1
	Spoor			Bout	


ÿ		Bord	1 ÿ			Zeskantmoer	1
ÿ		Bout Beschermd op Cap	2 ÿ			Mouw Anker	6
ÿ		Vlak wasmachine	2 ÿ			Hexagon n-sleutels	1
ÿ		Plastic wasmachine	2 ÿ			Buitenste Teams R	2

Installatieprocedures


Benodigde hulpmiddelen:



Stap 1: Plaats de plastic ringen aan beide zijden van de plaat en plaats vervolgens de rail in het midden van de ringen.

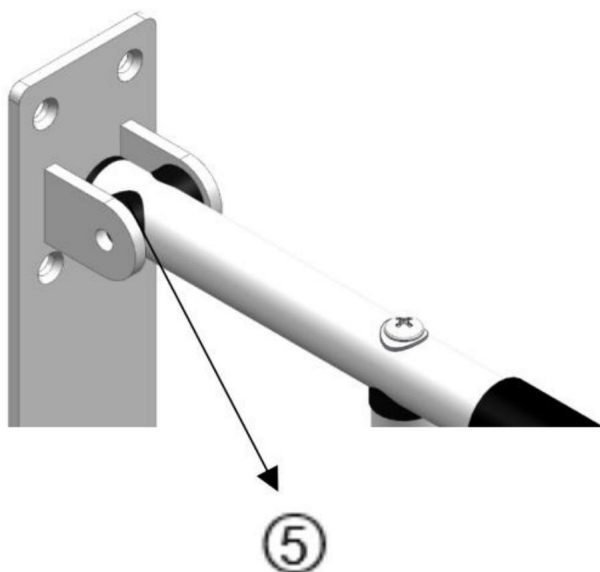


Stap 2: Monteer de onderdelen zoals aangegeven in het diagram.

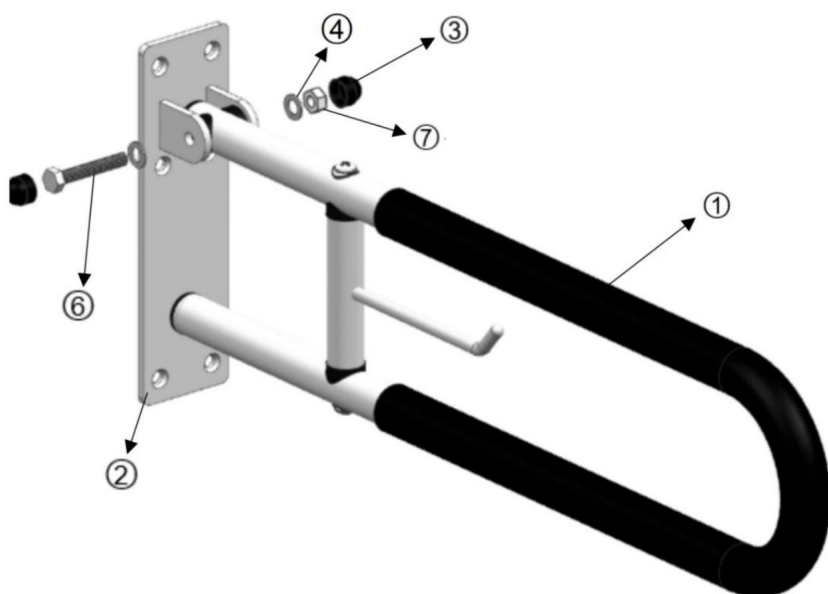


Stap 3: Plaats de rail op de gewenste hoogte tegen de muur en zorg ervoor dat de bevestiging goed vastzit.


plaat recht is. Markeer de locaties van de bevestigingsgaten.

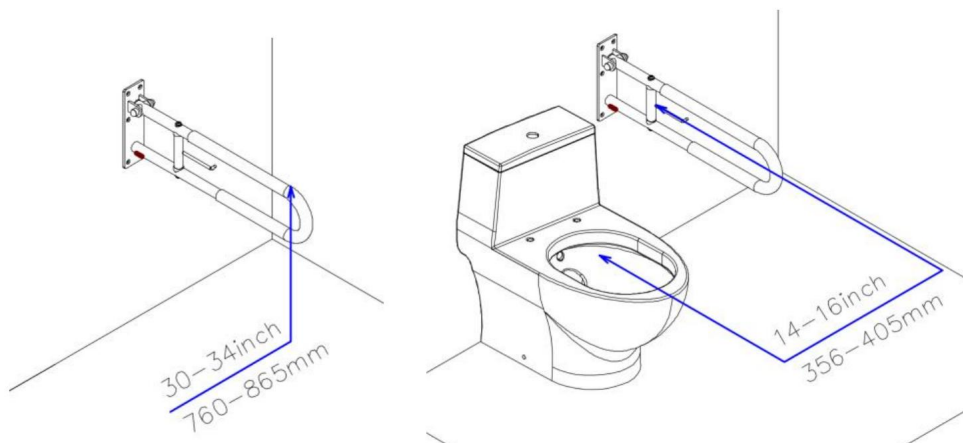


Stap 4: Boor de gaten in de muur.

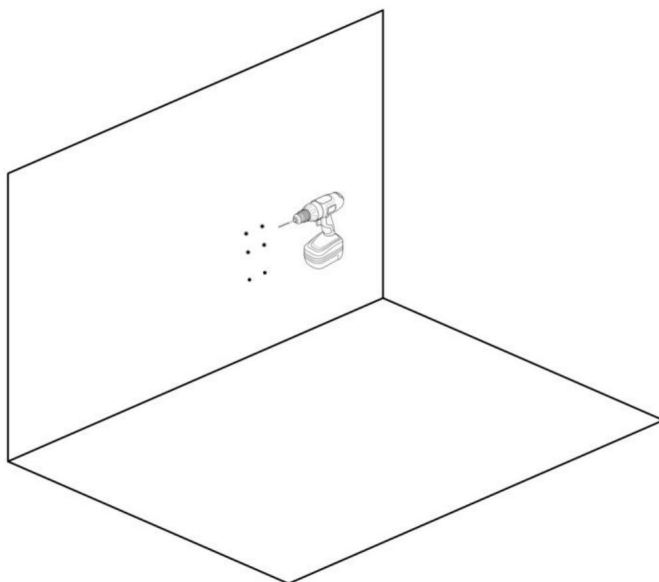

Stap 5: Schuif de hulsanker door de gaten in de bevestigingsplaat en lijn ze uit met de gaten die u in de muur hebt geponst.

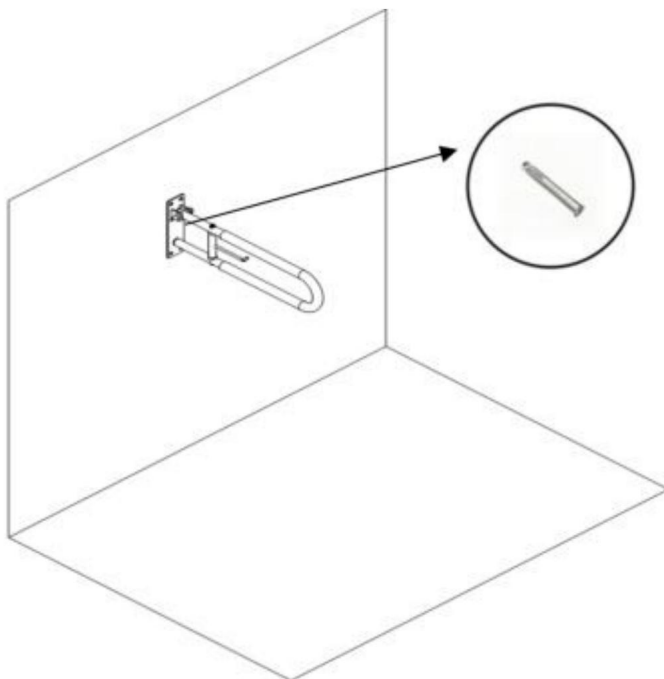

Stap 6: Zet de hulsankers vast met een inbussleutel om de installatie te voltooien.

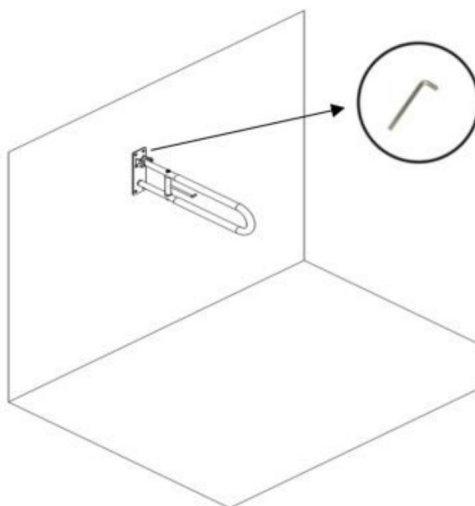

Opvouwbare opbergruimte

Zoals op de afbeelding te zien is, kan de leuning omhoog worden geklapt om ruimte te besparen.

Let op: Als de leuning niet in de opbergstand kan worden gehouden, moet u de schroef op de draaias (aangegeven door de pijl) iets aandraaien om de leuning in de opbergstand te houden.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TOALETTLLEDARE

MODELL:FBL210212

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOALETTLLEDARE

MODELL:FBL210212



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.


VIKTIG

1. Överskrid inte viktkapaciteten - max 300 lbs.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Inspektera regelbundet för tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj av ev tvålrester. Efter rengöring, torka ordentligt.

Modell	FBL210212
Nominell belastning (lbs/kg)	300/136

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att de delar som anges nedan medföljer och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte göra det montera eller använda produkten.

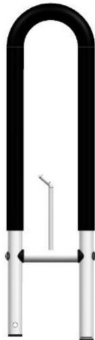INGEN BILD	DEL NAMN	ANTAL	INGEN BILD	DEL NAMN	ANTAL
	Järnväg	1		Bult	1


ÿ		Tallrik	1 ÿ			Sexkantsmutter	1
ÿ		Bult Skyddad på Cap	2 ÿ			Ärm Förankra	6
ÿ		Platt tvättmaskin	2 ÿ			Hexago n Keys	1
ÿ		Plast tvättmaskin	2 ÿ			Yttre Lag r	2

Installationsprocedurer


Verktyg du behöver:




Steg 1: Placera plastbrickorna på vardera sidan av plattan och sätt sedan skenan i mitten av brickorna.

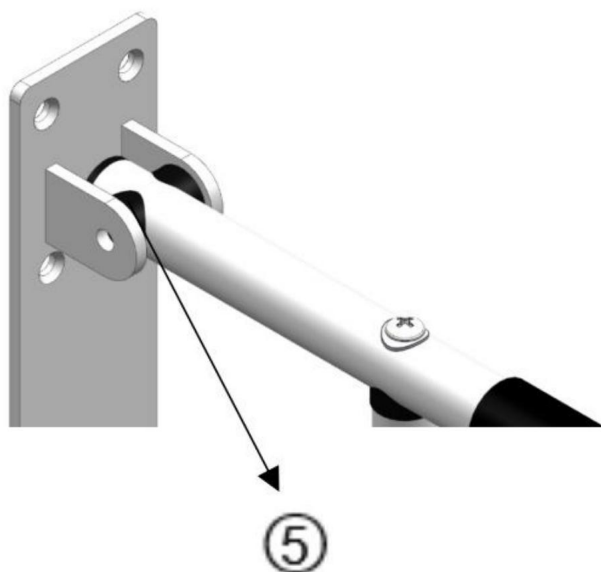


Steg 2: Sätt ihop delarna som visas i diagrammet.

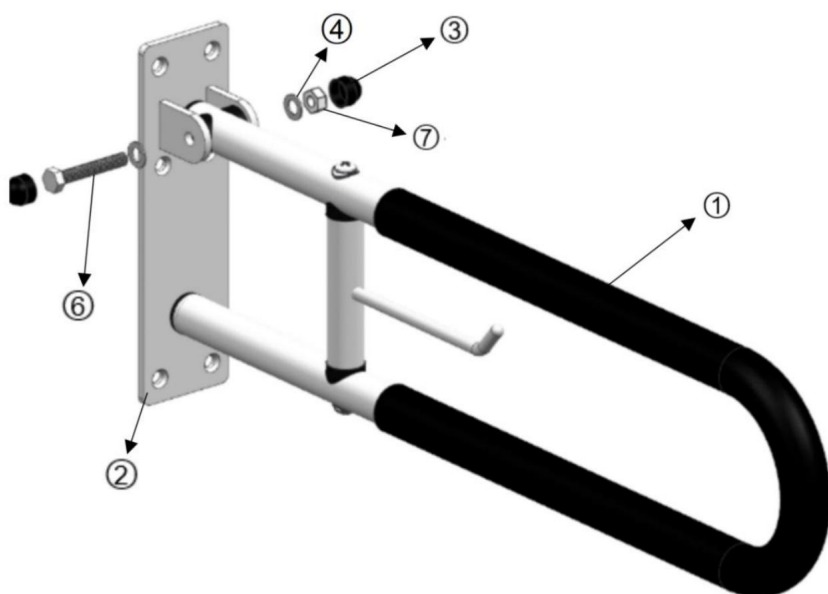


Steg 3: Erbjud skenan upp till väggen i den höjd som krävs, säkerställ fixeringen plattan är rak. Markera fästhålens platser.

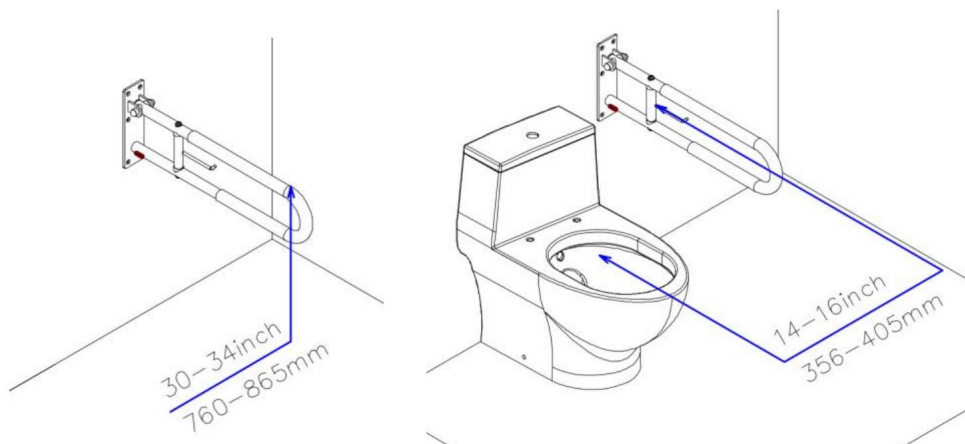


Steg 4: Borra hålen i väggen.

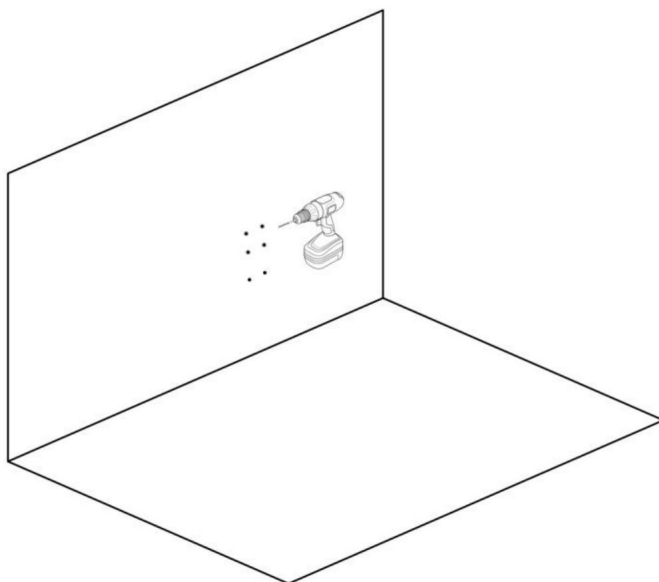

Steg 5: Trä hylsankaret genom hålen i fästplattan och rikta in dem med hålen som är stansade i väggen.

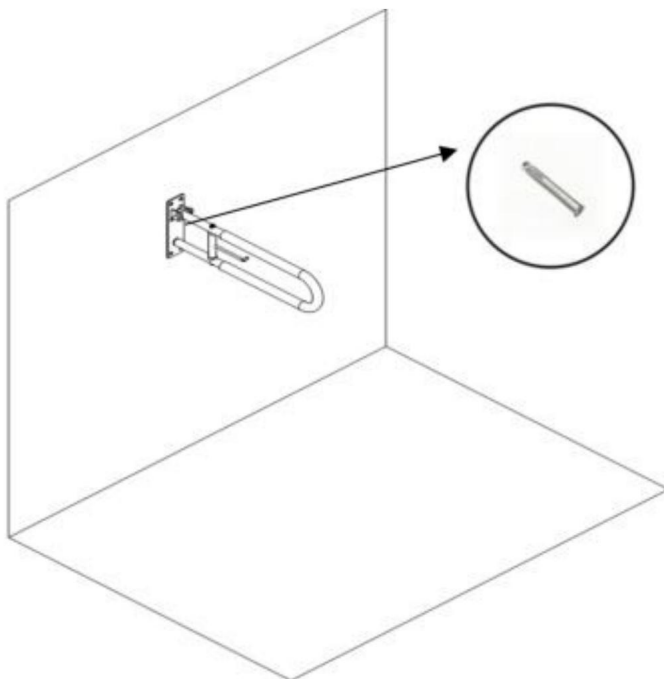

Steg 6:Lås hylsankare med en sexkantnyckel för att slutföra installationen.

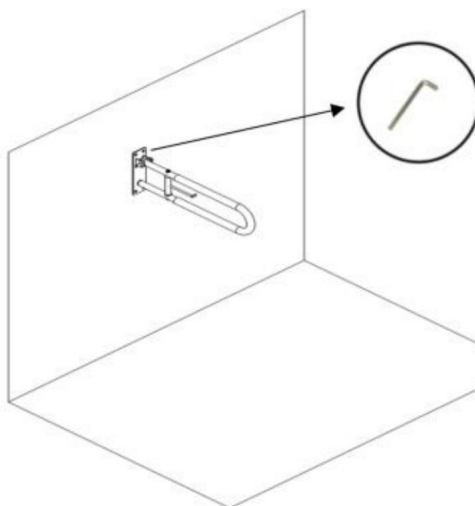

Fällbar förvaring

Som visas på bilden kan ledstången fällas uppåt för att spara utrymme.

Obs: Om ledstången inte kan hållas i lagringsläge är det nödvändigt att dra åt skruven något vid den roterande axeln som pekas av pilen för att hålla den i lagringsläge.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support