

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CRUTCH

MODEL: FBL570323



We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

NEED HELP? CONTACT US!




Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PART LIST


When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	Name	QTY	NO	PICTURE	Name	QTY
1		Armpit Support	2	2		scaffolding	2
3		Footrest	2				


OPERATION

1. Installation Procedures

1) Insert the inner tube of the armpit bracket into the upper port of the tripod, so that the ball of the inner tube of the armpit bracket pops out normally from the ball hole of the upper port of the tripod, as shown in the picture on the right after mounting (Note: Make sure that both the left and right ball of the tripod pop out normally)

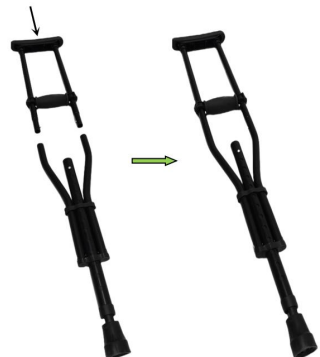

2) Users can adjust the armpit support, handles and legs to the appropriate gears according to their height, as illustrated in the diagram below.

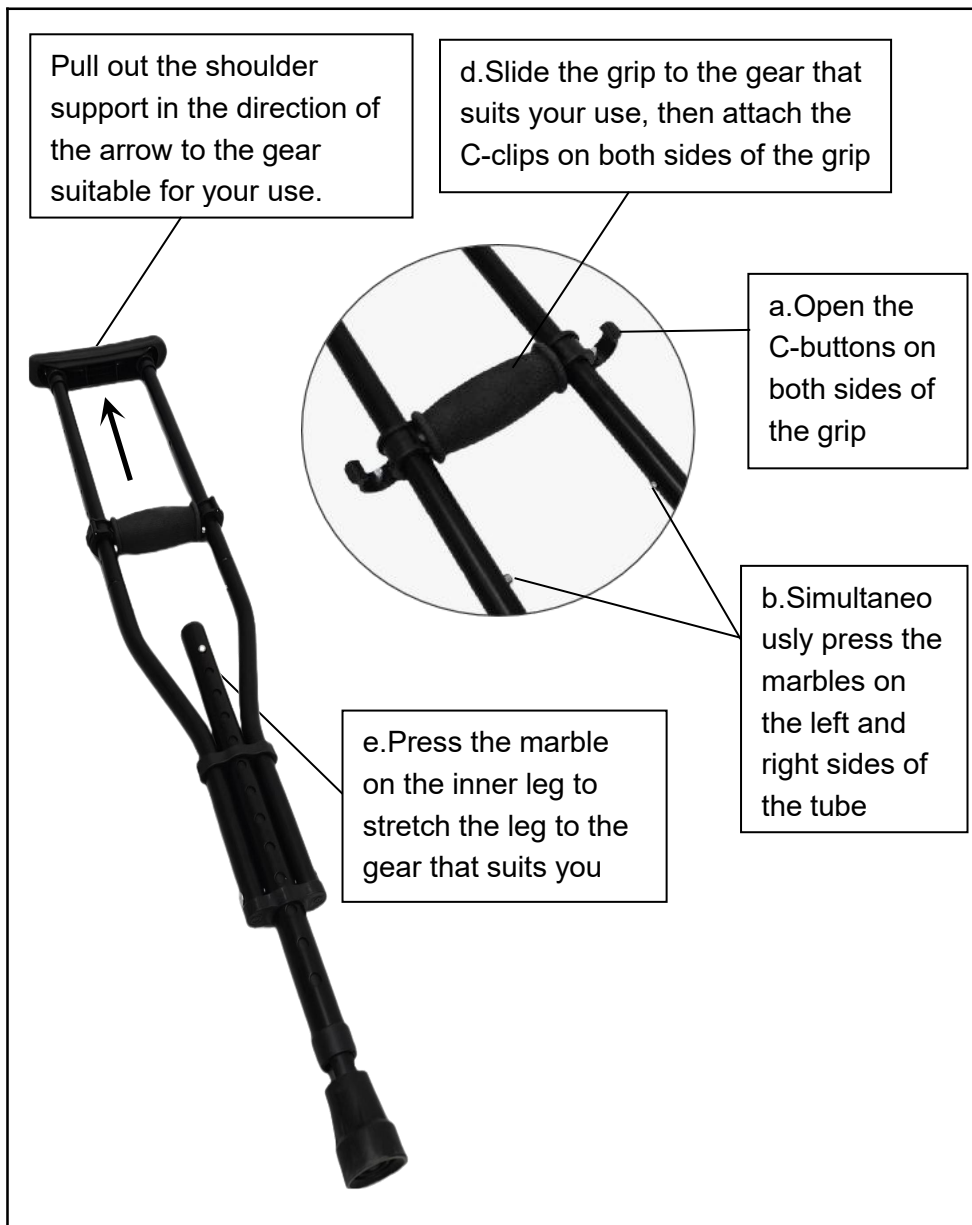

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BÉQUILLE

MODÈLE : FBL570323



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel attentivement avant d'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise à la produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

PAS D'IMAGE	Nom	QTY	PAS D'IMAGE	Nom	QTY
1	Armpit Soutien	2	2	échafaudage	2
3	Repose-pieds	2			

OPÉRATION


1. Procédures d'installation

1) Insérez le tube intérieur du support d'aisselle dans le port supérieur du trépied, de sorte que la boule du tube intérieur du support d'aisselle sort normalement depuis le trou à bille du port supérieur du trépied, comme montré sur la photo de droite après le montage

(Remarque : assurez-vous que les boules gauche et droite de le trépied sort normalement)



2) Les utilisateurs peuvent ajuster le support des aisselles, les poignées et les jambes aux engrenages appropriés en fonction de leur taille, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

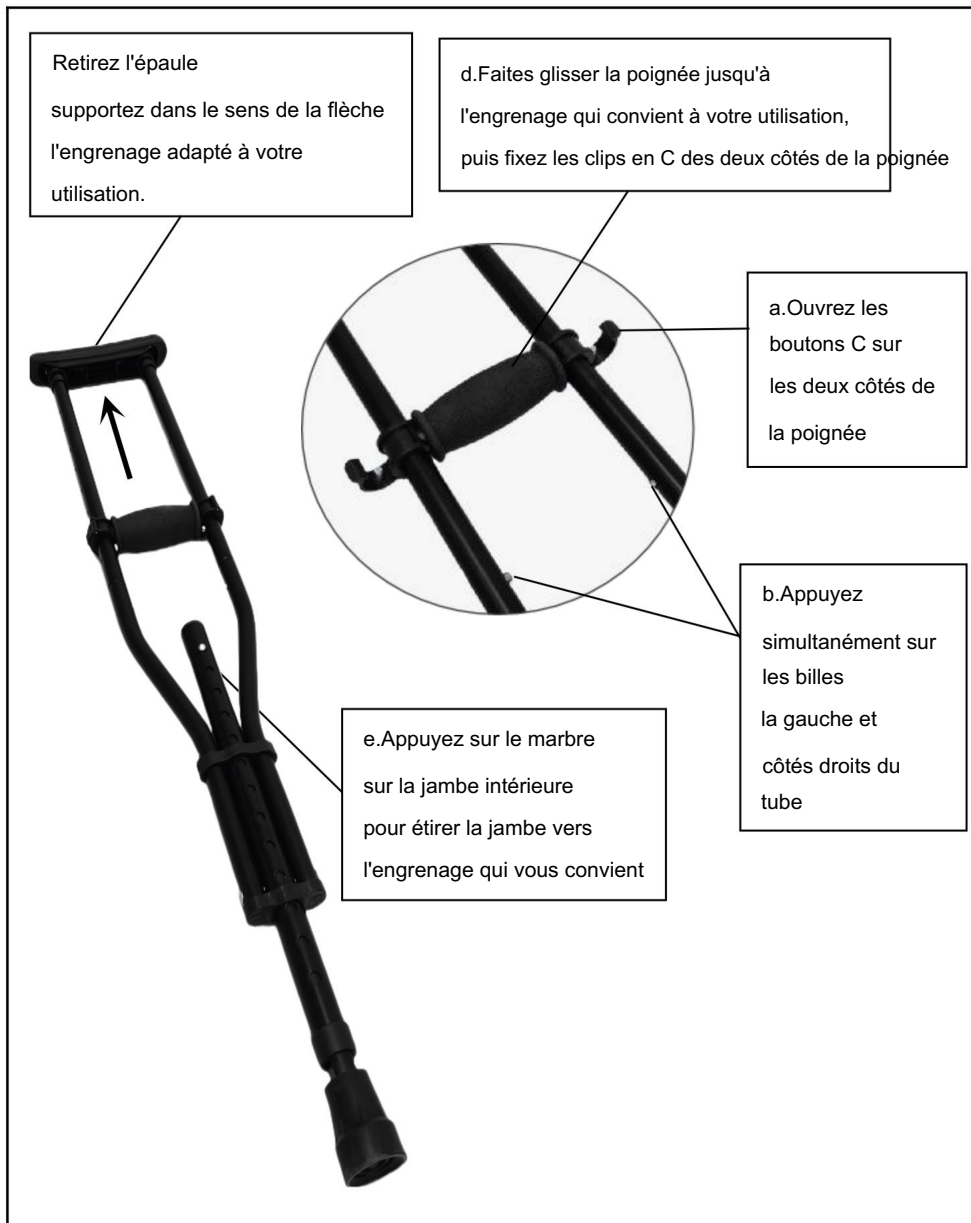

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KRÜCKE

MODELL: FBL570323



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Benutzerhandbuch. Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt den Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

TEILELISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind. enthalten und sorgfältig auf eventuelle Schäden prüfen, die während Transport. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt.

KEIN	BILD	Name Menge	Kein	Bild	Name Menge	
1		Achsel Unterstützung	2	2		Gerüst 2
3		Fußstütze	2			


BETRIEB

1. Installationsverfahren

1) Stecken Sie das Innenrohr der Achselhalterung in den oberen Anschluss des Stativs, so dass die Kugel des Innenrohr der Achselhalterung springt normal heraus aus dem Kugelloch des oberen Stativanschlusses, wie im Bild rechts nach der Montage dargestellt (Hinweis: Achten Sie darauf, dass sowohl der linke als auch der rechte das Stativ springt normal heraus)



2) Der Benutzer kann die Achselstütze, die Griffe und die Beine entsprechend seiner Körpergröße auf die entsprechende Einstellung einstellen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

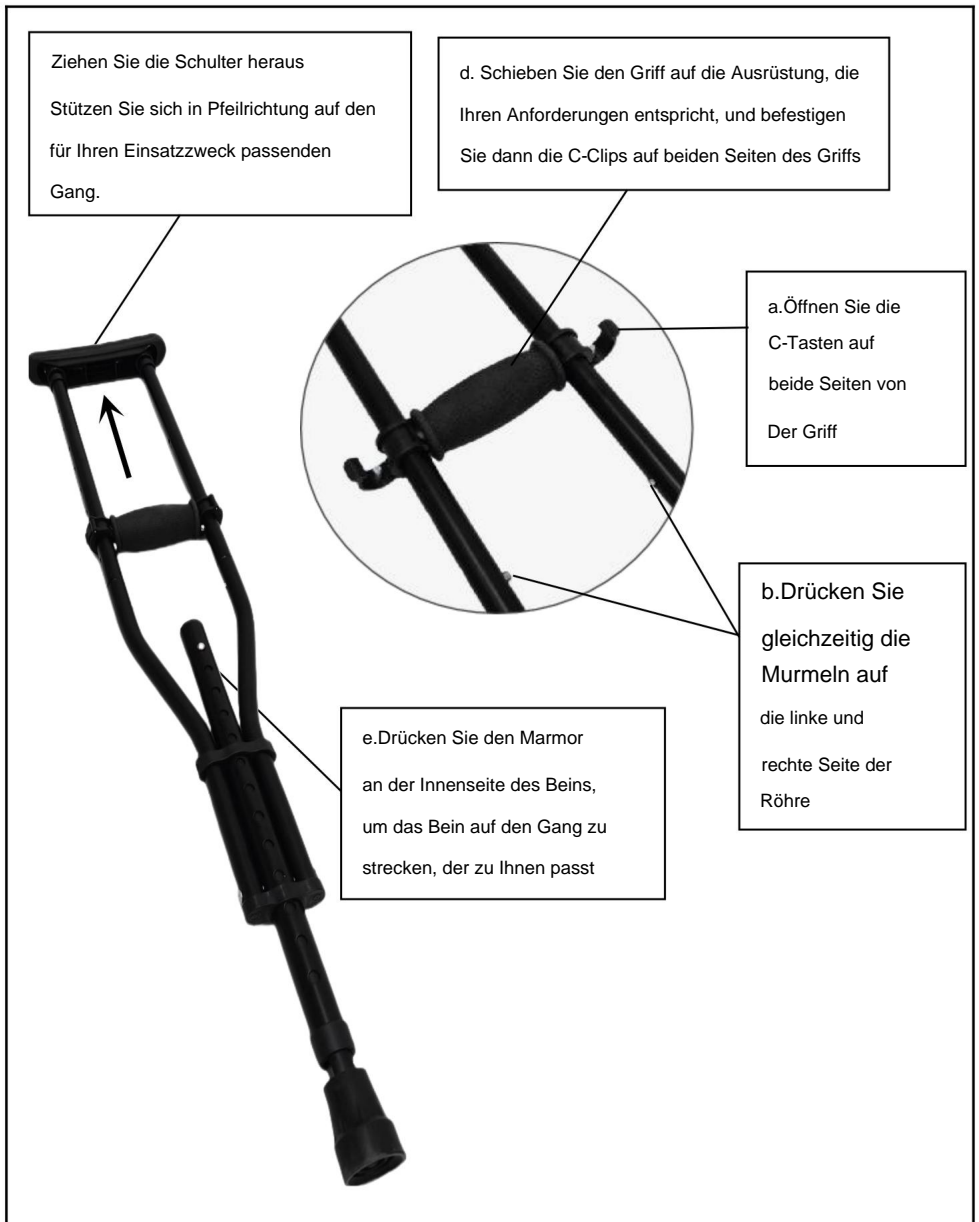

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse: 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

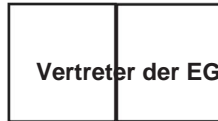

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

STAMPELLA

MODELLO: FBL570323



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO DEI PEZZI

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano incluso e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante transito. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.


NESSUNA IMMAGINE	Nome	QTY	NESSUNA IMMAGINE	Nome	QTY		
1		Ascella Supporto	2	2		impalcatura	2
3		Poggiapiedi	2				

OPERAZIONE**1. Procedure di installazione**

1) Inserire il tubo interno del supporto ascellare in la porta superiore del treppiede, in modo che la sfera del tubo interno del supporto ascellare esce normalmente dal foro sferico della porta superiore del treppiede, come mostrato nella foto a destra dopo il montaggio
 (Nota: assicurarsi che sia la sfera sinistra che quella destra il treppiede esce normalmente)



2) Gli utenti possono regolare il supporto ascellare, le maniglie e le gambe in base alla propria altezza, come illustrato nello schema seguente.

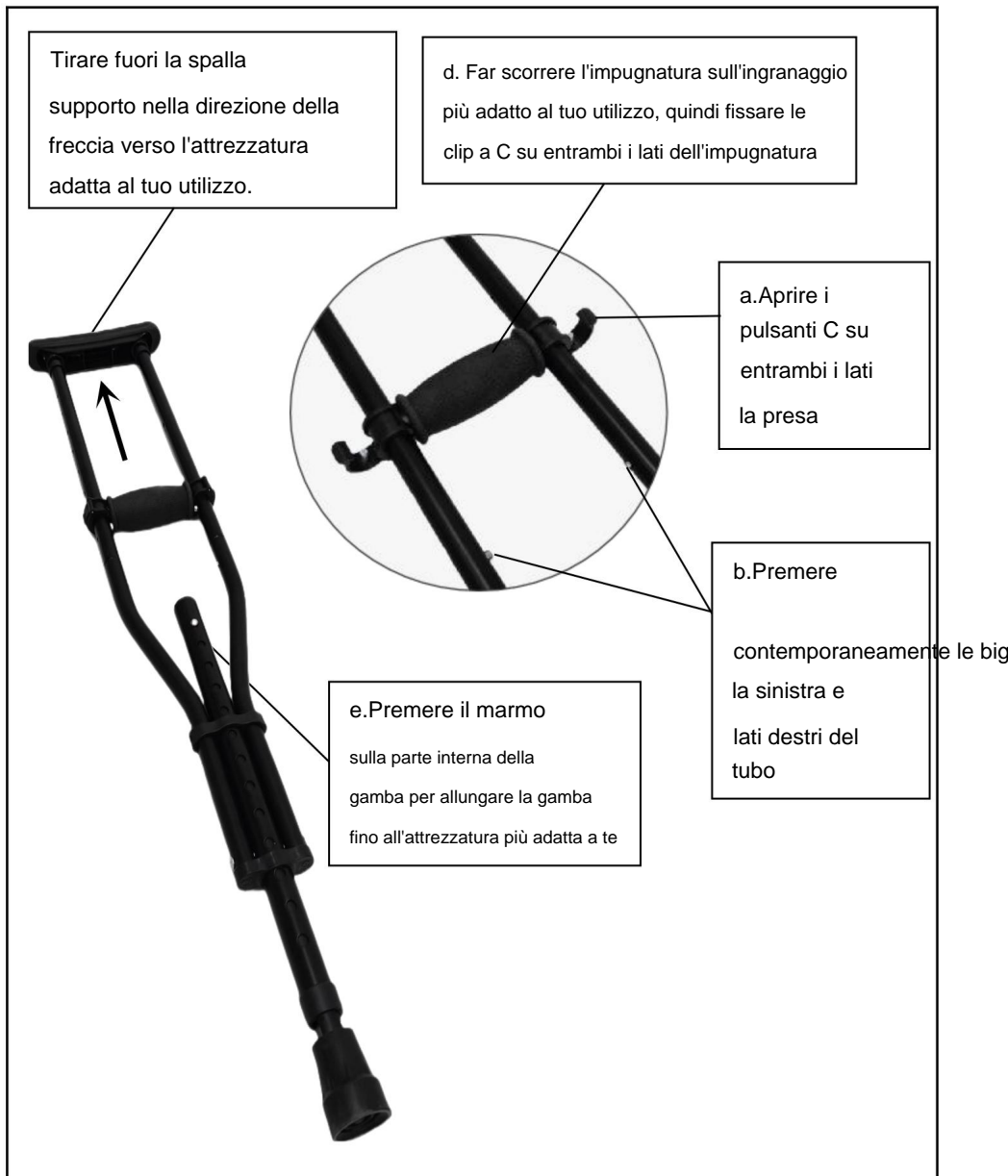

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan,
Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

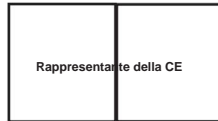

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MULETA

MODELO: FBL570323



Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:




Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestras manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a las producto que recibiste. Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si ¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?

LISTA DE PIEZAS

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación estén incluido e inspeccionar cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

SIN	IMAGEN	Nombre	CANTIDAD	SIN	IMAGEN	Nombre	CANTIDAD
1		Axila Apoyo	2	2		andamio	2
3		Reposapiés	2				

OPERACIÓN

1. Procedimientos de instalación

1) Inserte el tubo interior del soporte de la axila en

el puerto superior del trípode, de modo que la bola del

El tubo interior del soporte de la axila sale normalmente

desde el orificio de la bola del puerto superior del trípode, como


Se muestra en la imagen de la derecha después del montaje.

(Nota: Asegúrese de que tanto la bola izquierda como la derecha de

El trípode sale normalmente)



2) Los usuarios pueden ajustar el soporte de las axilas, las manijas y las piernas a los engranajes apropiados según su altura, como se ilustra en el diagrama a continuación.

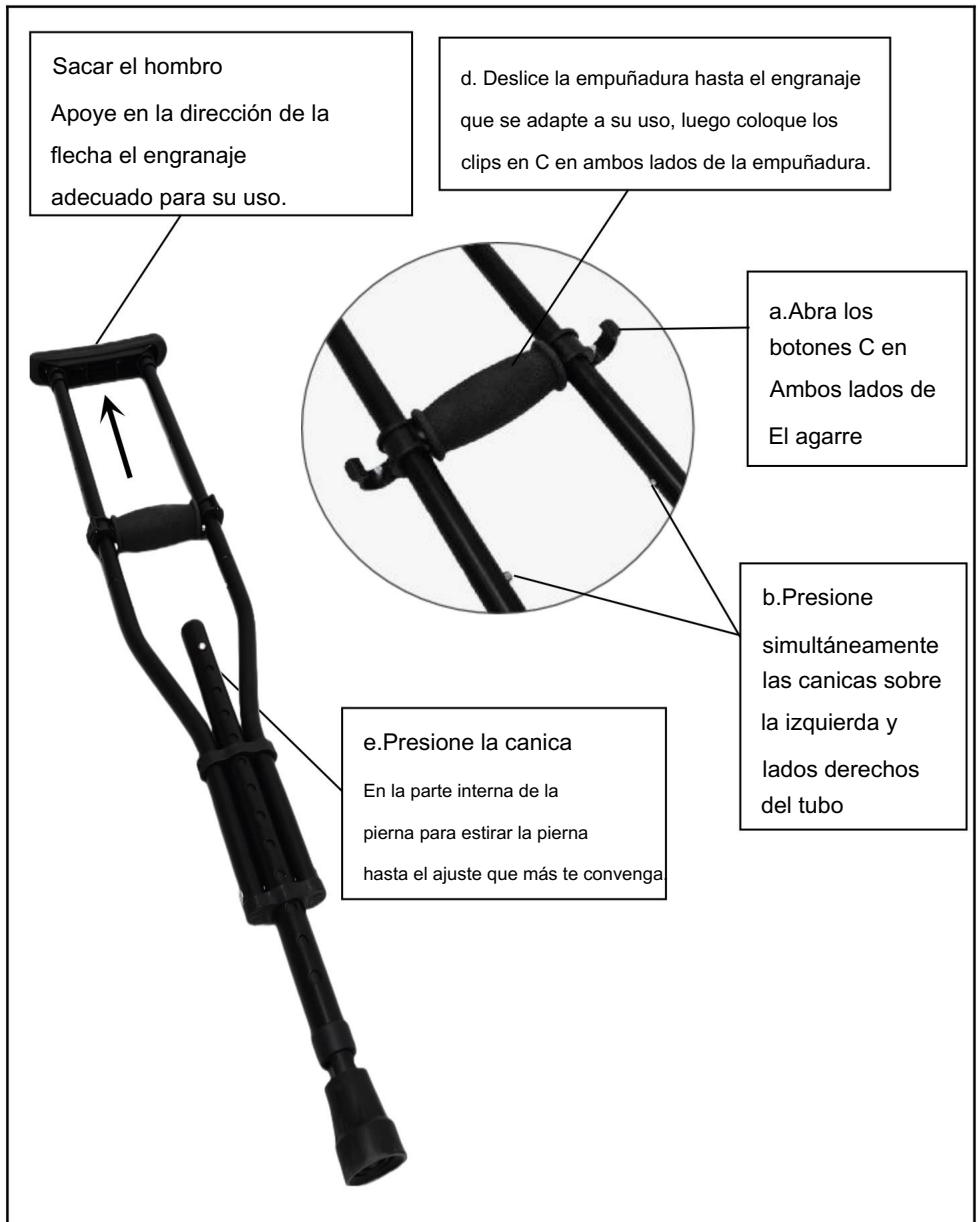


Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan,
Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

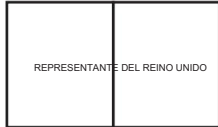

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KROCZE

MODEL: FBL570323



Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku




przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych

instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega

produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli
 czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

LISTA CZĘŚCI

Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części są kompletne. włączono i dokładnie sprawdzono pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Jeśli jakkolwiek część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj montować ani używać produktu.

BRAK	OBRAZU	Nazwa ILOŚĆ	BRAK	OBRAZKA	Nazwa Ilość	
1		Pacha Wsparcie	2	2		2
3		Podnózek	2			


DZIAŁANIE

1. Procedury instalacji

1) Włóż wewnętrzną rurkę uchwyty pacy do górnego portu statywu, tak aby kula wewnętrzna rura wspornika pacy wyskakuje normalnie z otworu kulowego górnego portu statywu, jako pokazano na zdjęciu po prawej stronie po zamontowaniu (Uwaga: Upewnij się, że zarówno lewa, jak i prawa kula (statyw wyskakuje normalnie)



2) Użytkownicy mogą dostosować podparcie pach, uchwyty i nogi do odpowiedniego przełożenia, zależnie od swojego wzrostu, jak pokazano na poniższym schemacie.

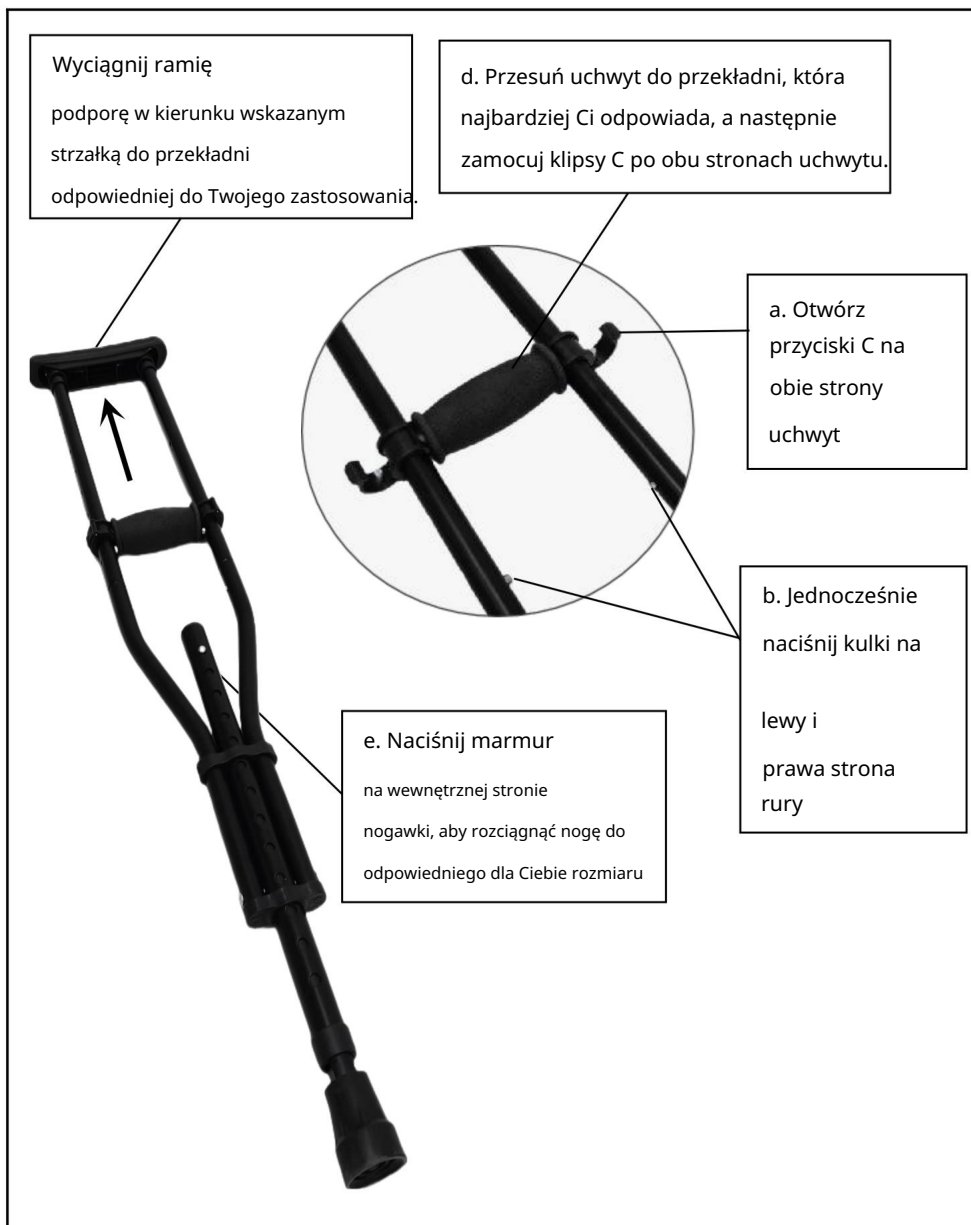

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F i 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan,
Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KRUK

MODEL: FBL570323



Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.




Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

ONDERDELENLIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn: inbegrepen en zorgvuldig inspecteren op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan transit. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het dan niet te monteren of te gebruiken. product.


GEEN FOTO	Naam AANTAL	GEEN FOTO	Naam AANTAL
1	 Oksel Steun	2	2
		 steiger	2
3	 Voetsteun	2	

WERKING**1. Installatieprocedures**

1) Plaats de binnenbuis van de okselbeugel in de bovenste poort van het statief, zodat de bal van de binnenbuis van de okselbeugel springt normaal naar buiten vanuit het kogelgat van de bovenste poort van het statief, zoals weergegeven op de afbeelding rechts na montage (Let op: zorg ervoor dat zowel de linker- als de rechterbal van het statief springt er normaal uit)



2) Gebruikers kunnen de okselondersteuning, handgrepen en poten aanpassen aan de juiste versnellingen, afhankelijk van hun lengte, zoals geïllustreerd in het onderstaande diagram.

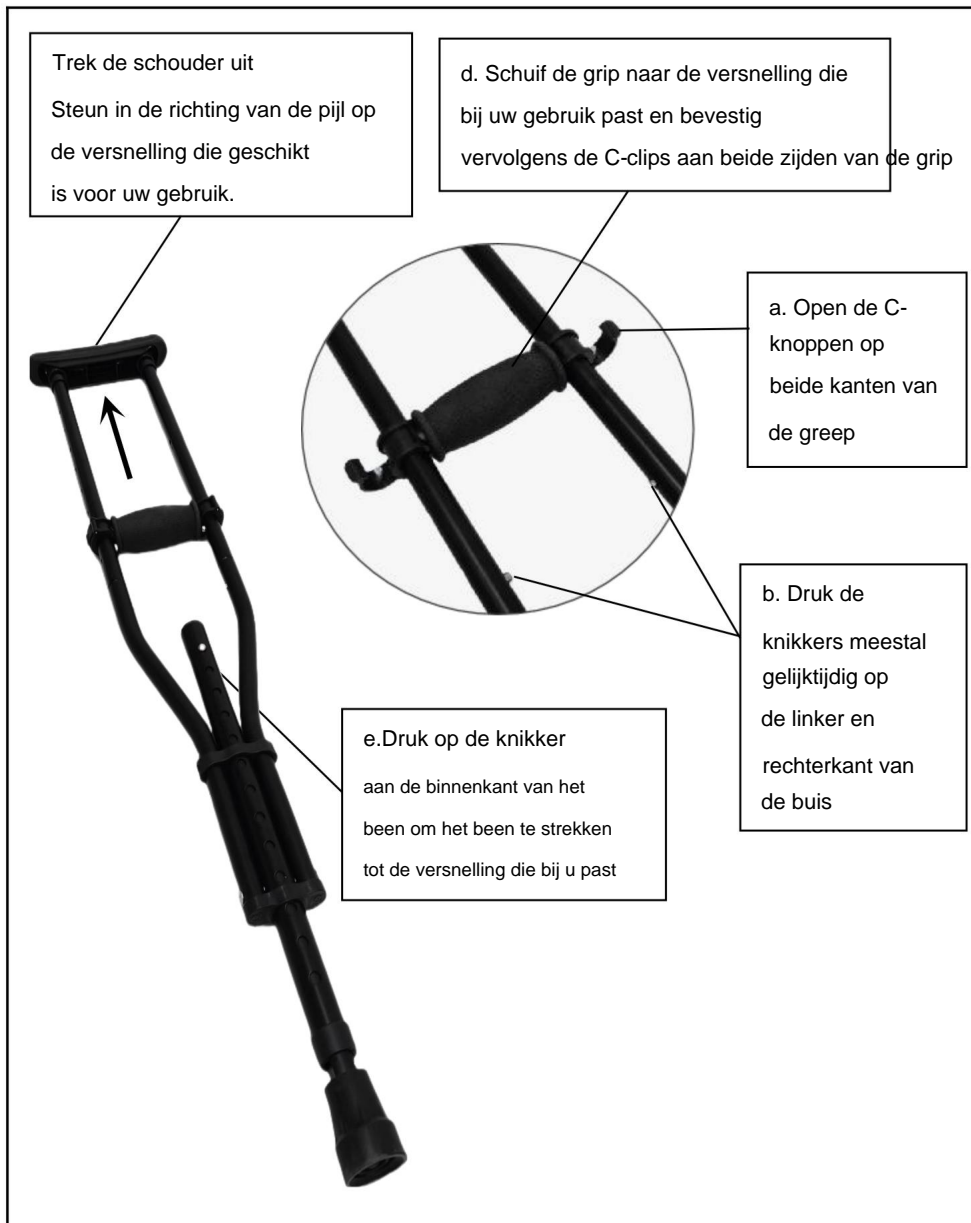

Zhongshan Bliss Medisch Instrument Co., Ltd.

Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan,
Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KRYCKA

MODELL: FBL570323



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!




Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transport. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.

INGEN BILD	Namn	ANTAL	INGEN BILD	Namn	QTY
1		2	2		2
3		2			


DRIFT

1. Installationsprocedurer

1) Sätt in innerröret på armhålans fäste i den övre porten på stativet, så att kulan på innerröret på armhålans fäste hoppar ut normalt från kulhålet i stativets övre port, som visas på bilden till höger efter montering (Obs: Se till att både den vänstra och högra bollen av stativet hoppar ut normalt)



2) Användare kan justera armhållans stöd, handtag och ben till lämpliga växlar efter deras höjd, som illustreras i diagrammet nedan.

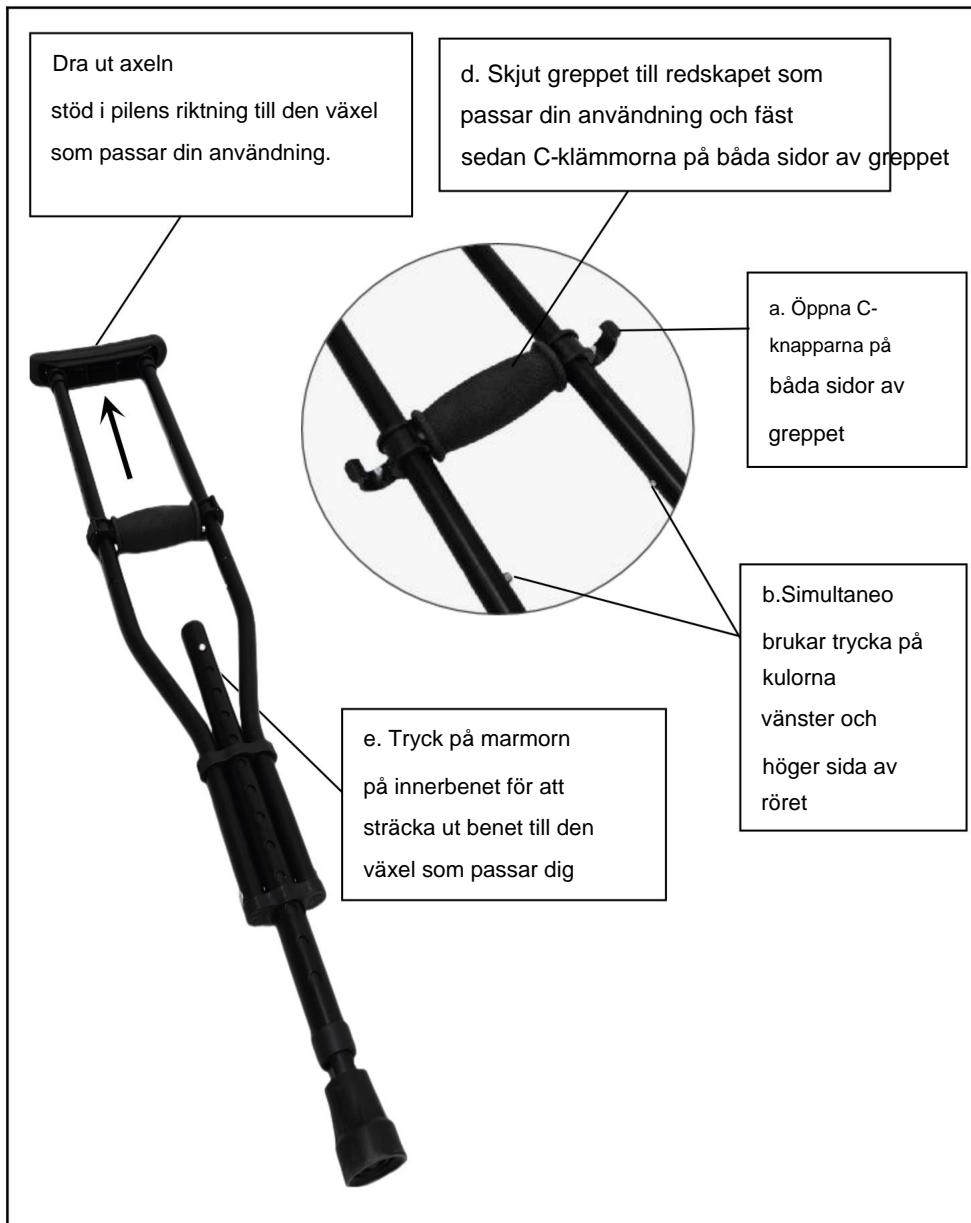

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support