

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **CRUTCH**

## **MODEL: FBL590256**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CRUTCH

MODEL: FBL590256



### NEED HELP? CONTACT US!




Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



# PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
1		Arm rest	2	2		Footer	2
3		Footrest	2				

## OPERATION

### 1. Installation Procedures

	
<p>1. Insert the foot tube into the mouth of the arm rest, so that the marbles of the foot tube are ejected normally from the marble hole of the arm rest, after mounting as shown in the picture on the right.</p>	<p>2. To use, loosen the striped nut first, then press the marble under the foot tube, then adjust the inner foot tube to the appropriate gear according to the height of the user, and finally tighten the striped nut.</p>

(Note: Make sure that both marbles on the top and bottom of the foot tube are ejected normally)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Address:** 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### BÉQUILLE

MODÈLE : FBL590256

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BÉQUILLE

MODÈLE : FBL590256



## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!




Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

## LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

PAS D'IMAGE		NOM QTY PAS D'IMAGE			NOM QTÉ		
1		Accoudoir	2	2		Pied de page	2
3		Repose-pieds	2				

## OPÉRATION

### 1. Procédures d'installation

	
<p>1. Insérez le tube de pied dans l'embouchure de l'accoudoir, pour que les billes du pied les tubes sont éjectés normalement du marbre trou de l'accoudoir, après montage comme montré dans l'image de droite.</p>	<p>2. Pour l'utiliser, desserrez d'abord l'écrou rayé, puis appuyez sur le marbre sous le tube du pied, puis ajuster le tube intérieur du pied à la position appropriée engrenage en fonction de la taille de l'utilisateur, et enfin serrer l'écrou rayé.</p>

(Remarque : assurez-vous que les deux billes sur le haut et le bas du tube du pied sont éjecté normalement	
--	--

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### KRÜCKE

MODELL: FBL590256

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRÜCKE

MODELL: FBL590256



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**




Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## TEILELISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind. enthalten und sorgfältig auf eventuelle Schäden prüfen, die während Transport. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt.

KEIN BILD		NAME MENGE	NR. BILD			NAME MENGE	
1		Armlehne	2	2		Fußzeile	2
3		Fußstütze	2				

## BETRIEB

### 1. Installationsverfahren

	
<p>1. Stecken Sie das Fußrohr in die Öffnung des Armlehne, so dass die Kugeln des Fußes Rohr werden normal aus dem Marmor ausgeworfen Loch der Armlehne, nach der Montage wie wie im Bild rechts dargestellt.</p>	<p>2. Zur Verwendung zuerst die gestreifte Mutter lösen, dann Drücken Sie die Murmel unter das Fußrohr, dann Stellen Sie das innere Fußrohr auf die entsprechende Passen Sie den Gang entsprechend der Körpergröße des Benutzers an und ziehen Sie abschließend die Streifenmutter fest.</p>

(Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beide Murmeln auf Ober- und Unterseite des Fußrohres sind normal ausgeworfen)	
--	--

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Adresse:** 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

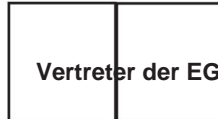

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **STAMPELLA**

**MODELLO: FBL590256**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAMPELLA

MODELLO: FBL590256



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:




### Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## ELENCO DEI PEZZI

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.

NESSUNA IMMAGINE	IMMAGINE	NOME QTY	NESSUNA	IMMAGINE	NOME QTY	NESSUNA	IMMAGINE	NOME QTY
1		Bracciolo	2	2		Piè di pagina	2	
3		Poggiapiedi	2					

## OPERAZIONE

### 1. Procedure di installazione

	
<p>1. Inserire il tubo del piede nella bocca del bracciolo, in modo che le biglie del piede e i tubi vengano espulsi normalmente dal marmo foro del bracciolo, dopo il montaggio come mostrato nell'immagine a destra.</p>	<p>2. Per utilizzarlo, allentare prima il dado striato, quindi premere la biglia sotto il tubo del piede, quindi regolare il tubo interno del piede nella posizione appropriata in base all'altezza dell'utilizzatore e infine stringere il dado rigato.</p>

(Nota: assicurati che entrambe le biglie siano su la parte superiore e inferiore del tubo del piede sono espulso normalmente	
--	--

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Indirizzo:** 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.


**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

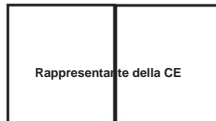

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## MULETA

MODELO: FBL590256

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## MULETA

MODELO: FBL590256



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!




¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



## LISTA DE PIEZAS

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación estén incluido e inspeccionar cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

SIN IMAGEN		NOMBRE CANTIDAD SIN IMAGEN		SIN IMAGEN		NOMBRE CANTIDAD	
1		Apoyabrazos	2	2		Pie de página	2
3		Reposapiés	2				

## OPERACIÓN

### 1. Procedimientos de instalación

	
<p>1. Inserte el tubo del pie en la boca del apoyabrazos, de manera que las canchas del pie Los tubos se expulsan normalmente del mármol. orificio del reposabrazos, después del montaje como se muestra en la imagen de la derecha.</p>	<p>2. Para utilizarlo, afloje primero la tuerca rayada y luego Presione la cancha debajo del tubo del pie, luego Ajuste el tubo interior del pie al nivel apropiado. Engranaje de acuerdo a la altura del usuario y finalmente apretar la tuerca rayada.</p>

(Nota: Asegúrese de que ambas canicas estén


La parte superior e inferior del tubo del pie son  
expulsado normalmente

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan,  
Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

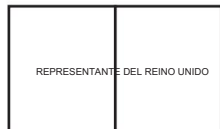

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

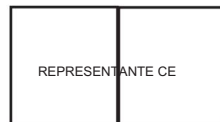

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### KROCZE

MODEL: FBL590256

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## KROCZE

MODEL: FBL590256



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!




Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## LISTA CZĘŚCI

Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części są kompletne. włączono i dokładnie sprawdzono pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas tranzyt. Jeśli jakkolwiek część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj montować ani używać produktu.

BRAK	OBRAZU	NAZWA ILOŚĆ	BRAK	OBRAZKA		NAZWA ILOŚĆ	
1		Podłokietnik	2	2		Stopka	2
3		Podnózek	2				

## DZIAŁANIE

### 1. Procedury instalacji

	
<p>1. Włóż rurkę stopy do otworu podłokietnika, dzięki któremu kulki stopy będą rura jest normalnie wyrzucana z marmuru otwór podłokietnika po zamontowaniu jako pokazano na obrazku po prawej stronie.</p>	<p>2. Aby użyć, najpierw poluzuj nakrętkę paskową, a następnie wciśnij marmur pod rurę stopy, a następnie dopasować rurkę wewnętrzną stopy do odpowiedniej Dostosuj bieg do wzrostu użytkownika i na końcu dokręć nakrętkę zaciskową.</p>

(Uwaga: Upewnij się, że obie kulki na góra i dół rury podnóżka to wyrzucony normalnie	
---	--

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F i 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# KRUK

## MODEL: FBL590256

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## KRUK

MODEL: FBL590256



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**




Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## ONDERDELELIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn: inbegrepen en zorgvuldig inspecteren op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan transit. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het dan niet te monteren of te gebruiken. product.

GEEN	FOTO	NAAM	HOEVEELHEID	GEEN	FOTO	NAAM	HOEVEELHEID
1		Armleuning	2	2		Voettekst	2
3		Voetsteun	2				

## WERKING

### 1. Installatieprocedures

	
<p>1. Steek de voetbuis in de mond van de armleuning, zodat de knickers van de voetbuis wordt normaal uit het marmer geworpen gat van de armleuning, na montage als zoals weergegeven in de afbeelding rechts.</p>	<p>2. Om te gebruiken, eerst de gestreepte moer losmaken en dan druk de knikker onder de voetbuis, dan Pas de binnenste voetbuis aan op de juiste versnelling aanpassen aan de lengte van de gebruiker en tenslotte de gestreepte moer vastdraaien.</p>

(Let op: zorg ervoor dat beide knikers op de boven- en onderkant van de voetbuis zijn normaal uitgeworpen)	
--	--

Zhongshan Bliss Medisch Instrument Co., Ltd.

**Adres:** 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# KRYCKA

## MODELL: FBL590256

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## KRYCKA

MODELL: FBL590256



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!




Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support** och e-

**garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



# DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transport. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.

INGEN BILD	NAMN	ANTAL	INGEN BILD	NAMN	ANTAL		
1		Armstödet	2	2		Sidfot	2
3		Fotstödet	2				

## DRIFT

### 1. Installationsprocedurer

	
<p>1. Sätt in fotröret i munnen på armstödet, så att kulorna i foten röret skjuts ut normalt från marmorn hål på armstödet, efter montering som visas på bilden till höger.</p>	<p>2. För att använda, lossa den randiga muttern först och sedan tryck sedan in kulan under fotröret justera det inre fotröret till lämpligt växla efter användarens längd och dra slutligen åt den randiga muttern.</p>

(Obs: Se till att båda kulorna på toppen och botten av fotröret är utmatas normalt	
--	--

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Adress:** 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**