

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060NA-L-4,SC7060Q-L-4,SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060NA-L-4,SC7060Q-L-4,SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


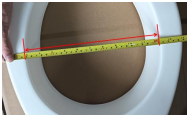



SC7060Q-S-4


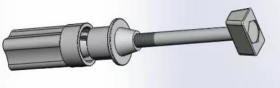


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Note
Raised height	3.5 in	3.5 in	3.5 in	/
load	300lbs/ 136kg	300lbs/ 136kg	300lbs/ 136kg	/
Inner length(mm)	325	355	285	
Inner Width(mm)	250	265	247	
Mounting holes pitch(mm)	140	140	140	
Adapt to toilet size	Inner width \geq 250mm Inner length \geq 325mm	Inner width \geq 265mm, Inner length \geq 355mm	Inner width \geq 247mm, Inner length \geq 285mm	Please check the size of your toilet before choosing the raised toilet seat.

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Raised Toilet Seat		1	1	1
2	Screw group		2	2	2
3	Armrest		2	0	0
4	Manual		1	1	1

CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times, thus securing the seat to the toilet bowl. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat must not be used to support more than 300 lbs. DO NOT use the product overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.
4. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is

correctly installed, fits properly and is stable before use.

5. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.

6. If you have a style of commode that this product will not fit properly, or cannot be tightened securely as noted above, it is recommended that you discontinue usage.

7. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

8. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

9. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.


INSTRUCTIONS

- **To install the armrests(Neglect this step for the products without armrests)**

1. Place each armrest into the holes in the bottom of the toilet seat. The metal buttons should be facing out.

2. Slide the armrest tube into position until the button clicks into the hole and a "click" sounds.

3. Repeat the process for the rest of the holes.

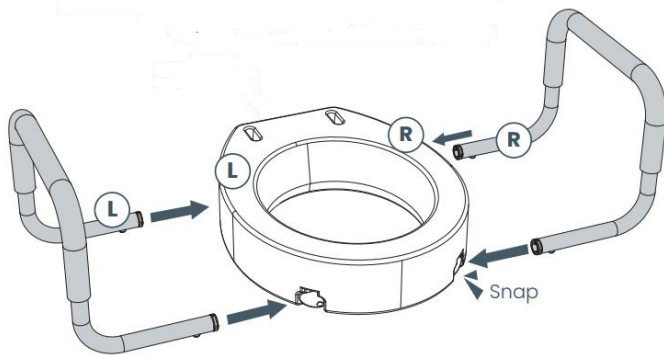

● **To install the Raised Toilet Seat**

1. Remove the existing toilet seat and lid from the toilet frame by unscrewing the seat screws located at the rear of the toilet seat.



2. Place the seat riser on the toilet frame and align the mounting holes.

3. Place the plastic inserts on the seat riser and align mounting holes with toilet frame, as below. Insert the mounting screws through the toilet seat.



4. Using the hand nut tighten the mounting screws. Do not fully tighten.
5. Be sure the toilet seat is straight and sits flush on the seat riser, then fully tighten the hand

MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.

Manufacturer: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
Address: 2-3 Floor of 65 Building, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siège de toilette surélevé

Modèle : SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modèle : SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


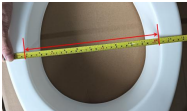



SC7060Q-S-4


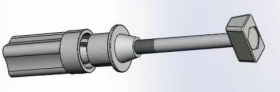


Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Merci d'avoir choisi ce produit. Il doit toujours être manipulé avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Note
Hauteur surélevée	3,5 pouces	3,5 pouces	3,5 pouces	/
charger	300 livres/ 136 kg	300 livres/ 136 kg	300 livres/ 136 kg	/
Longueur intérieure (mm)	325	355	285	
Largeur intérieure (mm)	250	265	247	
Pas des trous de montage (mm)	140	140	140	
S'adapter à la taille des toilettes	Largeur intérieure \geq 250 mm Longueur intérieure \geq 325 mm	Largeur intérieure \geq 265 mm, Longueur intérieure \geq 355 mm	Largeur intérieure \geq 247 mm, Longueur intérieure \geq 285 mm	Veillez vérifier la taille de vos toilettes avant de choisir le siège de toilette surélevé.

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Siège de toilette surélevé		1	1	1
2	Groupe de vis		2	2	2
3	Accoudoir		2	0	0
4	Manuel		1	1	1

CAUTIONS

1. Assurez-vous toujours que le siège est correctement et bien verrouillé en place avant utilisation.
2. Assurez-vous que le verrouillage de le siège est serré à tout moment, sécurisant ainsi le siège à la cuvette des toilettes. Les utilisateurs handicapés physiques doivent être supervisé ou assisté lors de l'utilisation de ce produit.
3. Le siège de toilette surélevé ne doit pas supporter plus de 136 kg . Ne pas utiliser le produit en surcharge. Le poids de l'utilisateur doit être centré. au-dessus du siège des toilettes, ni trop en avant ni trop loin d' un côté, car l'appareil pourrait basculer.

4. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart types courants de toilettes. Elles ne conviennent pas à tous types de commodes ; assurez-vous que l'unité est correctement installé, s'adapte correctement et est stable avant utilisation.

5. Pour les modèles avec accoudoirs : Les accoudoirs sont pour le but de fournir une assistance lorsque monter et descendre du siège. N'essayez PAS de utiliser les bras pour supporter tout le poids du corps pendant transfert, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil et un risque de blessure .

6. Si vous avez un style de commode qui correspond à celui-ci le produit ne s'adaptera pas correctement ou ne pourra pas être serré solidement comme indiqué ci-dessus, il est il est recommandé d'arrêter l'utilisation.

7. Vérifiez régulièrement la solidité du montage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ne démontez pas le produit si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans le manuel.

8. Soyez prudent lors de l'utilisation et du montage. Évitez les températures extrêmes et les flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.


9. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de la santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne remplacent pas un avis médical.

INSTRUCTIONS

● **Pour installer les accoudoirs (négliger cette étape pour les produits sans accoudoirs)**

1. Placez chaque accoudoir dans les trous situés sous l'abattant des toilettes. Les boutons métalliques doivent être orientés vers l'extérieur.

2. Faites glisser le tube de l'accoudoir en position jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou et qu'un « clic » retentisse.
3. Répétez le processus pour le reste des trous.

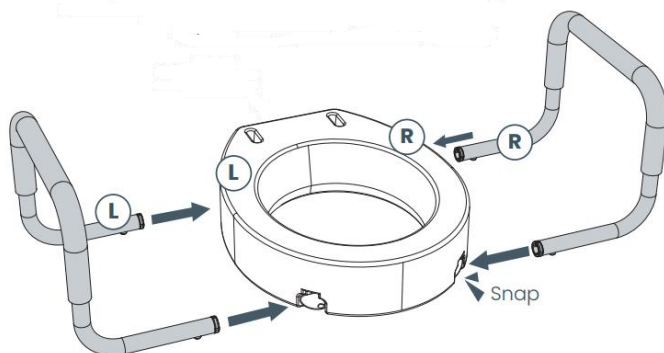

● Pour installer le siège de toilette surélevé

1. Retirez le siège et le couvercle des toilettes existants du cadre des toilettes en dévissant les vis du siège situées à l'arrière du siège des toilettes.



2. Placez le rehausseur de siège sur le cadre des toilettes et alignez les trous de montage.
3. Placez les inserts en plastique sur le rehausseur de siège et alignez les trous de fixation avec le cadre des toilettes, comme indiqué ci-dessous. Insérez les vis de fixation dans le siège.



4. Serrez les vis de montage à l'aide de l'écrou à main. Ne serrez pas complètement.
5. Assurez-vous que le siège des toilettes est droit et qu'il repose au ras de la rehausse du siège, puis serrez complètement la poignée.

MAINTENANCE

1. UN NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ. UTILISEZ UN NETTOYANT OU UN DÉTERGENT NON ABRASIF. RINCER À L'EAU TIÈDE ET SÉCHER. COMPLÈTEMENT. LES CHIFFONS ABRASIFS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE.
2. VEUILLEZ INSPECTER RÉGULIÈREMENT VOTRE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC BRAS ET SES PIÈCES POUR DÉTECTER TOUTE CORROSION, CASSE, COMPRESSION OU USURE.

Fabricant : FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adresse : 2-3 étage du bâtiment 65, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500,
CHINE .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erhöhter Toilettensitz

Modell: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4

Modell: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


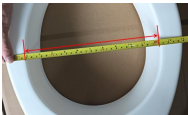



SC7060Q-S-4


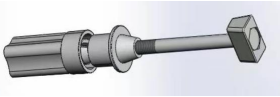


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Es sollte stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Notiz
Erhöhte Höhe	3,5 Zoll	3,5 Zoll	3,5 Zoll	/
laden	300 Pfund/ 136 kg	300 Pfund/ 136 kg	300 Pfund/ 136 kg	/
Innenlänge (mm)	325	355	285	
Innenbreite (mm)	250	265	247	
Abstand der Montagelöcher (mm)	140	140	140	
Passt sich der Toilettengroße an	Innenbreite \geq 250 mm Innenlänge \geq 325 mm	Innenbreite \geq 265 mm, Innenlänge \geq 355 mm	Innenbreite \geq 247 mm, Innenlänge \geq 285 mm	Bitte überprüfen Sie die Größe Ihrer Toilette, bevor Sie sich für die Toilettensitzerhöhe entscheiden.

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Erhöhter Toilettensitz		1	1	1
2	Schraubengrupp e		2	2	2
3	Armlehne		2	0	0
4	Handbuch		1	1	1

CAUTIONS

1. Achten Sie immer darauf, dass der Sitz richtig sitzt und vor der Verwendung sicher verriegelt.
2. , dass die Verriegelung Der Sitz ist jederzeit fest und sichert so die Sitz zur Toilettenschüssel. Körperlich eingeschränkte Benutzer sollten beaufsichtigt oder unterstützt werden, wenn Sie dieses Produkt.
3. Der erhöhte Toilettensitz darf nicht für eine Belastung von mehr als 136 kg verwendet werden . Verwenden Sie das Produkt NICHT überlastet. Das Gewicht des Benutzers sollte zentriert sein . über dem Toilettensitz, nicht zu weit nach vorne oder zu weit zur Seite , da das Gerät

kippen könnte.

4. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den meisten gängige Arten von Kommoden. Es passt nicht für alle Toilettentypen; stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert, sitzt fest und ist stabil vor Gebrauch.

5. Bei Modellen mit Armlehnen: Die Armlehnen sind für der Zweck der Hilfeleistung, wenn Ein- und Aussteigen aus dem Sitz. Versuchen Sie NICHT Verwenden Sie die Arme, um das gesamte Körpergewicht zu stützen Übertragen Sie das Gerät nicht, da dies zu einem Geräteausfall und zu Verletzungsgefahr führen kann .

6. Wenn Sie einen Toilettenstil haben, der Produkt passt nicht richtig oder kann nicht fest angezogen ist, wie oben beschrieben, Es wird empfohlen, die Verwendung einzustellen.

7. Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

8. Seien Sie bei der Bedienung und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und offenes Feuer. Bei allergischen Reaktionen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.


9. Lassen Sie sich vor der Verwendung von Ihrem Arzt bestätigen, dass das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keine ärztliche Beratung.

INSTRUCTIONS

● **So montieren Sie die Armlehnen (Überspringen Sie diesen Schritt bei Produkten ohne Armlehnen)**


1. Setzen Sie die Armlehnen in die Löcher an der Unterseite des Toilettensitzes ein. Die Metallknöpfe sollten nach außen zeigen.

2. Schieben Sie das Armlehnenrohr in die richtige Position, bis der Knopf in der Öffnung einrastet und ein „Klick“ ertönt.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Löcher.

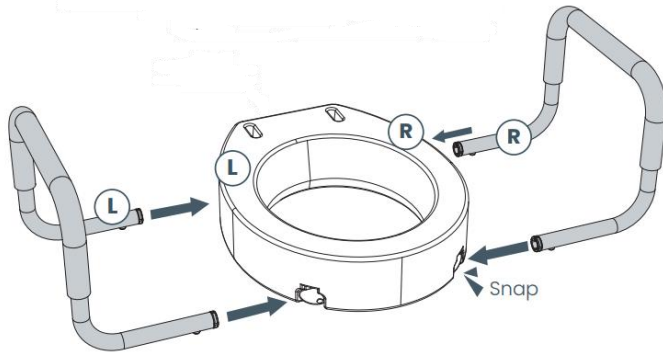

- **So installieren Sie den erhöhten Toilettensitz**

1. Entfernen Sie den vorhandenen Toilettensitz und -deckel vom Toilettenrahmen, indem Sie die Sitzschrauben an der Rückseite des Toilettensitzes lösen.

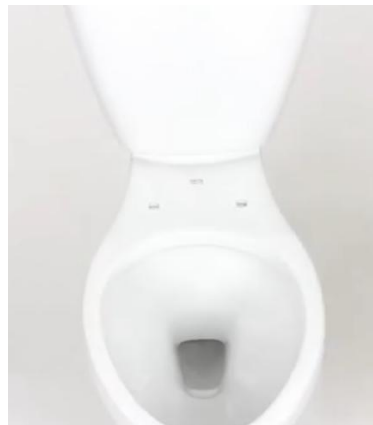

2. Platzieren Sie die Sitzerhöhung auf dem Toilettenrahmen und richten Sie die Befestigungslöcher aus.
3. Setzen Sie die Kunststoffeinsätze auf die Sitzerhöhung und richten Sie die Befestigungslöcher wie unten dargestellt am Toilettenrahmen aus. Führen Sie die Befestigungsschrauben durch den Toilettensitz.



4. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit der Handmutter fest. Ziehen Sie sie nicht vollständig fest.

5. Stellen Sie sicher, dass der Toilettensitz gerade ist und bündig auf der Sitzerrhöhung sitzt, und ziehen Sie dann die Hand fest

MAINTENANCE

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE EIN NICHT SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL. SPÜLEN SIE MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE VOLLSTÄNDIG. SCHEUERENDE TÜCHER KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.

2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ERHÖHTEN TOILETTENSITZ MIT ARMLEHNEN UND SEINE TEILE REGELMÄSSIG AUF KORROSION, BRÜCHE, KOMPRESSION ODER VERSCHLEISS.

Hersteller: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adresse: 2.–3. Stock, Gebäude 65, Zhongnan Industry Garden, Haitian Road Nr. 88, Bezirk Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sedile del water rialzato

Modello: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modello: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


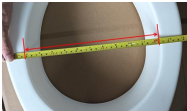



SC7060Q-S-4


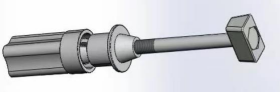


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Maneggetelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Nota
Altezza rialzata	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici	/
carico	300 libbre/ 136 kg	300 libbre/ 136 kg	300 libbre/ 136 kg	/
Lunghezza interna (mm)	325	355	285	
Larghezza interna (mm)	250	265	247	
Passo dei fori di montaggio (mm)	140	140	140	
Adattarsi alle dimensioni del water	Larghezza interna \geq 250 mm Lunghezza interna \geq 325 mm	Larghezza interna \geq 265 mm, Lunghezza interna \geq 355 mm	Larghezza interna \geq 247 mm, Lunghezza interna \geq 285 mm	Prima di scegliere il sedile rialzato per WC, verifica le dimensioni del tuo WC.

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Sedile del water rialzato		1	1	1
2	Gruppo vite		2	2	2
3	Bracciolo		2	0	0
4	Manuale		1	1	1

CAUTIOUS

1. Assicurarsi sempre che il sedile sia correttamente e saldamente bloccato in posizione prima dell'uso.
2. Assicurarsi che il bloccaggio di il sedile è sempre ben saldo, assicurando così il sedile del water. Gli utenti con disabilità fisiche dovrebbero essere supervisionato o assistito ogni volta che si utilizza questo prodotto.
3. Il sedile rialzato per WC non deve essere utilizzato per sostenere più di 300 libbre . NON utilizzare il prodotto in condizioni di sovraccarico. Il peso dell'utente deve essere centrato sopra il sedile del water, non troppo in avanti né troppo di lato , altrimenti l'unità potrebbe ribaltarsi.

4. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con la maggior parte tipi comuni di comò. Non si adatta a tutti tipi di comò; assicurarsi che l'unità sia installato correttamente, si adatta correttamente ed è stabile prima dell'uso.

5. Per i modelli con braccioli: I braccioli sono per lo scopo di fornire assistenza quando salire e scendere dal sedile. **NON** provare a utilizzare le braccia per sostenere tutto il peso corporeo durante trasferimento, poiché ciò potrebbe causare il guasto dell'unità e il rischio di lesioni .

6. Se hai uno stile di comò che questo il prodotto non si adatta correttamente o non può essere serrato saldamente come indicato sopra, è si consiglia di interromperne l'uso.

7. Verificare regolarmente il corretto montaggio e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe compromettere la longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.

8. Prestare attenzione durante l'uso e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

9. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.


INSTRUCTIONS

● **Per installare i braccioli (ignorare questo passaggio per i prodotti senza braccioli)**

1. Inserire ciascun bracciolo nei fori presenti sul fondo del sedile del WC. I pulsanti metallici devono essere rivolti verso l'esterno.


2. Far scorrere il tubo del bracciolo in posizione finché il pulsante non scatta nel foro e si sente un "clic".

3. Ripetere il procedimento per i fori rimanenti.

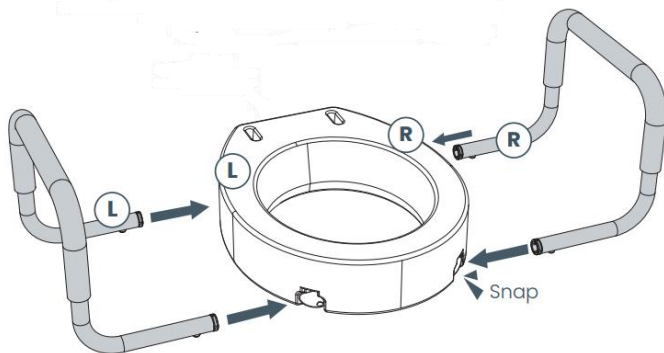

● **Per installare il sedile rialzato per WC**

1. Rimuovere il sedile e il coperchio del WC esistenti dal telaio del WC svitando le viti del sedile situate nella parte posteriore del sedile del WC.

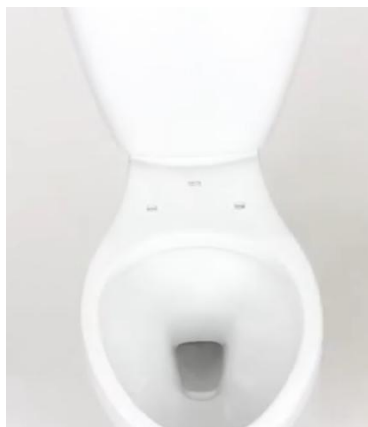

2. Posizionare il rialzo del sedile sul telaio del water e allineare i fori di montaggio.

3. Posizionare gli inserti in plastica sul rialzo del sedile e allineare i fori di montaggio con il telaio del WC, come mostrato di seguito. Inserire le viti di montaggio attraverso il sedile del WC.



4. Utilizzando il dado manuale, serrare le viti di montaggio. Non serrare completamente.
5. Assicurarsi che il sedile del water sia dritto e adagiato a filo sul rialzo del sedile, quindi stringere completamente la mano

MAINTENANCE

1. SI CONSIGLIA UNA PULIZIA REGOLARE, USARE UN DETERGENTE O UN DETERGENTE NON ABRASIVO. RISCIAQUARE CON ACQUA TIEPIDA E ASCIUGARE COMPLETAMENTE. I PANNI ABRASIVI POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
2. SI PREGA DI CONTROLLARE REGOLARMENTE IL SEDILE WC RIALZATO CON BRACCIOLI E I SUOI COMPONENTI PER EVENTUALI CORROSIONI, ROTTURE, COMPRESSIONI O USURA.

Produttore: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Indirizzo: 2-3 piano dell'edificio 65, Zhongnan Industry Garden, n. 88 Haitian Road, distretto di Gaoming, città di Foshan, Guangdong, 528500, CINA .

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Asiento de inodoro elevado

Modelo: SC7060NA-L-4,SC7060Q-L-4,SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modelo: SC7060NA-L-4,SC7060Q-L-4,SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4



SC7060Q-S-4


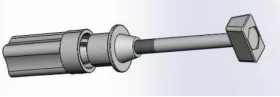


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto. Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Nota
Altura elevada	3,5 pulgadas	3,5 pulgadas	3,5 pulgadas	/
carga	300 libras/ 136 kilos	300 libras/ 136 kilos	300 libras/ 136 kilos	/
Longitud interior (mm)	325	355	285	
Ancho interior (mm)	250	265	247	
Paso de los orificios de montaje (mm)	140	140	140	
Adaptarse al tamaño del inodoro	Ancho interior \geq 250 mm Longitud interior \geq 325 mm	Ancho interior \geq 265 mm, Longitud interior \geq 355 mm	Ancho interior \geq 247 mm, Longitud interior \geq 285 mm	Compruebe el tamaño de su inodoro antes de elegir el asiento de inodoro elevado.

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Asiento de inodoro elevado		1	1	1
2	Grupo de tornillos		2	2	2
3	Brazo		2	0	0
4	Manual		1	1	1

CAUTIONS

1. Asegúrese siempre de que el asiento esté correctamente colocado y bien bloqueado en su lugar antes de usarlo.
2. Asegúrese de que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento, asegurando así la asiento de la taza del inodoro. Los usuarios con discapacidades físicas deben ser supervisado o asistido siempre que utilice este producto.
3. El asiento elevado del inodoro no debe soportar más de 136 kg (300 lb). NO utilice el producto sobrecargado. El peso del usuario debe estar centrado. sobre el asiento del inodoro, ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia un lado, ya que la unidad podría volcarse.

4. Este producto está diseñado para usarse con la mayoría Tipos comunes de inodoros. No se adapta a todos. tipos de inodoro; asegúrese de que la unidad esté Correctamente instalado, encaja correctamente y es estable Antes de usar.

5. Para modelos con apoyabrazos: Los brazos son para el propósito de proporcionar asistencia cuando subir y bajar del asiento. NO intente Utilice los brazos para soportar todo el peso del cuerpo durante transferencia, ya que esto puede provocar una falla de la unidad y riesgo de lesiones .

6. Si tienes un estilo de cómoda que este El producto no encajará correctamente o no se podrá Apretado firmemente como se indicó anteriormente, es Se recomienda suspender su uso.

7. Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y contacte con el servicio de asistencia en caso de duda. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer la vida útil del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

8. Tenga cuidado durante el funcionamiento y el montaje. Evite temperaturas extremas y llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.

9. Antes de usar, confirme con su proveedor de atención médica que el producto satisface sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.


INSTRUCTIONS

● **Para instalar los apoyabrazos (Omita este paso para los productos sin apoyabrazos)**

1. Coloque cada reposabrazos en los orificios de la base del asiento del inodoro. Los botones metálicos deben quedar hacia afuera.


2. Deslice el tubo del apoyabrazos en su posición hasta que el botón encaje en el orificio y escuche un “clic”.

3. Repita el proceso para el resto de los agujeros.

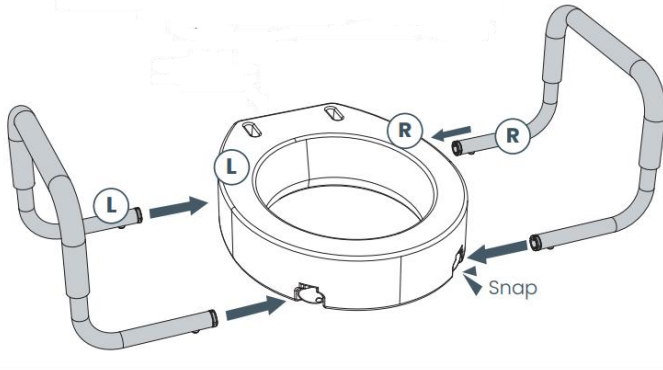

● **Para instalar el asiento de inodoro elevado**

1. Retire el asiento y la tapa del inodoro existentes del marco del inodoro desatornillando los tornillos del asiento ubicados en la parte trasera del asiento del inodoro.

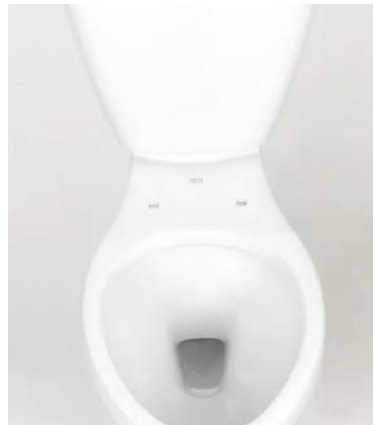

2. Coloque el elevador del asiento en el marco del inodoro y alinee los orificios de montaje.

3. Coloque los insertos de plástico en el elevador del asiento y alinee los orificios de montaje con el marco del inodoro, como se muestra a continuación. Inserte los tornillos de montaje a través del asiento del inodoro.



4. Apriete los tornillos de montaje con la tuerca manual. No los apriete completamente.
5. Asegúrese de que el asiento del inodoro esté recto y al ras del elevador del asiento, luego apriete completamente la manija.

MAINTENANCE

1. SE RECOMIENDA UNA LIMPIEZA REGULAR. UTILICE UN LIMPIADOR O DETERGENTE NO ABRASIVO. ENJUAGUE CON AGUA TIBIA Y SEQUE. COMPLETAMENTE. LOS PAÑOS ABRASIVOS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE.
2. POR FAVOR INSPECCIONE REGULARMENTE SU ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y SUS PIEZAS PARA VER SI HAY CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.

Fabricante: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Dirección: Planta 2-3 del Edificio 65, Zhongnan Industry Garden, Carretera
Haitiana n.º 88, Distrito de Gaoming, Foshan, Guangdong, 528500,
CHINA .

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone siedzisko sedesowe

Modelu: SC7060NA-L-4,SC7060Q-L-4,SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modelu: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


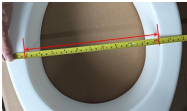



SC7060Q-S-4

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Notatka
Podniesion a wysokość	3,5 cala	3,5 cala	3,5 cala	/
obciążenie	300 funtów/ 136 kg	300 funtów/ 136 kg	300 funtów/ 136 kg	/
Długość wewnętrzna (mm)	325	355	285	
Szerokość wewnętrzna (mm)	250	265	247	
Rozstaw otworów montażowych (mm)	140	140	140	
Dostosuj się do rozmiaru toalety	Szerokość wewnętrzna \geq 250 mm Długość wewnętrzna \geq 325 mm	Szerokość wewnętrzna \geq 265mm, Długość wewnętrzna \geq 355 mm	Szerokość wewnętrzna \geq 247mm, Długość wewnętrzna \geq 285 mm	Przed wyborem podwyższonego siedziska należy sprawdzić rozmiar swojej toalety.

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Podwyższone siedzisko sedesowe		1	1	1
2	Grupa śrubowa		2	2	2
3	Podłokietnik		2	0	0
4	Podręcznik		1	1	1

CAUTIOUS

1. Zawsze upewnij się, że siedzenie jest prawidłowo i Przed użyciem należy je bezpiecznie zablokować.
2. Upewnij się, że blokada siedzenie jest zawsze szczelne, co zapewnia bezpieczeństwo siedzisko do muszli klozetowej. Użytkownicy niepełnosprawni fizycznie powinni nadzorowany lub wspomagany podczas korzystania z tego produktu.
3. Podwyższone siedzisko sedesowe nie powinno być używane do podtrzymywania ciężaru przekraczającego 136 kg . NIE należy używać produktu z przeciążeniem. Ciężar użytkownika powinien być

wyśrodkowany. nad deską sedesową, nie za bardzo do przodu i nie za bardzo na bok , ponieważ może się przewrócić.

4. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania z większością popularne typy komód. Nie pasują do wszystkich typy komód; upewnij się, że jednostka jest prawidłowo zainstalowany, pasuje prawidłowo i jest stabilny przed użyciem.

5. W przypadku modeli z podłokietnikami: Podłokietniki są przeznaczone do celem zapewnienia pomocy, gdy wsiadanie i wysiadanie z siedzenia. NIE próbuj użyj ramion do podtrzymywania ciężaru całego ciała podczas przeniesienia, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia i ryzyko obrażeń .

6. Jeśli masz styl komody, który to produkt nie będzie pasował prawidłowo lub nie będzie mógł być mocno dokręcone, jak wskazano powyżej, jest Zaleca się zaprzestanie stosowania.

7. Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że jest to zalecane w instrukcji obsługi.


8. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

9. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy produkt spełnia Twoje szczególne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.

INSTRUCTIONS

- **Aby zamontować podłokietniki (pomiń ten krok w przypadku produktów bez podłokietników)**

1. Umieść każdy podłokietnik w otworach w dolnej części deski sedesowej. Metalowe przyciski powinny być skierowane na zewnątrz.
2. Przesuń rurkę podłokietnika na miejsce, aż przycisk wskoczy w otwór i usłyszysz kliknięcie.
3. Powtórz proces dla pozostałych otworów.

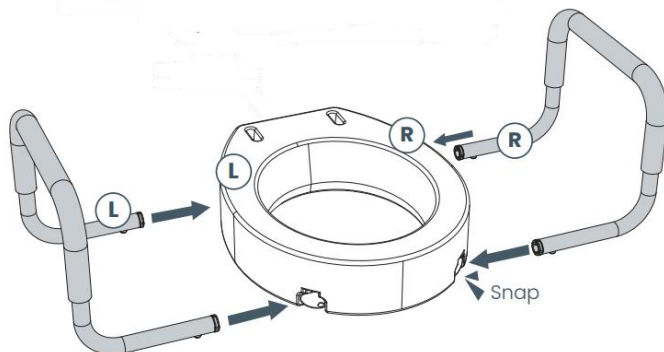

- **Aby zamontować podwyższone siedzisko sedesowe**

1. Zdejmij istniejącą deskę sedesową i pokrywę z ramy sedesu, odkręcając śruby deski sedesowej znajdujące się z tyłu deski.



2. Umieść podwyższenie siedziska na ramie sedesu i wyrównaj otwory montażowe.
3. Umieść plastikowe wkładki na podwyższeniu deski sedesowej i

wyrównaj otwory montażowe z ramą deski sedesowej, jak pokazano poniżej. Przełóż śruby montażowe przez deskę sedesową.



4. Dokręć śruby mocujące za pomocą nakrętki ręcznej. Nie dokręcaj ich do końca.
5. Upewnij się, że deska sedesowa jest prosta i przylega równo do podwyższenia deski, a następnie dokręć ją całkowicie ręcznie.

MAINTENANCE

1. ZALECA SIĘ REGULARNE CZYSZCZENIE. UŻYWAĆ NIEŚCIERNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO LUB DETERGENTU. SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I WYSUSZYĆ. CAŁKOWICIE. TKANINY ŚCIERNE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ.
2. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ PODWYŻSZONĄ DESKĘ TOALETOWĄ Z PODŁOKIETNIKAMI I JEJ CZĘŚCI POD KĄTEM KOROZJI, PĘKNIĘCIA, ŚCISKANIA LUB ZUŻYCIA.

Producent: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adres: 2-3 piętro budynku nr 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, dzielnica Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINY .

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verhoogde toiletzitting

Model: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


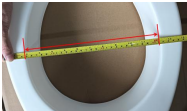



SC7060Q-S-4

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Opmerking
Verhoogde hoogte	3,5 inch	3,5 inch	3,5 inch	/
laden	300 pond/ 136 kg	300 pond/ 136 kg	300 pond/ 136 kg	/
Binnenlengte (mm)	325	355	285	
Binnenbreedte (mm)	250	265	247	
Montagegat en spoed (mm)	140	140	140	
Aanpassen aan de grootte van het toilet	Binnenbreedte ≥ 250 mm Binnenlengte ≥ 325 mm	Binnenbreedte ≥ 265 mm, Binnenlengte ≥ 355 mm	Binnenbreedte ≥ 247 mm, Binnenlengte ≥ 285 mm	Controleer de afmetingen van uw toilet voordat u een verhoogde toiletzitting kiest.

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Verhoogde toiletzitting		1	1	1
2	Schroefgroep		2	2	2
3	Armsteun		2	0	0
4	Handmatig		1	1	1

CAUTIONS

1. Zorg er altijd voor dat de stoel goed vastzit en goed vastgezet zijn voordat u het gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van de zitting zit altijd goed vast, waardoor de van de zitting naar de toiletpot. Lichamelijk beperkte gebruikers moeten: begeleid of bijgestaan wanneer u dit gebruikt product.
3. De verhoogde toiletzitting mag niet worden gebruikt om meer dan 136 kg te dragen . Gebruik het product NIET met overbelasting. Het gewicht van de gebruiker moet gecentreerd zijn. boven de toiletbril, niet te ver naar voren of te ver opzij , aangezien het apparaat dan kan kantelen.
4. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meeste Veelvoorkomende soorten toiletten. Het past niet bij iedereen. commode-typen; zorg ervoor

dat het apparaat is correct geïnstalleerd, past goed en is stabiel voor gebruik.

5. Voor modellen met armleuningen: De armen zijn voor het doel om hulp te bieden wanneer op en af de stoel stappen. Probeer NIET om Gebruik de armen om het volledige lichaamsgewicht te ondersteunen tijdens overdracht, aangezien dit kan leiden tot storingen in het apparaat en tot risico op letsel .

6. Als u een stijl van commode heeft die dit product past niet goed of kan niet worden stevig vastgedraaid zoals hierboven vermeld, is het wordt aanbevolen om het gebruik ervan te staken.

7. Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product recht en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.


8. Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Stop onmiddellijk met het gebruik als er een allergische reactie optreedt en raadpleeg een arts.

9. Controleer voor gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

INSTRUCTIONS

● Om de armleuningen te installeren (deze stap overslaan voor producten zonder armleuningen)

1. Plaats elke armleuning in de gaten aan de onderkant van de wc-bril. De metalen knoppen moeten naar buiten wijzen.
2. Schuif de armsteunbuis op zijn plaats totdat de knop in het gat klikt en er een klikgeluid klinkt.
3. Herhaal het proces voor de overige gaten.

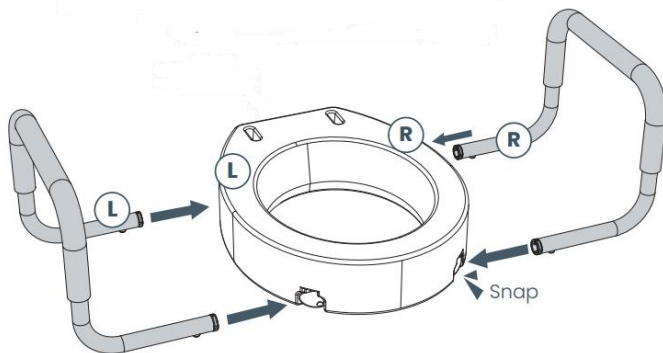

● Het installeren van de verhoogde toiletzitting

1. Verwijder de bestaande toiletzitting en het deksel van het toiletframe door de schroeven van de zitting los te draaien die zich aan de achterkant van de toiletzitting bevinden.



2. Plaats de zitverhoger op het toiletframe en zorg dat de montagegaten op één lijn liggen.

3. Plaats de kunststof inzetstukken op de zittingverhoger en lijn de bevestigingsgaten uit met het toiletframe, zoals hieronder weergegeven. Steek de bevestigingsschroeven door de toiletzitting.



4. Draai de bevestigingsschroeven met de handmoer vast. Draai ze niet helemaal vast.

5. Zorg ervoor dat de toiletzitting recht is en goed aansluit op de zittingverhoger, draai de hand vervolgens helemaal vast

MAINTENANCE

1. REGELMATIGE REINIGING WORDT AANBEVOLEN. GEBRUIK EEN NIET-SCHURENDE REINIGER OF WASMIDDEL. SPOEL AF MET WARM WATER EN DROOG AF. VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KUNNEN HET OPPERVLAKE BESCHADIGEN.

2. CONTROLEER REGELMATIG UW VERHOOGDE TOILETBRIJL MET ARMEN EN DE ONDERDELEN OP CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE OF SLIJTAGE.

Fabrikant: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD . Adres:
2-3e verdieping van gebouw 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian
Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060NA-L-4,SC7060Q-L-4,SC7060Q-S-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060NA-L-4, SC7060Q-L-4, SC7060Q-S-4



SC7060NA-L-4



SC7060Q-L-4


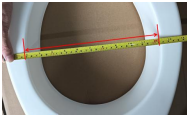



SC7060Q-S-4


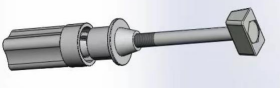


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	SC7060NA-L-4	SC7060Q-L-4	SC7060Q-S-4	Note
Raised height	3.5 in	3.5 in	3.5 in	/
load	300lbs/ 136kg	300lbs/ 136kg	300lbs/ 136kg	/
Inner length(mm)	325	355	285	
Inner Width(mm)	250	265	247	
Mounting holes pitch(mm)	140	140	140	
Adapt to toilet size	Inner width \geq 250mm Inner length \geq 325mm	Inner width \geq 265mm, Inner length \geq 355mm	Inner width \geq 247mm, Inner length \geq 285mm	Please check the size of your toilet before choosing the raised toilet seat.

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	SC70 60NA -L-4	SC70 60Q- L-4	SC70 60Q- S-4
1	Raised Toilet Seat		1	1	1
2	Screw group		2	2	2
3	Armrest		2	0	0
4	Manual		1	1	1

CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times, thus securing the seat to the toilet bowl. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat must not be used to support more than 300 lbs. DO NOT use the product overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.
4. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is

correctly installed, fits properly and is stable before use.

5. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.

6. If you have a style of commode that this product will not fit properly, or cannot be tightened securely as noted above, it is recommended that you discontinue usage.

7. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

8. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

9. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.


INSTRUCTIONS

- **To install the armrests(Neglect this step for the products without armrests)**

1. Place each armrest into the holes in the bottom of the toilet seat. The metal buttons should be facing out.


2. Slide the armrest tube into position until the button clicks into the hole and a "click" sounds.

3. Repeat the process for the rest of the holes.

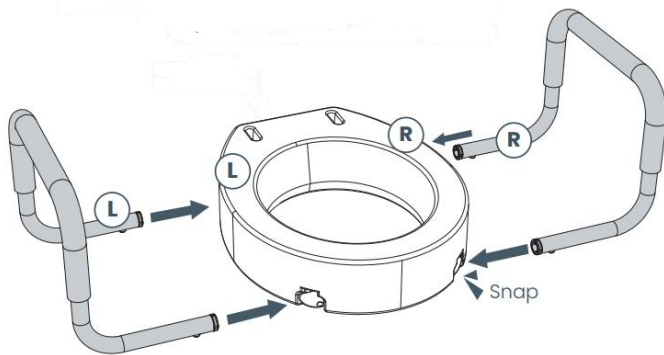

● **To install the Raised Toilet Seat**

1. Remove the existing toilet seat and lid from the toilet frame by unscrewing the seat screws located at the rear of the toilet seat.

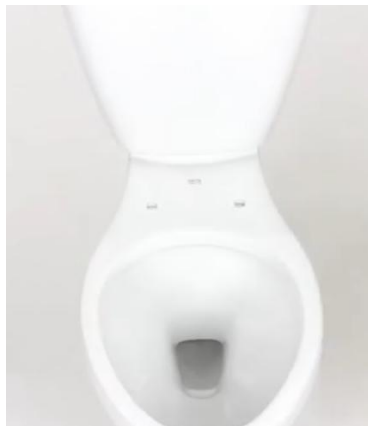

2. Place the seat riser on the toilet frame and align the mounting holes.
3. Place the plastic inserts on the seat riser and align mounting holes with toilet frame, as below. Insert the mounting screws through the toilet seat.



4. Using the hand nut tighten the mounting screws. Do not fully tighten.
5. Be sure the toilet seat is straight and sits flush on the seat riser, then fully tighten the hand

MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.

Manufacturer: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
Address: 2-3 Floor of 65 Building, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

