


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: FBL760657

Model: FBL760657

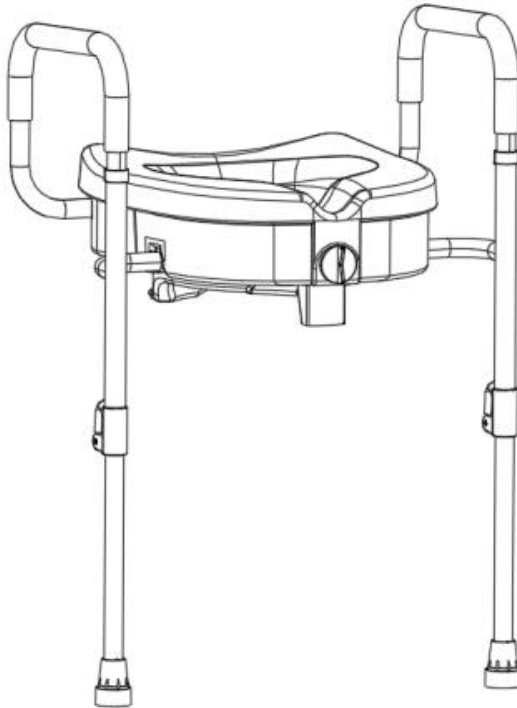








This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	load	Seat lifting height	Height from armrest to floor
FBL760657	350lbs/159kg	5in(127mm)	670-820mm

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Left armrest tube		1
2	Right armrest tube		1
3	Left armrest connecting pipe		1
4	Right armrest connecting pipe		1
5	Foot tube		2
6	Toilet raiser		1
7	Manual		1

CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat must not be used to support more than 300 lbs. DO NOT use the product overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.
4. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.
5. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
6. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
7. Ensure ALL thumb screws are tightened.
8. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
9. All legs extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
10. DO NOT stand on product.
11. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

12.Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.


13.Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.

14.Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

15.This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.


INSTRUCTIONS

1

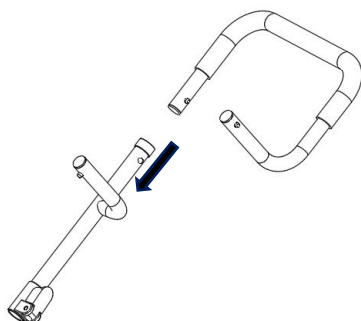

Install the ①left armrest tube into the ③left armrest connecting tube.

2

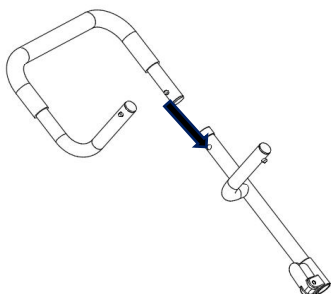


Install the ②right armrest tube into the ④right armrest connecting tube.

3


Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two

levels.

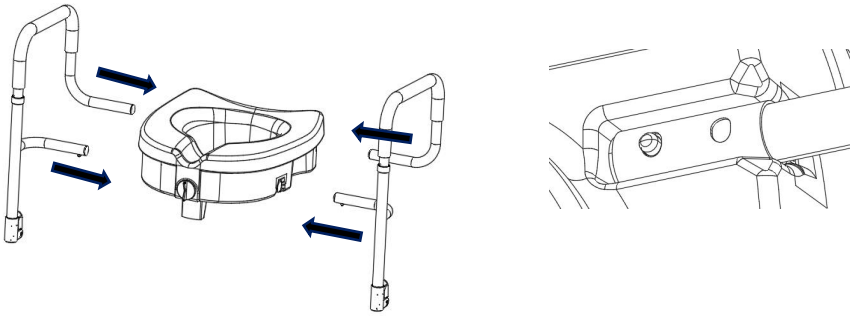


4

Insert the two ⑤ foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

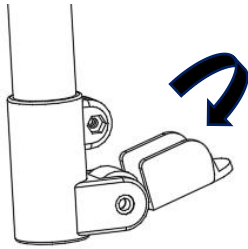


Open the pipe clamp

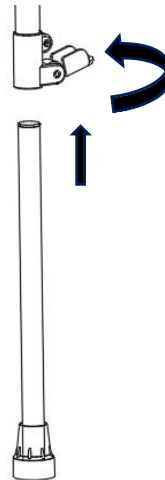

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

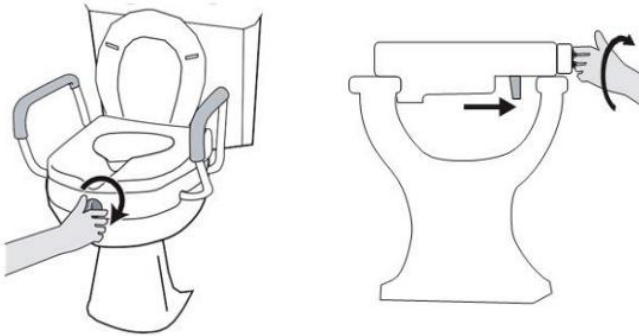

MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.
3. To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siège de toilette surélevé

Modèle : FBL760657

Centre d'assistance VEVOR




FBL760657

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modèle : FBL760657

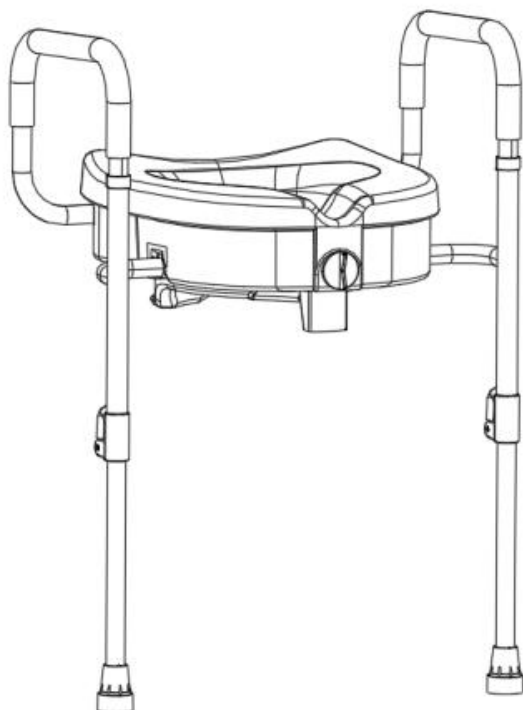

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.








Merci d'avoir choisi ce produit. Il doit toujours être manipulé avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces

informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	charger	Hauteur de levage du siège	Hauteur de l'accouoir au sol
FBL760657	35 0 lb/ 1 59 kg	5 pouces (127 mm)	670-820 mm

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	Qté
1	Tube d'accouoir gauche		1
2	Tube d'accouoir droit		1
3	Tuyau de raccordement de l'accouoir gauche		1
4	Tuyau de raccordement de l'accouoir droit		1
5	Tube de pied		2
6	rehausseur de toilettes		1
7	Manuel		1

CAUTIOUS

1. Assurez-vous toujours que le siège est correctement et bien verrouillé en place avant utilisation.
2. Assurez-vous que le verrouillage de Le siège doit être bien ajusté en permanence . Les personnes à mobilité réduite doivent être supervisé ou assisté lors de l'utilisation de ce produit.
3. Le siège de toilette surélevé ne doit pas supporter plus de 136 kg . Ne pas utiliser le produit en surcharge. Le poids de l'utilisateur doit être centré. au-dessus du siège des toilettes, ni trop en avant ni trop loin d' un côté, car l'appareil pourrait basculer.
4. Pour les modèles avec accoudoirs : Les accoudoirs sont pour le but de fournir une assistance lorsque monter et descendre du siège. N'essayez PAS de utiliser les bras pour supporter tout le poids du corps pendant transfert, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil et un risque de blessure .
5. Inspectez toutes les pièces pour déceler tout dommage dû au transport avant l'assemblage. En cas de dommage dû au transport , NE PAS UTILISER. Contactez votre revendeur/transporteur pour obtenir des instructions supplémentaires .
6. Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur dépassent complètement à travers le même trou respectif de chaque extension de jambe. Cela garantira que les extensions de jambes sont solidement verrouillées en position et à une hauteur uniforme est atteint.
7. Assurez-vous que TOUTES les vis à oreilles sont serrées .
8. Vérifiez les embouts en caoutchouc des extensions de jambe pour déceler les déchirures, l'usure ou s'ils sont manquant. Je remplace immédiatement tout ou partie de ces imperfections si elles existent.
9. Toutes les extensions de jambes avec embouts en caoutchouc DOIVENT toucher le sol simultanément à tout moment.
10. NE PAS se tenir debout sur le produit.
11. Vérifiez régulièrement la solidité de l'assemblage et le support de contact en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien

droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur une surface plane et stable. Ne le démontez pas si nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans le manuel.

12. Soyez prudent lors de l'utilisation et du montage. Évitez les températures extrêmes et les flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.


13. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, puis rincez tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.

14. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.

15. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les types de toilettes les plus courants. Il ne convient pas à tous les types de toilettes ; assurez-vous qu'il est correctement installé, bien ajusté et stable avant utilisation.


INSTRUCTIONS

1

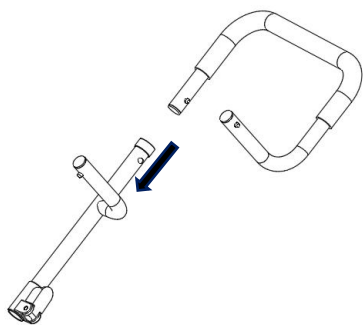

Installez le tube de l' accoudoir gauche ① dans le tube de connexion de l' accoudoir gauche ③ .



2

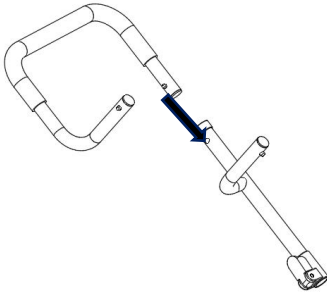


Installez le tube d'accouoir droit ② dans le tube de connexion d'accouoir droit ④ .

3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two levels.

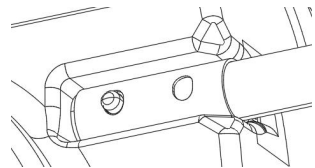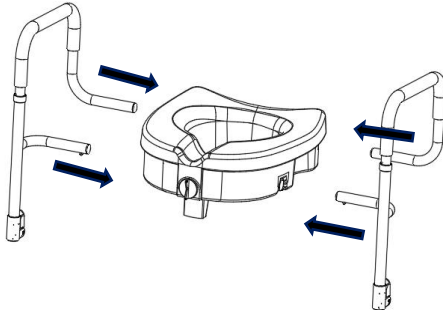


4

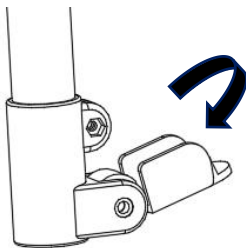


Open the pipe clamp

Insert the two ⑤ foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

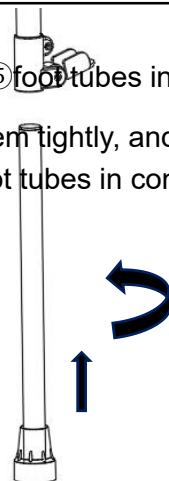

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

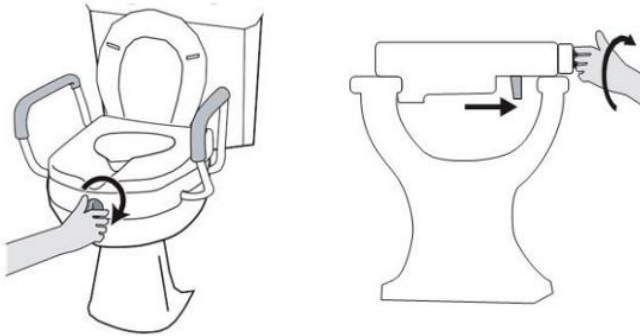

MAINTENANCE

1. UN NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ. UTILISEZ UN NETTOYANT OU UN DÉTERGENT NON ABRASIF. RINCER À L'EAU TIÈDE ET SÉCHER. COMPLÈTEMENT. LES CHIFFONS ABRASIFS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE.
2. VEUILLEZ INSPECTER RÉGULIÈREMENT VOTRE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC BRAS ET SES PIÈCES POUR DÉTECTER TOUTE CORROSION, CASSE, COMPRESSION OU USURE.
3. Pour préserver la beauté de la finition d'origine, nettoyez-la avec un savon doux et rincez-la à l'eau tiède. Essayez le siège de bain après chaque utilisation.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 2F-2, 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erhöhter Toilettensitz


Modell: FBL760657

VEVOR-Supportcenter



FBL760657

Modell: FBL760657

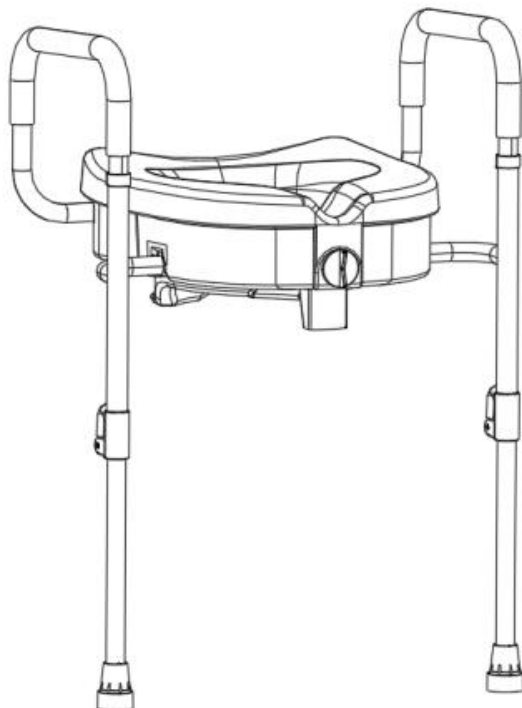

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.







Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Es sollte stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung


alle Anweisungen durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	laden	Sitzhöhenverstellung	Höhe von der Armlehne bis zum Boden
FBL760657	35 0 lbs/ 1 59 kg	5 Zoll (127 mm)	670-820 mm

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Linkes Armlehnenrohr		1
2	Rechtes Armlehnenrohr		1
3	Verbindungsrohr Armlehne links		1
4	Verbindungsrohr Armlehne rechts		1
5	Fußrohr		2
6	Toilettenerhöhung		1

7	Handbuch		1
---	----------	---	---

CAUTIONS

1. Achten Sie immer darauf, dass der Sitz richtig sitzt und vor der Verwendung sicher verriegelt.
2. , dass die Verriegelung der Sitz ist jederzeit fest . Körperlich eingeschränkte Benutzer sollten beaufsichtigt oder unterstützt werden, wenn Sie dieses Produkt.
3. Der erhöhte Toilettensitz darf nicht für eine Belastung von mehr als 136 kg verwendet werden . Verwenden Sie das Produkt NICHT überlastet. Das Gewicht des Benutzers sollte zentriert sein . über dem Toilettensitz, nicht zu weit nach vorne oder zu weit zur Seite , da das Gerät kippen könnte.
4. Bei Modellen mit Armlehnen: Die Armlehnen sind für der Zweck der Hilfeleistung, wenn Ein- und Aussteigen aus dem Sitz. Versuchen Sie NICHT Verwenden Sie die Arme, um das gesamte Körpergewicht zu stützen Übertragen Sie das Gerät nicht, da dies zu einem Geräteausfall und zu Verletzungsgefahr führen kann .
5. Sie alle Teile vor der Montage auf Transportschäden. Bei Transportschäden NICHT VERWENDEN. Wenden Sie sich für weitere Anweisungen an Ihren Händler/Spediteur .
6. Stellen Sie sicher, dass die Druckknöpfe zur Höhenverstellung vollständig hervorstehen durch das gleiche Loch jeder Beinverlängerung. Dies stellt sicher, dass die Beinverlängerungen sicher in ihrer Position verriegelt sind und eine gleichmäßige Höhe aufweisen erreicht ist.
7. Stellen Sie sicher, dass ALLE Flügelschrauben festgezogen sind .
8. Überprüfen Sie die Gummispitzen der Beinverlängerungen auf Risse, Abnutzung oder fehlt. Ich ersetze sofort alle oder einzelne dieser Mängel, wenn einer dieser Mängel vorliegt.
9. Alle Beinverlängerungen mit Gummispitzen MÜSSEN jederzeit

gleichzeitig den Boden berühren.

10. Stellen Sie sich NICHT auf das Produkt.

11. Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Das Produkt ist auf ebenen, stabilen Oberflächen zu verwenden. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

12. Vorsicht bei Bedienung und Montage. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und offenes Feuer. Bei allergischen Reaktionen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.


13. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Spülen Sie alle Seifenreste ab. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.

14. Bestätigen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt, dass das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

15. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den gängigsten Toilettenstuhltypen konzipiert. Es passt nicht auf alle Toilettenstuhltypen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät korrekt installiert ist, richtig sitzt und stabil steht.

INSTRUCTIONS


1

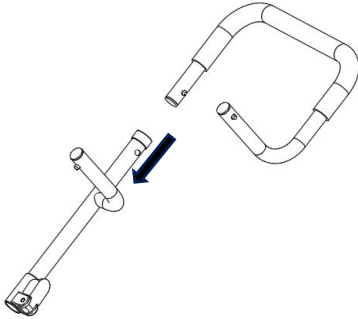

Installieren Sie das linke Armlehnenrohr ①
in das linke Armlehnenverbindungsrohr

③ .

2


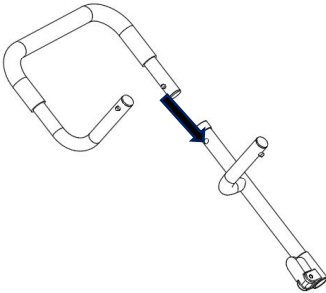


Montieren Sie das rechte Armlehnenrohr ②
in das rechte Armlehnenverbindungsrohr


④ .

3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and
insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two
levels.

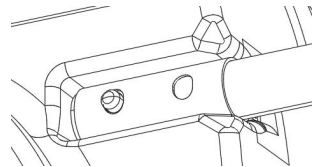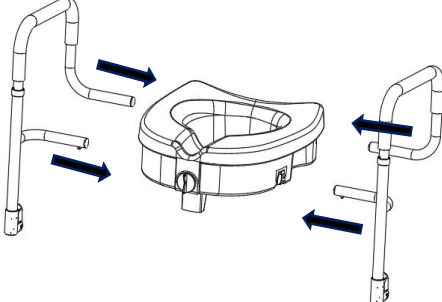


4

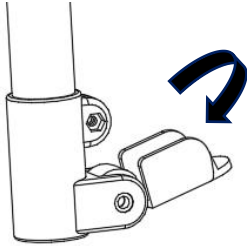


Open the pipe clamp

Insert the two ⑤foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

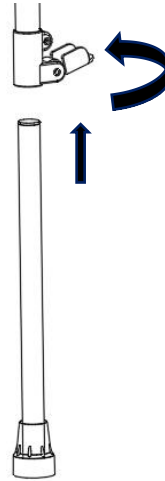

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

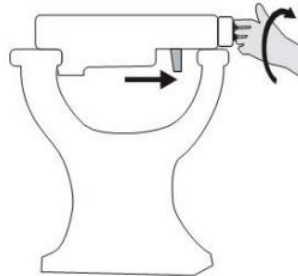

MAINTENANCE

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE EIN NICHT SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL. SPÜLEN SIE MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE VOLLSTÄNDIG. SCHEUERENDE TÜCHER KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.
2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ERHÖHTEN TOILETTENSITZ MIT ARMLEHNEN UND SEINE TEILE REGELMÄSSIG AUF KORROSION, BRÜCHE, KOMPRESSION ODER VERSCHLEISS.
3. Um die Schönheit der ursprünglichen Oberfläche zu erhalten, reinigen Sie den Sitz mit milder Seife und spülen Sie ihn mit warmem Wasser ab. Wischen Sie den Badesitz nach jedem Gebrauch trocken.

Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse: 2F-2, 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sedile del water rialzato

Modello: FBL760657

Centro di supporto VEVOR




FBL760657

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modello: FBL760657

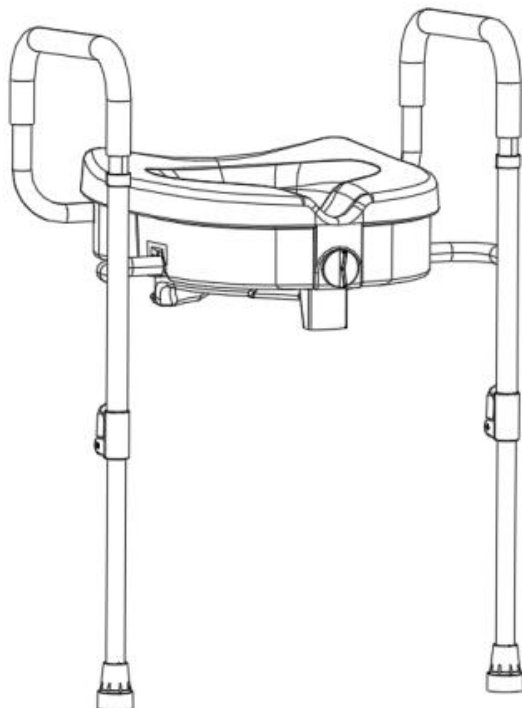

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.






Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Maneggetelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni


ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	carico	Altezza di sollevamento del sedile	Altezza dal bracciolo al pavimento
FBL760657	35 0 libbre/ 1 59 kg	5 pollici (127 mm)	670-820 millimetri

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Tubo del bracciolo sinistro		1
2	Tubo del bracciolo destro		1
3	Tubo di collegamento del bracciolo sinistro		1
4	Tubo di collegamento del bracciolo destro		1
5	Tubo del piede		2
6	Rialzo per WC		1

7	Manuale		1
---	---------	--	---

CAUTIOUS

1. Assicurarsi sempre che il sedile sia correttamente e saldamente bloccato in posizione prima dell'uso.
2. Assicurarsi che il bloccaggio di il sedile sia sempre ben saldo . Gli utenti con disabilità fisiche devono essere supervisionato o assistito ogni volta che si utilizza questo prodotto.
3. Il sedile rialzato per WC non deve essere utilizzato per sostenere più di 300 libbre . NON utilizzare il prodotto in condizioni di sovraccarico. Il peso dell'utente deve essere centrato sopra il sedile del water, non troppo in avanti né troppo di lato , altrimenti l'unità potrebbe ribaltarsi.
4. Per i modelli con braccioli: I braccioli sono per lo scopo di fornire assistenza quando salire e scendere dal sedile. NON provare a utilizzare le braccia per sostenere tutto il peso corporeo durante trasferimento, poiché ciò potrebbe causare il guasto dell'unità e il rischio di lesioni .
5. Prima del montaggio, ispezionare tutte le parti per verificare la presenza di danni dovuti al trasporto. In caso di danni dovuti al trasporto , NON UTILIZZARE. Contattare il rivenditore/corriere per ulteriori istruzioni .
6. Assicurarsi che i pulsanti a scatto per la regolazione dell'altezza sporgano completamente attraverso lo stesso rispettivo foro di ogni estensione della gamba. Questo garantirà che le estensioni delle gambe siano bloccate saldamente in posizione e ad un'altezza uniforme è raggiunto.
7. Assicurarsi che TUTTE le viti a testa zigrinata siano serrate .
8. Controllare le punte in gomma sulle estensioni delle gambe per strappi, usura o se sono mancanti. Se presenti una qualsiasi di queste imperfezioni, provvederò immediatamente alla loro sostituzione.
9. Tutte le estensioni delle gambe con punte in gomma DEVONO toccare il pavimento contemporaneamente in ogni momento.

10. NON salire sul prodotto.

11. Verificare regolarmente il corretto montaggio e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe comprometterne la longevità. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.

12. Prestare attenzione durante l'uso e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.


13. Pulire regolarmente con un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.

14. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere del medico.

15. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con i tipi più comuni di comode. Non è compatibile con tutti i tipi di comode; assicurarsi che l'unità sia installata correttamente, si adatti correttamente e sia stabile prima dell'uso.

INSTRUCTIONS


1

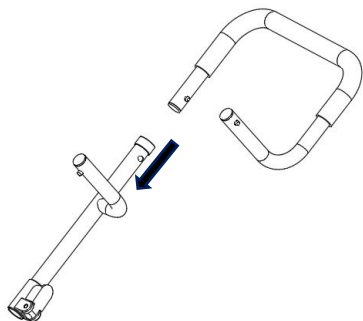

Installare il tubo del bracciolo sinistro ① nel tubo di collegamento del bracciolo sinistro

③ .

2


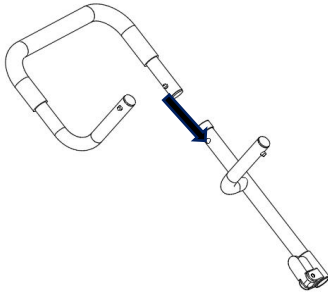


Installare il tubo del bracciolo destro ② nel tubo di collegamento del bracciolo destro


④ .

3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two levels.

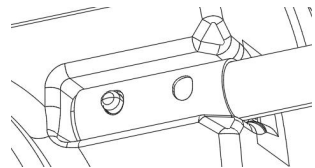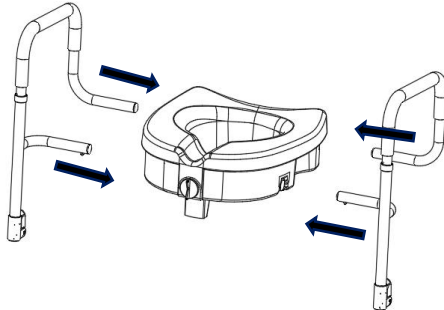


4

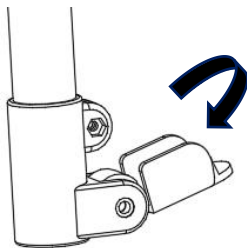


Open the pipe clamp

Insert the two ⑤ foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

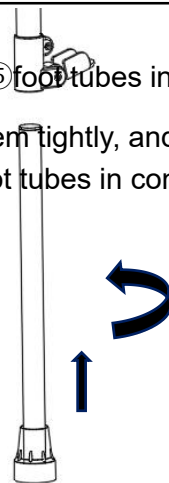

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

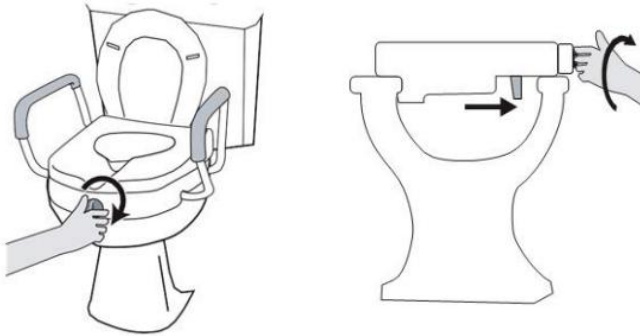

MAINTENANCE

1. SI CONSIGLIA UNA PULIZIA REGOLARE, USARE UN DETERGENTE O UN DETERGENTE NON ABRASIVO. RISCIACQUARE CON ACQUA TIEPIDA E ASCIUGARE COMPLETAMENTE. I PANNI ABRASIVI POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
2. SI PREGA DI CONTROLLARE REGOLARMENTE IL SEDILE WC RIALZATO CON BRACCIOLI E I SUOI COMPONENTI PER EVENTUALI CORROSIONI, ROTTURE, COMPRESSIONI O USURA.
3. Per mantenere la bellezza della finitura originale, pulire con un sapone delicato e risciacquare con acqua tiepida. Asciugare il sedile da bagno dopo ogni utilizzo.

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 2F-2, 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Asiento de inodoro elevado


Modelo: FBL760657

Centro de soporte de VEVOR



FBL760657

Modelo: FBL760657

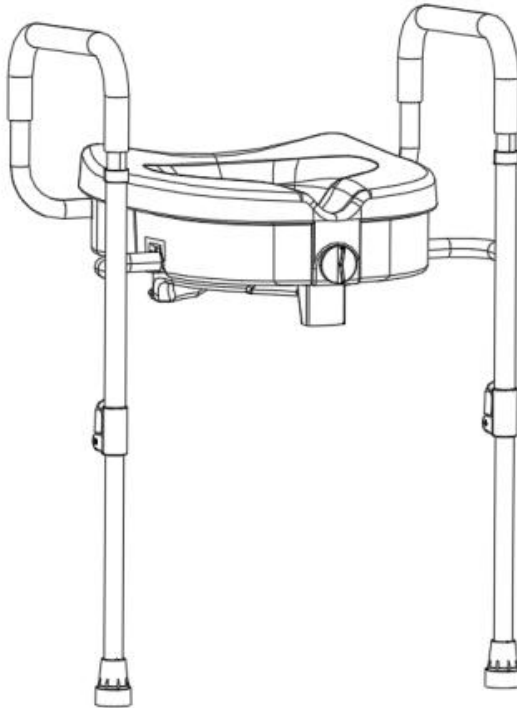

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto. Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a


conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	carga	Altura de elevación del asiento	Altura desde el reposabrazos hasta el suelo
FBL760657	35,0 libras / 1,59 kg	5 pulgadas (127 mm)	670-820 milímetros

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Tubo del reposabrazos izquierdo		1
2	Tubo del reposabrazos derecho		1
3	Tubo de conexión del reposabrazos izquierdo		1
4	Tubo de conexión del reposabrazos derecho		1
5	Tubo de pie		2
6	Elevador de inodoro		1


7	Manual		1
---	--------	--	---

CAUTIONS


1. Asegúrese siempre de que el asiento esté correctamente colocado y bien bloqueado en su lugar antes de usarlo.
2. Asegúrese de que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento . Los usuarios con discapacidades físicas deben supervisado o asistido siempre que utilice este producto.
3. El asiento elevado del inodoro no debe soportar más de 136 kg (300 lb). NO utilice el producto sobrecargado. El peso del usuario debe estar centrado. sobre el asiento del inodoro, ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia un lado, ya que la unidad podría volcarse.
4. Para modelos con apoyabrazos: Los brazos son para el propósito de proporcionar asistencia cuando subir y bajar del asiento. NO intente Utilice los brazos para soportar todo el peso del cuerpo durante transferencia, ya que esto puede provocar una falla de la unidad y riesgo de lesiones .
5. Inspeccione todas las piezas para detectar daños durante el envío antes del montaje. Si presenta daños durante el envío , NO LO USE. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con el distribuidor o el transportista .
6. Asegúrese de que los botones a presión de ajuste de altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las piernas estén bloqueadas de forma segura en su posición y a una altura uniforme se logra
7. Asegúrese de que TODOS los tornillos de mariposa estén bien apretados .
8. Revise las puntas de goma de las extensiones de las patas para ver si tienen rasgaduras, desgaste o si están Falta. Reemplazo inmediatamente cualquiera o todos si existe alguna de estas imperfecciones.

9. Todas las extensiones de piernas con puntas de goma DEBEN tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
10. NO se pare sobre el producto.
11. Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y, en caso de duda, póngase en contacto con el servicio técnico. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. El producto debe utilizarse sobre superficies planas y estables. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.
12. Tenga cuidado durante el funcionamiento y el montaje. Evite las temperaturas extremas y las llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.
13. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia. Enjuague cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, seque bien.
14. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto se ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.
15. Este producto está diseñado para usarse con los inodoros más comunes. No es compatible con todos los tipos de inodoros; asegúrese de que la unidad esté correctamente instalada, encaje correctamente y sea estable antes de usarla.

INSTRUCTIONS

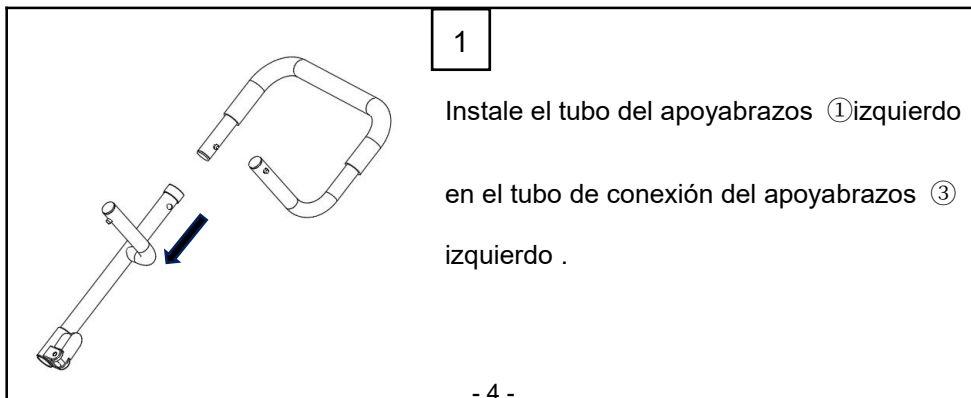



2

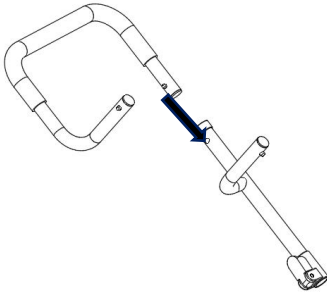


Instale el tubo del apoyabrazos derecho ② en el tubo de conexión del apoyabrazos derecho ④ .

3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two levels.

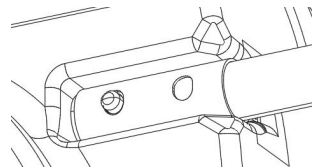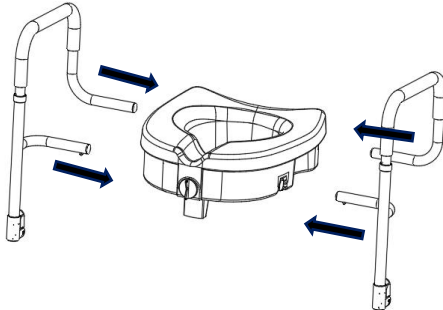


4

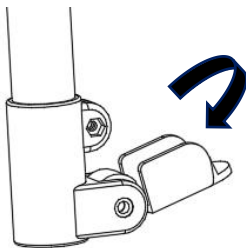


Open the pipe clamp

Insert the two ⑤ foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

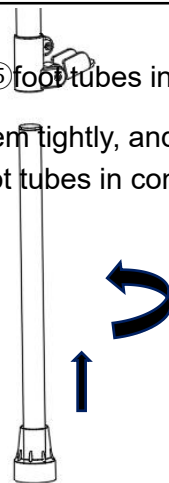

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

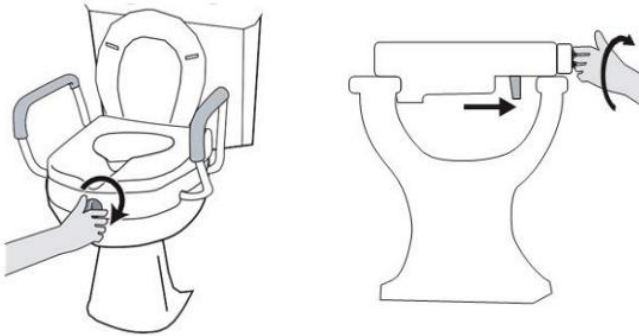

MAINTENANCE

1. SE RECOMIENDA UNA LIMPIEZA REGULAR. UTILICE UN LIMPIADOR O DETERGENTE NO ABRASIVO. ENJUAGUE CON AGUA TIBIA Y SEQUE. COMPLETAMENTE. LOS PAÑOS ABRASIVOS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE.
2. POR FAVOR INSPECCIONE REGULARMENTE SU ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y SUS PIEZAS PARA VER SI HAY CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.
3. Para conservar la belleza del acabado original, límpielo con jabón suave y enjuáguelo con agua tibia. Seque el asiento de la bañera después de cada uso.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.

Dirección: 2F-2, 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone siedzisko sedesowe

Model: FBL760657

Centrum wsparcia VEVOR




FBL760657

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: FBL760657

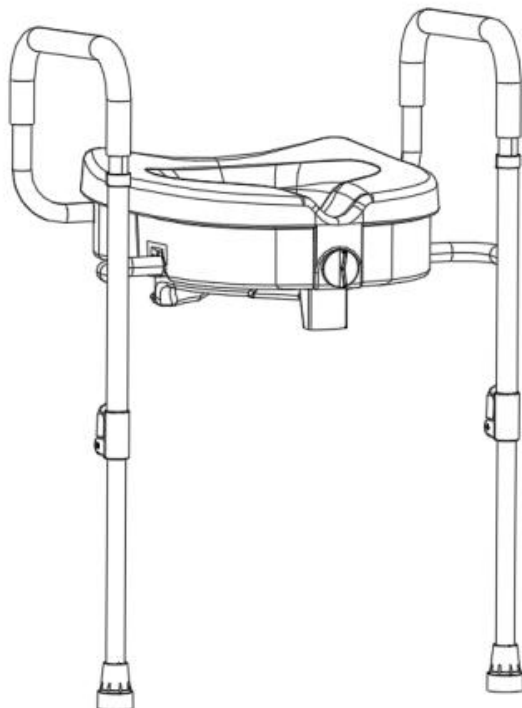

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.








Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji.

Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	obciążenie	Wysokość podnoszenia siedziska	Wysokość od podłokietnika do podłogi
FBL760657	35 0 funtów/ 1 59 kg	5 cali (127 mm)	670-820 mm

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Lewa rura podłokietnika		1
2	Rura podłokietnika prawego		1
3	Rura łącząca lewy podłokietnik		1
4	prawego podłokietnika		1
5	Rurka podnóżkowa		2
6	Podwyższenie toalety		1
7	Podręcznik		1

CAUTIOUS

1. Zawsze upewnij się, że siedzenie jest prawidłowo i Przed użyciem należy je bezpiecznie zablokować.
2. Upewnij się, że blokada Siedzenie jest zawsze ciasne . Osoby niepełnosprawne fizycznie powinny nadzorowany lub wspomagany podczas korzystania z tego produkt.
3. Podwyższone siedzisko sedesowe nie powinno być używane do podtrzymywania ciężaru przekraczającego 136 kg . NIE należy używać produktu z przeciążeniem. Ciężar użytkownika powinien być wyśrodkowany, nad deską sedesową, nie za bardzo do przodu i nie za bardzo na bok , ponieważ może się przewrócić.
4. W przypadku modeli z podłokietnikami: Podłokietniki są przeznaczone do celem zapewnienia pomocy, gdy wsiadanie i wysiadanie z siedzenia. NIE próbuj użyj ramion do podtrzymywania ciężaru całego ciała podczas przeniesienia, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia i ryzyko obrażeń .
5. sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku uszkodzeń transportowych – NIE UŻYWAĆ. Skontaktuj się ze sprzedawcą/przewoźnikiem w celu uzyskania dalszych instrukcji .
6. Upewnij się, że zatrzaski regulujące wysokość całkowicie wystają przez ten sam otwór w każdej przedłużce nogi. To zapewni że wydłużenia nóg są bezpiecznie zablokowane w pozycji i mają równą wysokość został osiągnięty.
7. Sprawdź, czy WSZYSTKIE śruby motylkowe są dokręcone .
8. Sprawdź gumowe końcówki na przedłużkach nóg pod kątem rozdarć, zużycia lub Brakuje. Jeśli którakolwiek z tych niedoskonałości będzie występować, natychmiast wymień wszystkie lub niektóre z nich.

9. Wszystkie wyprostowane nogi z gumowymi kółkami MUSZĄ jednocześnie dotykać podłogi przez cały czas.

10. NIE stawaj na produkcie.

11. Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Produkt należy użytkować na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.

12. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.


13. Regularnie czyść łagodnym detergentem i ciepłą wodą, spłucz pozostałości mydła. Po umyciu dokładnie osusz.

14. Przed użyciem należy upewnić się u lekarza, że produkt spełnia Państwa indywidualne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.

15. Ten produkt jest przeznaczony do użytku z najpopularniejszymi typami toalet. Nie będzie pasował do wszystkich typów toalet. Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane, dobrze dopasowane i stabilne.


INSTRUCTIONS

1

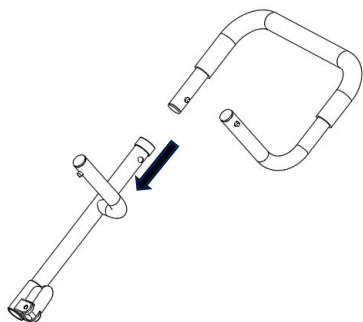

Zamontuj ① lewą rurkę podłokietnika w ③ lewej rurce łączącej podłokietnik .



2

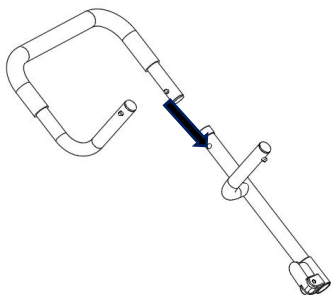


Zamontuj ② prawą rurkę podłokietnika do ④ prawej rurki łączącej podłokietnik .

3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two levels.

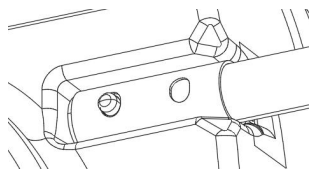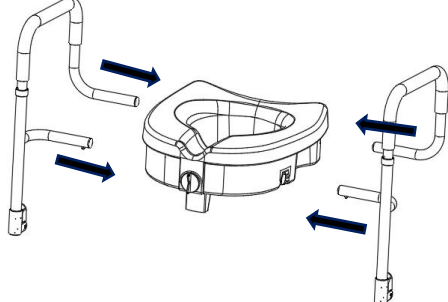


4

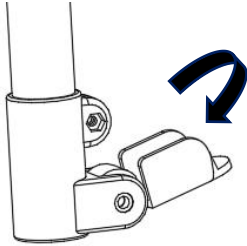


Open the pipe clamp

Insert the two ⑤foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

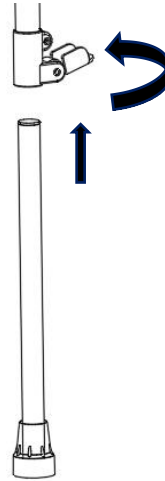

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

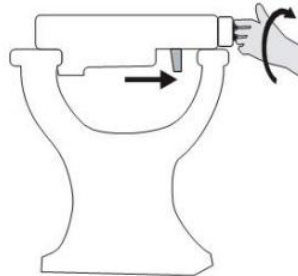

MAINTENANCE

1. ZALECA SIĘ REGULARNE CZYSZCZENIE. UŻYWAĆ NIEŚCIERNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO LUB DETERGENTU. SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I WYSUSZYĆ. CAŁKOWICIE. TKANINY ŚCIERNE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ.
2. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ PODWYŻSZONĄ DESKĘ TOALETOWĄ Z PODŁOKIETNIKAMI I JEJ CZĘŚCI POD KĄTEM KOROZJI, PEKNIĘCIA, ŚCISKANIA LUB ZUŻYCIA.
3. Aby zachować piękno oryginalnego wykończenia, należy czyścić łagodnym mydłem i spłukać ciepłą wodą. Po każdym użyciu wytrzeć siedzisko do sucha.

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 2F-2, 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verhoogde toiletzitting

Model: FBL760657

**VEVOR
Ondersteuningscentrum**




FBL760657

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: FBL760657

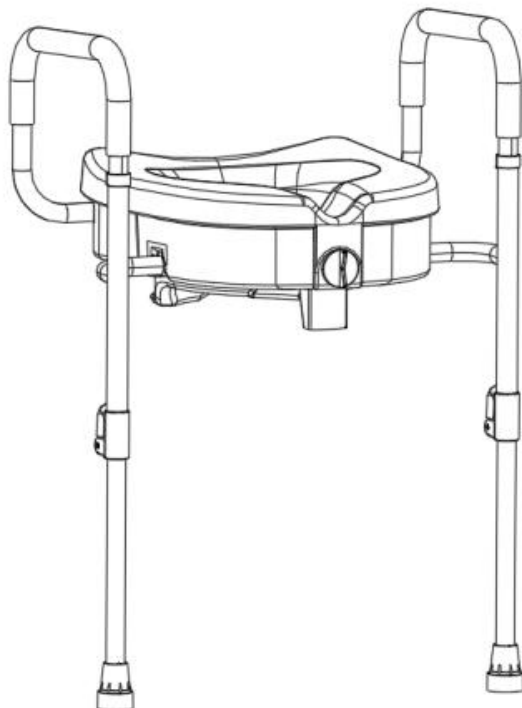

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.







Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het


gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	laden	Hoogte van de stoellift	Hoogte van armleuning tot vloer
FBL760657	35 0 lbs/ 1 59 kg	5 inch (127 mm)	670-820 mm

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Linker armsteunbuis		1
2	Rechter armsteunbuis		1
3	Verbindingsbuis linkerarmsteun		1
4	Aansluitbuis rechterarmsteun		1
5	Voetbuis		2
6	Toiletverhoger		1

7	Handmatig		1
---	-----------	---	---

CAUTIOUS

1. Zorg er altijd voor dat de stoel goed vastzit en goed vastgezet zijn voordat u het gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van De zitting is te allen tijde strak . Lichamelijk beperkte gebruikers moeten begeleid of bijgestaan wanneer u dit gebruikt product.
3. De verhoogde toiletzitting mag niet worden gebruikt om meer dan 136 kg te dragen . Gebruik het product NIET met overbelasting. Het gewicht van de gebruiker moet gecentreerd zijn. boven de toiletbril, niet te ver naar voren of te ver opzij , aangezien het apparaat dan kan kantelen.
4. Voor modellen met armleuningen: De armen zijn voor het doel om hulp te bieden wanneer op en af de stoel stappen. Probeer NIET om Gebruik de armen om het volledige lichaamsgewicht te ondersteunen tijdens overdracht, aangezien dit kan leiden tot storingen in het apparaat en tot risico op letsel .
5. Controleer alle onderdelen op transportschade vóór montage. Als er transportschade is , NIET GEBRUIKEN. Neem contact op met de dealer/transporteur voor verdere instructies .
6. Zorg ervoor dat de drukknoppen voor hoogteverstelling volledig uitsteken door hetzelfde gat van elke beenverlenging. Dit zorgt ervoor dat de beenverlengingen goed vastzitten en op gelijke hoogte zijn wordt bereikt.
7. Zorg ervoor dat ALLE duimschroeven goed vastgedraaid zijn .
8. Controleer de rubberen uiteinden van de beenverlengingen op scheuren, slijtage of als ze ontbreken. Ik vervang onmiddellijk alle of een deel van deze onvolkomenheden.
9. Alle beenstrekkingen met rubberen punten MOETEN te allen tijde tegelijkertijd de vloer raken.

10. Ga NIET op het product staan.

11. Controleer regelmatig de veilige montage en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product recht en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Het product moet worden gebruikt op vlakke, stabiele oppervlakken. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

12. Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Stop onmiddellijk met het gebruik als er een allergische reactie optreedt en raadpleeg een arts.


13. Reinig regelmatig met een mild reinigingsmiddel en warm water, spoel eventuele zeepresten af en droog na het reinigen grondig af.

14. Controleer vóór gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

15. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meest voorkomende soorten toiletten. Het past niet op alle soorten toiletten. Controleer voor gebruik of het apparaat correct is geïnstalleerd, goed past en stabiel staat.


INSTRUCTIONS

1

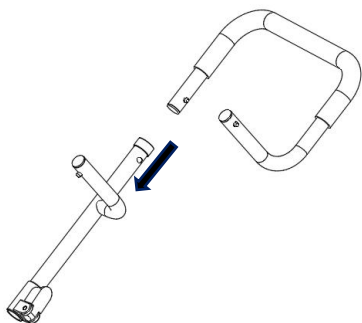

Plaats de ①linkerarmsteunbuis in de ③ linkerarmsteunverbindingsbuis .


2

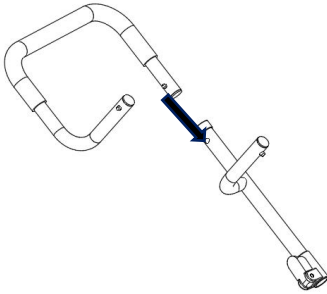

Plaats de rechterarmsteunbuis ② in de rechterarmsteunverbindingsbuis ④ .


3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two levels.

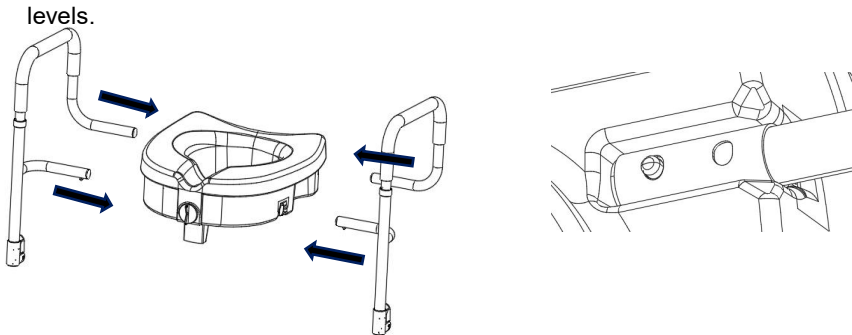


4

Insert the two ⑤ foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

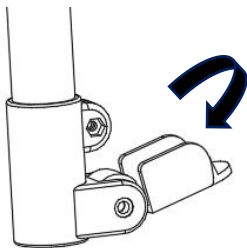


Open the pipe clamp

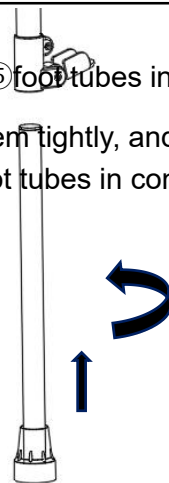

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

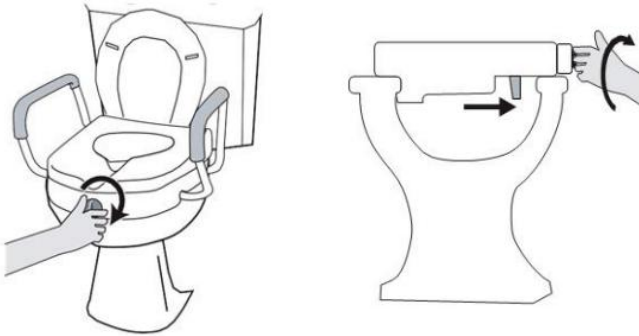

MAINTENANCE

1. REGELMATIGE REINIGING WORDT AANBEVOLEN. GEBRUIK EEN NIET-SCHURENDE REINIGER OF WASMIDDEL. SPOEL AF MET WARM WATER EN DROOG AF. VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KUNNEN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.
2. CONTROLEER REGELMATIG UW VERHOOGDE TOILETBRIL MET ARMEN EN DE ONDERDELEN OP CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE OF SLIJTAGE.
3. Om de schoonheid van de originele afwerking te behouden, reinigt u de badzitting met milde zeep en spoelt u deze af met warm water. Droog de badzitting na elk gebruik af.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Upphöjd toalettsits

Modell: FBL760657

Modell: FBL760657

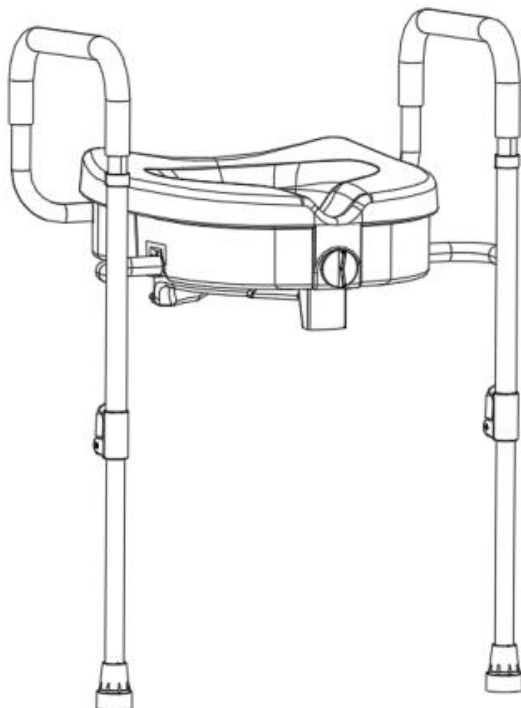

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.








Tack så mycket för att du valde den här produkten, den bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen

kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	ladda	Lyfthöjd för sitsen	Höjd från armstöd till golv
FBL760657	1,59 kg	127 mm (5 tum)	670–820 mm

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Vänster armstödsrör		1
2	Höger armstödsrör		1
3	Anslutningsrör vänster armstöd		1
4	Anslutningsrör höger armstöd		1
5	Fotrör		2
6	Toalettförhöjare		1
7	Manuell		1

CAUTIOUS

1. Se alltid till att sätet är korrekt och ordentligt låst på plats före användning.
2. Se till att låsningen av att sätet är tätt hela tiden . Fysiskt funktionshindrade användare bör övervakad eller assisterad närhelst detta används produkt.
3. Den upphöjda toaletsitsen får inte användas för att bära mer än 136 kg . ANVÄND INTE produkten överbelastad. Användarens vikt ska vara centrerad. över toaletsitsen, inte för framåt eller för långt åt sidan , eftersom enheten kan välta.
4. För modeller med armstöd: Armstöden är avsedda för syftet att ge hjälp när att ta sig på och av sätet. FÖRSÖK INTE att använd armarna för att stödja hela kroppsvikten under överföring, eftersom detta kan leda till att enheten slutar fungera och risk för skador .
5. Kontrollera alla delar för transportskador före montering. Om det finns transportskador - ANVÄND INTE. Kontakta återförsäljare/transportör för ytterligare instruktioner .
6. Se till att höjdstyckningsknapparna sticker ut helt genom samma respektive hål i varje benförlängning. Detta säkerställer att benförlängningarna är ordentligt låsta i position och har en jämn höjd uppnås.
7. Se till att ALLA tumskruvar är åtdragna .
8. Kontrollera gummitopparna på benförlängningarna för revor, slitage eller om de är saknas. Jag ersätter omedelbart alla eller alla om några av dessa defekter finns.
9. Alla benförlängningar med gummispetsar MÅSTE nudda golvet samtidigt hela tiden.
10. Stå INTE på produkten.
11. Kontrollera regelbundet att produkten är ordentligt monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana,

stabila ytor. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.

12. Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontakta sjukvårdspersonal.


13. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj bort eventuella tvålstrester. Torka noggrant efter rengöring.

14. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

15. Denna produkt är avsedd för användning med de vanligaste typerna av toalettstolar. Den passar inte alla typer av toalettstolar; se till att enheten är korrekt installerad, passar ordentligt och är stabil före användning.


INSTRUCTIONS

1

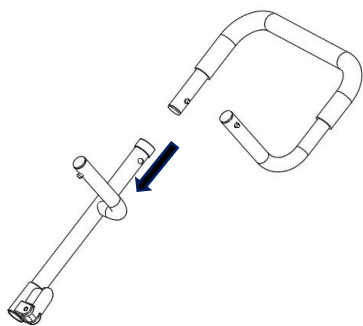

Montera ①vänster armstödsrör i ③vänster armstöds anslutningsrör .



2

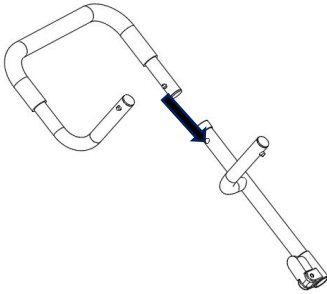

Montera ② höger armstödsrör i ④ höger armstöds anslutningsrör .


3

Align the two ends of the installed left and right armrest connecting pipes and insert them into the ⑥ toilet raiser. The armrest pipes can be adjusted in two levels.

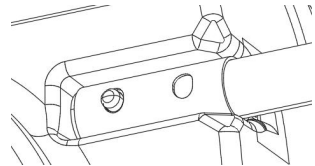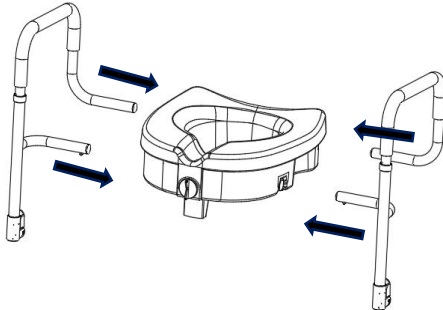


4

Insert the two ⑤ foot tubes into the tube clamp, close them tightly, and adjust the height of the foot tubes in conjunction with the toilet.

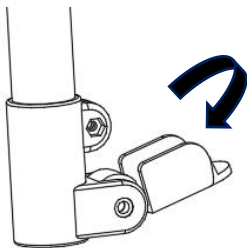


Open the pipe clamp

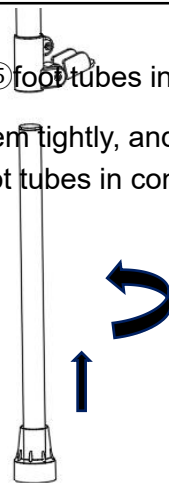

5

After the product is assembled and placed on the toilet, adjust the knob to make its toilet seat firmly stick to the toilet.

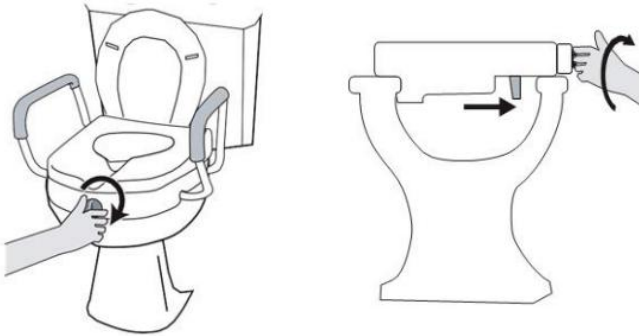

MAINTENANCE

1. REGELBUNDEN RENGÖRING REKOMMENDERAS, ANVÄND ETT ICKE-SLIPANDE RENGÖRINGS- ELLER TVÄTTMEDEL. SKÖLJ MED VARMT VATTEN OCH TORKA. HELT. SKIDDUGAR KAN SKADA YTAN.
2. INSPEKTERA REGELBUNDET DIN UPPHÖJDA TOALETTSITS MED ARMARNA OCH DESS DELAR FÖR EVENTUELLA KORROSIONER, BROTT, KOMPRESSIONER ELLER SLITAGE.
3. För att bevara den ursprungliga finishens skönhet, rengör med mild tvål och skölj med varmt vatten. Torka badkarssitsen torr efter varje användning.

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.

Adress: 2F-2, 3-6F och 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin-området, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

