



## **Raised Toilet Seat**

**Model: XZY401**

**Model: XZY401**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.








Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.





## SPECIFICATION

Model	load	Height from seat to floor	Height from armrest to floor
XZY401	300lbs/ 136kg	470-590mm	640-770mm

## PACKAGE LIST



No.	Name	Picture	QTY
A	Seat		1
B	Armrest		2
C	Reinforced crossbar		2
D	U-shaped tube		2
E	Leg connection tube		4
F	Leg with rubber tip		2
G	Leg with suction cup		2

H	M6 screw		4
I	Knob with screw		8
J	Hex key		1
K	Manual		1

## CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat must not be used to support more than 300 lbs. DO NOT use the product overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.
4. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.
5. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further

instructions.

6. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.

7. Ensure ALL thumb screws are tightened.

8. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.

9. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.

10. DO NOT stand on product.

11. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

12. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

13. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.

14. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

15. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.

## **INSTRUCTIONS**


Step1: insert the Leg connection tube (Part #E) into the Armrest (Part #B)




Step 2: Use the M6 screw (Part #H) to secure the Reinforced crossbar (Part #C) to the leg connection tube.



Step 3: Use the U-shaped tubes (Part #D) to connect the armrest frames on both sides and fix them with Knob (Part #I)

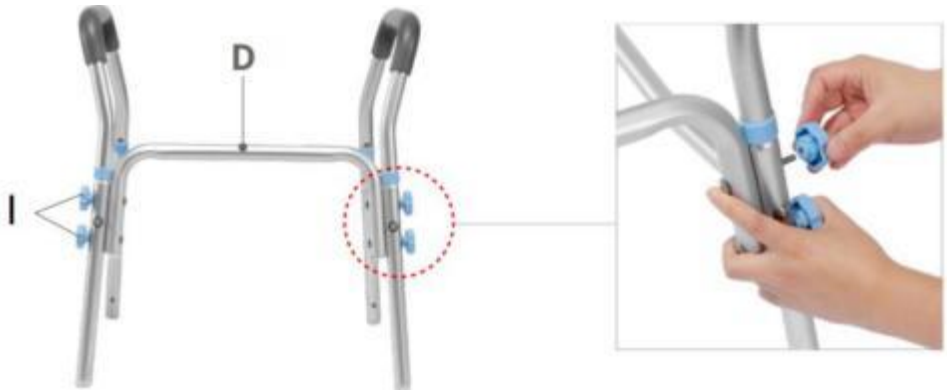

Step 4: Attach the Suction cup (Part #F) to the legs (Part #G), then insert the 4 legs into the connecting tubes as shown in the picture below

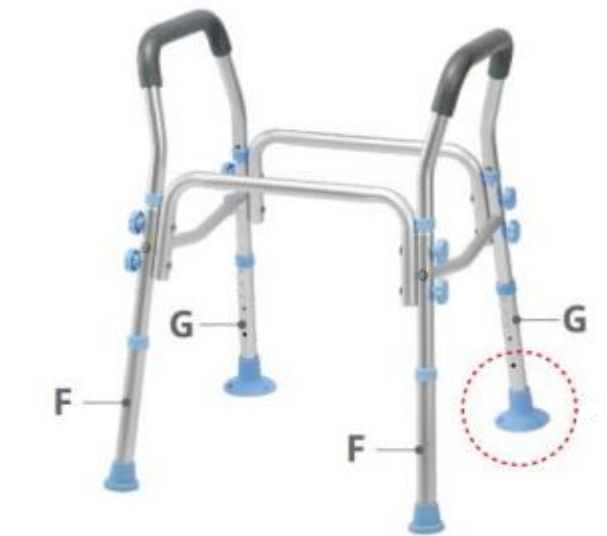


**Note:** Make sure all the Suction Cup legs are Lower 1 level than rubber tip leg.

**For example:** set the the rubber tip leg to 4, then you need to set the Suction Cup leg to 3.



Step 5: Finally secure the seat (Part #A) to the frame.

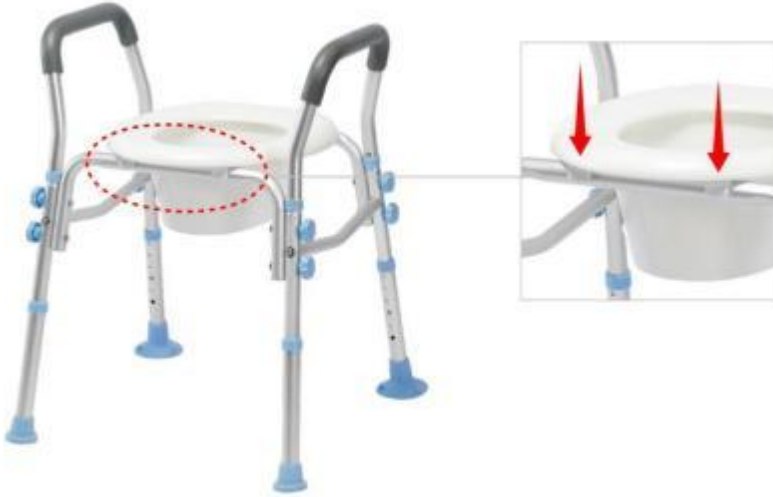

## MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.
3. To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

**Manufacturer:** HEALTH SOURCE MEDICAL EQUIPMENT (GUANGDONG) LTD.  
**Address:** 1st floor, No. 10 West Industrial Avenue, Haimai Industrial Zone, Gaohai Community, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, 528223, CHINA.  
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





## **Erzogen Toilette Sitz**

**Modell: XZY401**

Modell: XZY401



Das ist das Original Anweisung, Bitte alles lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, unserer Benutzer Handbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt Die Produkt Du erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere dich nochmal ob es Technologien oder Software gibt Updates zu unserem Produkt.





Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt, es sollte stets Sei mit Sorgfalt behandelt. Bitte Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit es. Die Informationen werden helfen Ihnen, das Beste zu erreichen möglich Ergebnisse .

## SPEZIFIKATION

Modell	laden	Höhe von Sitz zum Boden	Höhe von Armlehne zum Boden
XZY401	300 Pfund / 136 kg	470-590 mm	640-770 mm

## PACKAGE LIST



NEIN.	Name	Bild	MENGE
A	Sitz		1
B	ArMLEHNE		2
C	Verstärkt Querlatte		2
D	U -förmig Rohr		2
E	Beinverbindung Rohr		4
F	Bein mit Gummispitze		2
G	Bein mit Absaugung Tasse		2

H	M6 schrauben		4
ICH	Knopf mit schrauben		8
J	Verhexen Schlüssel		1
K	Handbuch		1

## ZURÜCKHALTEND

1. Stets Sei Sicher Das Die Sitz Ist korrekt Und sicher gesperrt In Ort vor verwenden.
2. Seien Sie sicher dass die Verriegelung von der Sitz ist jederzeit fest. Körperlich herausgefordert Benutzer sollen Sei beaufsichtigt oder unterstützt wer nie mit Das Produkt.
3. Der Toilettensitzerhöhung muss nicht Sei verwendet, um zu unterstützen mehr als 300 lbs. NICHT verwenden das Produkt überlastet. Gewicht des Benutzers sollte sein zentriert über dem Toilettensitz , nicht zu weit nach vorn oder zu weit zur Seite, da Einheit Mai Tipp.
4. Für Modelle mit Armlehnen: Der Waffen Sind für Die Zweck von Bereitstellung Hilfe beim Ein- und Aussteigen den Sitz. Versuchen Sie NICHT, die Arme zu verwenden , um die volle Körpergewicht t während der Übertragung, als Das Mai Ergebnis im Scheitern von Die Einheit und Risiko von Verletzung.

5. Alle Teile prüfen für Versand Schaden vor Montage . Wenn es Ist  
Versand Schaden - TUN NICHT VERWENDEN . Kontakt  
Händler/Spediteur für weitere

Anweisungen.

6. Stellen Sie sicher, dass die Höhe Einstellen Schnappschuss Schaltflächen voll vorstehen durch Die Dasselbe jeweiligen Loch von jede Bein Verlängerung. Das Wille sicherstellen dass die Bein Erweiterungen Sind sicher gesperrt In Position Und ein sogar Höhe erreicht ist.
7. Stellen Sie sicher, dass ALLE Flügelschrauben festgezogen sind.
8. Überprüfen Sie die Gummispitze s auf der Bein Erweiterungen für Risse, Verschleiß oder Wenn Sie Sind fehlen. Ersetzen Sie sofort alle oder wenn eine dieser Unvollkommenheiten existieren.
9. Alle vier Beinverlängerungen mit Gummispitzen MÜSSEN berühren Die Boden immer gleichzeitig .
10. TUN NICHT stehen auf Produkt.
11. Regelmäßig überprüfen für sicher Montage Und Kontakt Unterstützung Wenn In zweifeln. Stellen Sie sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind vor verwenden und abbrechen Verwendung, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlende Teile. Das Produkt ist Zu Sei gebraucht auf ebenem, stabilem Oberflächen . nicht zerlegen Wenn nicht notwendig, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen könnte . Nicht ändern Sie die Produkt sofern nicht anders angegeben im Handbuch.
12. Seien Sie bei Betrieb und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extremen Temperaturen oder offenen Flammen aus. Wenn eine Allergie Reaktion auftritt, aufhören sofort verwenden und einen Arzt aufsuchen Gesundheitspflege Professional.
13. Reinigen regelmäßig mit A leicht Waschmittel Und warm Wasser, spülen aus Seifenreste . Nach der Reinigung gründlich trocknen .
14. Bestätigen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Arzt Anbieter, der Die Produkt Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Die folgenden Richtlinien sind nicht A Ersatz für ärztlichen Rat einholen.
15. Dieses Produkt ist konzipiert für verwenden mit Die am meisten gemeinsam Typen von Kommoden. Es passt nicht für alle Toilettentypen; Sei Sicher Das Die Einheit Ist richtig installiert, passt richtig und Ist stabil vor verwenden.

## **ANWEISUNGEN**


Schritt 1: legen Sie die Beinverbindungsrohr (Teil #E) in die Armlehne (Teil B)



Schritt 2: Verwenden Sie die M6-Schraube (Teil #H) zur Befestigung des Verstärkte Querstange (Teil Nr. C) zum Beinverbindungsrohr .



Schritt 3: Verwenden Sie die U-förmige Rohre (Teil #D) zum Verbinden der Armlehnenrahmen auf beiden Seiten und Fixieren mit K nob (Teil 1)

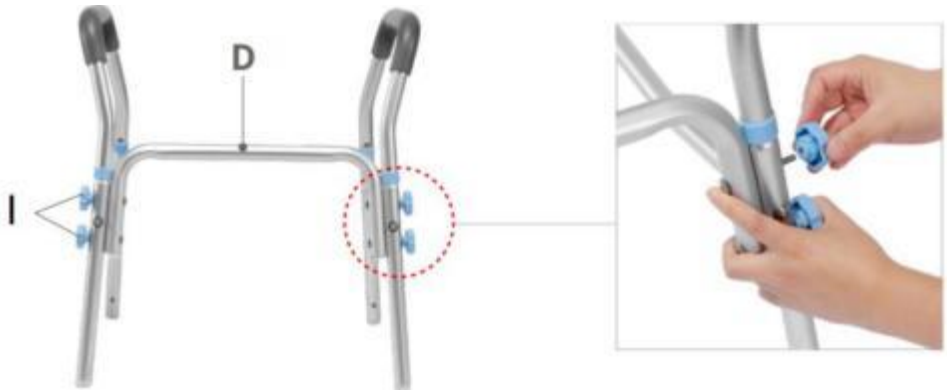

Schritt 4: Befestigen Sie den Saugnapf (Teil #F) an der Beine (Teil #G), dann einfügen die 4 Beine in die Verbindungsrohre wie gezeigt In Die Bild unten




**Notiz:** Stellen Sie sicher, dass alle Saugnäpfe Beine sind Untere 1 Ebene als Gummispitze Bein.

**Zum Beispiel:** Stellen Sie die Gummispitze des Beins auf 4, Dann Du brauchen Zu Satz Die Saugnapf Bein zu 3.



Schritt 5: Zum Schluss den Sitz sichern (Teil #A) Zu der Rahmen.

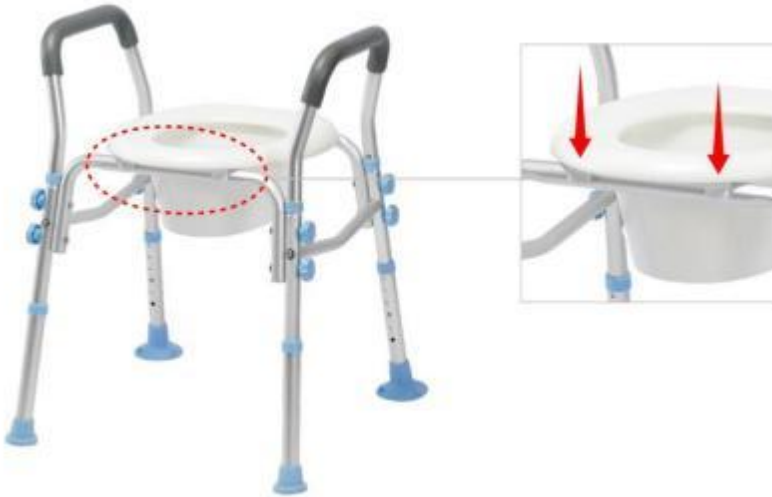

## WARTUNG

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG IST EMPFOHLEN, VERWENDEN EIN NICHT ABRASIVES REINIGER ODER WASCHMITTEL. Mit warmem Wasser abspülen UND TROCKEN

VOLLSTÄNDIG. SCHLEIFTÜCHER KANN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.

2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG IHRE WC-SITZERHÖHUNG MIT WAFFEN UND ES IST TEILE FÜR JEGLICHE KORROSION, BRUCH,

KOMPRESSION ODER VERSCHLEIß.

3. Um die Schönheit der ursprünglichen Oberfläche zu erhalten, reinigen Sie mit leicht Seife Und mit warmem Wasser abspülen.

Badesitz nach jedem verwenden.

**Hersteller:** GESUNDHEITSQUELLE MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG  
(GUANGDONG) GMBH.

**Adresse :** 1 . Stock , Nr . 10 Westen Industrie Allee , Haimai Industrie Zone ,  
Gaohai-Gemeinde , Danzao Stadt , Nanhai Bezirk , Foshan , Guangdong , 528223,  
CHINA . **Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importiert Zu USA :** Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



**Königreich  
REP**

YH-BERATUNG LIMITED. C/O YH Consulting  
Eingeschränktes Büro 147, Zenturio Haus,  
London

Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18  
4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Hauptsächlich.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Soulevé Toilettes Siège**

**Modèle : XZY401**

Modèle : XZY401



Ce est l'original instruction, s'il te plaît lire tout Lisez attentivement les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre utilisateur manuel. L'apparence du produit sera soumise à le produit toi reçu. S'il vous plaît pardonnez nous que nous ne le ferons pas vous informer à

nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci produit, il devrait toujours être manipulé avec soin. S'il te plaît lisez toutes les instructions avant en utilisant il. Le les informations seront vous aider à atteindre le meilleur possible résultats .

## SPÉCIFICATION

Modèle	charger	Hauteur à partir de du siège au sol	Hauteur à partir de accoudeur au sol
XZY401	300 livres / 136 kg	470-590 mm	640-770 mm

## PACKAGE LIST



Non.	Nom	Image	Qté
UN	Siège		1
B	Accoudoir		2
C	Renforcé barre transversale		2
D	en forme de U tube		2
E	Connexion des jambes tube		4
F	Jambe avec embout en caoutchouc		2
G	Jambe avec suction tasse		2

H	M6 vis		4
je	Bouton avec vis		8
J	Hex clé		1
K	Manuel		1

## PRUDENT

1. Toujours être bien sûr que le siège est correctement et en toute sécurité fermé dans lieu avant en utilisant.
2. Assurez-vous que le verrouillage de le siège est serré en permanence. Physiquement contesté utilisateurs devrait être supervisé ou assisté chaque fois que en utilisant ce produit.
3. Le siège de toilette surélevé doit pas être utilisé pour soutenir plus que 300 lb. NE PAS utiliser le produit est surchargé. Poids de l'utilisateur devrait être centré sur le siège des toilettes, ni trop en avant ni trop loin d'un côté, comme unité peut conseil.
4. Pour modèles avec accoudoirs: Le bras sont pour le but de fournir assistance à la montée et à la descente le siège. N'essayez PAS d'utiliser les accoudoirs pour soutenir complètement poids corporel t pendant le transfert, comme ce peut résultat en échec de le unité et risque de blessure.

5. Inspectez toutes les pièces pour expédition dommage avant assemblée . S'il y a est expédition dommage - FAIRE PAS UTILISER . Contact revendeur/transporteur pour plus d'informations

instructions.

6. Assurez-vous que le hauteur réglage instantané boutons pleinement dépasser à travers le même respectif trou de chaque jambe extension. Ce volonté assurer que le jambe extensions sont en toute sécurité fermé dans position et un même hauteur est atteint.
7. Assurez-vous que TOUTES les vis à oreilles sont serrées.
8. Vérifiez le embout en caoutchouc s sur le jambe extensions pour déchirures, usure ou si ils sont manquant. Remplacer immédiatement tout ou partie si l'une de ces imperfections exister.
9. Tous extensions à quatre jambes avec des embouts en caoutchouc DOIVENT toucher le étage simultanément à tout moment.
10. FAIRE NE PAS se tenir debout sur produit.
11. Régulièrement vérifier pour sécurisé assemblée et contact soutien si dans doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont uniformes et verrouillés avant utiliser, et cesser utilisation s'il y a des signes de usure, dommages ou pièces manquantes . Le produit est à être utilisé sur terrain plat et stable surfaces. Faire pas démonter si pas nécessaire, car cela pourrait compromettre la longévité du produit. Ne modifier le produit sauf indication contraire dans le manuel.
12. Soyez prudent lors de l'utilisation et du montage. Évitez températures extrêmes ou flammes nues. Si une personne allergique la réaction se produit, cesse utiliser immédiatement et consulter un soins de santé professionnel.
13. Nettoyer régulièrement en utilisant un bénin détergent et chaud eau, rincer désactivé tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
14. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de la santé fournisseur qui le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne sont pas un substitut de conseils médicaux.
15. Ce produit est conçu pour utiliser avec le la plupart commun types de commodes. Il ne conviendra pas à tous types de commodes; être bien sûr que le unité est correctement installé, s'adapte correctement et est écurie avant utiliser.

## INSTRUCTIONS


Étape 1 : insérer le Tube de connexion de jambe (pièce n° E) dans le Accoudoir (Partie #B)




Étape 2 : Utilisez le Vis M6 (pièce n° H) pour fixer le Barre transversale renforcée (pièce n° C) au tube de connexion des jambes.



Étape 3 : Utilisez le Tubes en U (pièce n° D) pour relier les cadres d'accoudoirs des deux côtés et les fixer avec Bouton K (Partie #1)

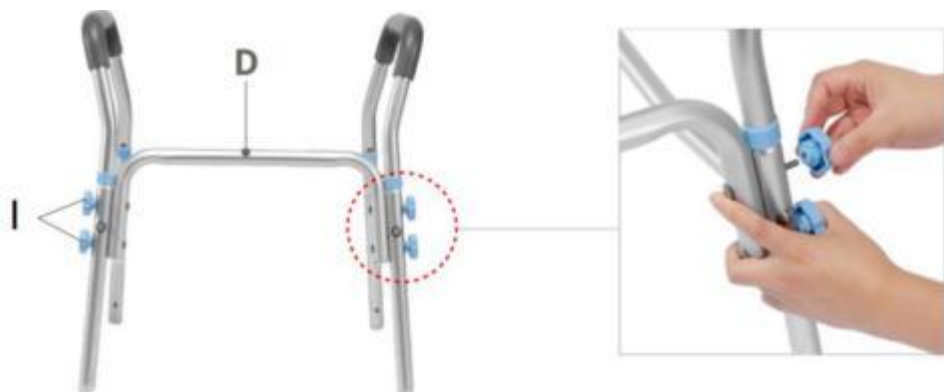

Étape 4 : Fixez la ventouse (pièce n° F) au jambes (Partie #G), alors insérer les 4 pattes dans les tubes de connexion comme montré dans le image ci-dessous

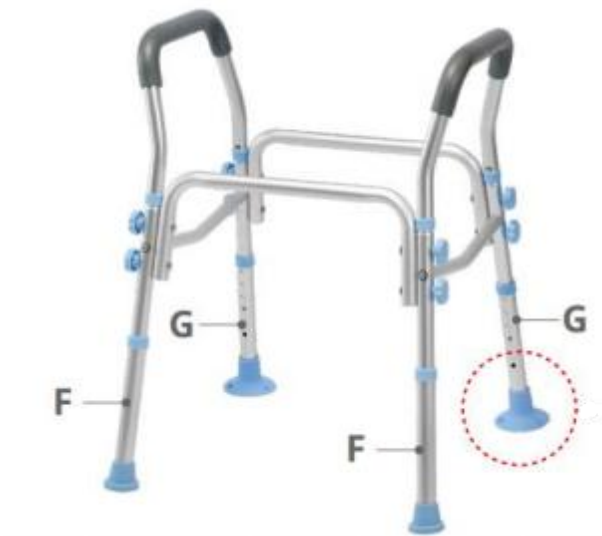


**Note:** Assurez-vous que toutes les ventouses les jambes sont Inférieur 1 niveau que embout en caoutchouc jambe.

**Par exemple :** réglez l'embout en caoutchouc sur 4, alors toi besoin à ensemble le Ventouse jambe à 3.



Étape 5 : Fixez enfin le siège (Pièce n°A) à le cadre.

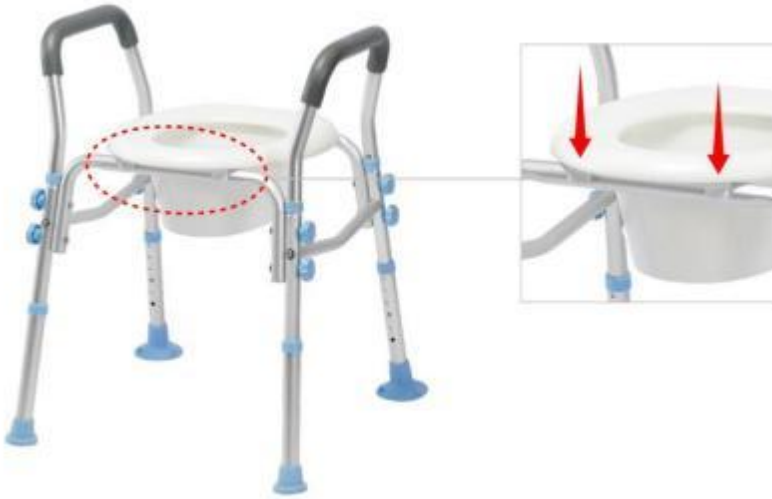

## ENTRETIEN

1. NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ, UTILISER UN NON ABRASIF NETTOYANT OU DÉTERGENT. RINCER À L'EAU TIÈDE ET SEC

COMPLÈTEMENT. CHIFFONS ABRASIFS PEUT ENDOMMAGER LA SURFACE.

2. S'IL VOUS PLAÎT INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC BRAS ET C'EST PARTIES POUR TOUTE CORROSION, CASSE,

COMPRESSION OU USURE.

3. Pour conserver la beauté de la finition d'origine, nettoyez avec bénin savon et rincer à l'eau tiède. Essuyer le siège de la baignoire après chaque utiliser.

**Fabricant:** SOURCE DE SANTÉ ÉQUIPEMENT MÉDICAL (GUANGDONG) SARL.

**Adresse :** 1 er étage , non . 10 Ouest Industriel Avenue , Haïmaï Industriel Zone , Communauté de Gaohai , Danzao Ville , Nanhai District , Foshan , Guangdong , 528223, CHINE . **Importé en AUS :** SIHAO SARL PTY 1 RUE ROKEVA, EASTBOIS

NSW 2122 Australie

**Importé à États-Unis :** Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place , Rancho Cucamonga , Californie 91730



YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting  
Bureau limité 147, Centurion Maison, Londres  
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**REPRÉSENTANT**



E-CrossStu GmbH  
Mayence Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main Principal.

**TANT**



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Uniesiony Toaleta Siedziba**

**Model: XZY401**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone  
siedzisko sedesowe

Model: XZY401



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi . VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji. naszego użytkownik

instrukcja. Wygląd produktu podlega ten produkt Ty otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje naszego produktu.

Dziękuję bardzo za wybór tego produkt, powinien zawsze Być obchodzić się z ostrożnością. Proszę przeczytaj wszystkie instrukcje przed używając To. Ten informacje będą pomóc Ci osiągnąć to, co najlepsze możliwy wyniki .

## SPECYFIKACJA

Model	obciążenie	Wysokość od od siedzenia do podłogi	Wysokość od podłokietnik do podłogi
XZY401	300 funtów / 136 kg	470-590 mm	640-770 mm

## PACKAGE LIST



NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Siedziba		1
B	Podłokietnik		2
C	Wzmocniony poprzeczka		2
D	W kształcie litery U rura		2
mi	Połączenie nóg rura		4
F	Noga z gumowa końcówka		2
G	Noga z ssanie filiżanka		2

H	M6 śruba		4
I	Gałka z śruba		8
J	Kłątwa klawisz		1
K	Podręcznik		1

## OSTROŻNY

1. Zawsze Być Jasne To ten siedziba Jest prawidłowo I bezpiecznie zamknięty W miejsce zanim używając.
2. Upewnij się że blokowanie siedzenie jest cały czas ciasne. Fizycznie wyzwany użytkownicy powinien Być nadzorowany Lub wspomagany zawsze , gdy używając Ten produkt.
3. Ten podwyższone siedzisko sedesowe musieć nie Być używany do wspierania więcej niż 300 funtów. NIE używać Produkt przeciążony. Waga użytkownika powinno być umieszczony centralnie nad deską sedesową, nie za bardzo do przodu ani za bardzo na bok, jak jednostka móc wskazówka.
4. Dla modele z podłokietniki: Ten herb Czy Do ten zamiar z że pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu siedzisko. NIE próbuj używać podłokietników do podtrzymywania pełnego masa ciała t podczas transferu, Jak Ten móc wynik w porażce z ten jednostka i ryzyko obrażenia.

5. Sprawdź wszystkie części Do wysyłka szkoda zanim montaż . Jeśli tam Jest wysyłka szkoda - DO NIE UŻYWAĆ . Kontakt dealera/przewoźnika w celu uzyskania dalszych informacji

instrukcje.

6. Upewnij się, że wysokość naregulowanie pstryknąć pikolak w pełni wystawać Poprzez ten To samo poszczególne otwór z każdy le g rozszerzenie. Ten będzie zapewnić że noga rozszerzenia Czy bezpiecznie zamknięty W pozycja I jakiś nawet wysokość został osiągnięty.

7. Upewnij się, że WSZYSTKIE śruby motylkowe są dokręcone.

8. Sprawdź gumowa końcówka s na noga rozszerzenia dla rozdarcia, zużycie Lub Jeśli Oni Czy zaginiony. Natychmiast wymień wszystkie lub niektóre jeśli któraś z tych niedoskonałości istnieje.

9. Wszystko wyprosty czterech nóg z gumowymi końcówkami MUSZĄ się stykać ten podłogi jednocześnie przez cały czas.

10. ZROBIĆ NIE stanąć na produkt.

11. Regularnie sprawdzać Do bezpieczny montaż I kontakt wsparcie Jeśli W wątpliwość. Upewnij się, że nogi produktu są równe i zablokowane zanim używać i zaprzestać stosowania, jeśli występują oznaki zużycie, uszkodzenia lub brak części . Produkt jest Do Być używany na płaskim, stabilnym twarze . Zrób nie demontować Jeśli nie niezbędny, ponieważ może to wpłynąć na trwałość produktu. Nie modyfikować produkt chyba że określono inaczej w instrukcji.

12. Zachowaj ostrożność podczas obsługi i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. Jeśli jesteś alergikiem reakcja następuje, ustaje natychmiast zużyć i skonsultować się z lekarzem opieka zdrowotna profesjonalny.

13. Czyszczenie regularnie używając A łagodny detergent I ciepły woda, płukanie wyłączony resztki mydła . Po oczyszczeniu dokładnie wysuszyć.

14. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem dostawca, który ten produkt spełnia Twoje specyficzne potrzeby. Poniższe wytyczne nie są A zastąpić porada lekarska.

15. Ten produkt jest zaprojektowany dla używać z ten bardzo wspólny typy z komody. Nie zmieści się we wszystkich rodzaje komód; Być Jasne To ten jednostka Jest prawidłowo zainstalowany, pasuje prawidłowo i Jest stabilny zanim używać.

## INSTRUKCJE


Krok 1: włożyć Rurka łącząca nogi (część nr E) do Podłokietnik (Część #B)




Krok 2: Użyj Śruba M6 (część nr H) do mocowania Wzmocniona poprzeczka (część C) do rury łączącej nogi .



Krok 3: Użyj Rury w kształcie litery U (część D) do łączenia ram podłokietników po obu stronach i mocowania ich za pomocą K nob (Część #I)

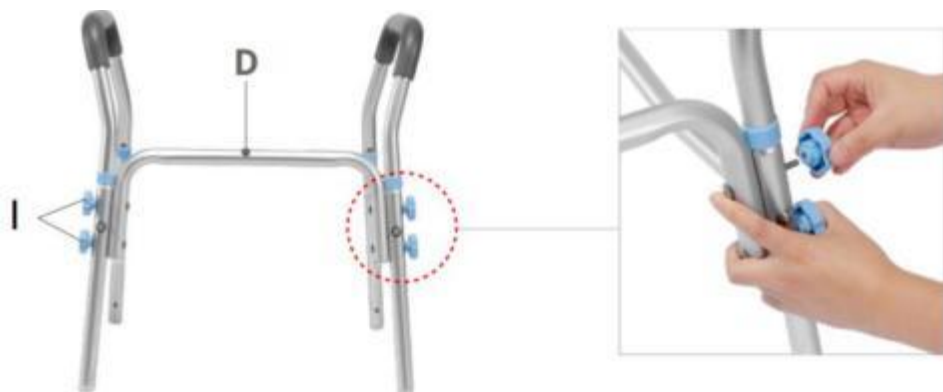

Krok 4: Przymocuj miskę ssącą (część nr F) do nogi (Część #G), następnie wstawić 4 nogi do rur łączących jako pokazano W ten zdjęcie poniżej

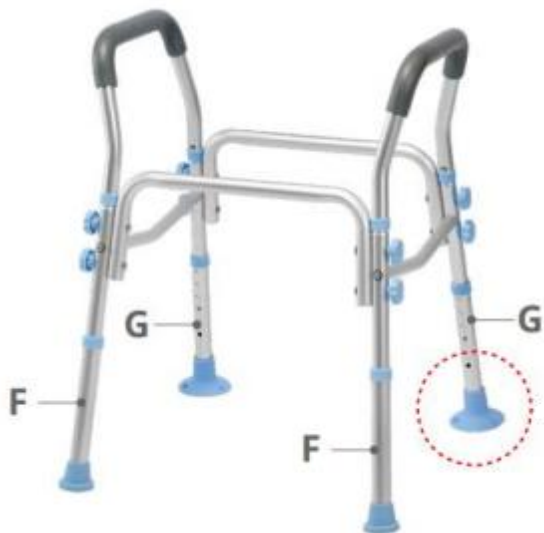

**Notatka:** Upewnij się, że wszystkie przyssawki nogi są Niżej 1 poziom niż gumowa końcówka noga.

**Na przykład:** ustaw gumową końcówkę nogi na 4, Następnie Ty potrzebować Do ustawić ten Przyssawka noga do 3.



Krok 5: Na koniec zabezpiecz siedzenie (część A) Do rama.



## KONSERWACJA

1. REGULARNE CZYSZCZENIE JEST ZALECONY, UŻYWAĆ NIEŚCIERNY CZYSTSZY LUB DETERGENT. SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I SUCHY

CAŁKOWICIE. Płótna ścierne MOŻE USZKODZIĆ SURFACE.

2. PROSZĘ REGULARNIE SPRAWDZAJ SWOJE PODWYŻSZONE SIEDZENIE TOALETOWE Z HERB I JEGO STRONY DLA JAKIEKOLWIEK KOROZJE, USZKODZENIA, KOMPRESJA LUB ZUŻYCIE.

3. Aby zachować piękno oryginalnego wykończenia, należy czyścić za pomocą łagodny mydło I Spłucz ciepłą wodą. Wytrzyj siedzisko do sucha po każdym użyciu. używać.

**Producent:** ŹRÓDŁO ZDROWIA SPRZĘT MEDYCZNY (GUANGDONG)  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Adres :** 1. miejsce piętro , nr . 10 Zachód Przemysłowy Aleja , Haimai  
Przemysłowy Strefa , Społeczność Gaohai , Danzao Miasto , Nanhai Dzielnica ,  
Foshan , Guangdong , 528223, CHINY . **Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD.  
1 ROKEVA STRETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

**Importowany Do Stany Zjednoczone :** Sanven Technologia Sp . z  
o.o. Apartament 250, 9166 Anaheim Place , Rancho Cucamonga ,  
Kalifornia 91730



**ROZPUST  
NIK**

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ C/O YH Consulting  
Biuro Ograniczone 147, Centurion Dom, Londyn  
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**ROZPUST  
NIK**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Główny.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Verhoogd Toilet Stoel**

**Model: XZY401**

**Model: XZY401**



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie voor van onze gebruiker handleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product Jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over ons product.






Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen product, het zou moeten altijd zijn met zorg behandeld. Alsjeblieft Lees alle instructies voordat u met behulp van het. De informatie zal u helpen het beste te bereiken mogelijk resultaten .

## SPECIFICATIE

Model	laden	Hoogte vanaf stoel tot vloer	Hoogte vanaf armléuning tot vloer
XZY401	300 pond / 136 kg	470-590 mm	640-770 mm

## PACKAGE LIST



Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
A	Stoel		1
B	Armsteun		2
C	Versterkt dwarsbalk		2
D	U -vormig buis		2
E	Beenverbinding buis		4
F	Been met rubberen punt		2
G	Been met zuiging beker		2

H	M6 schroef		4
I	Knop met schroef		8
J	Hex sleutel		1
K	Handmatig		1

## VOORZICHTIG

1. Altijd zijn Zeker Dat de stoel is correct En veilig vergrendeld in plaats voor gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van de stoel zit altijd strak. Fysiek uitgedaagd gebruikers zou moeten zijn begeleid of bijgestaan wanneer nooit met behulp van dit product.
3. De verhoogde toiletzitting moeten niet zijn gebruikt ter ondersteuning meer dan 300 lbs. NIET gebruiken het product is overbelast. Gewicht van de gebruiker zou moeten zijn gecentreerd boven de toiletbril , niet te ver naar voren of te ver naar één kant, zoals eenheid kunnen tip.
4. Voor modellen met arMLEUNINGEN: De armen Zijn voor de doel van voorzien hulp bij het in- en uitstappen de stoel. Probeer NIET de armen te gebruiken om de volledige lichaamSGEWICHT t tijdens de overdracht, als dit kunnen resultaat in mislukking van de eenheid en risico op blessure.

5. Inspecteer alle onderdelen voor verzending schade voor montage .  
Als er is verzending schade - DOEN NIET GEBRUIK . Contact  
dealer/vervoerder voor meer informatie

instructies.

6. Zorg ervoor dat de hoogte aanpassen klikken knoppen volledig uitsteken door de dezelfde respectievelijke gat van elk been verlenging. Dit zullen ervoor zorgen dat de been extensies Zijn veilig vergrendeld in positie En een zelfs hoogte wordt bereikt.

7. Zorg ervoor dat ALLE duimschroeven zijn vastgedraaid.

8. Controleer de rubberen punt s op de been extensies voor scheuren, slijtage of als zij Zijn vermist. Vervang onmiddellijk een of alle als een van deze onvolkomenheden bestaan.

9. Alle vier beenstrekkings met rubberen punten MOETEN elkaar raken de vloer tegelijkertijd te allen tijde .

10. DO NIET op staan product.

11. Regelmatig rekening voor zeker montage En contact steun als in twijfel. Zorg ervoor dat de poten van het product gelijk en vergrendeld zijn voor gebruik, en stopzetten gebruik als er tekenen zijn van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen. Het product is naar zijn gebruikt op vlakke, stabiele oppervlakte . Doen niet demonteren als niet nodig, omdat dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Niet doen wijzigen de product tenzij anders vermeld in de handleiding.

12. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en de montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Als u allergisch bent reactie treedt op, stop onmiddellijk gebruiken en een arts raadplegen gezondheidszorg professioneel.

13. Schoonmaken regelmatig met behulp van A mild wasmiddel En warm water, afspoelen uit een eventuele zeeprest. Na het schoonmaken goed laten drogen .

14. Controleer voor gebruik met uw zorgverlener aanbieder die de product voldoet aan uw specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn niet A vervanger voor medisch advies.

15. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meest gewoon typen van commodes. Het past niet overal. soorten toiletten; zijn Zeker Dat de eenheid is correct geïnstalleerd, past goed en is stabiel voor gebruik.

## **INSTRUCTIES**


Stap 1: plaats de Beenverbindingsbuis (onderdeel #E) in de Armsteun  
(Deel #B)




Stap 2: Gebruik de M6-schroef (onderdeel #H) om de Versterkte dwarsbalk (onderdeel #C) aan de pootverbindingsbuis .



Stap 3: Gebruik de U-vormige kuipen (onderdeel #D) om de armleuningframes aan beide zijden te verbinden en vast te zetten K nob (Deel #I)

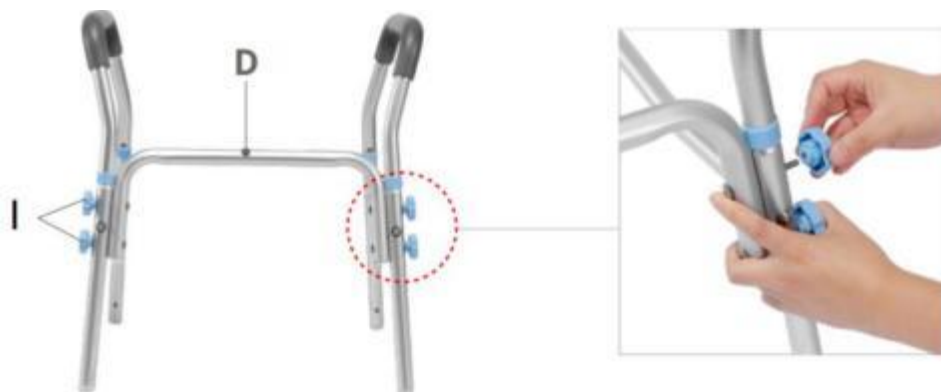

Stap 4: Bevestig de zuignap (onderdeel #F) aan de benen (Deel #G), dan invoegen de 4 poten in de verbindingsbuizen als getoond in de afbeelding onderstaand

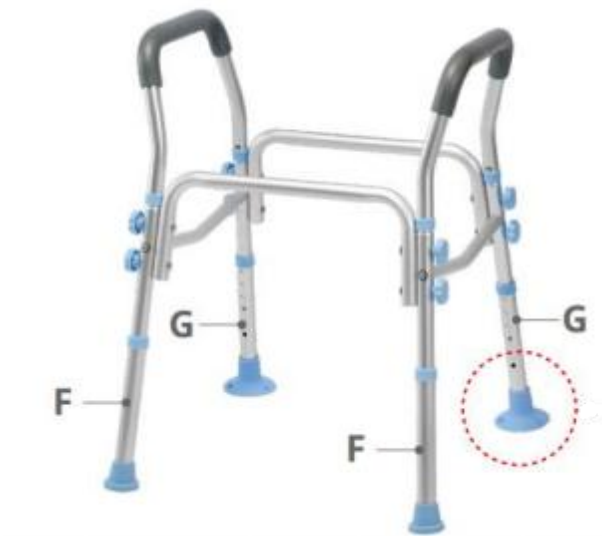


**Opmerking:** Zorg ervoor dat alle zuignappen benen zijn Lager 1 niveau dan rubberen punt been.

**Bijvoorbeeld:** zet de rubberen punt van de poot op 4, Dan Jij behoefte naar set de Zuignap been naar 3.



Stap 5: Bevestig ten slotte de stoel (onderdeel #A) naar het frame.

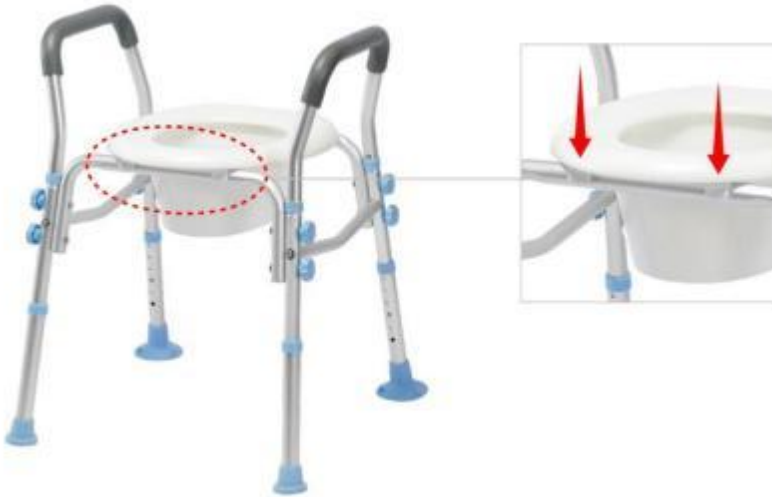

## ONDERHOUD

1. REGELMATIGE SCHOONMAAK IS AANBEVOLEN, GEBRUIK EEN NIET-SCHUREND SCHOONMAKER OF WASMIDDEL. SPOELEN MET WARM WATER EN DROOG VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.
2. ALSTUBLIEFT INSPECTEER REGELMATIG UW Verhoogde toiletzitting met WAPENS EN ZIJN ONDERDELEN VOOR ELKE CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE OF SLIJTAGE.
3. Om de schoonheid van de originele afwerking te behouden, reinigt u met mild zeep En Spoel af met warm water. Veeg de badzitting na elke wasbeurt droog. gebruik.

**Fabrikant:** GEZONDHEIDSBRON MEDISCHE APPARATUUR (GUANGDONG) BV.

**Adres :** 1e verdieping , nr . 10 West Industrieel Laan , Haimai Industrieel Zone , Gaohai-gemeenschap , Danzao Dorp , Nanhai Wijk , Foshan , Guangdong , 528223, CHINA . **Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar VS :** Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730

<b>VK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Beperkt kantoor 147, Centurion Huis, Londen  
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EG</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Voornaamst.





## **Aumentó Baño Asiento**

**Modelo: XZY401**

Modelo: XZY401



Este es el original instrucción, por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretarlo. de nuestro usuario manual. La apariencia del producto estará sujeta a el producto tú recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones de nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esto. producto, debería siempre ser Manejado con cuidado. Por favor Lea todas las instrucciones antes usando eso. El La información será ayudarle a lograr lo mejor posible resultados .

## ESPECIFICACIÓN

Modelo	carga	Altura desde del asiento al suelo	Altura desde apoyabrazos al suelo
XZY401	300 libras / 136 kilogramos	470-590 milímetros	640-770 milímetros

## PACKAGE LIST



No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
A	Asiento		1
B	Brazo		2
do	Reforzado travesaño		2
D	En forma de U tubo		2
mi	Conexión de piernas tubo		4
F	Pierna con punta de goma		2
GRAMO	Pierna con succión taza		2

H	M6 tornillo		4
I	Perilla con tornillo		8
J	Maleficio llave		1
K	Manual		1

## PRECAVIDO

1. Siempre ser seguro eso el asiento es correctamente y con seguridad bloqueado en lugar antes usando.
2. Asegúrate que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento. Físicamente desafiado usuarios debería ser supervisado o asistido cuando sea usando este producto.
3. El asiento de inodoro elevado debe no ser utilizado para apoyar más que 300 libras NO usar El producto está sobrecargado. Peso del usuario. Debería ser centrado sobre el asiento del inodoro, Ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia un lado, como unidad puede consejo.
4. Para modelos con apoyabrazos: El brazos son para el objetivo de siempre que asistencia al subir y bajar el asiento. NO intente usar los brazos para sostener completamente peso corporal t durante la transferencia, como este puede resultado en el fracaso de el unidad y riesgo de lesión.

5. Inspeccione todas las piezas para envío daño antes asamblea . Si hay es envío daño - HACER NO USAR . Contacto distribuidor/transportista para más información

instrucciones.

6. Asegúrese de que el altura ajustando quebrar botones completamente sobresalir a través de el mismo respectivo agujero de cada pierna extensión. Este voluntad asegurar que el pierna extensiones son de forma segura bloqueado en posición y un incluso altura se logra

7. Asegúrese de que TODOS los tornillos de mariposa estén bien apretados.

8. Comprueba el punta de goma s en el pierna extensiones para rasgaduras, desgaste o si ellos son desaparecido. Reemplace inmediatamente cualquiera o todos Si alguna de estas imperfecciones existir.

9. Todo extensiones de cuatro patas con puntas de goma DEBE tocar el piso simultáneamente en todo momento .

10. HACER NO pararse sobre producto.

11.Regularmente controlar para seguro asamblea y contacto apoyo si en duda. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas. antes uso, y discontinuar uso si hay signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto es a ser usado en plano, estable superficies . Hacer no desmontar si no necesario, ya que podría comprometer la longevidad del producto. No modificar el producto a menos que se especifique en el manual.

12. Tenga cuidado durante la operación y el montaje. Evite temperaturas extremas o llamas abiertas. Si es alérgico se produce la reacción, cesa Úselo inmediatamente y consulte a un médico. cuidado de la salud profesional.

13.Limpiar regularmente usando a leve detergente y cálido agua, enjuagar apagado cualquier residuo de jabón . Después de limpiar, secar completamente.

14.Antes de usar, confirme con su médico. proveedor que el El producto se ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no son a sustituto de consejo médico.

15.Este producto es Diseñado para usar con el mayoría común tipos de inodoros. No caben todos tipos de inodoros; ser seguro eso el

unidad es correctamente instalado, encaja correctamente y es estable antes usar.

## **INSTRUCCIONES**


Paso 1: Insertar el Tubo de conexión de la pata (pieza n.º E) en el Brazo (Parte #B)




Paso 2: Utilice el Tornillo M6 (pieza n.º H) para asegurar el Barra transversal reforzada (Pieza #C) al tubo de conexión de la pata.



Paso 3: Utilice el Tubos en forma de U (Pieza #D) para conectar los marcos de los apoyabrazos en ambos lados y fijarlos con Perilla (Parte #I)

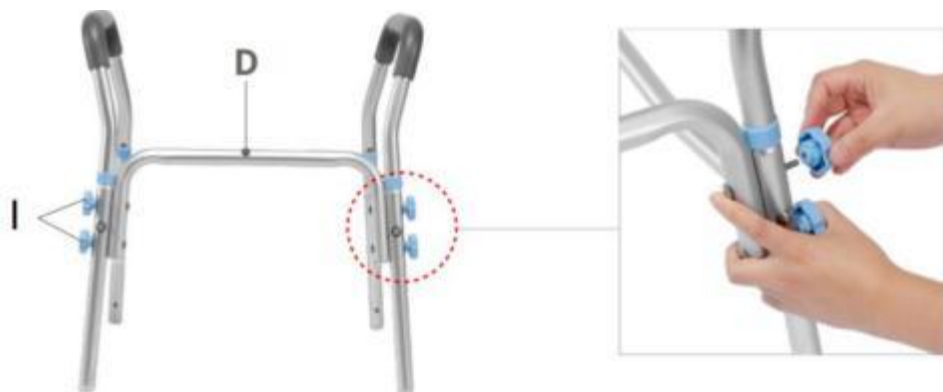

Paso 4: Coloque la ventosa (pieza n.º F) en la piernas (Parte #G), entonces insertar las 4 patas en los tubos de conexión como mostrado en el imagen abajo

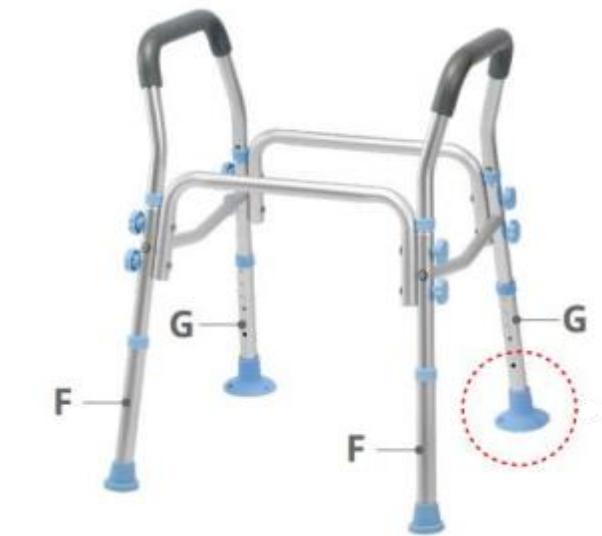


**Nota:** Asegúrese de que todas las ventosas las piernas son Más bajo 1 nivel que punta de goma pierna.

**Por ejemplo:** configure la pata con punta de goma en 4, entonces tú necesidad a colocar el Ventosa pierna a 3.



Paso 5: Finalmente asegure el asiento (Parte #A) a el marco.

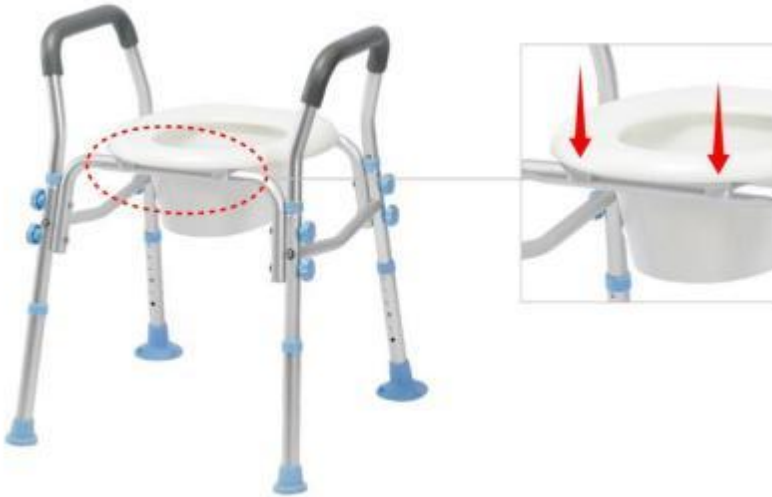

## MANTENIMIENTO

1. LIMPIEZA REGULAR ES RECOMENDADO, USAR UN NO ABRASIVO LIMPIADOR O DETERGENTE. ENJUAGUE CON AGUA TIBIA Y SECO

COMPLETAMENTE. PAÑOS ABRASIVOS PUEDE DAÑAR LA SUPERFICIE.

2. POR FAVOR INSPECCIONE SU PERIÓDICAMENTE ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y ES REGIONES PARA CUALQUIER CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.

3. Para mantener la belleza del acabado original, limpie con leve jabón y Enjuague con agua tibia. Seque el asiento de la bañera después de cada uso. usar.

**Fabricante:** FUENTE DE SALUD EQUIPO MÉDICO (GUANGDONG) LIMITADO.

**DIRECCIÓN :** 1º piso , no . 10 Oeste Industrial Avenida , Haimai Industrial Zona , Comunidad de Gaohai , Danzao Ciudad , Nanhai Distrito , Foshan , Guangdong , 528223, CHINA . **Importado a AUS:** SIHAO Compañía Limitada. 1 CALLE ROKEVA EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

**Importado a EE.UU :** Sanven Tecnología Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



**REPS**

YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH

Consulting Oficina limitada 147, Centurión Casa, Londres

Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Maguncia Calle principal 69,

60329 Fráncfort del Meno Principal.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **Sollevato Toilette Posto a sedere**

**Modello: XZY401**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## Sedile del water rialzato

**Modello: XZY401**



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente

manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a IL prodotto Voi ricevuto.  
Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo se ci sono  
tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto, dovrebbe Sempre Essere maneggiato con cura. Per favore leggere tutte le istruzioni prima usando esso. Il le informazioni saranno ti aiutiamo a raggiungere il meglio possibile risultati .

## SPECIFICHE

Modello	carico	Altezza da dal sedile al pavimento	Altezza da bracciolo al pavimento
XZY401	300 libbre / 136 chili	470-590 millimetri	640-770 millimetri

## PACKAGE LIST



NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
UN	Posto a sedere		1
B	Bracciolo		2
C	Rinforzato traversa		2
D	a forma di U tubo		2
E	Collegamento delle gambe tubo		4
F	Gamba con punta di gomma		2
G	Gamba con aspirazione tazza		2

H	M6 vite		4
IO	Manopola con vite		8
J	Esagono chiave		1
K	Manuale		1

## CAUTO

1. Sempre Essere Sicuro Quello IL posto a sedere È correttamente E in modo sicuro bloccato In posto Prima utilizzando.
2. Assicurati che il bloccaggio di il sedile è sempre stretto. Fisicamente sfidato utenti Dovrebbe Essere supervisionato O assistito ogni volta usando Questo prodotto.
3. IL sedile del water rialzato dovere non Essere utilizzato per supportare Di più di 300 libbre. NON usare il prodotto è sovraccarico. Peso dell'utente dovrebbe essere centrato sul sedile del water, non troppo avanti o troppo di lato, come unità Maggio mancia.
4. Per modelli con braccioli: IL braccia Sono per IL scopo Di fornendo assistenza per salire e scendere il sedile. NON cercare di usare i braccioli per sostenere completamente peso corporeo t durante il trasferimento, COME Questo Maggio risultato in fallimento Di IL unità e rischio di infortunio.

5. Ispezionare tutte le parti per spedizione danno Prima asino embly.  
Se c'è È spedizione danno - FARE NON UTILIZZO . Contatto  
rivenditore/trasportatore per ulteriori informazioni

istruzioni.

6. Assicurarsi che il altezza regolazione affrettato pulsanti completamente sporgere Attraverso IL Stesso rispettivo buco Di ogni gamba estensione. Questo Volere garantire che il gamba estensioni Sono in modo sicuro bloccato In posizione E UN Anche altezza è raggiunto.

7. Assicurarsi che TUTTE le viti a testa zigrinata siano serrate.

8. Controlla il punta di gomma s sul gamba estensioni per strappi, usura O Se Essi Sono mancante. Sostituire immediatamente uno o tutti se una qualsiasi di queste imperfezioni esistere.

9. Tutto estensioni a quattro gambe con punte in gomma DEVONO toccare IL pavimento simultaneamente in ogni momento.

10. FARE NON stare in piedi prodotto.

11. Regolarmente controllo per sicuro assemblaggio E contatto supporto Se In dubbio. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate Prima usare e interrompere utilizzo se ci sono segni di usura, danni o parti mancanti . Il prodotto è A Essere usato su piano, stabile superfici . Fare non smontare Se non necessario, poiché potrebbe compromettere la longevità del prodotto. Non modificare il prodotto salvo diversa indicazione nel manuale.

12. Prestare attenzione durante il funzionamento e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. Se un allergico si verifica una reazione, cessa usare immediatamente e consultare un assistenza sanitaria professionale.

13. Pulisci regolarmente usando UN blando detergente E Caldo acqua, risciacquo spento qualsiasi residuo di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.

14. Prima dell'uso, consultare il proprio medico fornitore che IL il prodotto soddisfa le tue esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sono UN sostituire consulenza medica.

15. Questo prodotto è progettato per utilizzo con IL maggior parte comune tipi Di comò. Non si adatta a tutti tipi di comò; Essere Sicuro Quello IL unità È installato correttamente, si adatta correttamente e È stabile Prima utilizzo.

## **ISTRUZIONI**


Fase 1: inserire il Tubo di collegamento della gamba (parte n. E) nel Bracciolo (Parte #B)




Fase 2: Utilizzare il Vite M6 (parte n. H) per fissare il Barra trasversale rinforzata (parte n. C) per il tubo di collegamento della gamba.



Fase 3: Utilizzare il Tubi a forma di U (parte #D) per collegare i telai dei braccioli su entrambi i lati e fissarli con K nob (Parte #1)

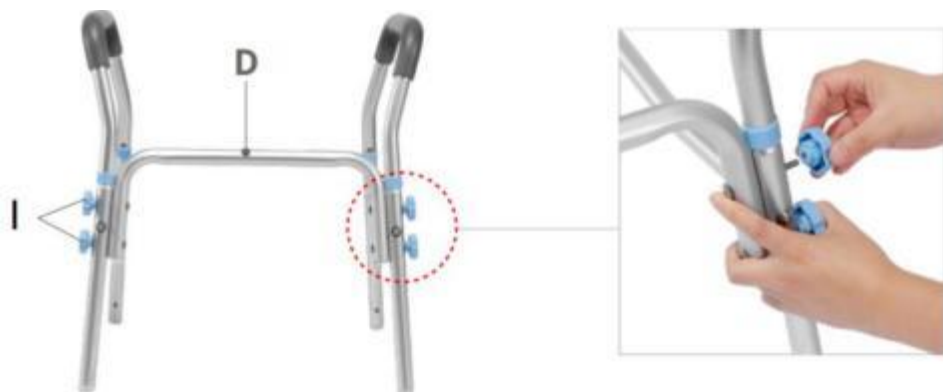

Fase 4: Fissare la tazza Sucti on (parte #F) al gambe (Parte #G), quindi inserire le 4 gambe nei tubi di collegamento come mostrato In IL immagine sotto

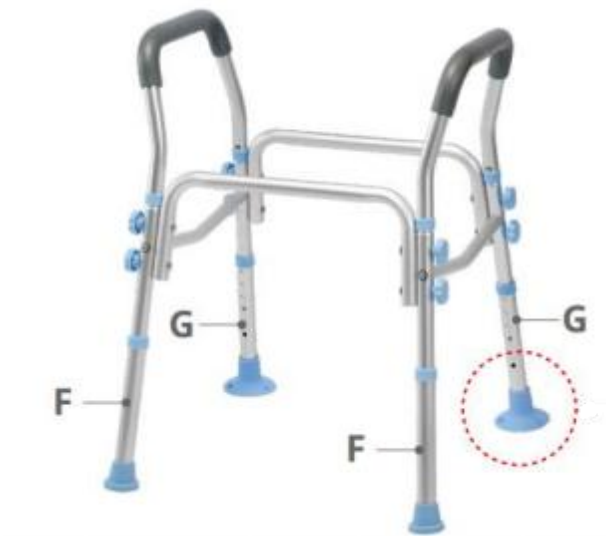


**Nota:** Assicurati che tutte le ventose le gambe sono Inferiore 1 livello di punta di gomma gamba.

**Ad esempio:** impostare la punta in gomma della gamba su 4, Poi Voi Bisogno A impostato IL Ventosa gamba a 3.



Fase 5: Infine fissare il sedile (Parte #A) A la cornice.

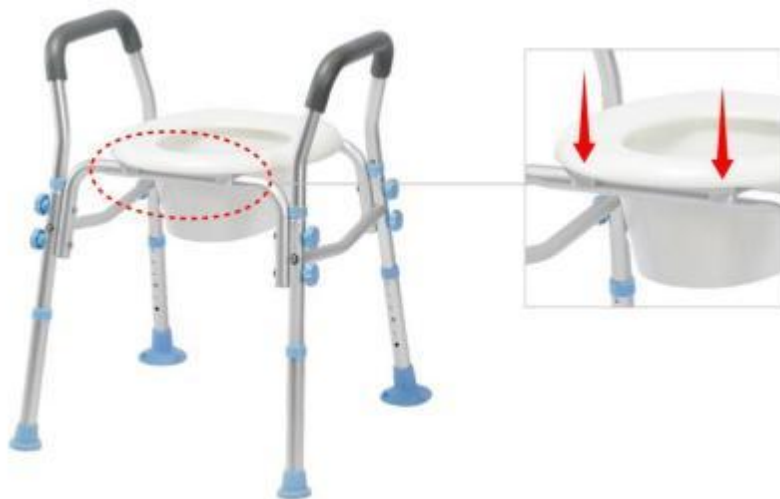

## MANUTENZIONE

1. PULIZIA REGOLARE È RACCOMANDATO, UTILIZZO NON ABRASIVO PULITORE O DETERGENTE. RISCIACQUARE CON ACQUA TIEPIDA E ASCIUTTO

COMPLETAMENTE. PANNI ABRASIVI POTREBBE DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.

2. PER FAVORE CONTROLLA REGOLARMENTE IL TUO SEDILE WC RIALZATO CON BRACCIA E SUO PARTI PER QUALSIASI CORROSIONE, ROTTURA, COMPRESSIONE O USURA.

3. Per mantenere la bellezza della finitura originale, pulire con blando sapone E risciacquare con acqua tiepida. Asciugare il sedile della vasca da bagno dopo ogni utilizzo.

**Produttore:** FONTE DI SALUTE ATTREZZATURE MEDICHE (GUANGDONG) LTD.

**Indirizzo :** 1 ° piano , n . 10 Ovest Industriale Viale , Haimai Industriale Zona , Comunità Gaohai , Danzao Città , Nanhai Distretto , Foshan , Guangdong , 528223, CINA . **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato A Stati Uniti :** Sanven Tecnologia Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



YH CONSULTING LIMITATA. C/O YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurione Casa, Londra

**RAPPRESENTANTE**

Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Magonza Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno Principale.

**RAPPRESENTANTE**





## **Upphöjd Toalett Plats**

**Modell: XZY401**

Modell: XZY401



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla Läs noggrant igenom instruktionerna i handboken innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning. av våra användare manual. Produktens utseende ska vara föremål för de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.







Tack så mycket för att du valde detta produkt, den borde alltid vara hanteras med varsamhet. Behaga läs alla instruktioner innan använder det. Den informationen kommer hjälpa dig att uppnå det bästa möjlig resultat .

## SPECIFIKATION

Modell	ladda	Höjd från säte till golv	Höjd från armstöd till golv
XZY401	300 pund / 136 kg	470–590 mm	640–770 mm

## PACKAGE LIST



Inga.	Namn	Bild	ANTAL
En	Plats		1
B	Armstöd		2
C	Förstärkt tvärstång		2
D	U -formad rör		2
E	Benanslutning rör		4
F	Ben med gummispets		2
G	Ben med sugning kopp		2

H	M6 skruva		4
Jag	Knopp med skruva		8
J	Hexagon nyckel		1
K	Manuell		1

## FÖRSIKTIG

1. Alltid vara säker att de plats är korrekt och säkert låst i plats före använder.
2. Var säker att låsningen av sätet är tätt hela tiden. Fysiskt utmanad användare skall vara övervakad eller assisterad vem aldrig använder detta produkt.
3. De upphöjd toaletsits måste inte vara används för att stödja mer än 300 lbs. ANVÄND INTE produkten är överbelastad. Användarens vikt borde vara centrerad över toalettstolen , inte för framåt eller för långt åt ena sidan, eftersom enhet maj dricks.
4. För modeller med armstöd: De vapen är för de syfte av tillhandahållande hjälp vid på- och avstigning sätet. FÖRSÖK INTE att använda armstöden för att stödja fullt kroppsvikt t under överföringen, som detta maj resultat i misslyckande av de enhet och risk för skada.

5. Kontrollera alla delar för frakt skada före röv embly. Om det finns är frakt skada - DO INTE ANVÄND . Kontakta återförsäljare/transportör för ytterligare

instruktioner.

6. Se till att höjd justeras knäppa knappar fullt skjuta ut genom de samma respektive hål av varje le g förlängning. Detta vilja säkerställa att den ben tillägg är säkert låst i placera och en även höjd uppnås.

7. Se till att ALLA tumskruvar är åtdragna.

8. Kontrollera gummispetsar på ben tillägg för revor, slitage eller om de är saknad. Byt omedelbart ut alla eller alla om någon av dessa brister existera.

9. Alla fyra benförlängningar med gummispetsar MÅSTE vidröras de golvet samtidigt hela tiden.

10. GÖR INTE stå på produkt.

11. Regelbundet kontrollera för säkra montering och kontakta stöd om i tvivel. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryta användning om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar . Produkten är till vara begagnad på plan, stabil sura ansikten. Gör inte ta isär om inte nödvändig, eftersom det kan försämra produktens hållbarhet. Använd inte ändra produkt om inte annat anges i manualen.

12. Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion inträffar, upphör använd omedelbart och kontakta en sjukvård professionell.

13. Rengör regelbundet använder en mild rengöringsmedel och värma vatten, skölja av några tvålrester . Torka noggrant efter rengöring. din läkare innan användning leverantör som de produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer är inte en ersättare för medicinsk rådgivning.

15. Denna produkt är utformad för använda med de mest gemensam typer av toaletter. Den passar inte alla toalettyper; vara säker att de enhet är korrekt installerad, passar ordentligt och är stabil före använda.

## INSTRUKTIONER


Steg 1: sätt in Benanslutningsrör (delnummer E) in i Armstöd (Del B)




Steg 2: Använd M6-skruv (delnummer H) för att fästa Förstärkt tvärstag (del nr C) till benets anslutningsrör .



Steg 3: Använd U-formade rör (del #D) för att ansluta armstödsramarna på båda sidor och fixera dem med K-nob (Del I)

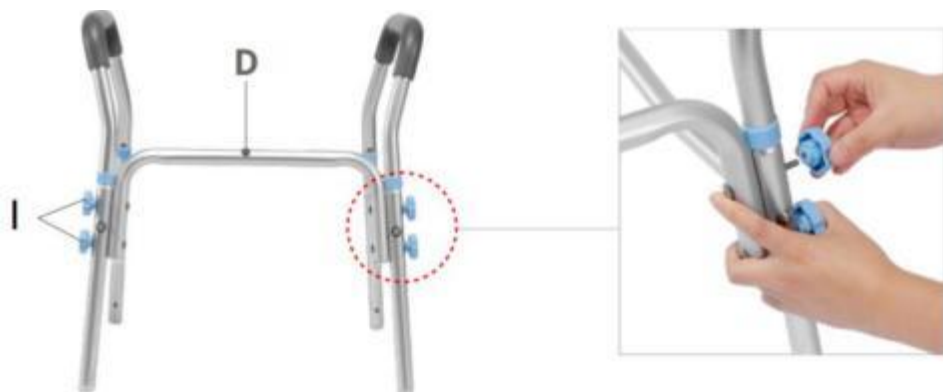

Steg 4: Fäst sugkoppen (delnummer F) på ben (Del #G), sedan infoga de fyra benen i anslutningsrören som visad i de bild nedan

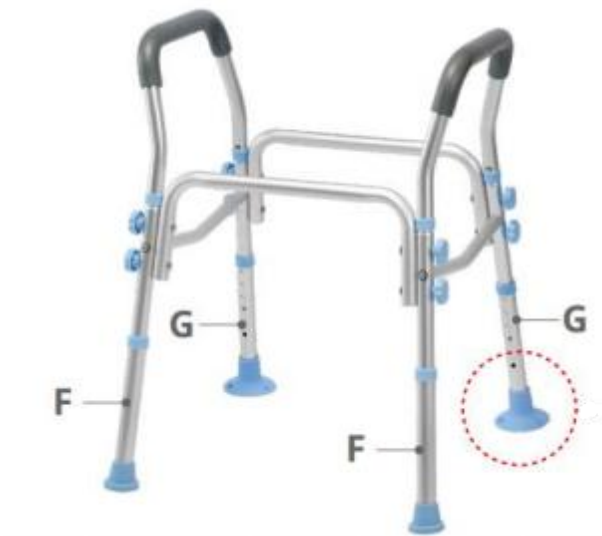


**Notera:** Se till att alla sugkoppar benen är Lägre 1 nivå än gummispets ben.

**Till exempel:** ställ in gummibenet på 4, sedan du behov till uppsättning de Sugkopp ben till 3.



Steg 5: Fäst slutligen sätet (del A) till ramen.

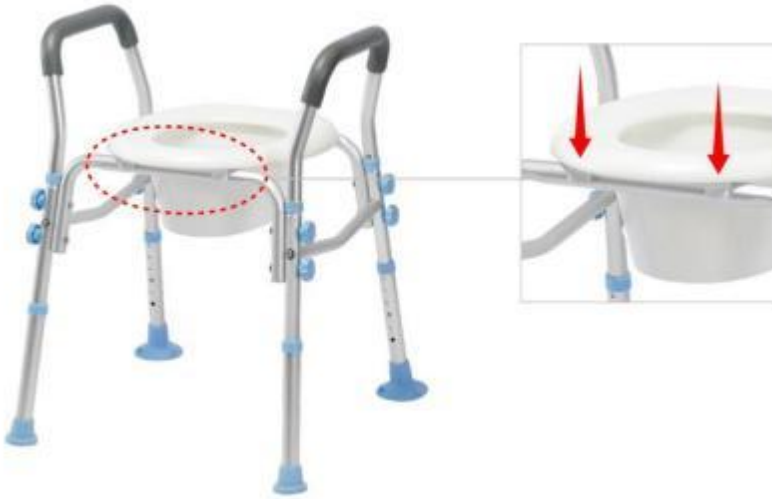

## UNDERHÅLL

1. REGELBUNDEN STÄDNING ÄR REKOMMENDERAD, ANVÄNDA ETT ICKE-SLIPANDE RENGÖRING ELLER RENGÖRINGSMEDEL. Skölj med varmt vatten OCH TORKA HELT. SLIPADISKA DUKAR KAN SKADA YTAN .
2. SNÅLLA GÖR REGELBUNDET INSPEKTERANDE AV DIN Upphöjd toalettstol med VAPEN OCH DESS DELAR FÖR ALL KORROSION, BRUCKSKADA, KOMPRESSION ELLER SLITAGE.
3. För att bevara den ursprungliga finishens skönhet, rengör med mild tvål och skölj med varmt vatten. Torka badkarssitsen torr efter varje användning.

**Tillverkare:** HÄLSOKÄLLA MEDICINSK UTRUSTNING (GUANGDONG) AB

**Adress :** 1 :a våning , nr . 10 väst Industriell Aveny , Haimai Industriell Zon ,  
Gaohai-samhället , Danzao Stad , Nanhai Distrikt , Foshan , Guangdong , 528223,  
Kina . **Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importerad till USA :** Sanven Teknologi Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place , Rancho Cucamonga , Kalifornien 91730



**REP**

YH-KONSULTATION LIMITED. C/O YH

Consulting Begränsat kontor 147, Centurion  
Hus, London

Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,

60329 Frankfurt am Huvudsaklig.

