

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

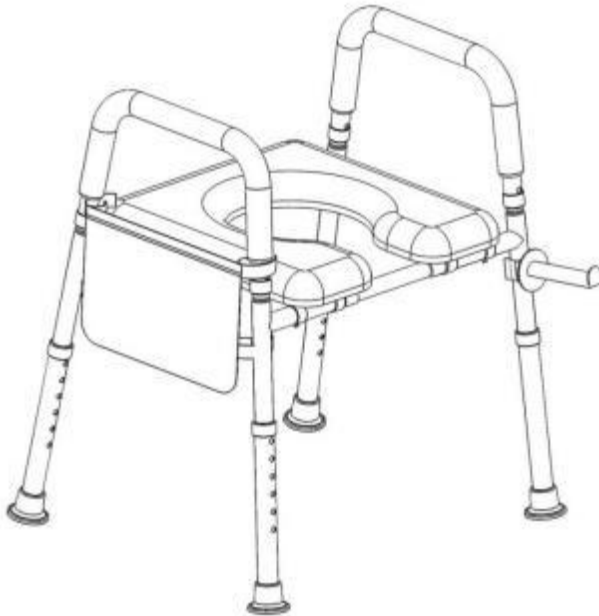
Model: XZY402

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: XZY402



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


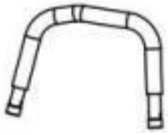





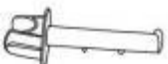
Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	load	Height from seat to floor	Height from armrest to floor
XZY402	400lbs/ 181kg	450-570mm	650-770mm

PACKAGE LIST




No.	Name	Picture	QTY
A	Connecting tube		4
B	Armrest		2
C	Seat plate		1
D	Transverse tube		2
E	C-Clamp		4
F	Bag		1
G	Leg		4
H	Tissue hook		1


I	Manual		1
---	--------	--	---

INSTRUCTIONS

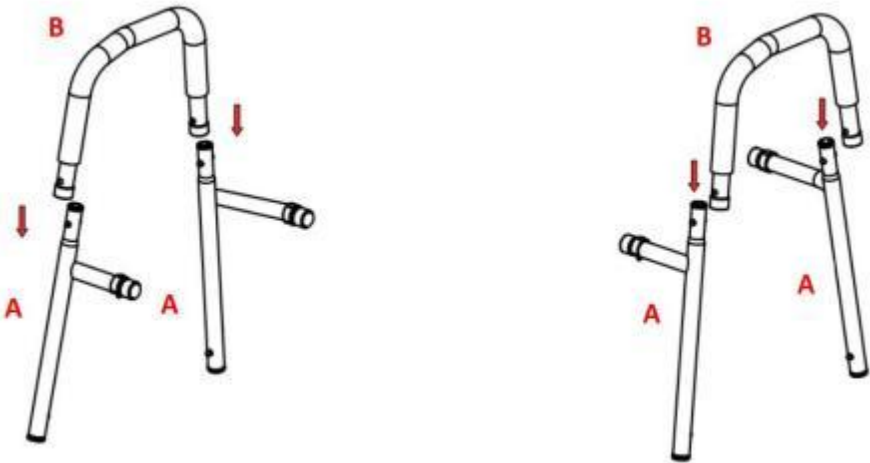
Step1: Install the armrest(Tab B) into the Connecting tube(Tab A). Make sure the marbles run smoothly.



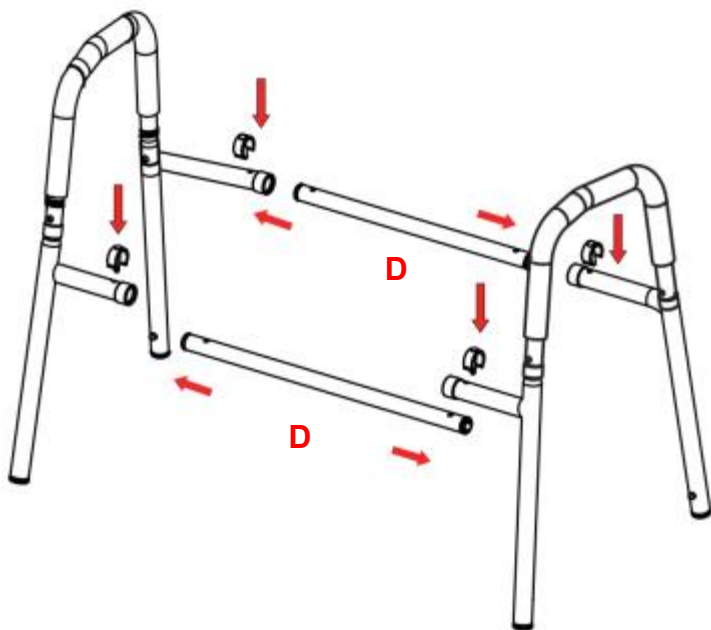Step2: Connect transverse tube(Tab D) and left/right tube group with C-clamp. Warning: check carefully the C-clamp is right to insert the hole otherwise, it may cause serious injury.



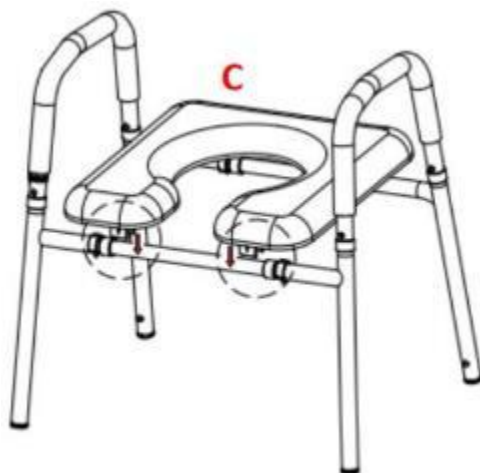
Step3: Install the seat plate(Tab C) to the transverse tube group.



Step4: Attach the cloth bag(Tab F) to the armrest.



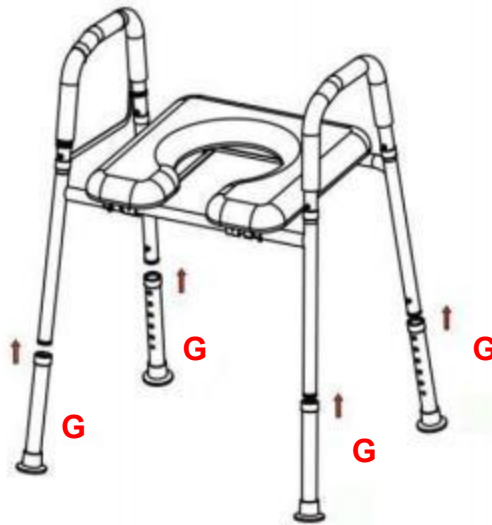Step5: Connect the foot tube(Tab G) to the main frame. Make sure the marbles smoothly.



Height adjustment

1. Before use, adjust the uniform height of the four legs according to your specific needs.
2. Locked in place by pushing up or pulling down on the foot tube.

CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat must not be used to support more than 300 lbs. DO NOT use the product overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far too one side, as unit may tip.
4. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.
5. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
6. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
7. Ensure ALL thumb screws are tightened.
8. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
9. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
10. DO NOT stand on product.
11. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary,

as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

12. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

13. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.

14. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

15. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.

MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.

2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.

3. To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

Manufacturer: HEALTH SOURCE MEDICAL EQUIPMENT (GUANGDONG) LTD.

Address: 1st floor, No. 10 West Industrial Avenue, Haimai Industrial Zone, Gaohai Community, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, 528223, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

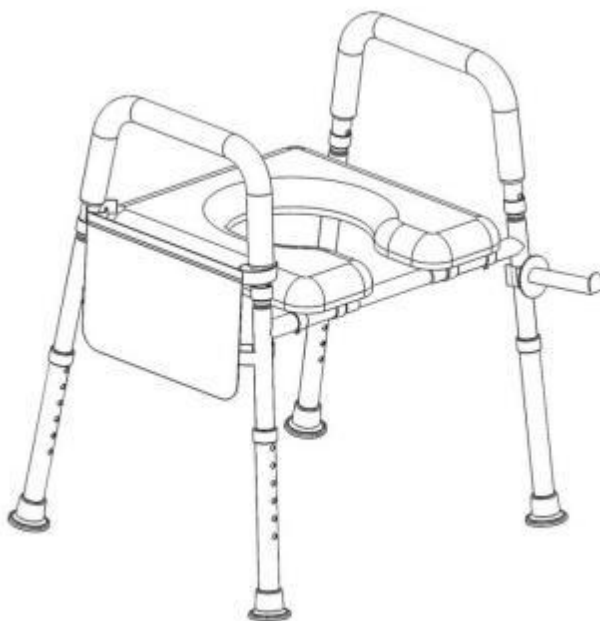
VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soulevé Toilettes Siège

Modèle : XZY402

Modèle : XZY402



Ce est l'original instruction, s'il te plaît lire tout Lisez attentivement les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre utilisateur manuel. L'apparence du produit sera soumise à le produit toi reçu. S'il vous plaît pardonnez nous que nous ne le ferons pas vous informer à

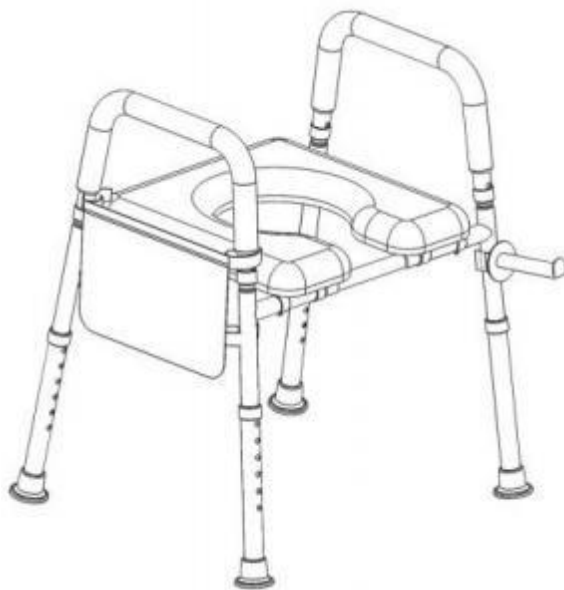
nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.








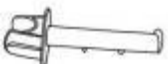
Merci beaucoup d'avoir choisi ceci produit, il devrait toujours être manipulé avec soin. S'il te plaît lisez toutes les instructions avant en utilisant il. Le les informations seront vous aider à atteindre le meilleur possible résultats .

SPÉCIFICATION

Modèle	charger	Hauteur à partir de du siège au sol	Hauteur à partir de accoudeur au sol
XZY402	400 livres / 181 kg	450-570 mm	650-770 mm

PACKAGE LIST




Non.	Nom	Image	Qté
UN	Tube de raccordement		4
B	Accoudoir		2
C	Siège plaque		1
D	tube transversal		2
E	Pince en C		4
F	Sac		1
G	Jambe		4
H	Tissu crochet		1

je	Manuel		1
----	--------	--	---


INSTRUCTIONS

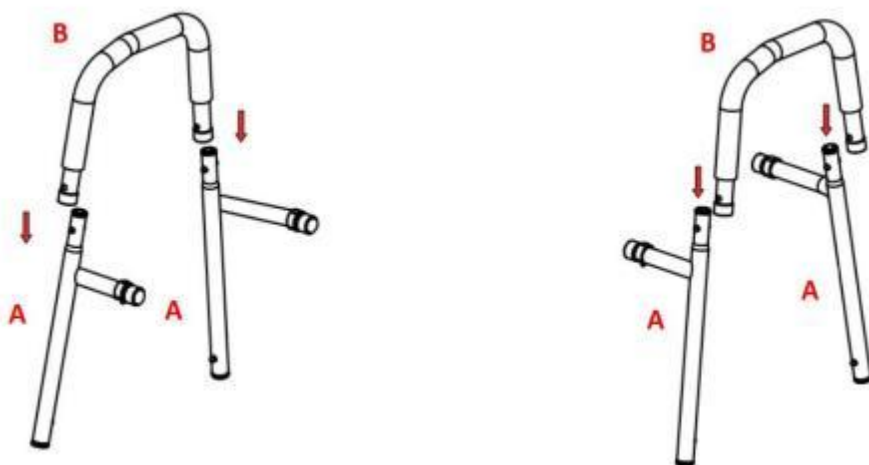Étape 1 : Installer l'accoudeur (Tab B) dans le tube de connexion (Tab UN). Faire bien sûr les billes fonctionner sans problème.



Étape 2 : Connectez le tube transversal (onglet D) et groupe de tubes gauche/droit avec C-

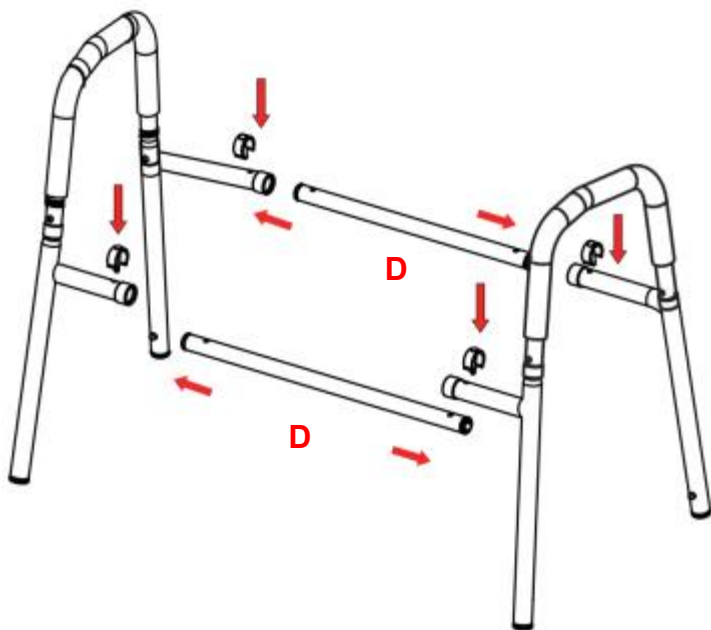pince. Attention : vérifiez soigneusement que la pince en C est droit à insérer le trou sinon, il peut causer des blessures graves.




Étape 3 : Installer le siège plaque (onglet C) au groupe de tubes transversaux.



Étape 4 : Fixez le sac en tissu (onglet F) à l'accoudoir.



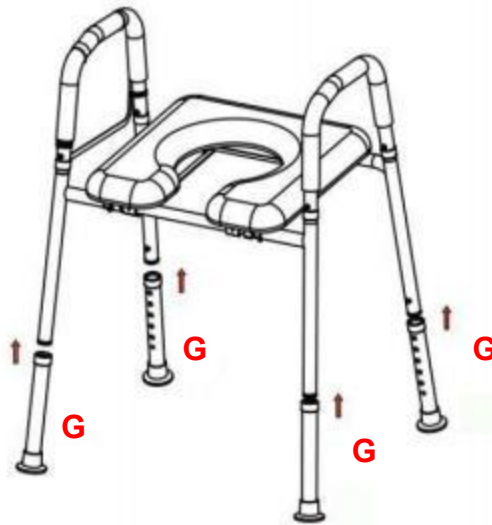Étape 5 : Connectez le tube de pied (onglet G) au cadre principal.
S'assurer le billes en douceur.



Réglage de la hauteur

1. Avant utilisation, ajustez la hauteur uniforme des quatre jambes selon à votre spécifique besoins.

2. Verrouillé placer par pousser en haut ou tirant vers le bas sur le pied tube.

CAUTIONS

1. Toujours être bien sûr que le siège est correctement et en toute sécurité fermé dans lieu avant en utilisant.
2. Assurez-vous que le verrouillage de le siège est serré en permanence. Physiquement contesté utilisateurs devrait être supervisé ou assisté chaque fois que en utilisant ce produit.
3. Le siège de toilette surélevé doit pas être utilisé pour soutenir plus que 300 lb. NE PAS utiliser le produit est surchargé. Poids de l'utilisateur devrait être centré sur toilettes siège, pas aussi avant ou aussi loin aussi un côté, comme unité peut basculer.
4. Pour modèles avec accoudoirs: Le bras sont pour le but de fournir assistance à la montée et à la descente le siège. N'essayez PAS d'utiliser les accoudoirs pour soutenir complètement poids corporel t pendant le transfert, comme ce peut résultat en échec de le unité et risque de blessure.
5. Inspectez toutes les pièces pour expédition dommage avant assemblée . S'il y a est expédition dommage - FAIRE PAS UTILISER . Contact revendeur/transporteur pour plus d'informations instructions.
6. Assurez-vous que le hauteur réglage instantané boutons pleinement dépasser à travers le même respectif trou de chaque jambe extension. Ce volonté assurer que le jambe extensions sont en toute sécurité fermé dans position et un même hauteur est atteint.
7. Assurez-vous que TOUTES les vis à oreilles sont serrées.
8. Vérifiez le embout en caoutchouc s sur le jambe extensions pour déchirures, usure ou si ils sont manquant. Remplacer immédiatement tout ou partie si l'une de ces imperfections exister.
9. Tous extensions à quatre jambes avec des embouts en caoutchouc DOIVENT toucher le étage simultanément à tout moment.
10. FAIRE NE PAS se tenir debout sur produit.
11. Régulièrement vérifier pour sécurisé assemblée et contact soutien si dans doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont uniformes et

CAUTIOUS

verrouillés avant utiliser, et cesser usage s'il y a des signes d'usure, dommage, ou manquant pièces. Le produit est à être utilisé sur terrain plat et stable surfaces. Faire pas démonter si pas nécessaire,

comme il pourrait compromi s la longévité du produit. Ne pas modifier le produit sauf indication contraire dans le manuel.

12. Soyez prudent pendant l'utilisation et l'assemblage. Évitez les températures extrêmes ou les flammes nues. Si une personne allergique la réaction se produit, cesse utiliser immédiatement et consulter un soins de santé professionnel.

13. Nettoyer régulièrement en utilisant un b énin d étergent et chaud eau, rincer d éactiv é tout r ésidu de savon. Apr ès le nettoyage, s échez soigneusement.

14. Avant utilisation, confirmer avec votre prestataire de soins de sant é qui le produit r épond à vos besoins sp écifiques. Les directives suivantes ne sont pas un substitut de conseils m édicau x.

15. Ce produit est con çu pour ê tre utilis é avec les types de commodes. Il ne conviendra pas à tous types de commodes; ê tre bien s ûr que le unit é est correctement install é, s'adapte correctement et est écurie avant utiliser.

ENTRETIEN

1. NETTOYAGE R ÉGULIER EST RECOMMAND É, UTILISER UN NON ABRASIF NETTOYANT OU D ÉTERGENT. RINCER À L'EAU TI ÈDE ET SEC

COMPL ÈTEMENT. CHIFFONS ABRASIFS PEUT ENDOMMAGER LA SURFACE.

2. S'IL VOUS PLAÎT INSPECTEZ R ÉGULI ÈREMENT VOTRE SI ÈGE DE TOILETTE SUR ÉLEV É AVEC BRAS ET C'EST PARTIES POUR TOUTE CORROSION, CASSE, COMPRESSION OU USURE.

3. Pour conserver la beaut é de la finition d'origine, nettoyez avec b énin savon et rincer à l'eau ti ède. Essuyer le si ège de la baignoire apr ès chaque utiliser.

Fabricant: SOURCE DE SANTÉ ÉQUIPEMENT MÉDICAL (GUANGDONG)
SARL.

Adresse : 1 er étage , non . 10 Ouest Industriel Avenue , Haïmaï Industriel Zone ,
Communauté de Gaohai , Danzao Ville , Nanhai District , Foshan , Guangdong ,
528223, CHINE . **Importé en AUS** : SIHAO SARL PTY 1 ROKEV À
STREETEASWOOD

NSW 2122 Australie

Importé à États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166
Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730



YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion Maison, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**REPRÉSE
NTANT**



E-CrossStu GmbH
Mayence Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main Principal.

TANT



**Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erzogen Toilette Sitz

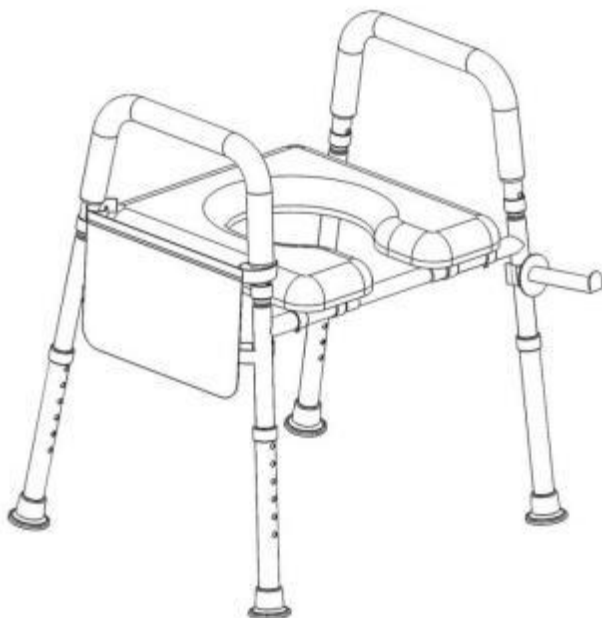
Modell: XZY402

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erhöhter Toilettensitz

Modell: XZY402




Das ist das Original Anweisung, Bitte alles lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, unserer Benutzer Handbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt Die Produkt Du erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere dich nochmal ob es Technologien oder Software gibt Updates zu unserem Produkt.







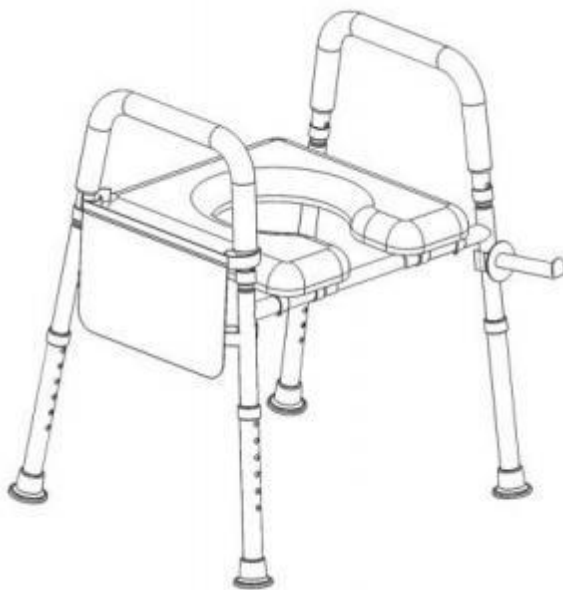
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt, es sollte stets Sei mit Sorgfalt behandelt. Bitte Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit es. Die Informationen werden helfen Ihnen, das Beste zu erreichen möglich Ergebnisse .

SPEZIFIKATION

Modell	laden	Höhe von Sitz zum Boden	Höhe von Armlehne zum Boden
XZY402	400 Pfund / 181 kg	450-570 mm	650-770 mm

PACKAGE LIST




NEIN.	Name	Bild	MENGE
A	Verbindungsrohr		4
B	Arملهne		2
C	Sitz Platte		1
D	Querrohr		2
E	C -Klemme		4
F	Tasche		1
G	Bein		4

H	Gewebe Haken		1
---	--------------	--	---

ICH	Handbuch		1
-----	----------	--	---


ANWEISUNGEN

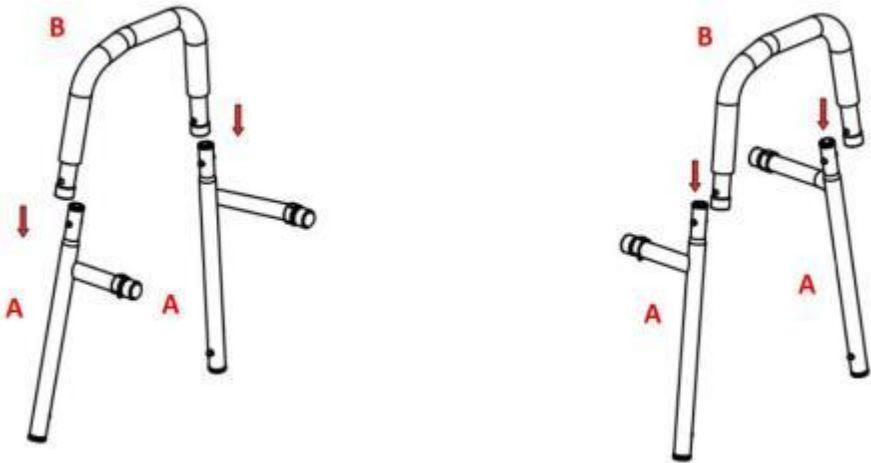Schritt 1: Installieren Sie die Armlehne (Tab B) in das Verbindungsrohr (Tab A). Machen sicher die Murmeln reibungslos laufen.




Schritt 2: Querrohr anschließen (Lasche D) und linke/rechte Rohrgruppe mit C-

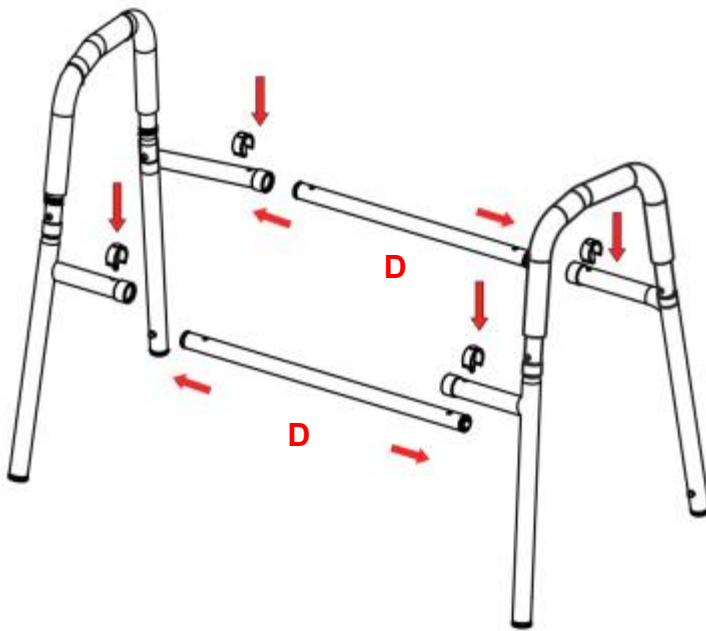Klemme. Erwärmung: Überprüfen Sie sorgfältig, ob die C-Klemme Widerspruchsrecht legen Sie die Loch andernfalls kann zu schweren Verletzungen führen.




Schritt 3: Installieren Sie den Sitz Platte (Lasche C) an der Querrohrgruppe .

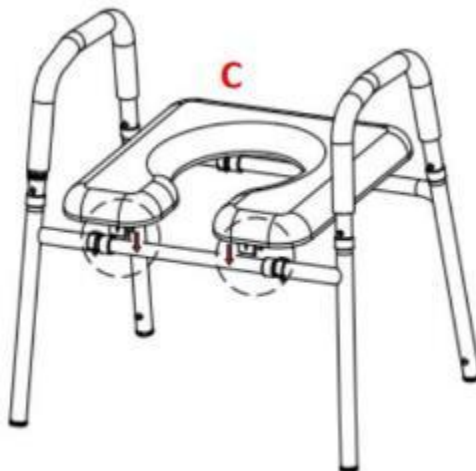

Schritt 4: Befestigen Sie den Stoffbeutel (Lasche F) Zu Die Armlehne.



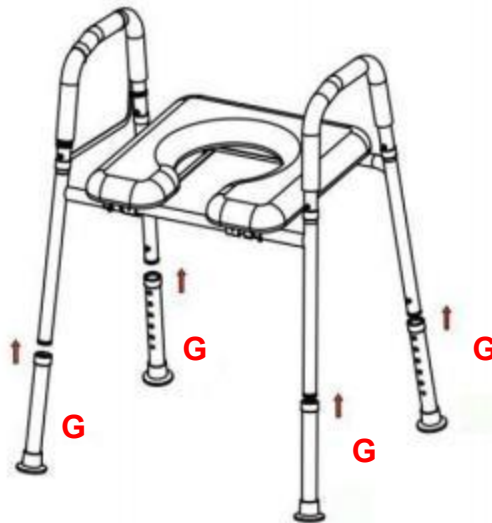Schritt 5: Verbinden Sie das Fußrohr (Lasche G) mit dem Haupttrahmen. Stellen Sie sicher Die Murmeln reibungslos.



Höhenverstellung

1. Vor Gebrauch die einheitliche Höhe einstellen der vier Beine nach für dich spezifisch Bedürfnisse.

2. Eingsperrt Ort von drücken nach oben oder nach unten ziehen An der Fuß Rohr.

CAUTIOUS

1. Stets Sei Sicher Das Die Sitz Ist korrekt Und sicher gesperrt In Ort vor verwenden.
2. Seien Sie sicher dass die Verriegelung von der Sitz ist jederzeit fest. Körperlich herausgefordert Benutzer sollen Sei beaufsichtigt oder unterstützt wer nie mit Das Produkt.
3. Der Toilettensitzerhöhung muss nicht Sei verwendet, um zu unterstützen mehr als 300 lbs. NICHT verwenden das Produkt überlastet. Gewicht des Benutzers sollte sein zentriert über Toilette Sitz, nicht zu nach vorne oder zu weit zu eins Seite, als Einheit kann kippen.
4. Für Modelle mit Armlehnen: Der Waffen Sind für Die Zweck von Bereitstellung Hilfe beim Ein- und Aussteigen den Sitz. Versuchen Sie NICHT, die Arme zu verwenden , um die volle Körpergewicht t während der Übertragung, als Das Mai Ergebnis im Scheitern von Die Einheit und Risiko von Verletzung.
5. Alle Teile prüfen für Versand Schaden vor Montage . Wenn es Ist Versand Schaden - TUN NICHT VERWENDEN . Kontakt Händler/Spediteur für weitere Anweisungen.
6. Stellen Sie sicher, dass die Höhe Einstellen Schnappschuss Schaltflächen voll vorstehen durch Die Dasselbe jeweiligen Loch von jede Bein Verlängerung. Das Wille sicherstellen dass die Bein Erweiterungen Sind sicher gesperrt In Position Und ein sogar Höhe erreicht ist.
7. Stellen Sie sicher, dass ALLE Flügelschrauben festgezogen sind.
8. Überprüfen Sie die Gummispitze s auf der Bein Erweiterungen für Risse, Verschleiß oder Wenn Sie Sind fehlen. Ersetzen Sie sofort alle oder wenn eine dieser Unvollkommenheiten existieren.
9. Alle vier Beinverlängerungen mit Gummispitzen MÜSSEN berühren Die Boden immer gleichzeitig .
10. TUN NICHT stehen auf Produkt.

CAUTIOUS

11. Regelmäßig überprüfen für sicher Montage Und Kontakt
Unterstützung Wenn In zweifeln. Stellen Sie sicher, dass die Beine des
Produkts gerade und verriegelt sind vor verwenden und abbrechen
Verwendung wenn es Anzeichen von Verschleiß gibt, Schaden, oder
fehlen Teile. Die Produkt Ist Zu Sei gebraucht auf ebenem, stabilem
Oberflächen . nicht zerlegen Wenn nicht notwendig,

als Es könnte Kompromiss die Langlebigkeit des Produkts. Nicht ändern Die Produkt sofern nicht anders in der Handbuch.

12. Seien Sie bei der Bedienung und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extreme Temperaturen oder offenes Feuer. Wenn eine Allergie Reaktion auftritt, aufhören sofort verwenden und einen Arzt aufsuchen Gesundheitspflege Professional.

13. Reinigen regelmäßig mit A leicht Waschmittel Und warm Wasser, spülen aus Seifenreste entfernen . Nach der Reinigung gründlich trocknen .

14. Vor Gebrauch bestätigen Sie mit Ihr Gesundheitsdienstleister, der das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Die folgenden Richtlinien sind nicht A Ersatz für ärztlichen Rat einholen.

15. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den gängigsten Typen von Kommoden. Es passt nicht für alle Toilettentypen; Sei Sicher Das Die Einheit Ist richtig installiert, passt richtig und Ist stabil vor verwenden.

WARTUNG

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG IST EMPFOHLEN, VERWENDEN EIN NICHT ABRASIVES REINIGER ODER WASCHMITTEL. Mit warmem Wasser abspülen UND TROCKEN

VOLLSTÄNDIG. SCHLEIFTÜCHER KANN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.

2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG IHRE WC-SITZERHÖHUNG MIT WAFFEN UND ES IST TEILE FÜR JEDLICHE KORROSION, BRUCH, KOMPRESSION ODER VERSCHLEIß.

3. Um die Schönheit der ursprünglichen Oberfläche zu erhalten, reinigen Sie mit leicht Seife Und mit warmem Wasser abspülen. Badesitz nach jedem verwenden.

Hersteller: GESUNDHEITSQUELLE MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG
(GUANGDONG) GMBH.

Adresse : 1 . Stock , Nr . 10 Westen Industrie Allee , Haimai Industrie Zone ,
Gaohai-Gemeinde , Danzao Stadt , Nanhai Bezirk , Foshan , Guangdong , 528223,
CHINA . **Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEV A
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166
Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



**Königreich
REP**

YH-BERATUNG LIMITED. C/O YH Consulting
Eingeschränktes Büro 147, Zenturio Haus,
London

Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Hauptsächlich.



**Technischer Support und E-Garantie -
Zertifikat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Aumentó Baño Asiento

Modelo: XZY402

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Asiento de inodoro elevado

Modelo: XZY402



Este es el original instrucción, por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretarlo. de nuestro usuario

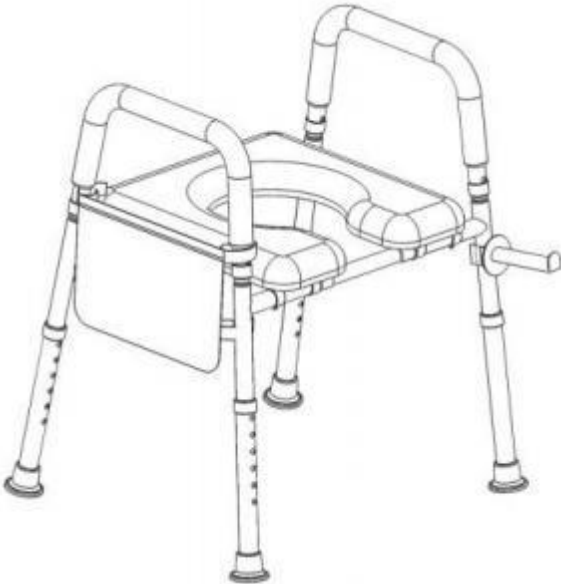
manual. La apariencia del producto estará sujeta a el producto tú recibió.
Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si
hay alguna tecnología o software actualizaciones de nuestro producto.








Muchas gracias por elegir esto. producto, debería siempre ser Manejado con cuidado. Por favor Lea todas las instrucciones antes usando eso. El La información será ayudarle a lograr lo mejor posible resultados .

ESPECIFICACIÓN

Modelo	carga	Altura desde del asiento al suelo	Altura desde apoyabrazos al suelo
XZY402	400 libras / 181 kilogramos	450-570 milímetros	650-770 milímetros

PACKAGE LIST




No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
A	Tubo de conexión		4
B	Brazo		2
do	Asiento lámina		1
D	Tubo transversal		2
mi	Abrazadera en C		4
F	Bolsa		1
GRA MO	Pierna		4

H	Tejido gancho		1
---	---------------	--	---

I	Manual		1
---	--------	--	---


INSTRUCCIONES

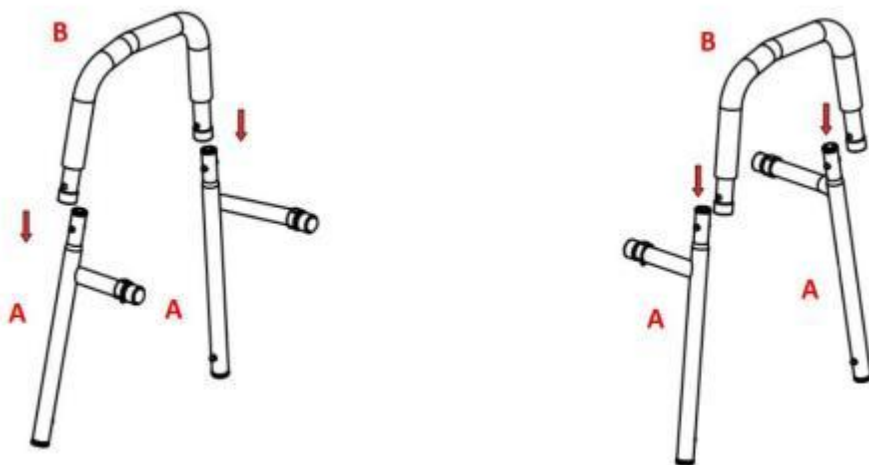Paso 1: Instalar el reposabrazos (pestaña B) en el tubo de conexión (pestaña A). Hacer seguro las canicas funcionan sin problemas



Paso 2: Conecte el tubo transversal (pestaña D) y Grupo de tubos izquierdo/derecho con C-

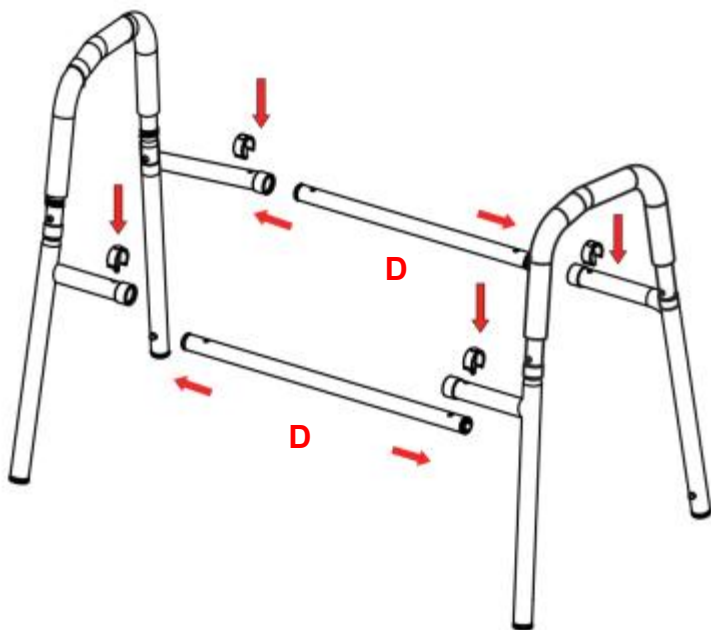Abrazadera. Advertencia: compruebe cuidadosamente que la abrazadera en C esté derecho a Insertar el agujero De lo contrario, Puede causar lesiones graves.




Paso 3: Instalar el asiento placa (Tab C) al grupo de tubos transversales.



Paso 4: Coloque la bolsa de tela (pestaña F) a el brazo.



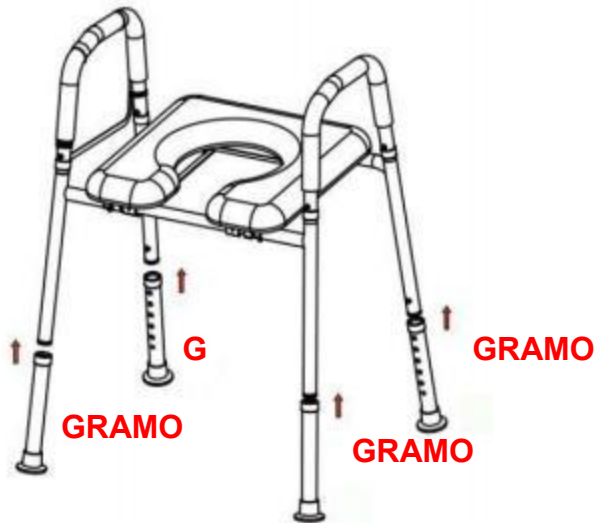Paso 5: Conecte el tubo del pie (pestaña G) al marco principal. Cerciorarse el canicas suavemente.



Ajuste de altura

1. Antes de usar, ajuste la altura uniforme. de los cuatro piernas de acuerdo a a ti r específico necesidades.
2. Encerrado lugar por emprendedor arriba o demolición en el pie tubo.

CAUTIOUS

1. Siempre ser seguro eso el asiento es correctamente y con seguridad bloqueado en lugar antes usando.
2. Asegúrate que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento. Físicamente desafiado usuarios debería ser supervisado o asistido cuando sea usando este producto.
3. El asiento de inodoro elevado debe no ser utilizado para apoyar más que 300 libras NO usar El producto está sobrecargado. Peso del usuario. Debería ser centrado encima baño asiento, no también adelante o también lejos también uno lado, como unidad Puede volcarse.
4. Para modelos con apoyabrazos: El brazos son para el objetivo de siempre que asistencia al subir y bajar el asiento. NO intente usar los brazos para sostener completamente peso corporal t durante la transferencia, como este puede resultado en el fracaso de el unidad y riesgo de lesión.
5. Inspeccione todas las piezas para envío daño antes asamblea . Si hay es envío daño - HACER NO USAR . Contacto distribuidor/transportista para más información instrucciones.
6. Asegúrese de que el altura ajustando quebrar botones completamente sobresalir a través de el mismo respectivo agujero de cada pierna extensión. Este voluntad asegurar que el pierna extensiones son de forma segura bloqueado en posición y un incluso altura se logra
7. Asegúrese de que TODOS los tornillos de mariposa estén bien apretados.
8. Comprueba el punta de goma s en el pierna extensiones para rasgaduras, desgaste o si ellos son desaparecido. Reemplace inmediatamente cualquiera o todos Si alguna de estas imperfecciones existir.
9. Todo extensiones de cuatro patas con puntas de goma DEBE tocar el piso simultáneamente en todo momento .

CAUTIOUS

10. HACER NO pararse sobre producto.

11. Regularmente controlar para seguro asamblea y contacto apoyo si en duda. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas. antes uso, y discontinuar uso Si hay signos de desgaste, daño, o desaparecido partes. El producto es a ser usado en plano, estable superficies . Hacer no desmontar si no necesario,

como él podría compromiso la longevidad del producto. No modificar el producto a menos que se especifique en el manual.

12. Tenga cuidado durante la operación y el montaje. Evite temperaturas extremas o llamas abiertas. Si es alérgico se produce la reacción, cesa Úselo inmediatamente y consulte a un médico. cuidado de la salud profesional.

13. Limpiar regularmente usando a leve detergente y cálido agua, enjuagar apagado cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, secar completamente.

14. Antes de usar, confirme con su proveedor de atención médica que El producto satisface sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no son a sustituto de consejo médico.

15. Este producto está diseñado para usarse con los tipos más comunes de inodoros. No caben todos tipos de inodoros; ser seguro eso el unidad es correctamente instalado, encaja correctamente y es estable antes usar.

MANTENIMIENTO

1. LIMPIEZA REGULAR ES RECOMENDADO, USAR UN NO ABRASIVO LIMPIADOR O DETERGENTE. ENJUAGUE CON AGUA TIBIA Y SECO

COMPLETAMENTE. PAÑOS ABRASIVOS PUEDE DAÑAR LA SUPERFICIE.

2. POR FAVOR INSPECCIONE SU PERIÓDICAMENTE ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y ES REGIONES PARA CUALQUIER CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.

3. Para mantener la belleza del acabado original, limpie con leve jabón y Enjuague con agua tibia. Seque el asiento de la bañera después de cada uso. usar.

Fabricante: FUENTE DE SALUD EQUIPO MÉDICO (GUANGDONG) LIMITADO.

DIRECCIÓN : 1º piso , no . 10 Oeste Industrial Avenida , Haimai Industrial Zona , Comunidad de Gaohai , Danzao Ciudad , Nanhai Distrito , Foshan , Guangdong , 528223, CHINA . **Importado a AUS:** SIHAO Compañía Limitada. 1 ROKEV A STREETESTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a Estados Unidos: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



REPS

YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH
Consulting Oficina limitada 147, Centurión
Casa, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX



E-CrossStu GmbH
Maguncia Calle principal 69,
60329 Fráncfort del Meno Principal.



**Soporte Técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sollevato Toilette Posto a sedere

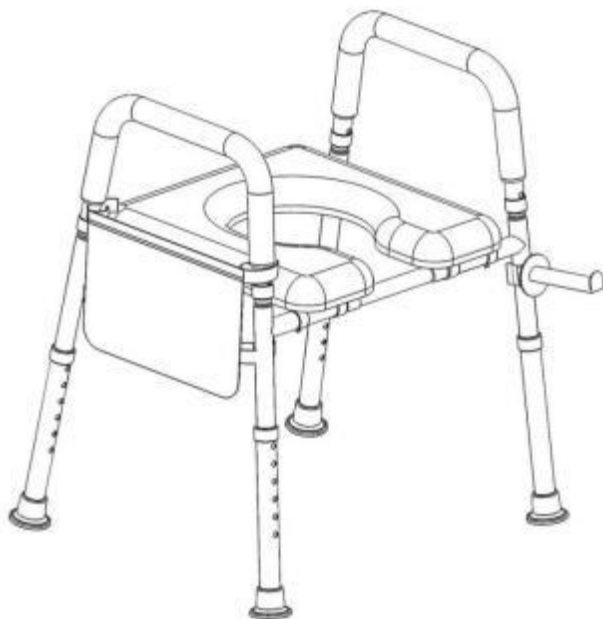
Modello: XZY402

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Sedile del water
rialzato**

Modello: XZY402



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente

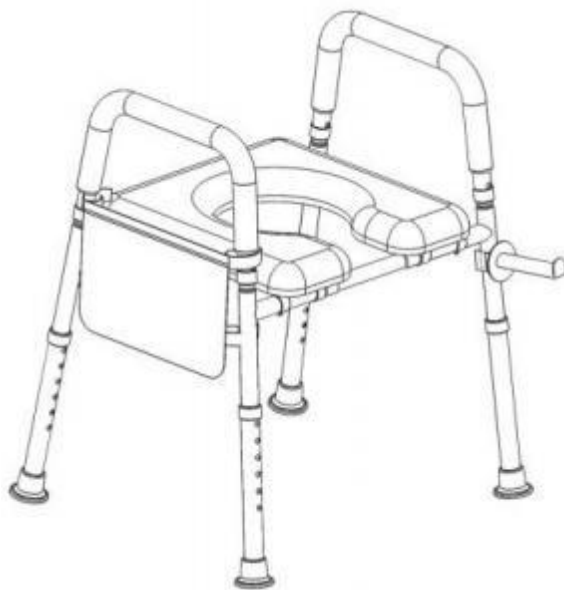
manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a IL prodotto Voi ricevuto.
Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo se ci sono
tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.








Grazie mille per aver scelto questo prodotto, dovrebbe Sempre Essere maneggiato con cura. Per favore leggere tutte le istruzioni prima usando esso. Il le informazioni saranno ti aiutiamo a raggiungere il meglio possibile risultati .

SPECIFICHE

Modello	carico	Altezza da dal sedile al pavimento	Altezza da bracciolo al pavimento
XZY402	400 libbre / 181 chili	450-570 millimetri	650-770 millimetri

PACKAGE LIST




NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
UN	Tubo di collegamento		4
B	Bracciolo		2
C	Posto a sedere piatto		1
D	Tubo trasversale		2
E	Morsetto a C		4
F	Borsa		1
G	Gamba		4

H	Tessuto gancio		1
---	----------------	--	---

IO	Manuale		1
----	---------	--	---


ISTRUZIONI

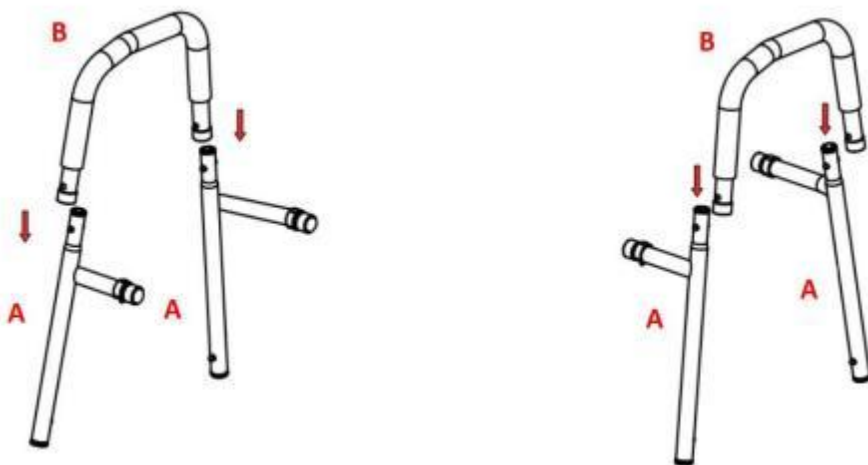Fase 1: Installare il bracciolo (scheda B) nel tubo di collegamento (scheda UN). Fare certo i marmi funzionare senza intoppi.




Fase 2: Collegare il tubo trasversale (scheda D) e gruppo tubi sinistro/destro con C-

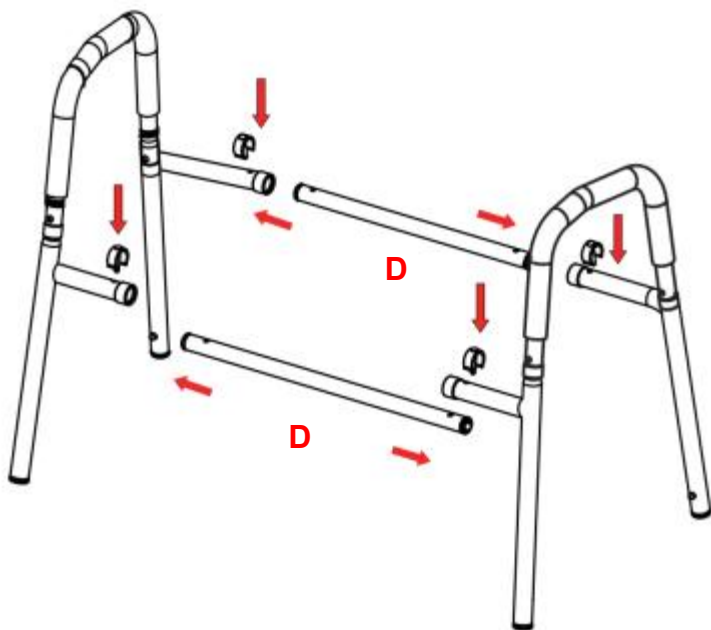morsetto. Riscaldamento: controllare attentamente che il morsetto a C sia diritto a inserire il buco altrimenti, può causare gravi lesioni.




Fase 3: Installare il sedile piastra (Tab C) al gruppo di tubi trasversali.

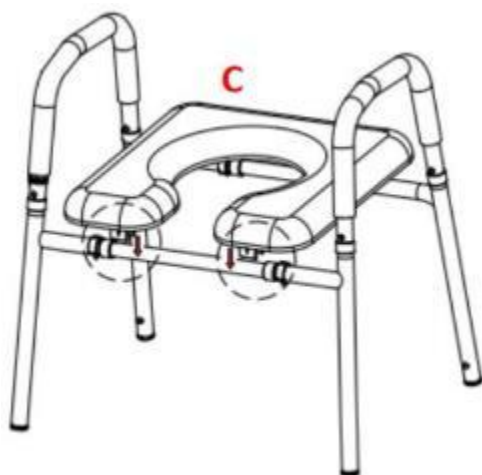

Fase 4: Fissare il sacchetto di stoffa (Linguetta F) A IL bracciolo.



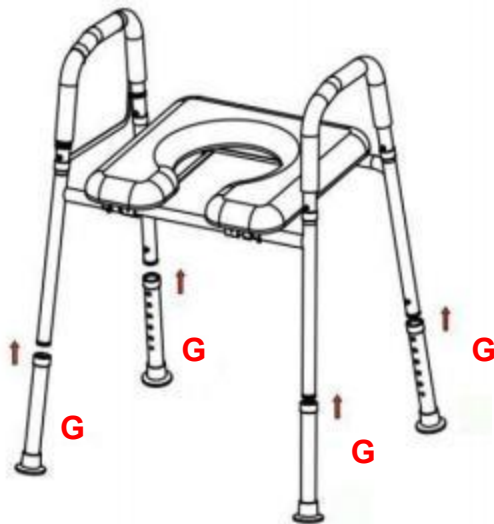Fase 5: Collegare il tubo del piede (Linguetta G) al telaio principale. Assicurarsi IL biglie senza intoppi.



Regolazione dell'altezza

1. Prima dell'uso, regolare l'altezza uniforme dei quattro gambe secondo a te r specifico esigenze.
2. Bloccato posto da spingendo su o tirando giù SU il piede tubo.

CAUTIOUS

1. Sempre Essere Sicuro Quello IL posto a sedere È correttamente E in modo sicuro bloccato In posto Prima utilizzando.
2. Assicurati che il bloccaggio di il sedile è sempre stretto. Fisicamente sfidato utenti Dovrebbe Essere supervisionato O assistito ogni volta usando Questo prodotto.
3. IL sedile del water rialzato dovere non Essere utilizzato per supportare Di più di 300 libbre. NON usare il prodotto è sovraccarico. Peso dell'utente dovrebbe essere centrato Sopra toilette posto a sedere, non pure inoltrare O pure lontano pure uno lato, COME unità può dare la mancia.
4. Per modelli con braccioli: IL braccia Sono per IL scopo Di fornendo assistenza per salire e scendere il sedile. NON cercare di usare i braccioli per sostenere completamente peso corporeo t durante il trasferimento, COME Questo Maggio risultato in fallimento Di IL unità e rischio di infortunio.
5. Ispezionare tutte le parti per spedizione danno Prima asino embly. Se c'è È spedizione danno - FARE NON UTILIZZO . Contatto rivenditore/trasportatore per ulteriori informazioni istruzioni.
6. Assicurarsi che il altezza regolazione affrettato pulsanti completamente sporgere Attraverso IL Stesso rispettivo buco Di ogni gamba estensione. Questo Volere garantire che il gamba estensioni Sono in modo sicuro bloccato In posizione E UN Anche altezza è raggiunto.
7. Assicurarsi che TUTTE le viti a testa zigrinata siano serrate.
8. Controlla il punta di gomma s sul gamba estensioni per strappi, usura O Se Essi Sono mancante. Sostituire immediatamente uno o tutti se una qualsiasi di queste imperfezioni esistere.
9. Tutto estensioni a quattro gambe con punte in gomma DEVONO toccare IL pavimento simultaneamente in ogni momento.
10. FARE NON stare in piedi prodotto.

CAUTIOUS

11. Regolarmente controllo per sicuro assemblaggio E contatto supporto
Se In dubbio. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e
bloccate Prima usare e interrompere utilizzo se ci sono segni di usura,
danno, O mancante parti. Il prodotto È A Essere usato su piano, stabile
superfici . Fare non smontare Se non necessario,

COME Esso Potrebbe compromesso la longevità del prodotto. Non modificare IL prodotto a meno che non sia specificato nel manuale.

12. Prestare attenzione durante il funzionamento e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. Se un allergico si verifica una reazione, cessa usare immediatamente e consultare un assistenza sanitaria professionale.

13. Pulisci regolarmente usando UN blando detergente E Caldo acqua, risciacquo spento eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.

14. Prima dell'uso, confermare con il tuo fornitore di assistenza sanitaria che il prodotto soddisfa le tue esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sono UN sostituire consulenza medica.

15. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con i tipi più comuni di comò. Non si adatta a tutti i tipi di comò; Essere Sicuro Quello IL unità È installato correttamente, si adatta correttamente e È stabile Prima utilizzo.

MANUTENZIONE

1. PULIZIA REGOLARE È RACCOMANDATO, UTILIZZO NON ABRASIVO PULITORE O DETERGENTE. RISCIAQUARE CON ACQUA TIEPIDA E ASCIUTTO

COMPLETAMENTE. PANNI ABRASIVI POTREBBE DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.

2. PER FAVORE CONTROLLA REGOLARMENTE IL TUO SEDILE WC RIALZATO CON BRACCIA E SUO PARTI PER QUALSIASI CORROSIONE, ROTTURA, COMPRESSIONE O USURA.

3. Per mantenere la bellezza della finitura originale, pulire con blando sapone E risciacquare con acqua tiepida. Asciugare il sedile della vasca da bagno dopo ogni utilizzo.

Produttore: FONTE DI SALUTE ATTREZZATURE MEDICHE (GUANGDONG)
LTD.

Indirizzo : 1 ° piano , n . 10 Ovest Industriale Viale , Haimai Industriale Zona ,
Comunità Gaohai , Danzao Città , Nanhai Distretto , Foshan , Guangdong ,
528223, CINA . **Importato in AUS**: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEV A
STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato in Stati Uniti: Sanven Technology Suite 250 , 9166
Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITATA. C/O YH
Consulting Ufficio limitato 147, Centurione
Casa, Londra

**RAPPRESE
NTANTE**

Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno Principale.

**RAPPRESE
NTANTE**



**Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Uniesiony Toaleta Siedziba

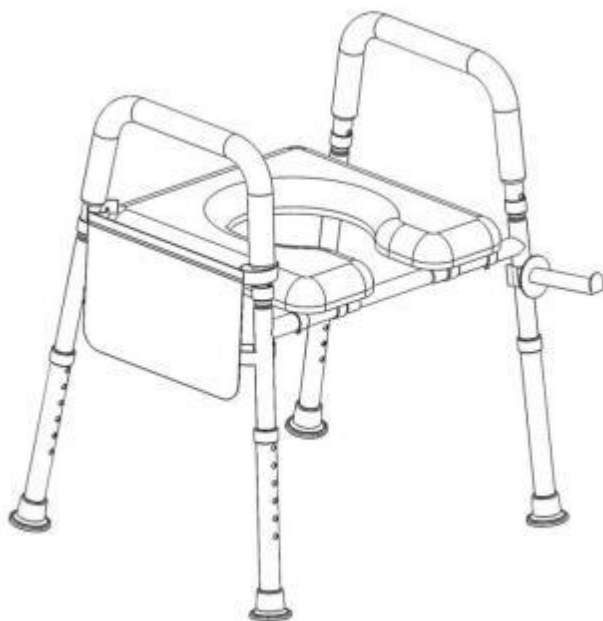
Model: XZY402

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone
siedzisko sedesowe

Model: XZY402



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi . VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji. naszego użytkownik

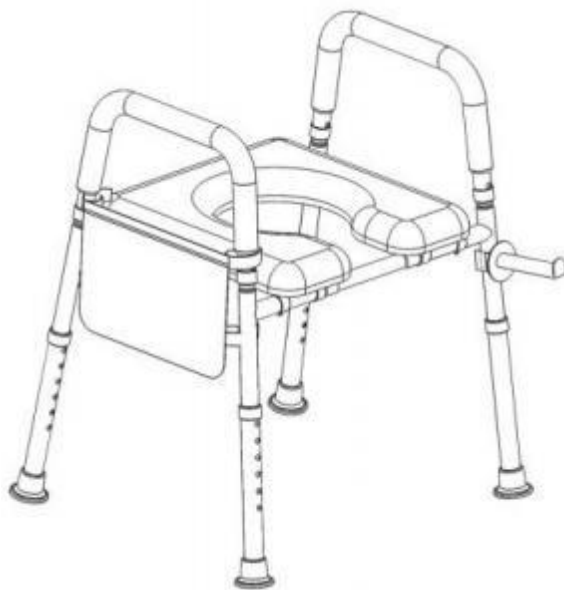
instrukcja. Wygląd produktu podlega ten produkt Ty otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje naszego produktu.








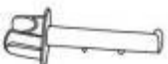
Dziękuję bardzo za wybór tego produkt, powinien zawsze Być obchodzić się z ostrożnością. Proszę przeczytaj wszystkie instrukcje przed używając To. Ten informacje będą pomóc Ci osiągnąć to, co najlepsze możliwy wyniki .

SPECYFIKACJA

Model	obciążenie	Wysokość od od siedzenia do podłogi	Wysokość od podłokietnik do podłogi
XZY402	400 funtów / 181 kg	450-570 mm	650-770 mm

PACKAGE LIST




NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Rura łącząca		4
B	Podłokietnik		2
C	Siedziba płyta		1
D	Rurka poprzeczna		2
mi	Zacisk C		4
F	Torba		1
G	Noga		4
H	Tkanka hak		1


I	Podręcznik		1
---	------------	--	---

INSTRUKCJE

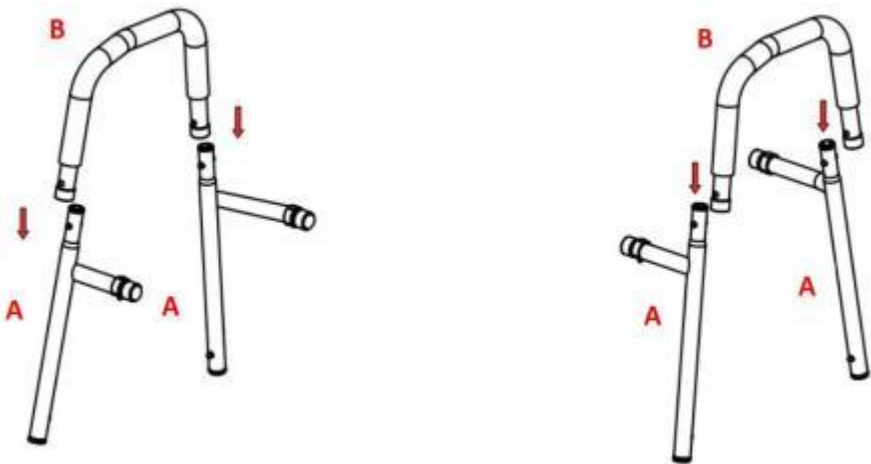
Krok 1: Zamontuj podłokietnik (zakładka B)I do rury łączącej (zakładka A). Robić pewnie kulki przebiegać sprawnie.



Krok 2: Podłącz rurkę poprzeczną (zakładka D) i grupa rur lewa/prawa z C-zacisk. Ogrzewanie: sprawdź dokładnie, czy zacisk C jest prawo do włożyć otwór w przeciwnym razie to może spowodować poważne obrażenia.

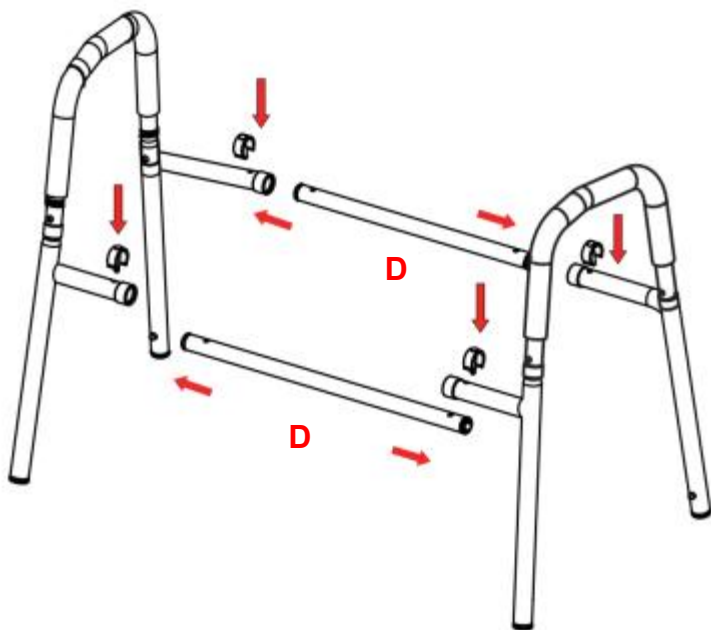


Krok 3: Zamontuj siedzenie płytkę (zakładka C) do poprzecznej grupy rurek.

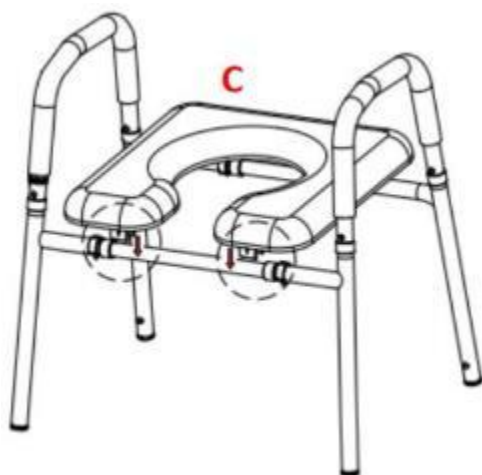

Krok 4: Załóż woreczek materiałowy (zakładka F) Do ten podłokietnik.



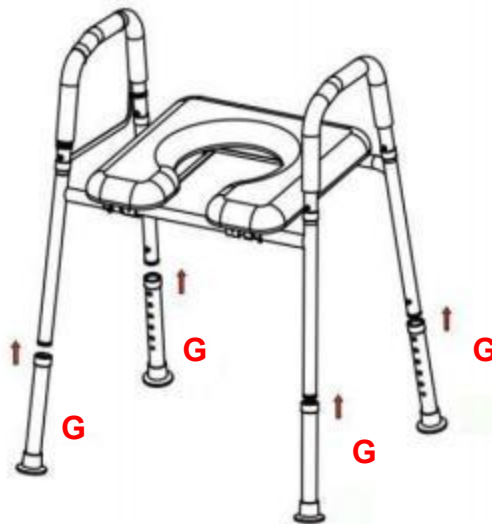Krok 5: Podłącz rurę podstawy (zakładka G) do ramy głównej. Upewnić się ten kulki płynnie.



Regulacja wysokości

1. Przed użyciem należy wyregulować wysokość równomierną z czterech nogi według do siebie r specyficzny wymagania.

2. Zamknięty miejsce według popychanie w górę lub ciągnąc w dół NA stopa rura.

CAUTIOUS

1. Zawsze Być Jasne To ten siedziba Jest prawidłowo I bezpiecznie zamknięty W miejsce zanim używając.
2. Upewnij się że blokowanie siedzenie jest cały czas ciasne. Fizycznie wyzwany użytkownicy powinien Być nadzorowany Lub wspomagany zawsze , gdy używając Ten produkt.
3. Ten podwyższone siedzisko sedesowe musieć nie Być używany do wspierania więcej niż 300 funtów. NIE używać Produkt przeciążony. Waga użytkownika powinno być wyśrodkowany nad toaleta siedziba, nie zbyt do przodu Lub zbyt daleko zbyt jeden strona, Jak jednostka może dać napiwek.
4. Dla modele z podłokietniki: Ten herb Czy Do ten zamiar z że pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu siedzisko. NIE próbuj używać podłokietników do podtrzymywania pełnego masa ciała t podczas transferu, Jak Ten móc wynik w porażce z ten jednostka i ryzyko obrażenia.
5. Sprawdź wszystkie części Do wysyłka szkoda zanim montaż . Jeśli tam Jest wysyłka szkoda - DO NIE UŻYWAĆ . Kontakt dealera/przewoźnika w celu uzyskania dalszych informacji instrukcje.
6. Upewnij się, że wysokość naregulowanie pstryknąć pikolak w pełni wystawać Poprzez ten To samo poszczególne otwór z każdy le g rozszerzenie. Ten będzie zapewnić że noga rozszerzenia Czy bezpiecznie zamknięty W pozycja I jakiś nawet wysokość został osiągnięty.
7. Upewnij się, że WSZYSTKIE śruby motylkowe są dokręcone.
8. Sprawdź gumowa końcówka s na noga rozszerzenia dla rozdarcia, zużycie Lub Jeśli Oni Czy zaginiony. Natychmiast wymień wszystkie lub niektóre jeśli któraś z tych niedoskonałości istnieć.
9. Wszystko wyprosty czterech nóg z gumowymi końcówkami MUSZĄ się stykać ten podłogi jednocześnie przez cały czas.
10. ZROBIĆ NIE stanąć na produkt.

CAUTIOUS

11. Regularnie sprawdzać Do bezpieczny montaż I kontakt wsparcie
Jeśli W wątpliwość. Upewnij się, że nogi produktu są równe i zablokowane
zanim używać i zaprzestać stosowanie jeśli są ślady zużycia, szkoda, Lub
zaginiony części. Ten produkt Jest Do Być używany na płaskim,
stabilnym twarze . Zrób nie demontować Jeśli nie niezbędnym,

Jak To móc kompromis długowieczność produktu. Nie modyfikować ten produkt chyba że określono inaczej w podręcznik.

Podczas obsługi i montażu należy zachować ostrożność . Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. Jeśli jesteś alergikiem reakcja następuje, ustaje natychmiast zużyć i skonsultować się z lekarzem opieka zdrowotna profesjonalny.

13. Czyszczenie regularnie używając A łagodny detergent I ciepły woda, płukanie wyłączony wszelkie pozostałości mydła. Po oczyszczeniu dokładnie wysuszyć.

14. Przed użyciem należy potwierdzić Twój dostawca opieki zdrowotnej, że Produkt spełnia Twoje specyficzne potrzeby. Poniższe wytyczne nie są A zastąpić porada lekarska.

15. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania z najpopularniejszymi typami komody. Nie zmieści się we wszystkich rodzaje komód; Być Jasne To ten jednostka Jest prawidłowo zainstalowany, pasuje prawidłowo i Jest stabilny zanim używać.

KONSERWACJA

1. **REGULARNE CZYSZCZENIE JEST ZALECONY, UŻYWAĆ NIEŚCIERNY CZYSTSZY LUB DETERGENT. SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I SUCHY**

CAŁKOWICIE. Płótna ścierne MOŻE USZKODZIĆ SURFACE.

2. **PROSZĘ REGULARNIE SPRAWDZAJ SWOJE PODWYŻSZONE SIEDZENIE TOALETOWE Z HERB I JEGO STRONY DLA JAKIEKOLWIEK KOROZJE, USZKODZENIA, KOMPRESJA LUB ZUŻYCIE.**

3. **Aby zachować piękno oryginalnego wykończenia, należy czyścić za pomocą łagodny mydło I Spłucz ciepłą wodą. Wytrzyj siedzisko do sucha po każdym użyciu. używać.**

Producent: ŹRÓDŁO ZDROWIA SPRZĘT MEDYCZNY (GUANGDONG)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres : 1. miejsce piętro , nr . 10 Zachód Przemysłowy Aleja , Haimai Przemysłowy Strefa , Społeczność Gaohai , Danzao Miasto , Nanhai Dzielnica , Foshan , Guangdong , 528223, CHINY . **Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEV A STREEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Zaimportowano do USA: Sanven Technology Sp. z o.o.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



**ROZPUST
NIK**

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ C/O YH Consulting
Biuro Ograniczone 147, Centurion Dom, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**ROZPUST
NIK**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Główny.



Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

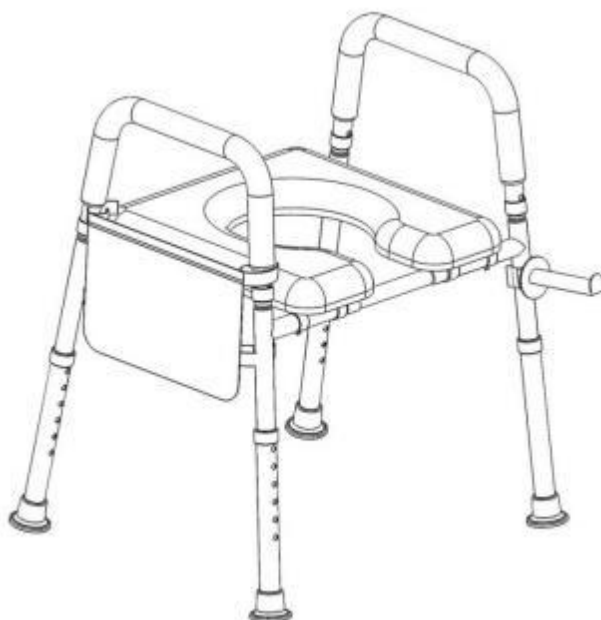
VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verhoogd Toilet Stoel

Model: XZY402

Model: XZY402



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie voor van onze gebruiker

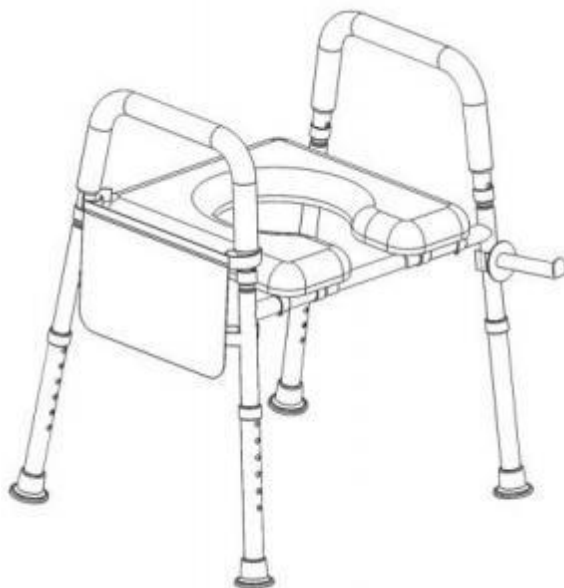
handleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product Jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over ons product.








Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen product, het zou moeten altijd zijn met zorg behandeld. Alsjeblieft Lees alle instructies voordat u met behulp van het. De informatie zal u helpen het beste te bereiken mogelijk resultaten .

SPECIFICATIE

Model	laden	Hoogte vanaf stoel tot vloer	Hoogte vanaf armléuning tot vloer
XZY402	400 pond / 181 kg	450-570 mm	650-770 mm

PACKAGE LIST




Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
A	Verbindingsbuis		4
B	Armsteun		2
C	Stoel bord		1
D	Dwarsbuis		2
E	C- klem		4
F	Tas		1
G	Been		4

H	Weefsel haak		1
---	--------------	--	---

I	Handmatig		1
---	-----------	--	---


INSTRUCTIES

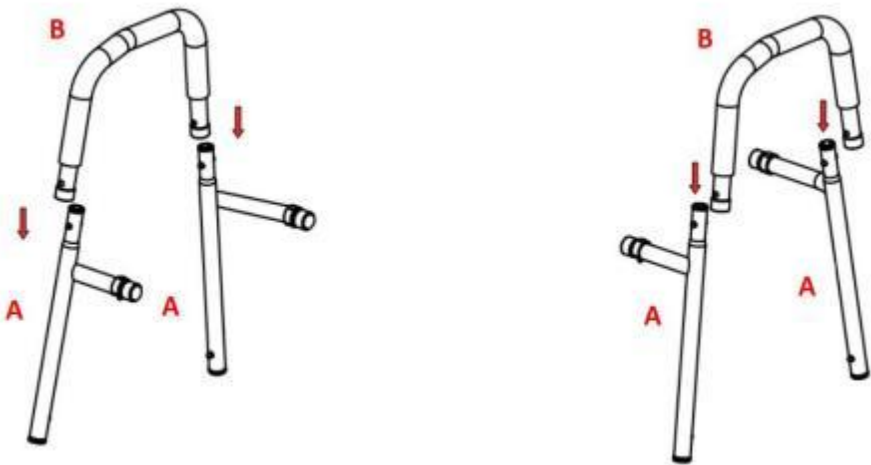Stap 1: Armsteun installeren (tabblad B) in de verbindingbuis (tabblad A).
 A). Maken zeker de knickers soepel verlopen.




Stap 2: Sluit de dwarsbuis aan (tabblad D) en linker/rechter buisengroep met C-

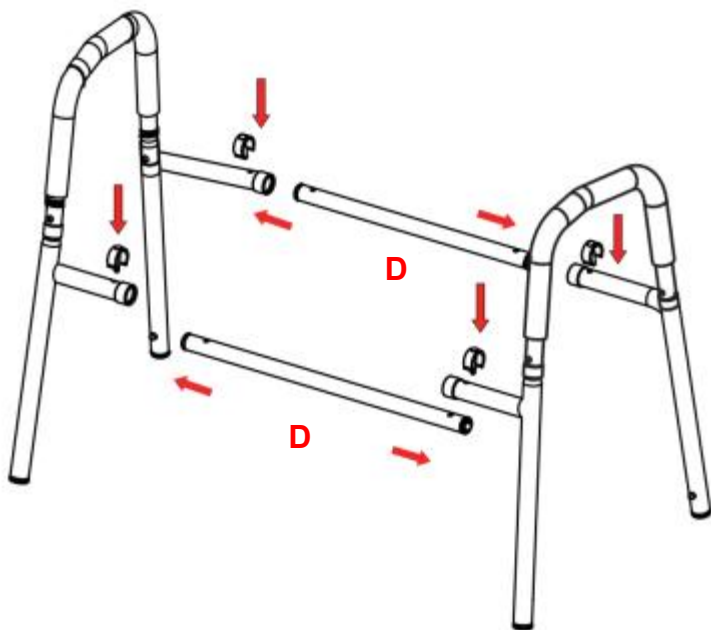klem. Waarschuwing: controleer zorgvuldig of de C-klem goed vastzit. recht op plaats de gat anders is het kan ernstig letsel veroorzaken.




Stap 3: De stoel installeren plaat (Tab C) aan de dwarsbuisgroep .

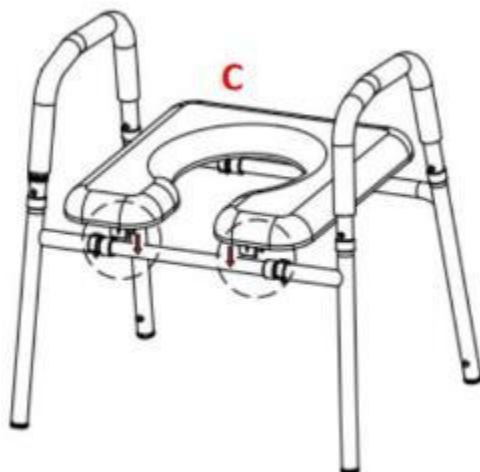

Stap 4: Bevestig de stoffen tas (tabblad F) naar de armsteun.



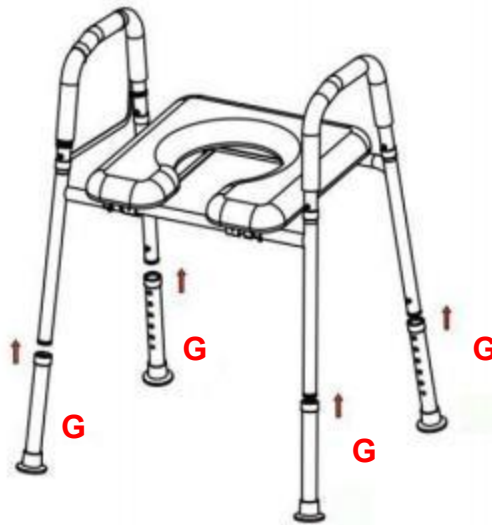Stap 5: Bevestig de voetbuis (lipje G) aan het hoofdframe. Zorg ervoor de knickers soepel.



Hoogteverstelling

1. Pas voor gebruik de uniforme hoogte aan van de vier benen volgens aan jou r specifiek behoeften.

2. Opgesloten plaats door duwen omhoog of naar beneden trekken op de voet buis.

CAUTIOUS

1. Altijd zijn Zeker Dat de stoel is correct En veilig vergrendeld in plaats voor gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van de stoel zit altijd strak. Fysiek uitgedaagd gebruikers zou moeten zijn begeleid of bijgestaan wanneer nooit met behulp van dit product.
3. De verhoogde toiletzitting moeten niet zijn gebruikt ter ondersteuning meer dan 300 lbs. NIET gebruiken het product is overbelast. Gewicht van de gebruiker zou moeten zijn gecentreerd over toilet stoel, niet te vooruit of te ver te een kant, als eenheid kan kantelen.
4. Voor modellen met armleuningen: De armen Zijn voor de doel van voorzien hulp bij het in- en uitstappen de stoel. Probeer NIET de armen te gebruiken om de volledige lichaamsgewicht t tijdens de overdracht, als dit kunnen resultaat in mislukking van de eenheid en risico op blessure.
5. Inspecteer alle onderdelen voor verzending schade voor montage . Als er is verzending schade - DOEN NIET GEBRUIK . Contact dealer/vervoerder voor meer informatie instructies.
6. Zorg ervoor dat de hoogte aanpassen klikken knoppen volledig uitsteken door de dezelfde respectievelijke gat van elk been verlenging. Dit zullen ervoor zorgen dat de been extensies Zijn veilig vergrendeld in positie En een zelfs hoogte wordt bereikt.
7. Zorg ervoor dat ALLE duimschroeven zijn vastgedraaid.
8. Controleer de rubberen punt s op de been extensies voor scheuren, slijtage of als zij Zijn vermist. Vervang onmiddellijk een of alle als een van deze onvolkomenheden bestaan.
9. Alle vier beenstrekkingen met rubberen punten MOETEN elkaar raken de vloer tegelijkertijd te allen tijde .
10. DO NIET op staan product.
11. Regelmatig rekening voor zeker montage En contact steun als in twijfel. Zorg ervoor dat de poten van het product gelijk en vergrendeld zijn voor gebruik, en stopzetten gebruik als er tekenen van slijtage zijn,

CAUTIOUS

schade, of vermist onderdelen. De product is naar zijn gebruikt op vlakke, stabiele oppervlakte . Doen niet demonteren als niet nodig,

als Het macht compromis de levensduur van het product. Niet wijzigen de product tenzij anders vermeld in de handmatig.

12. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en de montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Als u allergisch bent reactie treedt op, stop onmiddellijk gebruiken en een arts raadplegen gezondheidszorg professioneel.

13. Schoon regelmatig met behulp van A mild wasmiddel En warm water, afspoelen uit eventuele zeepresten. Na het schoonmaken goed laten drogen .

14. Controleer voor gebruik met uw zorgverlener die Het product voldoet aan uw specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn niet A vervanger voor medisch advies.

15. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meest voorkomende soorten commodes. Het past niet overal. soorten toiletten; zijn Zeker Dat de eenheid is correct geïnstalleerd, past goed en is stabiel voor gebruik.

ONDERHOUD

1. REGELMATIGE SCHOONMAAK IS AANBEVOLEN, GEBRUIK EEN NIET-SCHUREND SCHOONMAKER OF WASMIDDEL. SPOELEN MET WARM WATER EN DROOG

VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

2. ALSTUBLIEFT INSPECTEER REGELMATIG UW Verhoogde toiletzitting met WAPENS EN ZIJN ONDERDELEN VOOR ELKE CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE OF SLIJTAGE.

3. Om de schoonheid van de originele afwerking te behouden, reinigt u met mild zeep En Spoel af met warm water. Veeg de badzitting na elke wasbeurt droog. gebruik.

Fabrikant: GEZONDHEIDSBRON MEDISCHE APPARATUUR (GUANGDONG)
BV.

Adres : 1e verdieping , nr . 10 West Industrieel Laan , Haimai Industrieel Zone , Gaohai-gemeenschap , Danzao Dorp , Nanhai Wijk , Foshan , Guangdong , 528223, CHINA . **Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEV A STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion Huis, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Voornaamst.



**Technische ondersteuning en E-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Upphöjd Toalett Plats

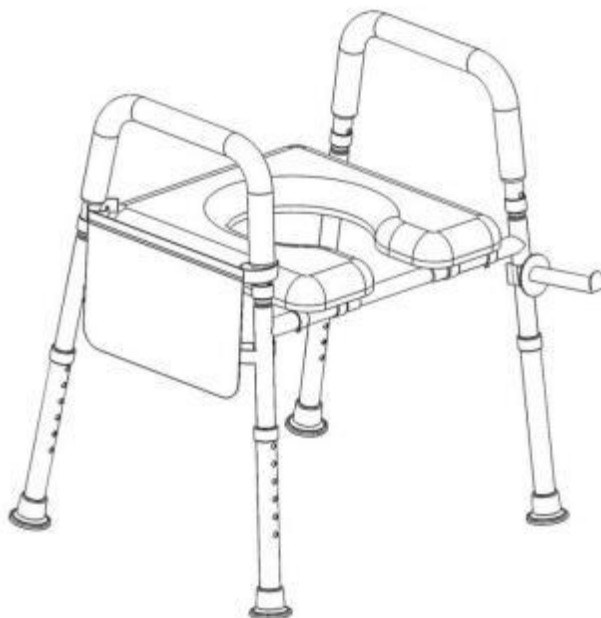
Modell: XZY402

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Upphöjd toalettsits

Modell: XZY402




Detta är originalet instruktion, behaga läs alla Läs noggrant igenom instruktionerna i handboken innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning. av våra användare manual. Produktens utseende ska vara föremål för de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.







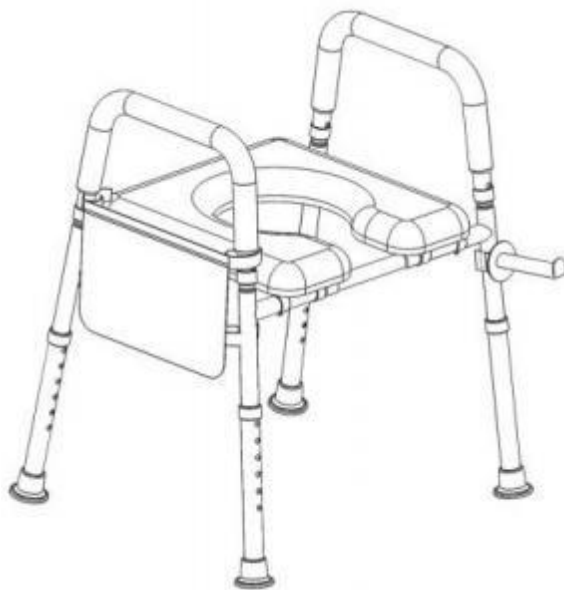
Tack så mycket för att du valde detta produkt, den borde alltid vara hanteras med varsamhet. Behaga läs alla instruktioner innan använder det. Den informationen kommer hjälpa dig att uppnå det bästa möjlig resultat .

SPECIFIKATION

Modell	ladda	Höjd från säte till golv	Höjd från armstöd till golv
XZY402	180 kg / 181 kg	450–570 mm	650–770 mm

PACKAGE LIST




Inga.	Namn	Bild	ANTAL
En	Anslutningsrör		4
B	Armstöd		2
C	Plats tallrik		1
D	Tvärgående rör		2
E	C -klämma		4
F	Väska		1
G	Ben		4

H	Vävnad krok		1
---	-------------	--	---


Jag	Manuell		1
-----	---------	--	---

INSTRUKTIONER

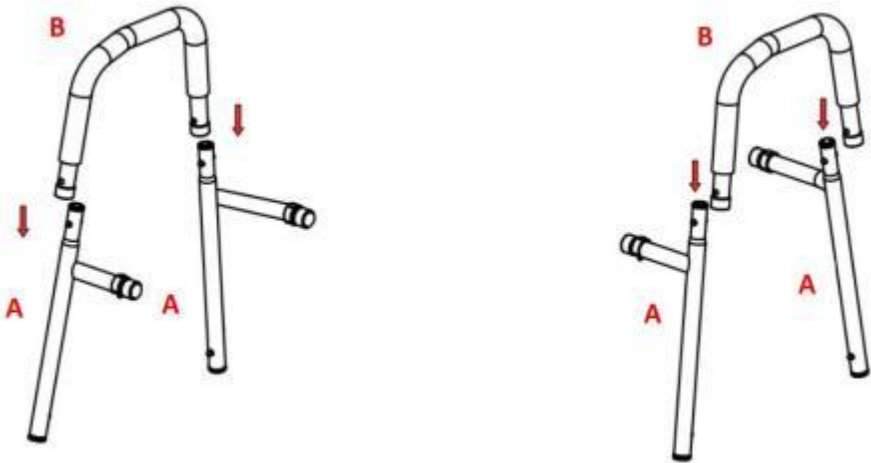
Steg 1: Montera armstödet (flik B) in i anslutningsröret (flik A). Görå säker på kulorna löpa smidigt.



Steg 2: Anslut tvärgående rör (flik D) och vänster/höger rörgrupp med C-klämman. Uppvärmning: kontrollera noggrant att C-klämman är rätt till sätt in håll annars, det kan orsaka allvarliga skador.

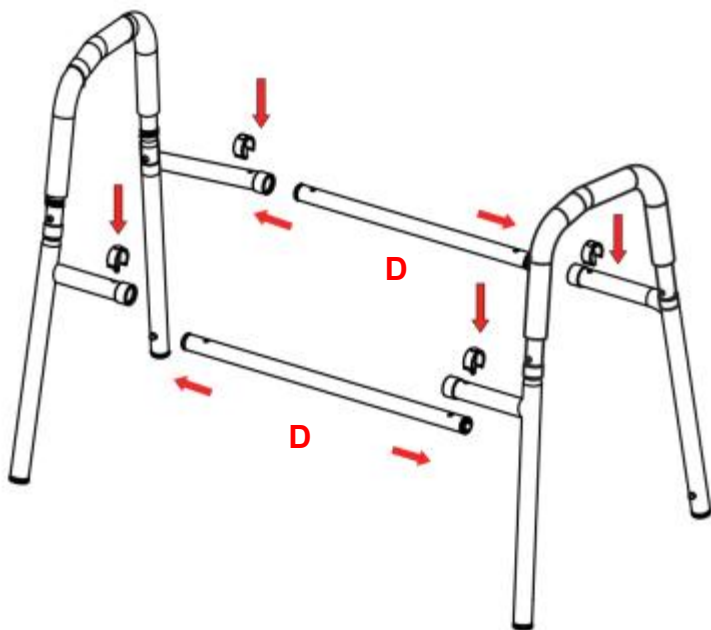


Steg 3: Montera sätet plattan (flik C) till den tvärgående rörgruppen .

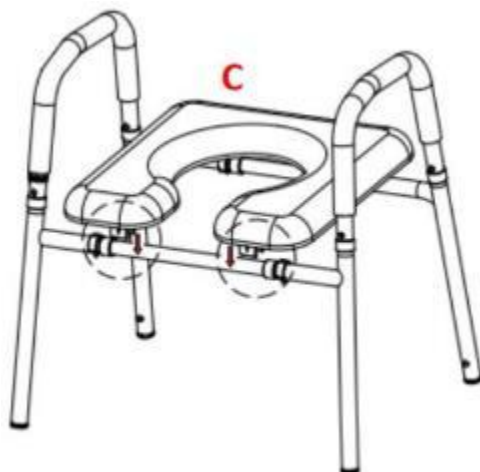

Steg 4: Fäst tygpåsen (flik F) till de armstöd.



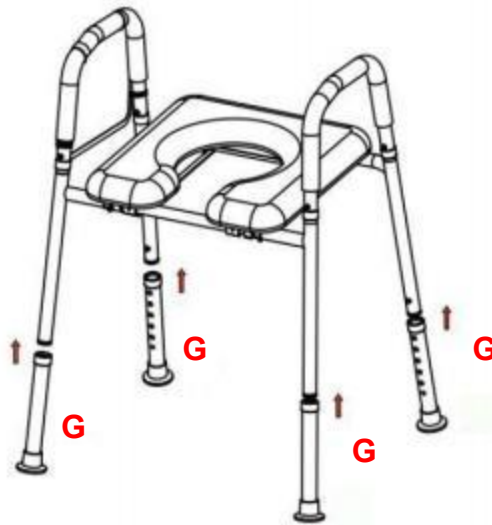Steg 5: Anslut fotröret (flik G) till huvudramen. Se till de marmorerar smidigt.



Höjjustering

1. Justera den enhetliga höjden före användning av de fyra ben enligt till dig r specifik behov.
2. Inlåst plats vid tryckande upp eller dra ner på foten rör.

CAUTIOUS

1. Alltid vara säker att de plats är korrekt och säkert låst i plats före använder.
2. Var säker att låsningen av sätet är tätt hela tiden. Fysiskt utmanad användare skall vara övervakad eller assisterad vem aldrig använder detta produkt.
3. De upphöjd toaletsits måste inte vara används för att stödja mer än 300 lbs. ANVÄND INTE produkten är överbelastad. Användarens vikt borde vara centrerad över toalett plats, inte för fram eller även långt för en sida, som enhet kan ge dricks.
4. För modeller med armstöd: De vapen är för de syfte av tillhandahållande hjälp vid på- och avstigning sätet. FÖRSÖK INTE att använda armstöden för att stödja fullt kroppsvikt t under överföringen, som detta maj resultat i misslyckande av de enhet och risk för skada.
5. Kontrollera alla delar för frakt skada före röv embly. Om det finns är frakt skada - DO INTE ANVÄND . Kontakta återförsäljare/transportör för ytterligare instruktioner.
6. Se till att höjd justeras knäppa knappar fullt skjuta ut genom de samma respektive hål av varje le g förlängning. Detta vilja säkerställa att den ben tillägg är säkert låst i placera och en även höjd uppnås.
7. Se till att ALLA tumskruvar är åtdragna.
8. Kontrollera gummispetsar på ben tillägg för revor, slitage eller om de är saknad. Byt omedelbart ut alla eller alla om någon av dessa brister existera.
9. Alla fyra benförlängningar med gummispetsar MÅSTE vidröras de golvet samtidigt hela tiden.
10. GÖR INTE stå på produkt.
11. Regelbundet kontrollera för säkra montering och kontakta stöd om i tvivel. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryta användande om det finns tecken på slitage, skada, eller saknad delar. Den produkt är till vara begagnad på plan, stabil sura ansikten. Gör inte ta isär om inte nödvändig,

som det makt kompromiss livslängden av produkten. Ändra inte de produkt om inte annat anges i manuell.

12. Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion inträffar, upphör använd omedelbart och kontakta en sjukvård professionell.

13. Rengör regelbundet använder en mild rengöringsmedel och värma vatten, sköljer e av eventuella tvålrester. Torka noggrant efter rengöring.

14. Bekräfta före användning med din vårdgivare som produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer är inte en ersättare för medicinsk rådgivning.

15. Denna produkt är utformad för användning med de vanligaste typerna av toaletter. Den passar inte alla toaletttyper; vara säker att de enhet är korrekt installerad, passar ordentligt och är stabil före använda.

UNDERHÅLL

1. REGELBUNDEN STÄDNING ÄR REKOMMENDERAD, ANVÄNDA ETT ICKE-SLIPANDE RENGÖRING ELLER RENGÖRINGSMEDEL.

Skölj med varmt vatten OCH TORKA

HELT. SLIPADISKA DUKAR KAN SKADA YTAN .

2. SNÄLLA GÖR REGELBUNDET INSPEKTERANDE AV DIN Upphöjd toalettstol med VAPEN OCH DESS DELAR FÖR ALL KORROSION, BRUCKSKADA,

KOMPRESSION ELLER SLITAGE.

3. För att bevara den ursprungliga finishens skönhet, rengör med mild tvål och skölj med varmt vatten. Torka badkarssitsen torr efter varje använda.

Tillverkare: HÄLSOKÄLLA MEDICINSK UTRUSTNING (GUANGDONG) AB

Adress : 1 :a våning , nr . 10 väst Industriell Aveny , Haimai Industriell Zon ,
Gaohai-samhället , Danzao Stad , Nanhai Distrikt , Foshan , Guangdong , 528223,
Kina . **Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEV A
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166
Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



REP

YH-KONSULTATION LIMITED. C/O YH
Consulting Begränsat kontor 147, Centurion
Hus, London
Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Huvudsaklig.



Teknisk support och E - garanticertifikat
www.vevor.com/support