

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LAB DISTILLATION APPARATUS

USER MANUAL

MODEL:YHEO-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:YHEO-2



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this model. Glass fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.


Parts name	Number of parts	Description
Flask	1	500ml with glass plug
Coil condenser	1	19/26 ground glass joint
Conical flask	1	150ml
Glass stopper	2	19#
Pear-shaped separatory funnel	1	125ml
Beaker	1	150ml
Glue head dropper	1	Red glue head
Thermometer	1	100℃
Plastic clip	10	/
Latex tubing	1	2m
Vacuum grease	1	5ml
Flask brush	1	Small size
Electronic hot plate	1	1000W
Essential oil bottle	2	30ml Brown bottle
Iron support stand	1	With 50cm supporting pole
Cross clamp	2	/
Flask clamp	2	/
Circular ring	2	7.3cm、5.1cm
Thermometer adapter	1	Rubber plug

OPERATION


1. Assemble the iron support stand;



2. Install the cross clamp and the flask clamp at the appropriate height, then install the coil condenser vertically;

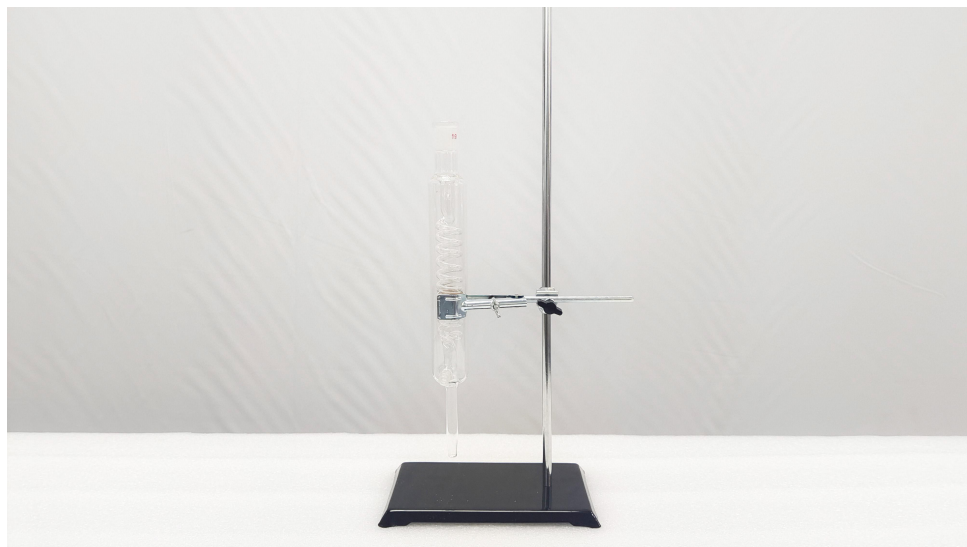

3. Install the circular ring at the appropriate height;

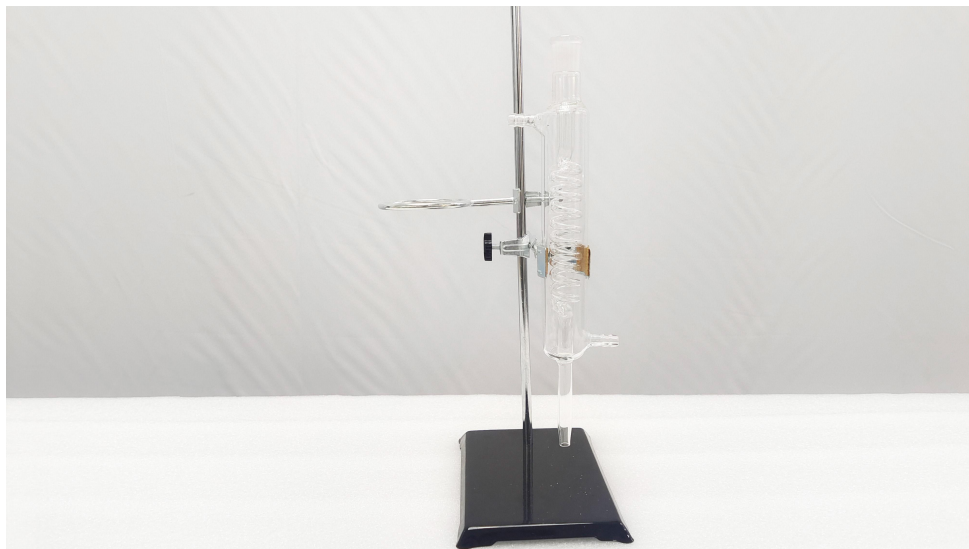

4. Install the flask;




5. Install the cross clamp and the flask clamp to hold the flask;



6. Install the circular ring;



7.Install the pear-shaped separatory funnel;

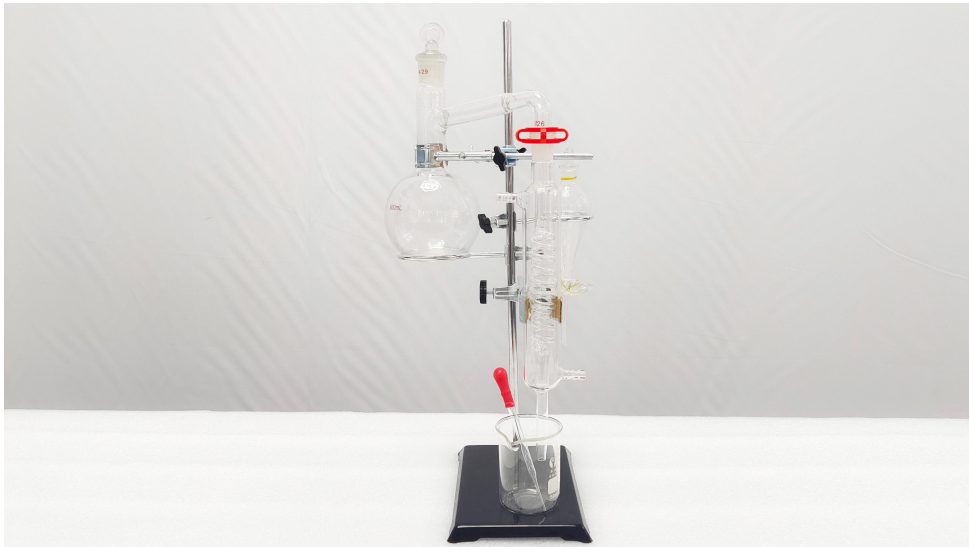

PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-2		
Power	1000W		
Voltage	AC 120V ,60HZ	AC 220-240V ,50HZ	
Region	AMERICA	EUROPE	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

This product complies with the provisions of the European Directive 2012/19/EC. The symbol marked with a crossed out wheelie bin indicates that this product requires separate recycling in the EU. The same is true for products and all accessories marked with this symbol. Products marked as such must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

APPAREIL DE DISTILLATION DE LABORATOIRE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : YHEO-2

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DISTILLATION EN LABORATOIRE
APPAREIL

MODÈLE : YHEO-2



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir l'appareil de distillation de laboratoire.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSIEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité
prenant en charge un appareil de distillation de laboratoire entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce modèle. Les ferrures en verre doivent toujours être manipulé avec précaution. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.


Nom des pièces	Nombre de pièces 1	Description
Ballon		500 ml avec bouchon en verre
Condensateur à serpentin	1	Verre dépoli 19/26 articulation
Fiole conique	1	150 ml
Le verre s'arrête	2	19#
En forme de poire Séparateurs à entonnoir	1	125 ml
Gobelet	1	150 ml
Compte-gouttes à tête de colle	1	Tête de colle rouge
Thermomètre	1	100
Clip en plastique	10	/
Tube en latex	1	2m
Graisse sous vide	1	5ml
Brosse à fiole	1	Petite taille
Plaque chauffante électronique	1	1000 W
Bouteille d'huile essentielle	2	Flacon marron de 30 ml
Support de fer	1	Avec support de 50 cm il n'y a pas
Serre-joints en croix	2	/
Pince à fiole	2	/
Anneau circulaire	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adaptateur de thermomètre	1	Bouchon en caoutchouc

OPÉRATION


1. Assemblez le support du fer ;



2. Installez la pince transversale et la pince du ballon à la hauteur appropriée, puis installez le condenseur à serpentin verticalement ;

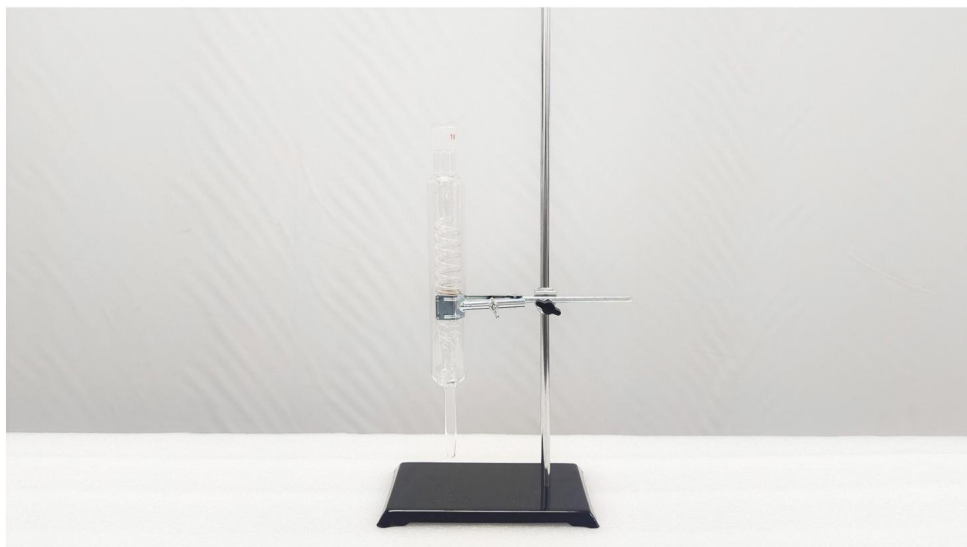

3. Installez l'anneau circulaire à la hauteur appropriée ;

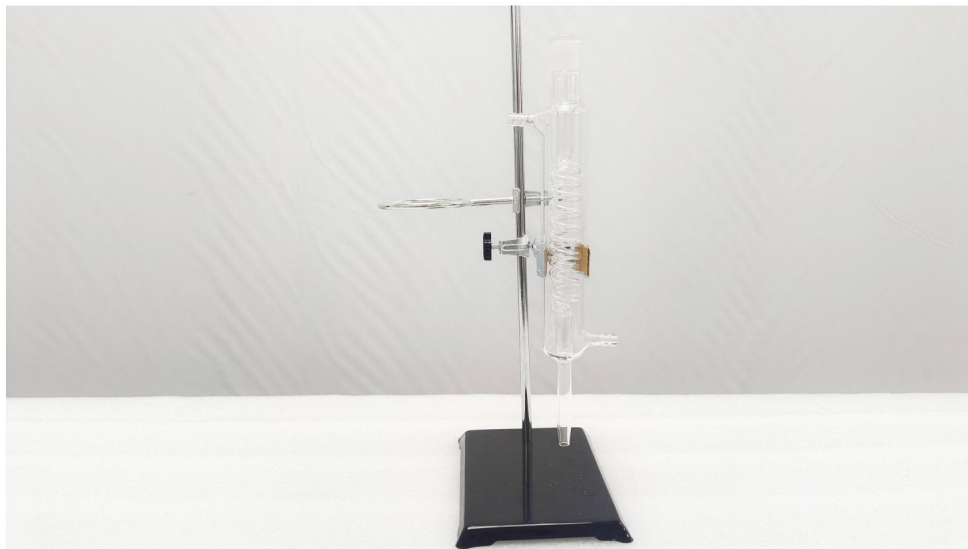

4. Installez le flacon ;




5. Installez la pince croisée et la pince du flacon pour maintenir le flacon ;



6. Installez l'anneau circulaire ;



7.Installez l'entonnoir séparateur en forme de poire ;

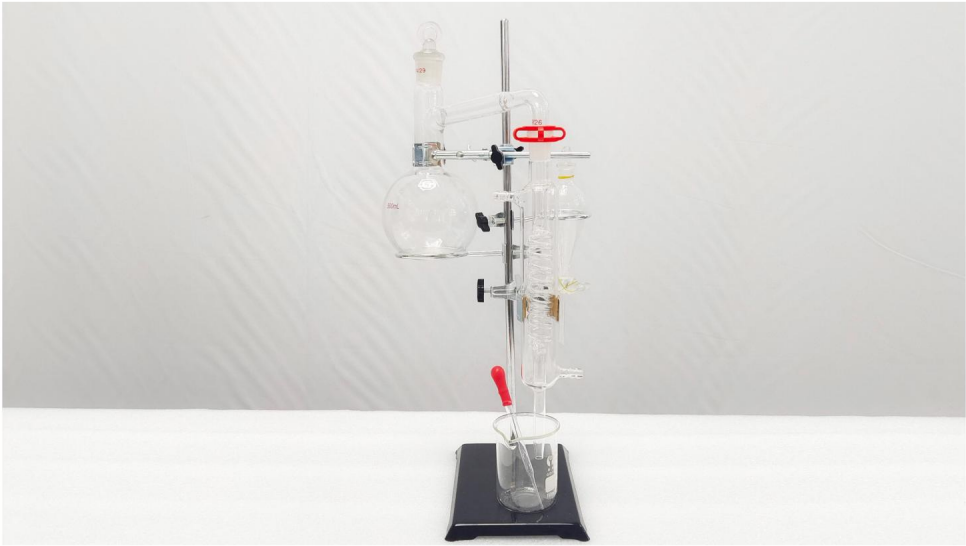

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	YHEO-2		
Pouvoir	1000 W		
Tension CA	120 V, 60 Hz	CA 220-240 V, 50 Hz	
Région	AMÉRIQUE	EUROPE	AUSTRALIE

RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION

Ce produit est conforme aux dispositions de la Directive Européenne 2012/19/CE. Le symbole marqué d'une poubelle barrée indique que ce produit nécessite un recyclage séparé dans l'UE. Il en va de même pour produits et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme ceux-ci ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être amenés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques équipement.



Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LABOR-DESTILLATIONSGERÄT

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: YHEO-2

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

- 1 -

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher
Unterstützung des Labordestillationsapparates.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses
Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die zulässige Gewichtsgrenze.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher
Unterstützung eines vollständig beladenen Labordestillationsgeräts.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben. Glasbeschläge sollten immer mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.

Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.


Teilename	Anzahl der Teile 1	Beschreibung
Flasche		500ml mit Glasstopfen
Spulenkondensator	1	19/26 Mattglas gemeinsam
Erlenmeyerkolben	1	150 ml
Glas bleibt stehen	2	19#
Birnenförmig Trichterabscheider	1	125 ml
Becherglas	1	150 ml
Leimkopf-Tropfer	1	Roter Klebekopf
Thermometer	1	100y
Kunststoffclip	10	/
Latexschläuche	1	2m
Vakuumfett	1	5 ml
Kolbenbürste	1	Kleine Größe
Elektronische Kochplatte	1	1000 W
Flasche mit ätherischem Öl	2	30ml braune Flasche
Bügeleisen-Ständer	1	Mit 50cm Stütze gibt es nicht
Kreuzklemme	2	/
Kolbenklemme	2	/
Kreisring	2	7,3 cm, 5,1 cm
Thermometer-Adapter	1	Gummistopfen

BETRIEB


1. Montieren Sie den Bügeleisenständer.



2. Installieren Sie die Querklemme und die Kolbenklemme in der entsprechenden Höhe und installieren Sie dann den Spulenkondensator vertikal.

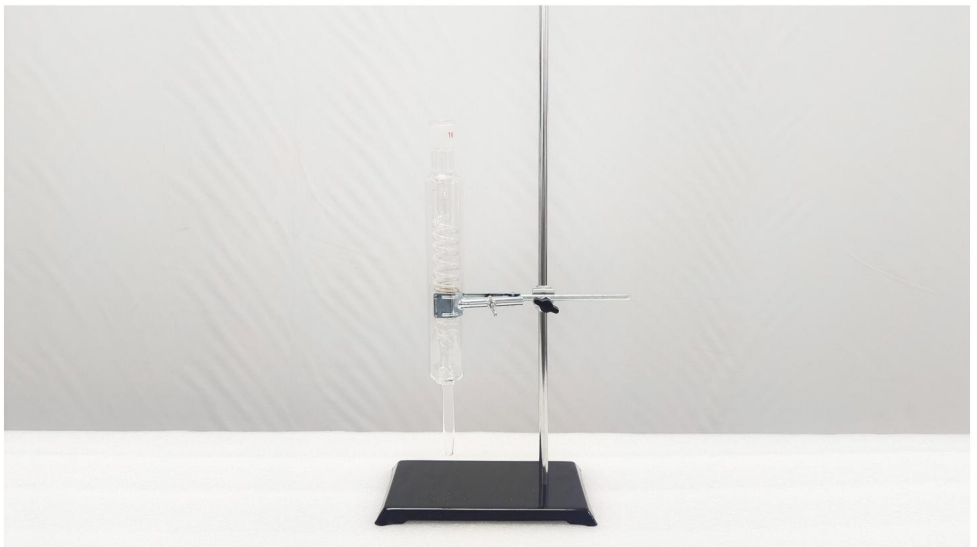

3. Installieren Sie den Kreisring in der entsprechenden Höhe;

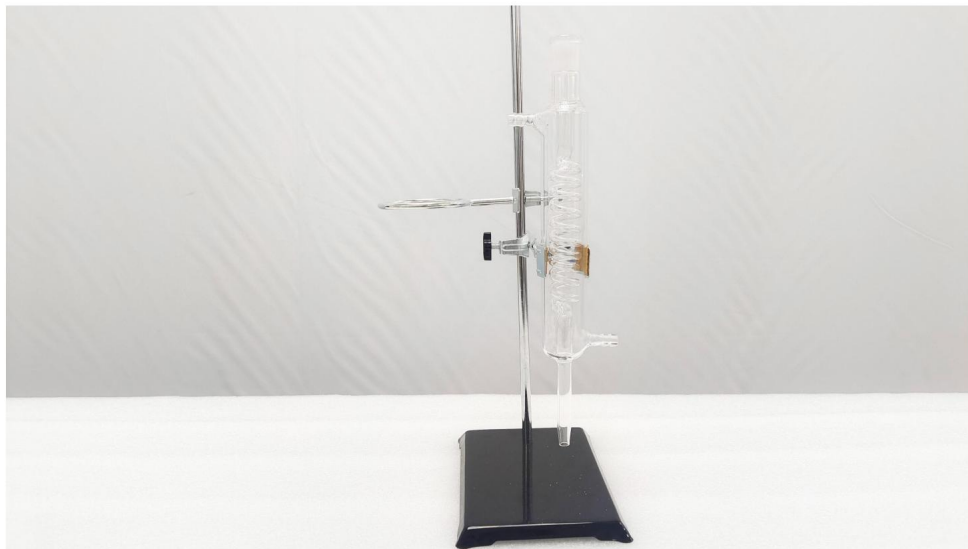

4. Setzen Sie den Kolben ein.




5. Installieren Sie die Querklemme und die Kolbenklemme, um den Kolben zu halten;



6. Installieren Sie den kreisförmigen Ring;



7.Installieren Sie den birnenförmigen Scheidetrichter;

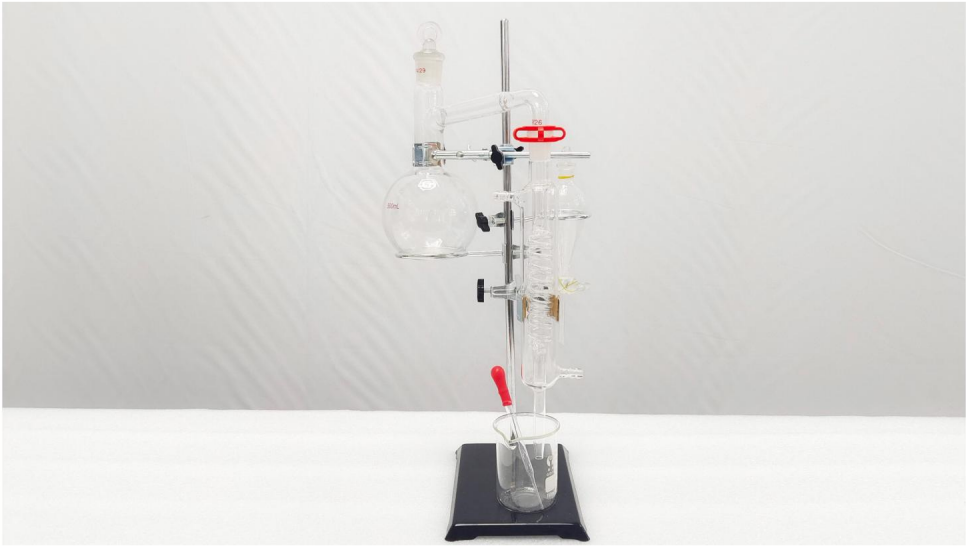

PRODUKTPARAMETER

Modell	YHEO-2		
Leistung	1000 W		
Spannung AC	120 V, 60 Hz	Wechselstrom 220-240 V, 50 Hz	
Region	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIEN

Rückgewinnung und Entsorgung

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU einer getrennten Wiederverwertung bedarf. Dasselbe gilt für Produkte und Zubehör, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Produkte, die als Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Ausrüstung.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

APPARECCHIATURA DI DISTILLAZIONE DA LABORATORIO

MANUALE D'USO

MODELLO: YHEO-2

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto dell'apparato di distillazione di laboratorio.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare la capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto di un apparecchio di distillazione da laboratorio completamente accessoriato.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo modello. Gli accessori in vetro devono sempre essere maneggiato con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.


Nome delle parti	Numero di parti 1	Descrizione
Pallone		500ml con tappo in vetro
Condensatore a serpentina	1	Vetro smerigliato 19/26 giunto
Beuta conica	1	150 ml
Il vetro si ferma	2	19#
A forma di pera Separatori a imbuto	1	125 ml
Becher	1	150 ml
Contagocce per la colla	1	Testa di colla rossa
Termometro	1	100ÿ
Fermaglio di plastica	10	/
Tubi in lattice	1	2m
Grasso per vuoto	1	5 ml
Spazzola per fiaschetta	1	Piccole dimensioni
Piastra riscaldante elettronica	1	1000W
Bottiglia di olio essenziale	2	Flacone marrone da 30 ml
Supporto in ferro	1	Con supporto da 50 cm non c'è
Morsetto a croce	2	/
Morsetto per pallone	2	/
Anello circolare	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adattatore termometro	1	Tappo di gomma

OPERAZIONE


1. Montare il supporto in ferro;



2. Installare il morsetto a croce e il morsetto a pallone all'altezza appropriata, quindi installare il condensatore a serpentina verticalmente;

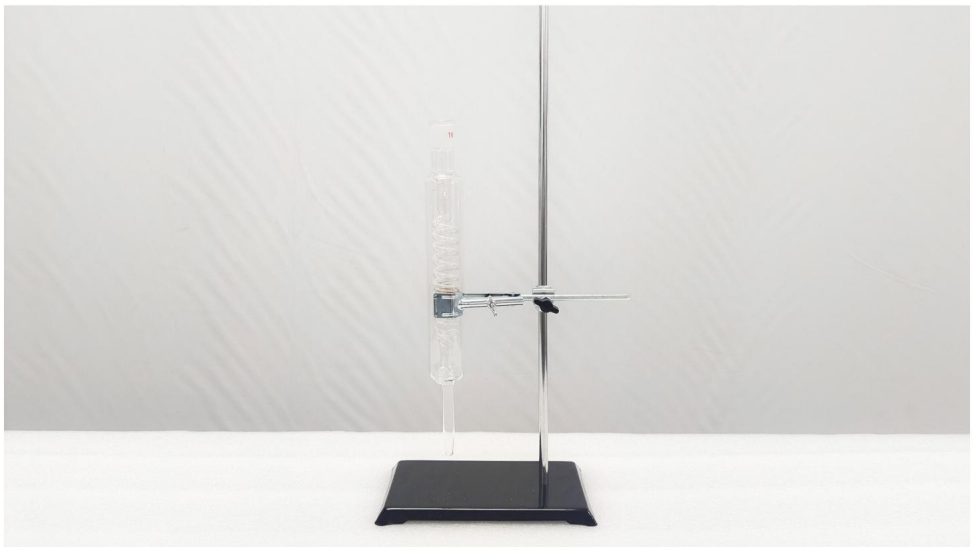

3. Installare l'anello circolare all'altezza appropriata;

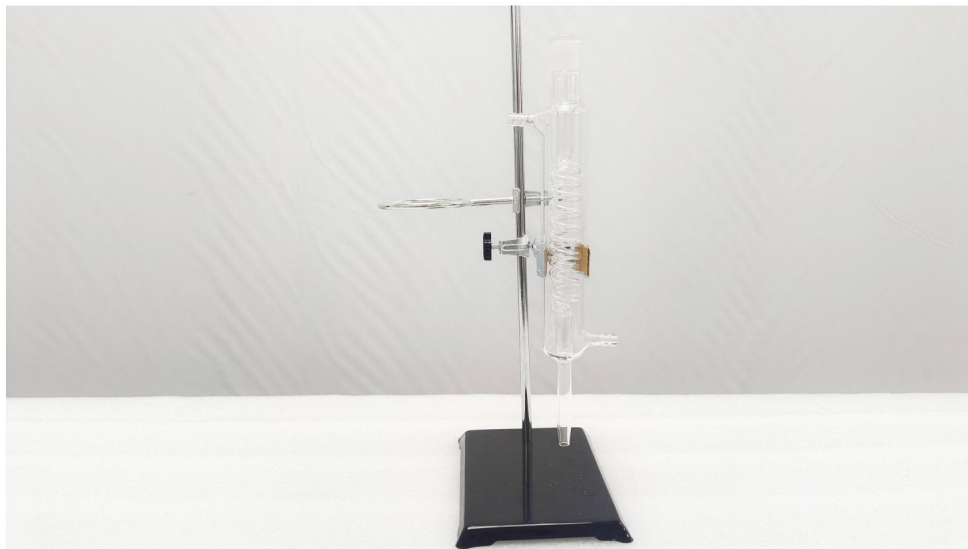

4. Installare il pallone;




5. Installare il morsetto a croce e il morsetto del pallone per tenere fermo il pallone;



6. Installare l'anello circolare;



7. Installare l'imbuto separatore a forma di pera;

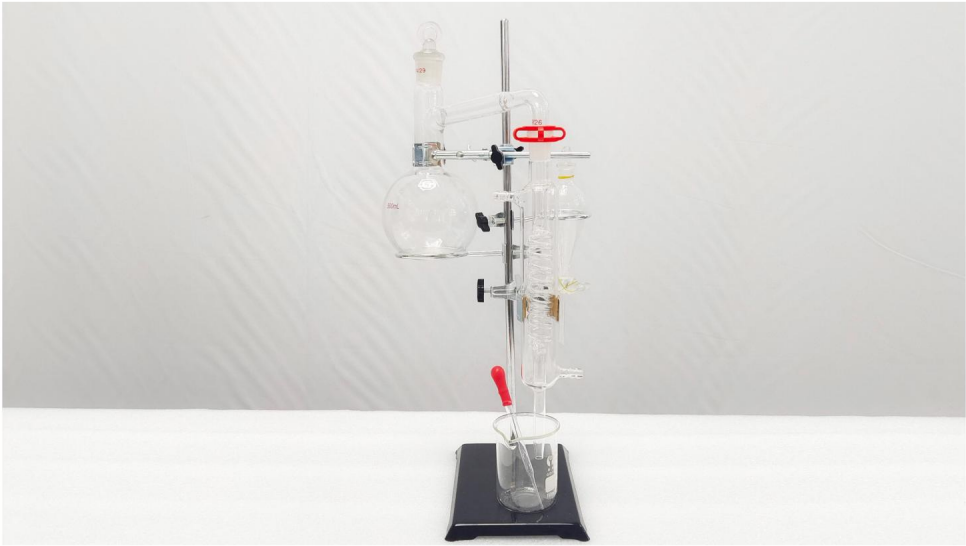

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	YHEO-2		
Energia	1000W		
Tensione AC	120V, 60HZ	CA 220-240 V, 50 Hz	
Regione	AMERICA	EUROPA	AUSTRALIA

RECUPERO E SMALTIMENTO

Questo prodotto è conforme alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo contrassegnato con un bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto richiede un riciclaggio separato nell'UE. Lo stesso vale per prodotti e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche attrezzatura.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

APARATO DE DESTILACIÓN DE LABORATORIO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: YHEO-2

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DESTILACIÓN DE LABORATORIO
APARATO

MODELO: YHEO-2



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
Apoyo al aparato de destilación de laboratorio.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso.
4. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este modelo. Los herrajes de vidrio siempre deben

Debe manipularse con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.


Nombre de la pieza	Número de piezas 1	Descripción
Matraz		500ml con tapón de vidrio
Condensador de bobina	1	Vidrio esmerilado 19/26 articulación
Matraz cónico	1	150 ml
Topes de vidrio	2	19#
En forma de pera Separadores de embudo	1	125 ml
Cubilete	1	150 ml
Gotero con cabezal de pegamento	1	Cabeza de pegamento rojo
Termómetro	1	100
Clip de plástico	10	/
Tubo de látex	1	2m
Grasa al vacío	1	5ml
Cepillo para matraz	1	Tamaño pequeño
Placa calefactora electrónica	1	1000W
Botella de aceite esencial	2	Botella marrón de 30 ml
Soporte de hierro	1	Con soporte de 50cm no hay
Abrazadera transversal	2	/
Abrazadera para matraz	2	/
Anillo circular	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adaptador de termómetro	1	Tapón de goma

OPERACIÓN


1. Ensamble el soporte de hierro;



2. Instale la abrazadera transversal y la abrazadera del matraz a la altura adecuada, luego instale el condensador de serpentín verticalmente;

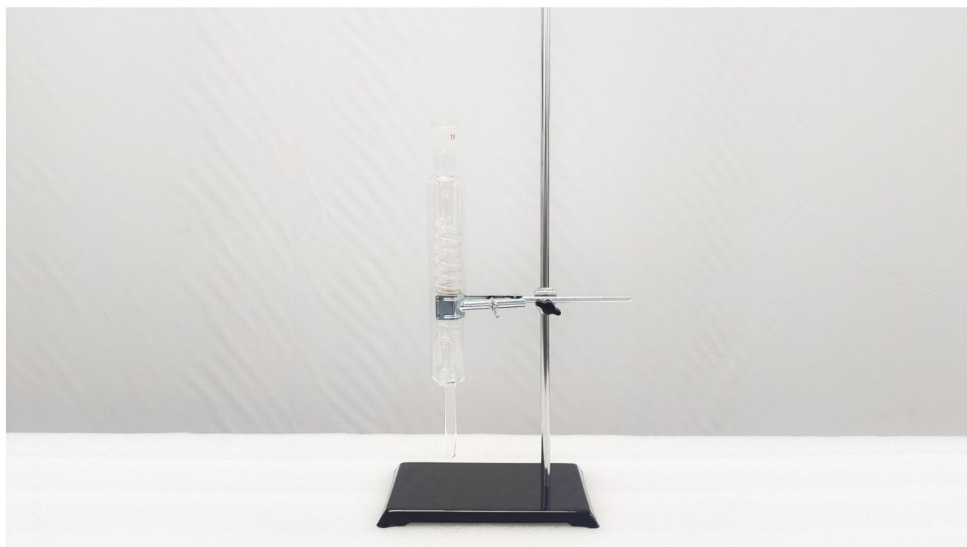

3. Instale el anillo circular a la altura adecuada;

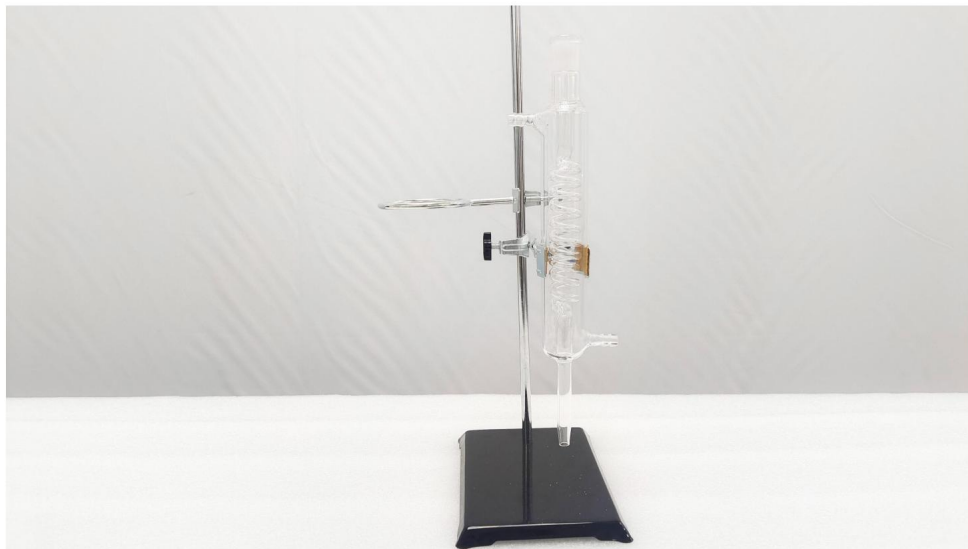

4. Instale el matraz;




5. Instale la abrazadera transversal y la abrazadera del matraz para sujetar el matraz;



6. Instale el anillo circular;



7.Instale el embudo de separación en forma de pera;

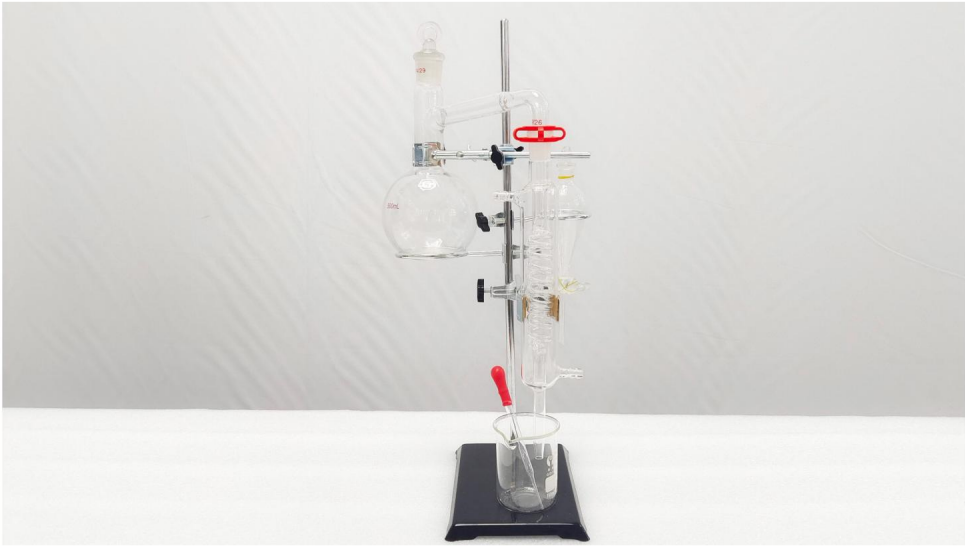

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	YHEO-2		
Fuerza	1000W		
Voltaje CA 120 V, 60 Hz	CA 220-240 V, 50 Hz		
Región	AMÉRICA	EUROPA	AUSTRALIA

RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN

Este producto cumple con las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo marcado con un contenedor de basura tachado indica que este producto requiere reciclaje por separado en la UE. Lo mismo se aplica a productos y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como Estos no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben desecharse. llevados a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos equipo.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

APARAT DO DESTYLACJI LABORATORYJNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:YHEO-2

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Destylacja laboratoryjna
APARAT

MODEL:YHEO-2



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie aparatury do destylacji laboratoryjnej.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne użytkowanie. obsługujący w pełni wyposażony laboratoryjny aparat destylacyjny.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego modelu. Okucia szklane powinny być zawsze należy obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. informacje pomogą Ci osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty.


Nazwa części	Liczba części 1	Opis
Kolba		500ml z korkiem szklanym
Kondensator węzownicy	1	Szkoło szlifowane 19/26 wspólny
Kolba stożkowa	1	150ml
Szkoło zatrzymuje się	2	19#
W kształcie gruszki separatory funnel	1	125ml
Zlewka	1	150ml
Kroplomierz z główką klejącą	1	Czerwona główka kleju
Termometr	1	100°C
Klips plastikowy	10	/
Rurka lateksowa	1	2 m
Smar próżniowy	1	5ml
Pędzel do kolby	1	Mały rozmiar
Elektroniczna płyta grzewcza	1	1000 W
Butelka z olejkim eterycznym	2	30ml Brązowa butelka
Podstawka żelazna	1	Z 50cm podporą nie ma
Zacisk krzyżowy	2	/
Zacisk do kolby	2	/
Pierścień okrągły	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adapter termometru	1	Korek gumowy

DZIAŁANIE


1. Złóż stojak pod żelazko;



2. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk kolby na odpowiedniej wysokości, a następnie zamontuj kondensator cewki pionowo;

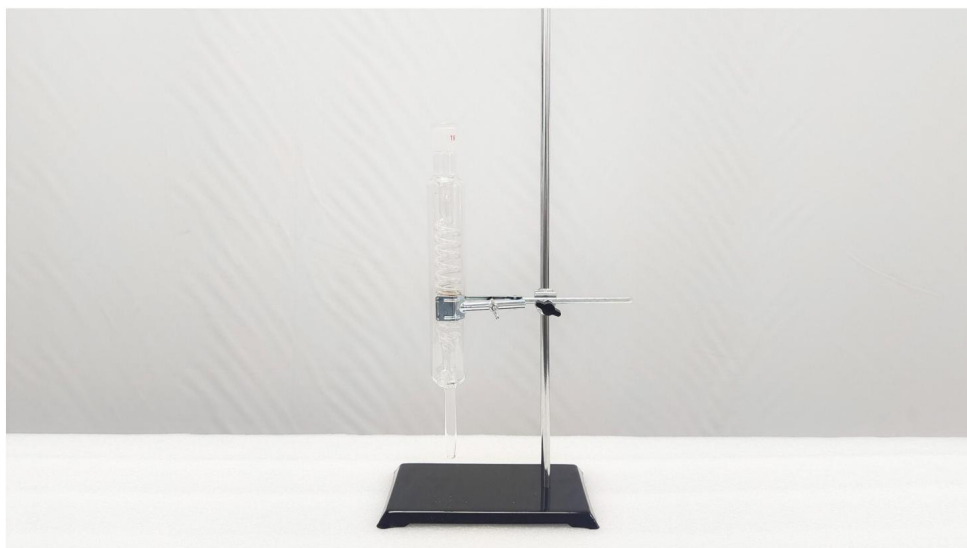

3. Zamontuj pierścień okrągły na odpowiedniej wysokości;

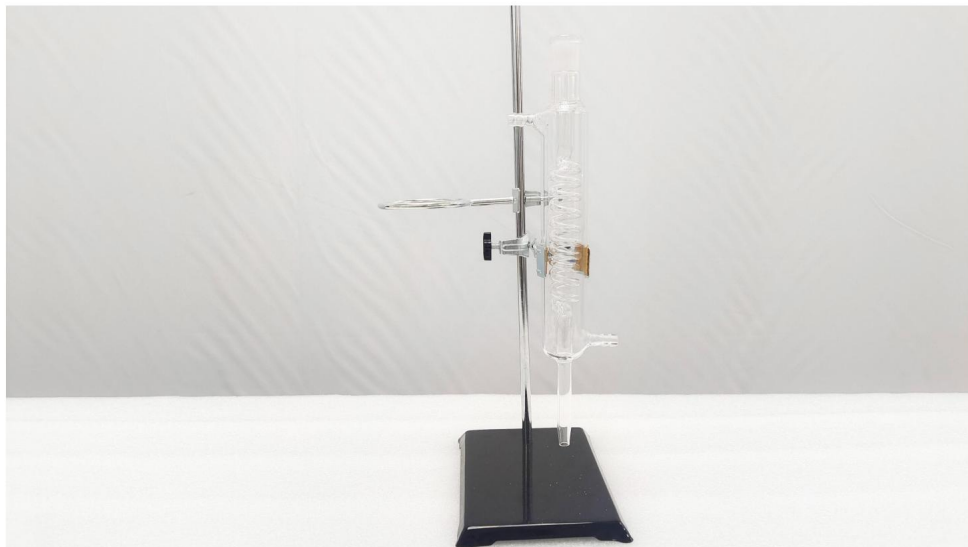

4. Zainstaluj kolbę;




5. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk kolby, aby przytrzymać kolbę;



6. Zamontuj pierścień okrągły;



7. Zamontuj lejek rozdzielczy w kształcie gruszki;

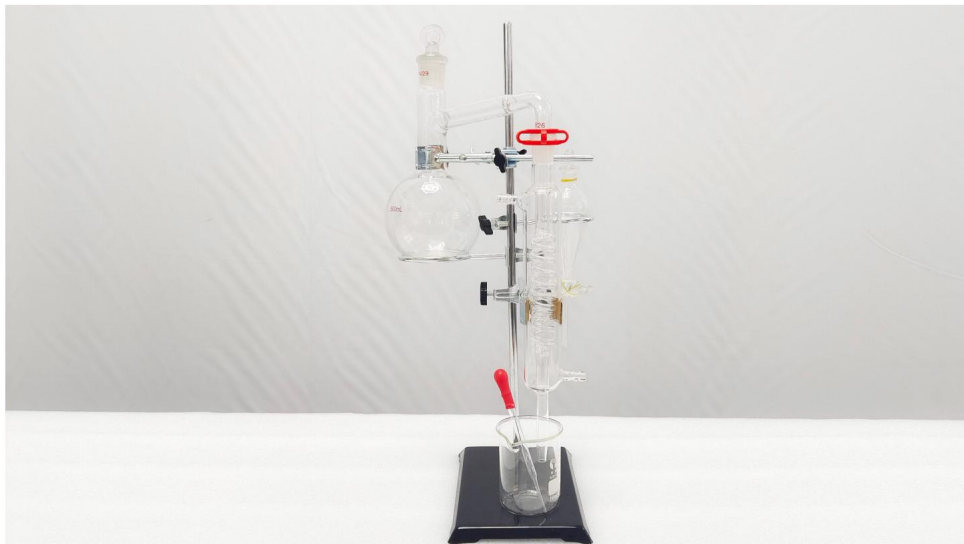

PARAMETR PRODUKTU

Model	YHEO-2		
Moc	1000 W		
Napięcie prądu zmiennego 120 V, 60 Hz	Prąd zmienny 220-240 V, 50 Hz		
Region	AMERYKA	EUROPA	AUSTRALIA

ODZYSKIWANIE I UTYLIZACJA

Produkt ten jest zgodny z przepisami Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol oznaczony przekreślonym pojemnikiem na śmieci na kółkach oznacza że ten produkt wymaga oddzielnego recyklingu w UE. To samo dotyczy produkty i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takich nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je zabrano do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu sprzęt.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LAB-DESTILLATIEAPPARAAT

GEbruikersHANDLEIDING

MODEL:YHEO-2

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATIE
INRICHTING

MODEL:YHEO-2



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.
2. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van het Lab Distillation Apparatus.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig uitgerust laboratoriumdestillatieapparaat.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit model hebt gekozen. Glasbeslag moet altijd voorzichtig worden behandeld. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.


Onderdelennaam	Aantal onderdelen 1	Beschrijving
Fles		500ml met glazen stop
Spoelcondensator	1	19/26 matglas gewricht
Conische kolf	1	150 ml
Glazen stopt	2	19#
Peervormig Trechterscheiders	1	125 ml
Beker	1	150 ml
Lijmkop druppelaar	1	Rode lijmkop
Thermometer	1	100ÿ
Kunststof clip	10	/
Latex slang	1	2m
Vacuümvet	1	5 ml
Flessenborstel	1	Klein formaat
Elektronische hete plaat	1	1000W
Flesje etherische olie	2	30ml Bruine fles
IJzeren steunstandaard	1	Met 50cm steun Dat is er niet
Kruisklem	2	/
Flesklem	2	/
Cirkelvormige ring	2	7,3 cmÿ5,1 cm
Thermometeradapter	1	Rubberen stop

WERKING


1. Monteer de ijzeren standaard;



2. Installeer de kruisklem en de kolfklem op de juiste hoogte en installeer vervolgens de spoelcondensor verticaal;

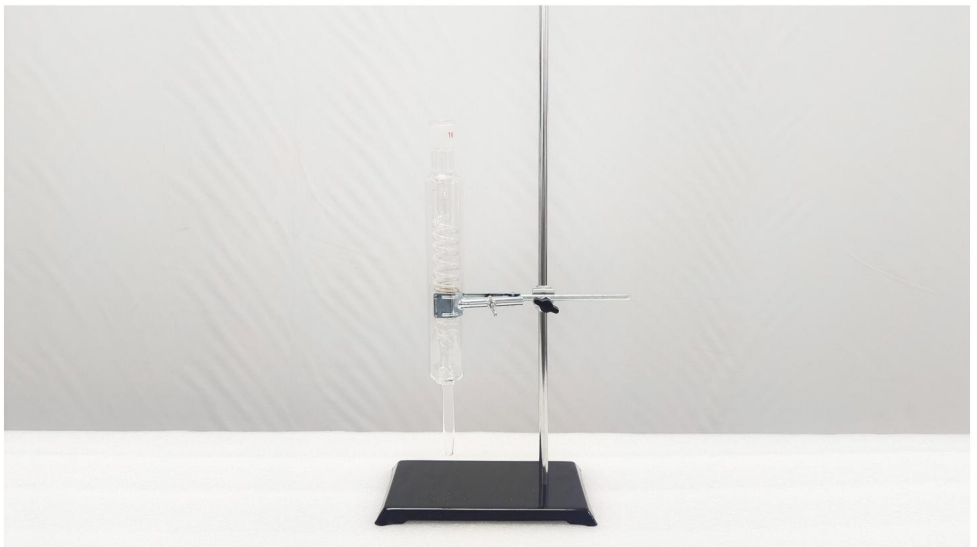

3. Plaats de cirkelvormige ring op de juiste hoogte;

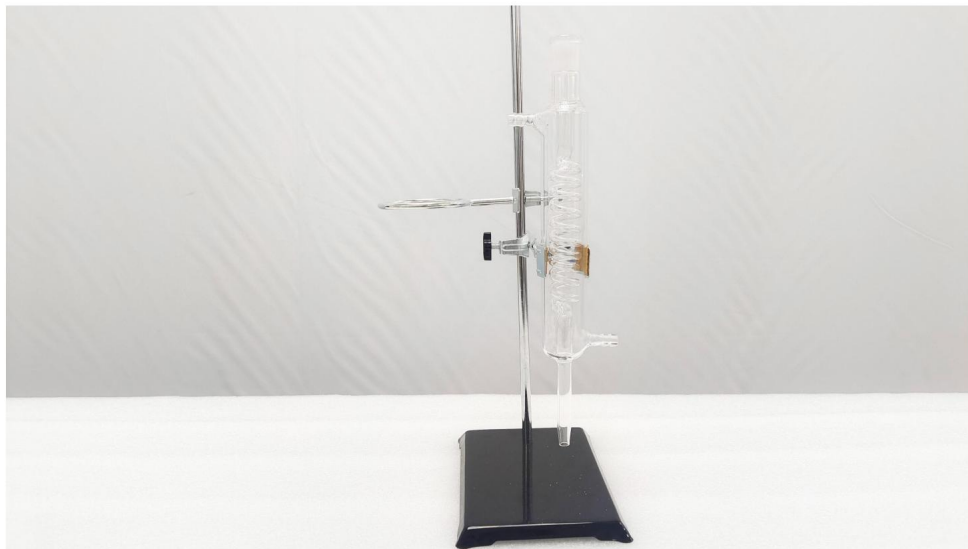

4. Plaats de kolf;




5. Installeer de kruisklem en de kolfklem om de kolf vast te houden;



6. Plaats de cirkelvormige ring;



7. Plaats de peervormige scheitrechter;

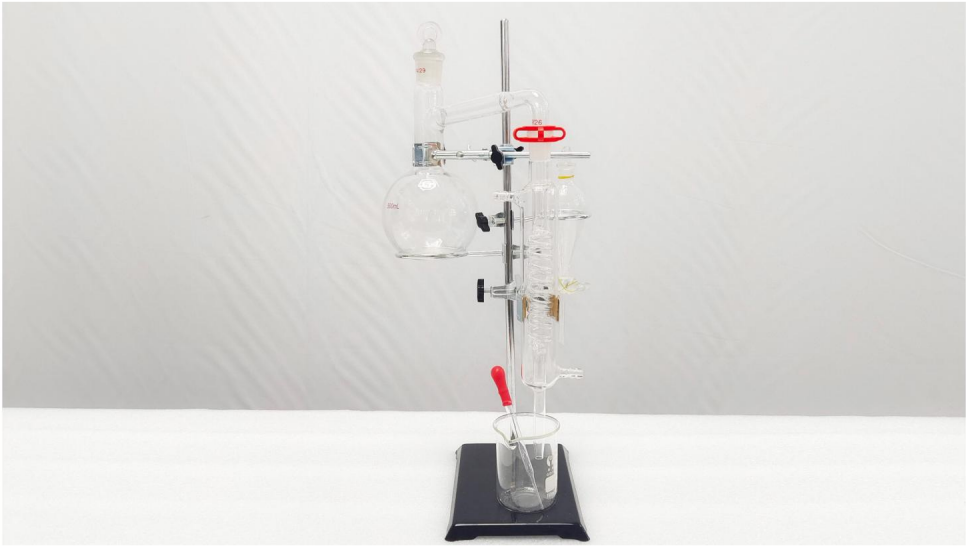

PRODUCTPARAMETER

Model	YHEO-2		
Stroom	1000W		
Spanning AC	120V, 60HZ	Wisselstroom 220-240V, 50Hz	
Regio	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIË

HERSTEL EN VERWIJDERING

Dit product voldoet aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte klike geeft aan dat dit product in de EU apart gerecycled moet worden. Hetzelfde geldt voor producten en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zijn gemarkeerd als dergelijke mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten apparatuur.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LAB DESTILLATIONSAPPARAT

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:YHEO-2

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LAB DESTILLATION
ANORDNING**

MODELL:YHEO-2



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja laboratoriets destillationsapparat.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fulladdad labbdestillationsapparat.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna modell. Glasbeslag ska alltid hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den information hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.


Delarnas namn	Antal delar 1	Beskrivning
Kolv		500ml med glasplugg
Spole kondensor	1	19/26 slipat glas gemensam
Konisk kolv	1	150 ml
Glas stannar	2	19#
Päronformad Trattseparatorer	1	125 ml
Bägare	1	150 ml
Limma huvuddroppare	1	Rött limhuvud
Termometer	1	100 y
Plastklämma	10	/
Latexslang	1	2m
Vakuumfett	1	5 ml
Kolvborste	1	Liten storlek
Elektronisk värmeplatta	1	1000W
Eterisk olja flaska	2	30 ml brun flaska
Stöd av järn	1	Med 50 cm stöd det finns inte
Tvärklämma	2	/
Kolvklämma	2	/
Cirkulär ring	2	7,3 cm, 5,1 cm
Termometeradapter	1	Gummiplugg

DRIFT


1. Montera järnstödet;



2. Installera tvärklämman och kolvklämman på lämplig höjd och installera sedan spol-kondensorn vertikalt;

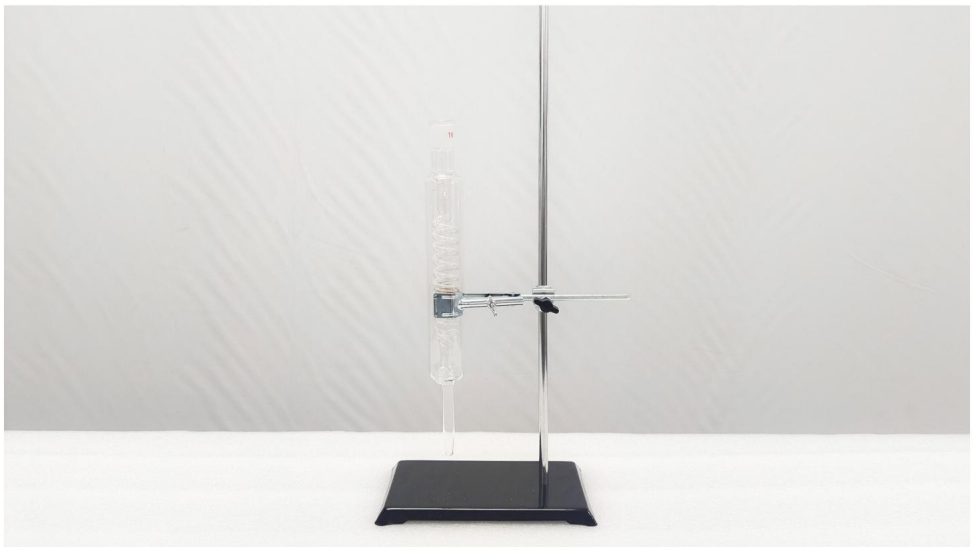

3. Installera den cirkulära ringen på lämplig höjd;

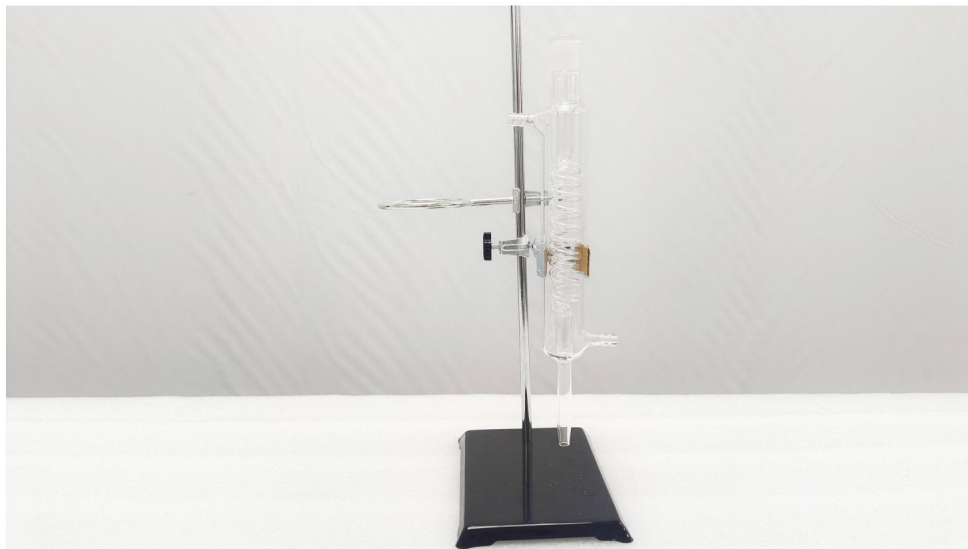

4. Installera kolven;




5. Installera tvärklämman och flaskklämman för att hålla flaskan;



6. Installera den cirkulära ringen;



7. Installera den päronformade separertratten;

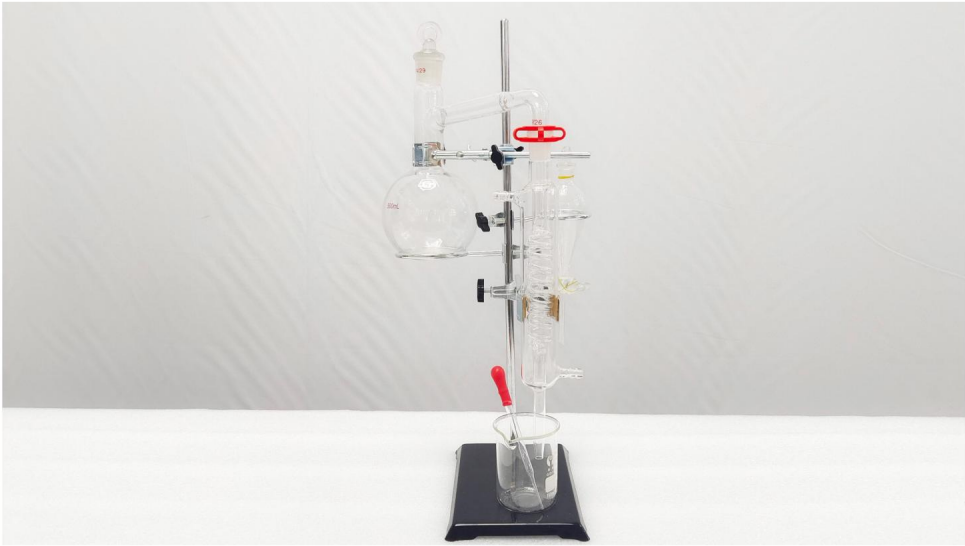

PRODUKTPARAMETER

Modell	YHEO-2		
Driva	1000W		
Spänning	AC 120V ,60HZ	AC 220-240V ,50HZ	
Område	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIEN

ÅTERSTÄLLNING OCH AVFALLSHANTERING

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen markerad med en överkorsad soptunna anger att denna produkt kräver separat återvinning inom EU. Detsamma gäller för produkter och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste göras tas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter utrustning.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support