

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060D-4A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product. Please always handle it with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Raised height	load	Adapt to toilet width
SC7060D-4A	4 in	300lbs/136kg	310-390mm





- Adjustable range of clamping handles on both sides is 310-390mm.
- Please check the size of your toilet before choosing the raised toilet seat.



- Check if the outer wall of the toilet is vertical, the slope may not clamp tightly.



PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	SC7060 D-4A
1	Raised Toilet Seat with cover		1
2	Clamp		2
3	Armrest		2
4	Manual		1

CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times, thus securing the seat to the toilet bowl. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat **MUST NOT** be used when overloaded. User's

weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.

4. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.

5. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.

6. If you have a style of commode that this product will not fit properly, or cannot be tightened securely as noted above, it is recommended that you discontinue usage.

7. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

8. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

9. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

INSTRUCTIONS

1. Place the toilet riser face down on a flat surface and rotate the brackets into the appropriate side locations.
2. Place each armrest into the holes in the bottom of the toilet seat. The metal buttons should be facing out.
3. Slide the armrest tube into position until the button clicks into the hole and a "click" sounds. Repeat the process for the rest of the holes.
4. Insert the side clamps.



5. set the toilet riser. Make sure the inside edge is on the inside of the toilet and the front edge is on the outside (B).



6. Turn the head of each of the two side supports clockwise. Check that the riser is fixed and immovable on the toilet. The riser should fit in a perfectly flat position.



7. Once the toilet riser is in place and fixed, you can raise and lower the lid when you see fit for greater hygiene.



MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH

ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE,
COMPRESSION OR WEAR.

Manufacturer: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
Address: 2-3 Floor of 65 Building, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siège de toilette surélevé

Modèle : SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modèle : SC7060D-4A



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Merci d'avoir choisi ce produit . Veuillez le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	Hauteur surélevée	charger	S'adapter à la largeur des toilettes
SC7060D-4A	4 pouces	3 0 0 lb/136 kg	310-390 mm





- La plage réglable des poignées de serrage des deux côtés est de 310 à 390 mm.
- Veuillez vérifier la taille de vos toilettes avant de choisir le siège de toilette surélevé.



- Vérifiez si la paroi extérieure des toilettes est verticale, la pente peut ne pas être bien serrée.



PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	SC7060 D-4A
1	Siège de toilette surélevé avec couvercle		1
2	Serrer		2
3	Accoudoir		2
4	Manuel		1

CAUTIONS

1. Assurez-vous toujours que le siège est correctement et bien verrouillé en place avant utilisation.
2. Assurez-vous que le verrouillage de le siège est serré à tout moment, sécurisant ainsi le siège à la cuvette des toilettes. Les utilisateurs handicapés physiques doivent être supervisé ou assisté lors de l'utilisation de ce produit.

3. Le siège de toilette surélevé NE DOIT PAS être utilisé en cas de surcharge. Le poids de l'utilisateur doit être centré au-dessus du siège des toilettes, ni trop en avant ni trop loin d'un côté, car l'appareil pourrait basculer.

4. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart types courants de toilettes. Elles ne conviennent pas à tous types de commodes ; assurez-vous que l'unité est correctement installé, s'adapte correctement et est stable avant utilisation.

5. Pour les modèles avec accoudoirs : Les accoudoirs sont pour le but de fournir une assistance lorsque monter et descendre du siège. N'essayez PAS de utiliser les bras pour supporter tout le poids du corps pendant transfert, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil et un risque de blessure .

6. Si vous avez un style de commode qui correspond à celui-ci le produit ne s'adaptera pas correctement ou ne pourra pas être serré solidement comme indiqué ci-dessus, il est il est recommandé d'arrêter l'utilisation.

7. Vérifiez régulièrement la solidité du montage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ne démontez pas le produit si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel.

8. Soyez prudent lors de l'utilisation et du montage. Évitez les températures extrêmes et les flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

9. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.

INSTRUCTIONS

1. Placez la colonne montante des toilettes face vers le bas sur une surface plane et faites pivoter les supports dans les emplacements latéraux appropriés.

2. Placez chaque accoudoir dans les trous situés sous le siège des toilettes. Les boutons métalliques doivent être orientés vers l'extérieur.
3. Faites glisser le tube de l'accoudoir en position jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou et un « clic » retentit. Répétez l'opération pour les autres trous.
4. Insérez les pinces latérales.



5. Installez la rehausse des toilettes. Assurez-vous que le bord intérieur est à l'intérieur des toilettes et le bord avant à l'extérieur (B).



6. Tournez la tête de chacun des deux supports latéraux dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que la rehausse est bien fixée sur les toilettes. Elle doit être parfaitement à plat.



7. Une fois le rehausseur de toilettes en place et fixé, vous pouvez lever et baisser le couvercle quand bon vous semble pour une meilleure hygiène.



MAINTENANCE

1. UN NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ. UTILISEZ UN NETTOYANT OU UN DÉTERGENT NON ABRASIF. RINCER À L'EAU TIÈDE ET SÉCHER. COMPLÈTEMENT. LES CHIFFONS ABRASIFS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE.
2. VEUILLEZ INSPECTER RÉGULIÈREMENT VOTRE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC BRAS ET SES PIÈCES POUR DÉTECTER TOUTE CORROSION, CASSE, COMPRESSION OU USURE.

Fabricant : FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adresse : 2-3 étage du bâtiment 65, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500,
CHINE .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erhöhter Toilettensitz

Modell: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modell: SC7060D-4A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte gehen Sie stets sorgsam damit um . Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	Erhöhte Höhe	laden	An die Toilettenbreite anpassen
SC7060D-4A	4 in	3 0 0 lbs/136 kg	310-390 mm

- Der Verstellbereich der Klemmgriffe auf beiden Seiten beträgt 310 - 390 mm.
- Bitte überprüfen Sie die Größe Ihrer Toilette, bevor Sie sich für die Toilettensitzerhöhung entscheiden.



- Prüfen Sie, ob die Außenwand der Toilette senkrecht steht, die

Schräge klemmt möglicherweise nicht fest.



PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	SC7060 D-4A
1	Toilettensitzerhöhung mit Deckel		1
2	Klemme		2
3	Armlehne		2
4	Handbuch		1

CAUTIONS

1. Achten Sie immer darauf, dass der Sitz richtig sitzt und vor der Verwendung sicher verriegelt.
2. , dass die Verriegelung Der Sitz ist jederzeit fest und sichert so die Sitz zur Toilettenschüssel. Körperlich eingeschränkte Benutzer sollten beaufsichtigt oder unterstützt werden, wenn Sie dieses Produkt.

3. Der erhöhte Toilettensitz darf NICHT verwendet werden bei Überlastung. Das Gewicht des Benutzers sollte zentriert sein über dem Toilettensitz, nicht zu weit nach vorne oder zu weit zur Seite, da das Gerät kippen könnte.

4. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den meisten gängigen Arten von Kommoden. Es passt nicht für alle Toilettentypen; stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert, sitzt fest und ist stabil vor Gebrauch.

5. Bei Modellen mit Armlehnen: Die Armlehnen sind für den Zweck der Hilfeleistung, wenn Ein- und Aussteigen aus dem Sitz. Versuchen Sie NICHT Verwenden Sie die Arme, um das gesamte Körpergewicht zu stützen Übertragen Sie das Gerät nicht, da dies zu einem Geräteausfall und zu Verletzungsgefahr führen kann.

6. Wenn Sie einen Toilettenstil haben, der Produkt passt nicht richtig oder kann nicht fest angezogen ist, wie oben beschrieben, Es wird empfohlen, die Verwendung einzustellen.

7. Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

8. Seien Sie bei der Bedienung und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und offenes Feuer. Bei allergischen Reaktionen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

9. Lassen Sie sich vor der Anwendung von Ihrem Arzt bestätigen, dass das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

INSTRUCTIONS

1. Legen Sie den Toilettensitz mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche und drehen Sie die Halterungen in die entsprechenden seitlichen Positionen.

2. Setzen Sie die Armlehnen in die Löcher an der Unterseite des Toilettensitzes ein. Die Metallknöpfe sollten nach außen zeigen.
3. Schieben Sie das Armlehnenrohr in Position, bis der Knopf in das Loch einrastet und ein „Klick“ ertönt. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Löcher.
4. Setzen Sie die Seitenklammern ein.



5. Stellen Sie den Toilettenaufsatz ein. Achten Sie darauf, dass sich die Innenkante an der Innenseite der Toilette und die Vorderkante an der Außenseite befindet (B).



6. Drehen Sie den Kopf der beiden Seitenstützen im Uhrzeigersinn. Stellen Sie sicher, dass der Toilettensitz fest und unbeweglich auf der Toilette sitzt. Der Toilettensitz sollte perfekt flach aufliegen.



7. Sobald der Toilettensitz angebracht und befestigt ist, können Sie den Deckel nach Belieben anheben und absenken, um die Hygiene zu verbessern.



MAINTENANCE

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE EIN NICHT SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL. SPÜLEN SIE MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE VOLLSTÄNDIG. SCHEUERENDE TÜCHER KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.
2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ERHÖHTEN TOILETTENSITZ MIT ARMLEHNEN UND SEINE TEILE REGELMÄSSIG AUF KORROSION, BRÜCHE, KOMPRESSION ODER VERSCHLEISS.

Hersteller: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adresse: 2.-3. Stock, Gebäude 65, Zhongnan Industry Garden, Haitian Road Nr. 88, Bezirk Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sedile del water rialzato

Modello: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modello: SC7060D-4A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	Altezza rialzata	carico	Adattarsi alla larghezza del water
SC7060D-4A	4 pollici	3 0 0 libbre/136 kg	310-390 mm

- La gamma di regolazione delle maniglie di serraggio su entrambi i lati è di 310-390 mm.
- Prima di scegliere il sedile rialzato per WC, verifica le dimensioni del tuo WC.



- Controllare che la parete esterna del WC sia verticale, la pendenza potrebbe non aderire bene.



PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	SC7060 D-4A
1	Sedile rialzato per WC con coperchio		1
2	MORSETTO		2
3	Bracciolo		2
4	Manuale		1

CAUTIONS

1. Assicurarsi sempre che il sedile sia correttamente e saldamente bloccato in posizione prima dell'uso.
2. Assicurarsi che il bloccaggio di il sedile è sempre ben saldo, assicurando così il sedile del water. Gli utenti con disabilità fisiche dovrebbero essere supervisionato o assistito ogni volta che si utilizza questo prodotto.

3. Il sedile rialzato per WC NON DEVE essere utilizzato in caso di sovraccarico. Il peso dell'utente deve essere centrato sopra il sedile del water, non troppo in avanti né troppo di lato, altrimenti l'unità potrebbe ribaltarsi.

4. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei tipi comuni di comò. Non si adatta a tutti i tipi di comò; assicurarsi che l'unità sia installata correttamente, si adatta correttamente ed è stabile prima dell'uso.

5. Per i modelli con braccioli: I braccioli sono per lo scopo di fornire assistenza quando salire e scendere dal sedile. NON provare a utilizzare le braccia per sostenere tutto il peso corporeo durante il trasferimento, poiché ciò potrebbe causare il guasto dell'unità e il rischio di lesioni.

6. Se hai uno stile di comò che questo il prodotto non si adatta correttamente o non può essere serrato saldamente come indicato sopra, è consigliata l'interruzione dell'uso.

7. Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe compromettere la longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.

8. Prestare attenzione durante l'uso e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

9. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere del medico.

INSTRUCTIONS

1. Posizionare il montante del WC rivolto verso il basso su una superficie piana e ruotare le staffe nelle posizioni laterali appropriate.

2. Inserire ciascun bracciolo nei fori presenti sul fondo del sedile del water. I pulsanti metallici devono essere rivolti verso l'esterno.

3. Far scorrere il tubo del bracciolo in posizione finché il pulsante non scatta nel foro e si sente un "clic". Ripetere il procedimento per tutti i fori rimanenti.

4. Inserire i morsetti laterali.



5. installare il montante del water. Assicurarsi che il bordo interno sia rivolto verso l'interno del water e che il bordo anteriore sia rivolto verso l'esterno (B).



6. Ruotare la testa di ciascuno dei due supporti laterali in senso orario. Verificare che il montante sia fissato e inamovibile sul WC. Il montante deve essere posizionato in modo perfettamente piano.



7. Una volta posizionato e fissato il rialzo del water, è possibile alzare e abbassare il coperchio quando lo si ritiene opportuno, per una maggiore igiene.



MAINTENANCE

1. SI CONSIGLIA UNA PULIZIA REGOLARE, USARE UN DETERGENTE O UN DETERGENTE NON ABRASIVO. RISCIAQUARE CON ACQUA TIEPIDA E ASCIUGARE COMPLETAMENTE. I PANNI ABRASIVI POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
2. SI PREGA DI CONTROLLARE REGOLARMENTE IL SEDILE WC RIALZATO CON BRACCIOLI E I SUOI COMPONENTI PER EVENTUALI CORROSIONI, ROTTURE, COMPRESSIONI O USURA.

Produttore: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Indirizzo: 2-3 piano dell'edificio 65, Zhongnan Industry Garden, n. 88
Haitian Road, distretto di Gaoming, città di Foshan, Guangdong, 528500,
CINA .

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Asiento de inodoro elevado

Modelo: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modelo: SC7060D-4A



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto . Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo . La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.


SPECIFICATION

Modelo	Altura elevada	carga	Adaptarse al ancho del inodoro
SC7060D-4A	4 pulgadas	300 libras /136 kg	310-390 mm

- El rango ajustable de las manijas de sujeción en ambos lados es de 310 a 390 mm.
- Compruebe el tamaño de su inodoro antes de elegir el asiento de inodoro elevado.



- Verifique que la pared exterior del inodoro esté vertical, es posible que la pendiente no quede bien sujeta.

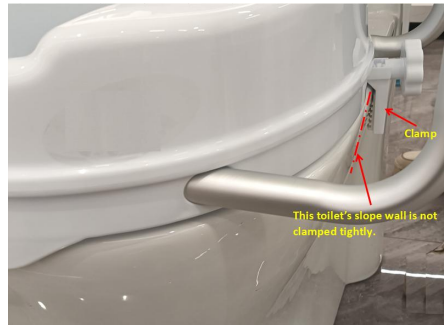

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	SC7060 D-4A
1	Asiento de inodoro elevado con tapa		1
2	Abrazadera		2
3	Brazo		2
4	Manual		1

CAUTIONS

1. Asegúrese siempre de que el asiento esté correctamente colocado y bien bloqueado en su lugar antes de usarlo.
2. Asegúrese de que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento, asegurando así la asiento de la taza del inodoro. Los usuarios con discapacidades físicas deben ser supervisado o asistido siempre que utilice este producto.

3. El asiento de inodoro elevado NO DEBE utilizarse Cuando esté sobrecargado, el peso del usuario debe estar centrado. sobre el asiento del inodoro, ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia un lado, ya que la unidad podría volcarse.
4. Este producto está diseñado para usarse con la mayoría Tipos comunes de inodoros. No se adapta a todos. tipos de inodoro; asegúrese de que la unidad esté Correctamente instalado, encaja correctamente y es estable Antes de usar.
5. Para modelos con apoyabrazos: Los brazos son para el propósito de proporcionar asistencia cuando subir y bajar del asiento. NO intente Utilice los brazos para soportar todo el peso del cuerpo durante transferencia, ya que esto puede provocar una falla de la unidad y riesgo de lesiones .
6. Si tienes un estilo de cómoda que este El producto no encajará correctamente o no se podrá Apretado firmemente como se indicó anteriormente, es Se recomienda suspender su uso.
7. Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y contacte con el servicio de asistencia en caso de duda. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.
8. Tenga cuidado durante el funcionamiento y el montaje. Evite temperaturas extremas y llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.
9. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto se ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

INSTRUCTIONS

1. Coloque el elevador del inodoro boca abajo sobre una superficie plana y gire los soportes en las ubicaciones laterales correspondientes.

2. Coloque cada reposabrazos en los orificios de la base del asiento del inodoro. Los botones metálicos deben quedar hacia afuera.
3. Deslice el tubo del apoyabrazos en su posición hasta que el botón encaje en el orificio. Y se oye un clic. Repite el proceso con el resto de los agujeros.
4. Inserte las abrazaderas laterales.



5. Coloque el elevador del inodoro. Asegúrese de que el borde interior esté en el interior del inodoro y el borde delantero en el exterior (B).



6. Gire la cabeza de cada uno de los dos soportes laterales en sentido horario. Compruebe que el elevador esté fijo e inamovible en el inodoro. El elevador debe quedar perfectamente plano.



7. Una vez colocado y fijado el elevador del inodoro, puedes subir y bajar la tapa cuando lo creas conveniente para una mayor higiene.



MAINTENANCE

1. SE RECOMIENDA UNA LIMPIEZA REGULAR. UTILICE UN LIMPIADOR O DETERGENTE NO ABRASIVO. ENJUAGUE CON AGUA TIBIA Y SEQUE. COMPLETAMENTE. LOS PAÑOS ABRASIVOS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE.
2. POR FAVOR INSPECCIONE REGULARMENTE SU ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y SUS PIEZAS PARA VER SI HAY CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.

Fabricante: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Dirección: Planta 2-3 del Edificio 65, Zhongnan Industry Garden, Carretera Haitiana n.º 88, Distrito de Gaoming, Foshan, Guangdong, 528500, CHINA .

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone siedzisko sedesowe

Model: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060D-4A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Prosimy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	Podniesiona wysokość	obciążenie	Dopasuj do szerokości toalety
SC7060D-4A	4 cale	3 0 0 funtów/136 kg	310-390 mm

- Zakres regulacji uchwytów zaciskowych po obu stronach wynosi 310-390 mm.
- Przed wyborem podwyższonego siedziska należy sprawdzić rozmiar swojej toalety.



- Sprawdź, czy zewnętrzna ściana toalety jest pionowa. Nachylenie może nie być wystarczająco mocne.



PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	SC7060 D-4A
1	Podwyższone siedzisko sedesowe z pokrowcem		1
2	Zacisk		2
3	Podłokietnik		2
4	Podręcznik		1

CAUTIONS

1. Zawsze upewnij się, że siedzenie jest prawidłowo i Przed użyciem należy je bezpiecznie zablokować.
2. Upewnij się, że blokada siedzenia jest zawsze szczelna, co zapewnia bezpieczeństwo siedzenia do muszli klozetowej. Użytkownicy niepełnosprawni fizycznie powinni nadzorowani lub wspomagani podczas

korzystania z tego produkt.

3. NIE WOLNO używać podwyższonego siedziska sedesowego w przypadku przeciążenia. Ciężar użytkownika powinien być wyśrodkowany nad deską sedesową, nie za bardzo do przodu i nie za bardzo na bok , ponieważ może się przewrócić.

4. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania z większością popularne typy komód. Nie pasują do wszystkich typy komód; upewnij się, że jednostka jest prawidłowo zainstalowany, pasuje prawidłowo i jest stabilny przed użyciem.

5. W przypadku modeli z podłokietnikami: Podłokietniki są przeznaczone do celem zapewnienia pomocy, gdy wsiadanie i wysiadanie z siedzenia. NIE próbuj użyj ramion do podtrzymywania ciężaru całego ciała podczas przeniesienia, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia i ryzyko obrażeń .

6. Jeśli masz styl komody, który to produkt nie będzie pasował prawidłowo lub nie będzie mógł być mocno dokręcone, jak wskazano powyżej, jest Zaleca się zaprzestanie stosowania.

7. Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.

8. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

9. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy produkt spełnia Państwa indywidualne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.

INSTRUCTIONS

1. Połóż podwyższenie toalety stroną do dołu na płaskiej powierzchni i obróć wsporniki w odpowiednie miejsca po bokach.

2. Umieść każdy podłokietnik w otworach w dolnej części deski sedesowej. Metalowe przyciski powinny być skierowane na zewnątrz.
3. Przesuń rurkę podłokietnika na miejsce, aż przycisk zatrzaśnie się w otworze. i słycać „klik”. Powtórz proces dla pozostałych otworów.
4. Włóż zaciski boczne.



5. Ustaw podwyższenie toalety. Upewnij się, że wewnętrzna krawędź znajduje się po wewnętrznej stronie toalety, a przednia krawędź po zewnętrznej (B).



6. Obróć głowicę każdego z dwóch bocznych wsporników zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdź, czy pion jest zamocowany i nieruchomy na toalecie. Poziom powinien być idealnie dopasowany do toalety.



7. Gdy podnośnik toalety jest już na swoim miejscu i zamocowany, możesz podnosić i opuszczać klapę, kiedy tylko uznasz to za stosowne, dla większej higieny.



MAINTENANCE

1. ZALECA SIĘ REGULARNE CZYSZCZENIE. UŻYWAĆ NIEŚCIERNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO LUB DETERGENTU. SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I WYSUSZYĆ. CAŁKOWICIE. TKANINY ŚCIERNE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ.
2. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ PODWYŻSZONĄ DESKĘ TOALETOWĄ Z PODŁOKIETNIKAMI I JEJ CZĘŚCI POD KĄTEM KOROZJI, PĘKNIĘCIA, ŚCISKANIA LUB ZUŻYCIA.

Producent: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adres: 2-3 piętro budynku nr 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, dzielnica Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINY .

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verhoogde toiletzitting

Model: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060D-4A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	Verhoogde hoogte	laden	Aanpassen aan de breedte van het toilet
SC7060D-4A	4 inch	3 0 0 lbs/136 kg	310-390 mm

- Het verstelbare klembereik aan beide zijden bedraagt 310-390 mm.
- Controleer de afmetingen van uw toilet voordat u een verhoogde toiletzitting kiest.



- Controleer of de buitenwand van het toilet verticaal is, het is mogelijk dat de helling niet goed vastzit.



PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	SC7060 D-4A
1	Verhoogde toiletzitting met deksel		1
2	Klem		2
3	Armsteun		2
4	Handmatig		1

CAUTIONS

1. Zorg er altijd voor dat de stoel goed vastzit en goed vastgezet zijn voordat u het gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van de zitting zit altijd goed vast, waardoor de van de zitting naar de toiletpot. Lichamelijk beperkte gebruikers moeten: begeleid of bijgestaan wanneer u dit gebruikt product.
3. De verhoogde toiletzitting **MAG NIET** worden gebruikt bij

overbelasting. Het gewicht van de gebruiker moet gecentreerd zijn boven de toiletbril, niet te ver naar voren of te ver opzij, aangezien het apparaat dan kan kantelen.

4. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meeste Veelvoorkomende soorten toiletten. Het past niet bij iedereen. commode-typen; zorg ervoor dat het apparaat is correct geïnstalleerd, past goed en is stabiel voor gebruik.

5. Voor modellen met armleuningen: De armen zijn voor het doel om hulp te bieden wanneer op en af de stoel stappen. Probeer NIET om Gebruik de armen om het volledige lichaamsgewicht te ondersteunen tijdens overdracht, aangezien dit kan leiden tot storingen in het apparaat en tot risico op letsel.

6. Als u een stijl van commode heeft die dit product past niet goed of kan niet worden stevig vastgedraaid zoals hierboven vermeld, is het wordt aanbevolen om het gebruik ervan te staken.

7. Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product recht en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

8. Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Stop onmiddellijk met het gebruik als er een allergische reactie optreedt en raadpleeg een arts.

9. Controleer voor gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

INSTRUCTIONS

1. Leg de toiletverhoger met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond en draai de beugels naar de juiste zijanten.
2. Plaats elke armleuning in de gaten aan de onderkant van de wc-bril. De metalen knoppen moeten naar buiten wijzen.

3. Schuif de armsteunbuis op zijn plaats totdat de knop in het gat klikt en er klinkt een "klik". Herhaal dit proces voor de rest van de gaten.

4. Plaats de zijklemmen.



5. Plaats de toiletverhoger. Zorg ervoor dat de binnenrand aan de binnenkant van het toilet zit en de voorkant aan de buitenkant (B).



6. Draai de kop van elk van de twee zijsteunen met de klok mee. Controleer of de verhoger stevig en onbeweegbaar op het toilet zit. De verhoger moet perfect vlak liggen.



7. Zodra de toiletverhoger op zijn plaats zit en is bevestigd, kunt u het deksel omhoog en omlaag doen wanneer u dat nodig acht voor een betere hygiëne.



MAINTENANCE

1. REGELMATIGE REINIGING WORDT AANBEVOLEN. GEBRUIK EEN NIET-SCHURENDE REINIGER OF WASMIDDEL. SPOEL AF MET WARM WATER EN DROOG AF. VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KUNNEN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.
2. CONTROLEER REGELMATIG UW VERHOOGDE TOILETBRIL MET ARMEN EN DE ONDERDELEN OP CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE OF SLIJTAGE.

Fabrikant: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD . Adres: 2-3e verdieping van gebouw 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Upphöjd toalettsits

Modell: SC7060D-4A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modell: SC7060D-4A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten . Hantera den alltid varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	Höjd höjd	ladda	Anpassa till toalettens bredd
SC7060D-4A	4 tum	136 kg	310 - 390 mm

- Justerbart utbud av klämhandtag på båda sidor är 310-390 mm.
- Kontrollera storleken på din toalett innan du väljer en upphöjd toalettsits.



- Kontrollera om toalettens yttervägg är vertikal, lutningen kanske inte klämmer fast ordentligt.



PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	SC7060 D-4A
1	Upphöjd toaletsits med lock		1
2	Klämma		2
3	Armstöd		2
4	Manuell		1

CAUTIONS

1. Se alltid till att sätet är korrekt och ordentligt låst på plats före användning.
2. Se till att låsningen av sätet är tätt hela tiden, vilket säkrar sitsen till toalettstolen. Fysiskt funktionshindrade användare bör övervakad eller assisterad närhelst detta används produkt.
3. Den upphöjda toaletsitsen FÅR INTE användas vid överbelastning.

Användarens vikt ska vara centrerad över toaletsitsen, inte för framåt eller för långt åt sidan, eftersom enheten kan välta.

4. Denna produkt är utformad för användning med de flesta vanliga typer av toaletter. Det passar inte alla toaletttyper; se till att enheten är korrekt installerad, passar ordentligt och är stabil före användning.

5. För modeller med armstöd: Armstöden är avsedda för syftet att ge hjälp när att ta sig på och av sätet. FÖRSÖK INTE att använd armarna för att stödja hela kroppsvikten under överföring, eftersom detta kan leda till att enheten slutar fungera och risk för skador.

6. Om du har en toalettstil som den här produkten passar inte ordentligt, eller kan inte ordentligt åtdragen enligt ovanstående, är den rekommenderas att du slutar använda det.

7. Kontrollera regelbundet att produkten är ordentligt monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.

8. Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontakta sjukvårdspersonal.

9. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

INSTRUCTIONS

1. Placera toalettförhöjaren med framsidan nedåt på en plan yta och rotera fästena till lämpliga sidoplatser.

2. Placera varje armstöd i hålen i toaletsitsens botten. Metallknapparna ska vara vända utåt.

3. Skjut armstödsröret på plats tills knappen klickar i hålet och ett "klick" ljuder. Upprepa processen för resten av hålen.

4. Sätt i sidoklämmorna.



5. Montera toalettförhöjaren. Se till att innerkanten är på toalettens insida och framkanten är på utsidan (B).



6. Vrid huvudet på vart och ett av de två sidostöden medurs. Kontrollera att förhöjaren är fast och orörlig på toaletten. Förhöjaren ska passa i ett helt plant läge.



7. När toalettstolens förhöjning är på plats och fixerad kan du höja och sänka locket när du anser det lämpligt för bättre hygien.



MAINTENANCE

1. REGELBUNDEN RENGÖRING REKOMMENDERAS, ANVÄND ETT ICKE-SLIPANDE RENGÖRINGS- ELLER TVÄTTMEDEL. SKÖLJ MED VARMT VATTEN OCH TORKA. HELT. SKIDDUGAR KAN SKADA YTAN.
2. INSPEKTERA REGELBUNDET DIN UPPHÖJDA TOALETTSITS MED

ARMARNA OCH DESS DELAR FÖR EVENTUELLA KORROSIONER,
BROTT, KOMPRESSIONER ELLER SLITAGE.

Tillverkare: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adress: 2-3 våningen i byggnad 65, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming-distriktet, Foshan City, Guangdong, 528500,
KINA .

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

