

# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **THRESHOLD RAMP USER MANUAL**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Model: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

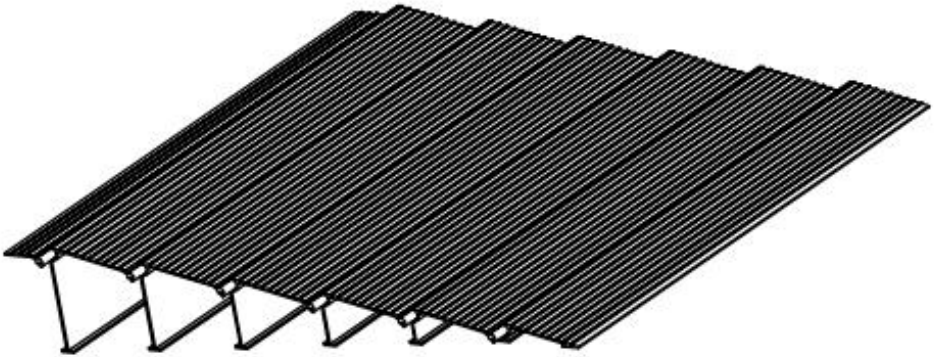

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 1.Safety Instructions

### **WARNING:**

Carefully read and understand instructions and procedures before installing and using the threshold ramp.

Do not modify the threshold ramp design.

- Do not move a threshold ramp while standing on it.
  - Do not use it in bad weather, such as wind, rain, snow, and so on. It is recommended to use the ladder in clear weather.
1. During installation, please wear gloves to prevent hand injuries.
  2. Do not stack items or allow children to play on the ramp.
  3. Regularly check the structure and fasteners of the ramp to ensure its stability and safety.
  4. If the surface of the ramp is worn or damaged, please replace or repair it in time.

## 2.Maintenance Guide

1. Place the product on a sturdy, secure, accessible, and level starting point. The minimum weight capacity of the starting point must be equal to that of the ramp (800 lbs). Do not exceed the maximum weight capacity of the product.
2. Ensure that the product is securely flush against the starting point. If a safe, accessible, and level starting point cannot be found, or if the product does not fit securely against a higher starting point, do not use the ramp.
3. Do not tamper with, attempt to repair, or modify any part of the product. Exercise caution to avoid pinch points during assembly and handling.
4. If using the product with other mobility equipment, refer to the user guide of the equipment to understand the acceptable usage guidelines, including appropriate slope, incline, and chair direction. Do not exceed the recommendations of the mobility equipment.
5. Before each use, carefully inspect the fasteners on the ramp to ensure they are not loose. Tighten any loose fasteners if necessary.

6. When using the ramp, ensure it is securely flush against the starting point to ensure safety.
7. Before each use, clean the ramp surface of ice, snow, dust, leaves, and other debris. Remove accumulated ice and snow, and sweep the surface clean. For dust and debris, use a soft bristle brush and non-alkaline detergent to clean the ramp surface, then rinse thoroughly.
8. The ramp surface may become slippery in wet conditions. Walk with caution and pay attention to your footing to prevent slipping.
9. If the ramp will not be used for an extended period, store it in a dry and well-ventilated area away from direct sunlight.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**







### **3.Product Description and Main Features**

The threshold interlocking aluminum alloy ramp is made of high-quality aluminum alloy extrusion. This product is durable and provides convenience for people. It is lightweight, portable, stable, and durable and features an interlocking design for easy installation and storage.

➤ **Main Features:**

- 1.Material: High-strength aluminum alloy, extruded.
- 2.Surface: Anti-slip treatment, deburring.
- 3.Interlocking design: Each section's interface is precisely designed; align each section's interface and push them together for installation.
- 4.Load limit: Up to 800 lbs.
- 5.Height optional: suitable for thresholds of different heights.

## 4.Product Parameter

Item	Model	Picture	Height	Load Limit	N.W	G.W
1	LD9YV0		1inch	800lbs	1.5kg	1.9kg
2	LYIMV0		2inch	800lbs	2.7kg	3.2kg
3	Z2UAV0		3inch	800lbs	4.0kg	4.5kg
4	GRBRV0		4inch	800lbs	5.45kg	6.0kg
5	OVUSV0		5inch	800lbs	7.05kg	7.95g
6	SNPTV0		6inch	800lbs	8.6kg	9.56kg

## 5. Installation Guide

- (1) Before starting the installation, please wear gloves to protect your hands.
- (2) Choose an appropriate installation location, ensuring that the ground is level and firm.
- (3) Align and interlock each section of the ramp together until all parts are even.
- (4) Starting with the 1" extension, install the threshold extensions in the order shown (FIG. 1) until the final height is reached. Bring the threshold extensions together at an approximate 45° angle, then rotate them into place after the bulb is engaged in the slot.

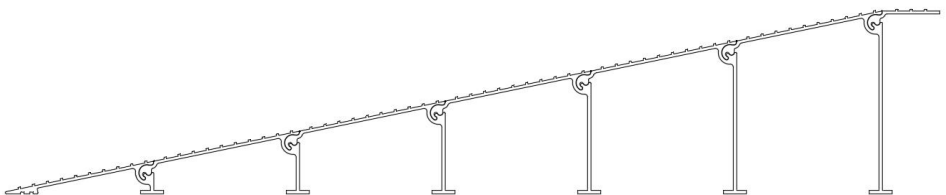


FIG.1


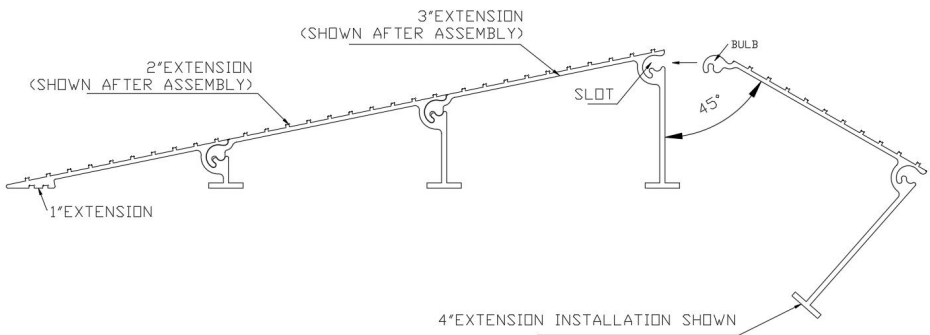



FIG.1

- (5) Use the provided screws to tighten each section of the ramp to ensure that the ramp does not slip out or make noise during use.

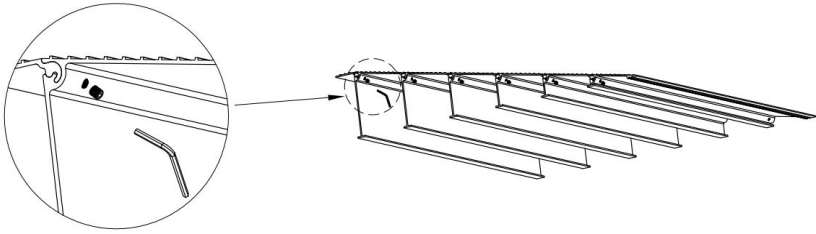


(5)After installation, check whether the ramp is stable and tightly attached to the ground.

(6)When using the ramp, push the equipment up and down the ramp steadily, avoiding sharp turns or speeding.

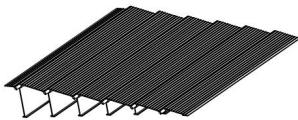

six inch

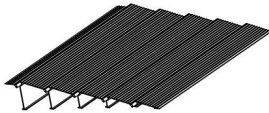

five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SEUIL RAMPE MANUEL D'UTILISATION**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Modèle : LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

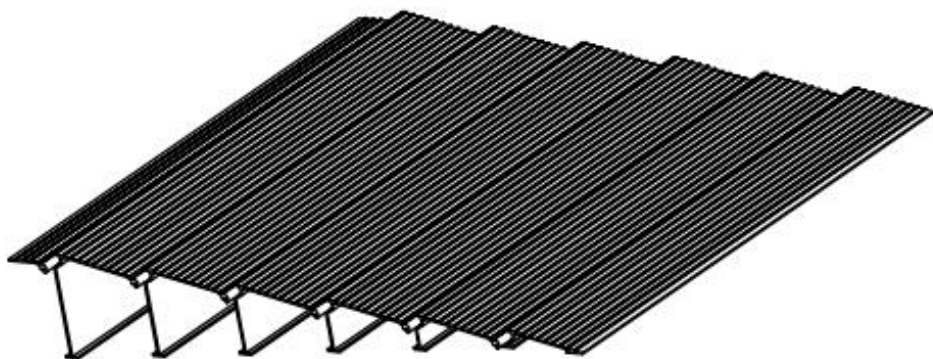

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## 1. Safety Instructions

### **AVERTISSEMENT:**

Lisez attentivement et comprenez les instructions et les procédures avant d'installer et d'utiliser la rampe de seuil.

Ne pas modifier la conception de la rampe de seuil.

- Ne déplacez pas une rampe de seuil en vous tenant debout dessus.
- Ne pas utiliser l'échelle par mauvais temps (vent, pluie, neige, etc.). Il est recommandé de l'utiliser par temps clair.

1. Lors de l'installation, veuillez porter des gants pour éviter les blessures aux mains.
2. N'empilez pas d'objets et ne laissez pas les enfants jouer sur la rampe.
3. Vérifiez régulièrement la structure et les fixations de la rampe pour assurer sa stabilité et sa sécurité.
4. Si la surface de la rampe est usée ou endommagée, veuillez la remplacer ou la réparer à temps.

## 2. Maintenance Guide

1. Placez le produit sur un point de départ solide, sûr, accessible et de niveau. La capacité de charge minimale du point de départ doit être égale à celle de la rampe (800 lb). Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du produit.

2. Assurez-vous que le produit est bien aligné avec le point de départ. Si vous ne trouvez pas de point de départ sûr, accessible et de niveau, ou si le produit ne s'adapte pas solidement à un point de départ plus élevé, n'utilisez pas la rampe.

3. Ne pas altérer, réparer ou modifier une quelconque pièce du produit. Soyez prudent afin d'éviter tout pincement lors de l'assemblage et de la manipulation.

4. Si vous utilisez le produit avec d'autres équipements de mobilité, consultez le manuel d'utilisation de l'équipement pour connaître les consignes d'utilisation, notamment la pente, l'inclinaison et l'orientation du fauteuil. Ne dépassez pas les recommandations de l'équipement de

mobilité.

5. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement les fixations de la rampe pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Resserrez-les si nécessaire.

6. Lorsque vous utilisez la rampe, assurez-vous qu'elle est bien alignée avec le point de départ pour garantir la sécurité.

7. Avant chaque utilisation, nettoyez la surface de la rampe pour éliminer la glace, la neige, la poussière, les feuilles et autres débris. Retirez la glace et la neige accumulées et balayez la surface. Pour la poussière et les débris, utilisez une brosse à poils doux et un détergent non alcalin, puis rincez abondamment.

8. La surface de la rampe peut devenir glissante par temps humide. Marchez avec prudence et faites attention à vos pieds pour éviter de glisser.

9. Si la rampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### **3.Product Description and Main Features**

La rampe de seuil emboîtable en alliage d'aluminium est fabriquée en alliage d'aluminium extrudé de haute qualité. Durable et pratique, elle est légère, portable, stable et durable. Son emboîtable facilite l'installation et le rangement.

➤ Caractéristiques principales :

1. Matériau : alliage d'aluminium haute résistance, extrudé.

2. Surface : Traitement antidérapant, ébavurage.

3. Conception de verrouillage : l'interface de chaque section est conçue avec précision ; alignez l'interface de chaque section et poussez-les ensemble pour l'installation.

4. Limite de charge : jusqu'à 800 livres .

5. Hauteur en option : convient aux seuils de différentes hauteurs.

## 4.Product Parameter

Article	Modèle	Image	Hauteur	Limite de charge	NO	GW
1	LD9YV0		1 pouce	800 livres	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 pouces	800 livres	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 pouces	800 livres	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 pouces	800 livres	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 pouces	800 livres	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 pouces	800 livres	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Avant de commencer l'installation, veuillez porter des gants pour protéger vos mains.
- (2) Choisissez un emplacement d'installation approprié, en vous assurant que le sol est plat et ferme.
- (3) Alignez et imbriquez chaque section de la rampe jusqu'à ce que toutes les pièces soient égales.
- (4) En commençant par la rallonge de 2,5 cm (1 po), installez les rallonges de seuil dans l'ordre indiqué (FIG. 1) jusqu'à atteindre la hauteur finale. Rapprochez les rallonges de seuil à un angle d'environ 45°, puis faites-les pivoter une fois l'ampoule insérée dans la fente .

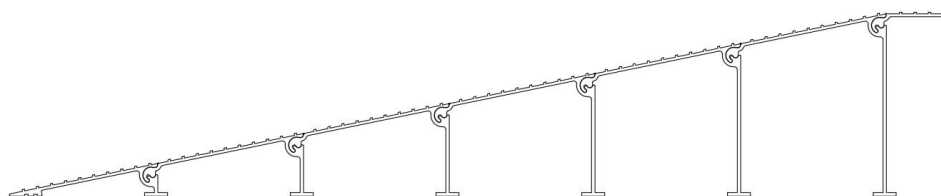


FIG.1


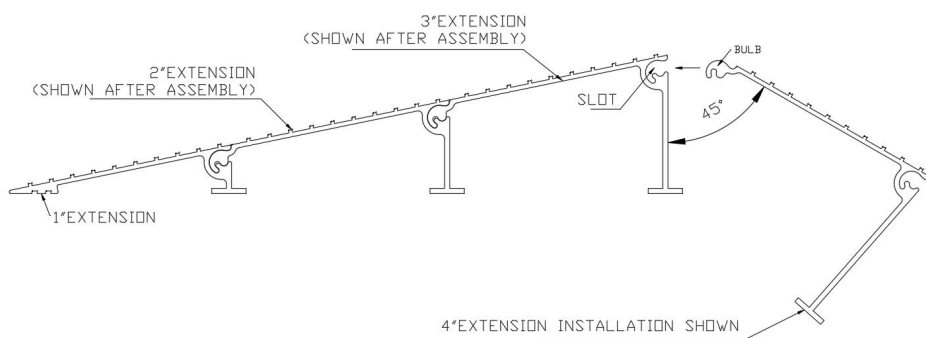



FIG.1

- (5) Utilisez les vis fournies pour serrer chaque section de la rampe afin de garantir que la rampe ne glisse pas ou ne fasse pas de bruit pendant l'utilisation .

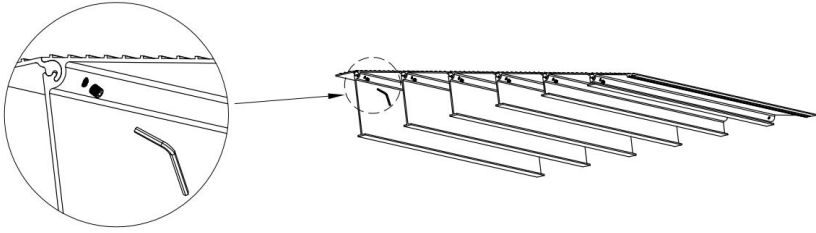


(5) Après l'installation, vérifiez si la rampe est stable et solidement fixée au sol.

(6) Lorsque vous utilisez la rampe, poussez l'équipement de haut en bas de la rampe de manière constante, en évitant les virages serrés ou les excès de vitesse.

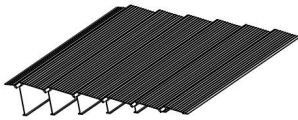

six inch

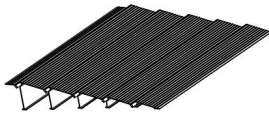

five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SCHWELLE RAMPE BENUTZERHANDBUCH**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modell: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

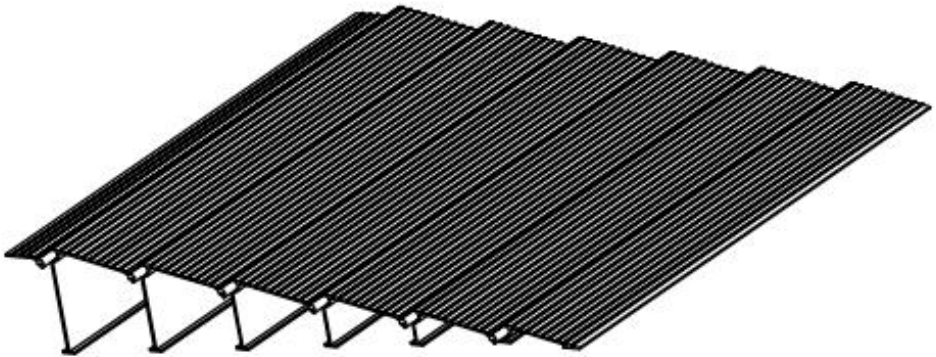

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## 1.Safety Instructions

### **WARNUNG:**

Lesen und verstehen Sie die Anweisungen und Verfahren sorgfältig, bevor Sie die Schwellenrampe installieren und verwenden .

Verändern Sie nicht das Design der Schwellenrampe.

- Bewegen Sie eine Schwellenrampe nicht, während Sie darauf stehen.
  - Verwenden Sie sie nicht bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. Es wird empfohlen, die Leiter bei klarem Wetter zu verwenden.
1. Tragen Sie während der Installation Handschuhe, um Handverletzungen zu vermeiden.
  2. Stapeln Sie keine Gegenstände auf der Rampe und lassen Sie keine Kinder darauf spielen.
  3. Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur und Befestigungen der Rampe, um ihre Stabilität und Sicherheit sicherzustellen.
  4. Wenn die Oberfläche der Rampe abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen oder reparieren Sie sie bitte rechtzeitig.

## 2.Maintenance Guide

1. Stellen Sie das Produkt auf einen stabilen, sicheren, zugänglichen und ebenen Ausgangspunkt. Die Mindesttragfähigkeit des Ausgangspunkts muss der der Rampe (800 lbs) entsprechen. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Produkts.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher am Startpunkt anliegt. Wenn kein sicherer, zugänglicher und ebener Startpunkt gefunden werden kann oder das Produkt nicht sicher an einem höheren Startpunkt anliegt, verwenden Sie die Rampe nicht.
3. Versuchen Sie nicht, Teile des Produkts zu manipulieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Seien Sie bei der Montage und Handhabung vorsichtig, um Quetschstellen zu vermeiden.
4. Wenn Sie das Produkt mit anderen Mobilitätshilfen verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts, um die zulässigen Nutzungsrichtlinien, einschließlich der entsprechenden

Neigung, Steigung und Stuhlrichtung, zu verstehen. Überschreiten Sie nicht die Empfehlungen des Mobilitätsgeräts.

5. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig die Befestigungselemente der Rampe, um sicherzustellen, dass sie nicht locker sind. Ziehen Sie lose Befestigungselemente gegebenenfalls fest.

6. Achten Sie bei der Verwendung der Rampe darauf, dass diese aus Sicherheitsgründen bündig mit dem Startpunkt abschließt.

7. Reinigen Sie die Rampenoberfläche vor jedem Gebrauch von Eis, Schnee, Staub, Blättern und anderen Ablagerungen. Entfernen Sie angesammeltes Eis und Schnee und fegen Sie die Oberfläche sauber. Reinigen Sie die Rampenoberfläche mit einer weichen Bürste und einem alkalifreien Reinigungsmittel und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.

8. Bei Nässe kann die Rampenoberfläche rutschig werden. Gehen Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihren Tritt, um ein Ausrutschen zu vermeiden.

9. Wenn die Rampe längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

## **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

### **3.Product Description and Main Features**

Die Schwellenrampe aus Aluminiumlegierung mit Verriegelungssystem besteht aus hochwertigem Aluminiumlegierungsstrangpressprofil. Dieses Produkt ist langlebig und bietet Komfort. Es ist leicht, tragbar, stabil und langlebig und verfügt über ein Verriegelungssystem für einfache Installation und Lagerung.

➤ **Haupteigenschaften:**


1. **Material:** Hochfeste Aluminiumlegierung, extrudiert.

2. **Oberfläche:** Anti-Rutsch-Behandlung, Entgraten.

3. **Ineinergreifendes Design:** Die Schnittstelle jedes Abschnitts ist präzise gestaltet. Richten Sie die Schnittstelle jedes Abschnitts aus und drücken Sie sie zur Installation zusammen.

4. Belastungsgrenze : Bis zu 800 Pfund .
5. Höhe optional : geeignet für Schwellen unterschiedlicher Höhe.

## 4.Product Parameter

Artikel	Modell	Bild	Höhe	Lastgrenze	NW	GW
1	LD9YV0		1 Zoll	800 Pfund	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 Zoll	800 Pfund	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 Zoll	800 Pfund	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 Zoll	800 Pfund	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 Zoll	800 Pfund	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 Zoll	800 Pfund	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Ziehen Sie vor Beginn der Installation Handschuhe an, um Ihre Hände zu schützen.
- (2) Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort und achten Sie dabei auf einen ebenen und festen Untergrund.
- (3) Richten Sie die einzelnen Rampenabschnitte aus und verriegeln Sie sie miteinander, bis alle Teile eben sind.
- (4) Beginnen Sie mit der 1-Zoll-Verlängerung und installieren Sie die Schwellenverlängerungen in der gezeigten Reihenfolge (ABB. 1), bis die endgültige Höhe erreicht ist. Bringen Sie die Schwellenverlängerungen in einem Winkel von etwa 45° zusammen und drehen Sie sie dann in die richtige Position, nachdem die Glühbirne im Schlitz eingerastet ist.

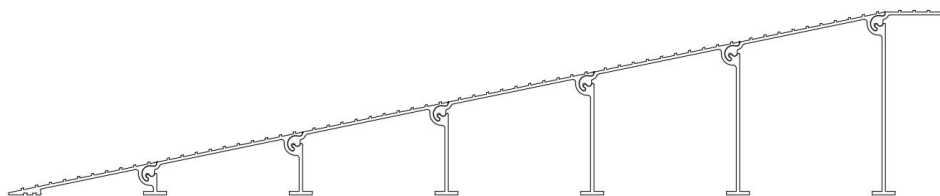


FIG.1


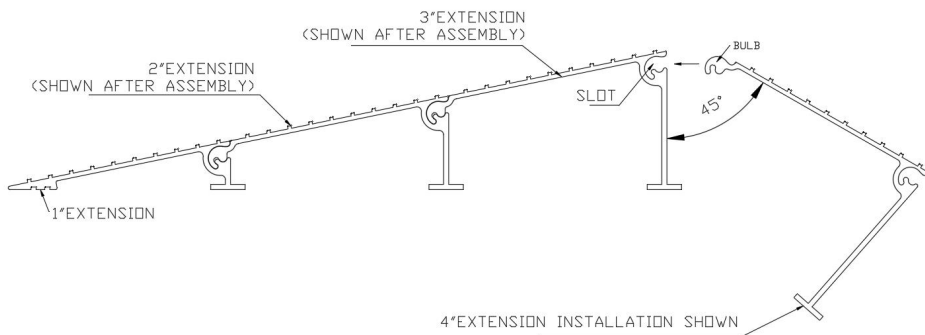


FIG.1


- (5) Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um jeden Abschnitt der Rampe festzuziehen, um sicherzustellen, dass die Rampe während des

Gebrauchs nicht herausrutscht oder Geräusche verursacht .

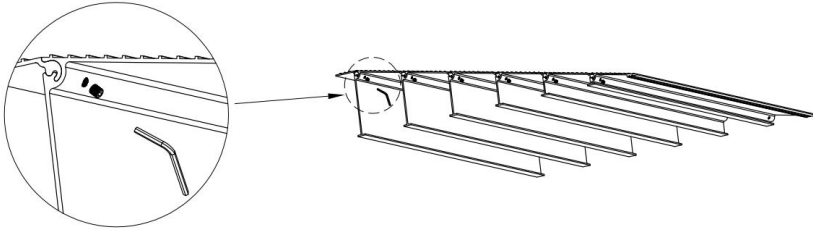


(5) Prüfen Sie nach der Montage, ob die Rampe stabil und fest mit dem Boden verbunden ist.


(6) Schieben Sie das Gerät beim Benutzen der Rampe gleichmäßig die Rampe hinauf und hinunter und vermeiden Sie scharfe Kurven oder Geschwindigkeitsüberschreitungen.

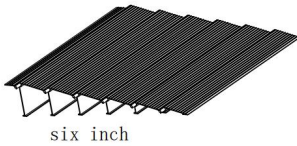

six inch

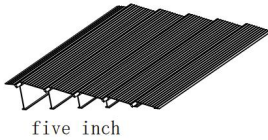

five inch

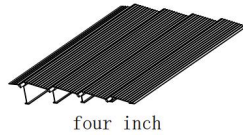

four inch



three inch



two inch



One inch

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SOGLIA RAMPA MANUALE D'USO**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Modello: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

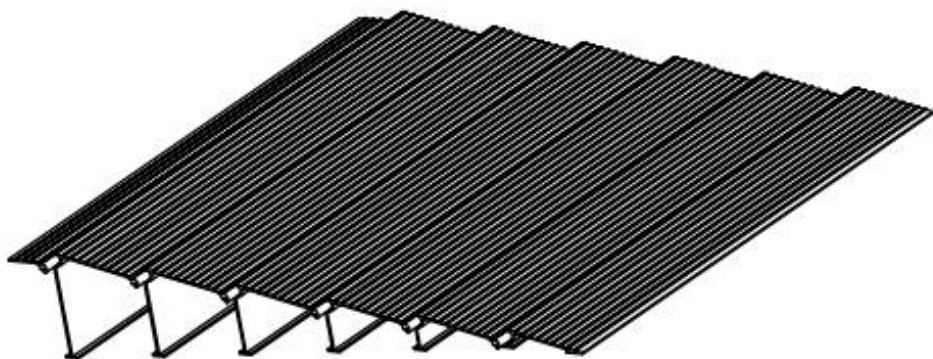

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

## 1.Safety Instructions

### AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni e le procedure prima di installare e utilizzare la rampa di soglia.

Non modificare la progettazione della rampa di soglia.

- Non spostare una rampa di soglia mentre ci si trova sopra.
- Non utilizzare in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via.

Si consiglia di utilizzare la scala con tempo sereno.

1. Durante l'installazione, indossare guanti per evitare lesioni alle mani.
2. Non accatastare oggetti sulla rampa e non permettere ai bambini di giocare.
3. Controllare regolarmente la struttura e gli elementi di fissaggio della rampa per garantirne la stabilità e la sicurezza.
4. Se la superficie della rampa è usurata o danneggiata, sostituirla o ripararla in tempo.

## 2.Maintenance Guide

1. Posizionare il prodotto su un punto di partenza robusto, sicuro, accessibile e livellato. La portata minima del punto di partenza deve essere pari a quella della rampa (365 kg). Non superare la portata massima del prodotto.

2. Assicurarsi che il prodotto sia saldamente a filo con il punto di partenza. Se non è possibile trovare un punto di partenza sicuro, accessibile e in piano, o se il prodotto non si adatta saldamente a un punto di partenza più alto, non utilizzare la rampa.

3. Non manomettere, tentare di riparare o modificare alcuna parte del prodotto. Prestare attenzione a evitare punti di schiacciamento durante il montaggio e la movimentazione.

4. Se si utilizza il prodotto con altri dispositivi di mobilità, consultare il manuale d'uso del dispositivo per comprendere le linee guida di utilizzo accettabili, tra cui pendenza, inclinazione e direzione della sedia appropriate. Non superare le raccomandazioni del dispositivo di mobilità.

5. Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente i dispositivi di fissaggio della rampa per assicurarsi che non siano allentati. Stringere eventuali dispositivi di fissaggio allentati, se necessario.
6. Quando si utilizza la rampa, assicurarsi che sia ben a filo con il punto di partenza per garantire la sicurezza.
7. Prima di ogni utilizzo, pulire la superficie della rampa da ghiaccio, neve, polvere, foglie e altri detriti. Rimuovere il ghiaccio e la neve accumulati e spazzare la superficie per pulirla. Per rimuovere polvere e detriti, utilizzare una spazzola a setole morbide e un detergente non alcalino per pulire la superficie della rampa, quindi risciacquare abbondantemente.
8. La superficie della rampa potrebbe diventare scivolosa in caso di bagnato. Camminare con cautela e prestare attenzione alla posizione dei piedi per evitare di scivolare.
9. Se la rampa non verrà utilizzata per un periodo prolungato, riporla in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

### 3.Product Description and Main Features

La rampa in lega di alluminio con soglia ad incastro è realizzata in estrusione di lega di alluminio di alta qualità. Questo prodotto è durevole e offre praticità. È leggera, portatile, stabile e resistente e presenta un design ad incastro per una facile installazione e conservazione.

➤ Caratteristiche principali:

1. Materiale: lega di alluminio ad alta resistenza, estrusa.
2. Superficie: trattamento antiscivolo, sbavatura.
3. Design ad incastro: l'interfaccia di ogni sezione è progettata con precisione; allineare l'interfaccia di ogni sezione e unirle per l'installazione.
4. Limite di carico : fino a 800 libbre .
5. Altezza facoltativa : adatto a soglie di diverse altezze.

## 4.Product Parameter

Articolo	Modello	Immagine	Altezza	Limite di carico	Nord-ovest	GW
1	LD9YV0		1 pollice	800 libbre	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 pollici	800 libbre	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 pollici	800 libbre	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 pollici	800 libbre	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 pollici	800 libbre	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 pollici	800 libbre	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Prima di iniziare l'installazione, indossare guanti per proteggere le mani.
- (2) Scegliere un luogo di installazione appropriato, assicurandosi che il terreno sia livellato e solido.
- (3) Allineare e incastrare insieme ciascuna sezione della rampa finché tutte le parti non sono uniformi.
- (4) Iniziando con l'estensione da 1", installare le estensioni della soglia nell'ordine mostrato (FIG. 1) fino a raggiungere l'altezza finale. Avvicinare le estensioni della soglia a un angolo di circa 45°, quindi ruotarle in posizione dopo che la lampadina è inserita nella fessura .

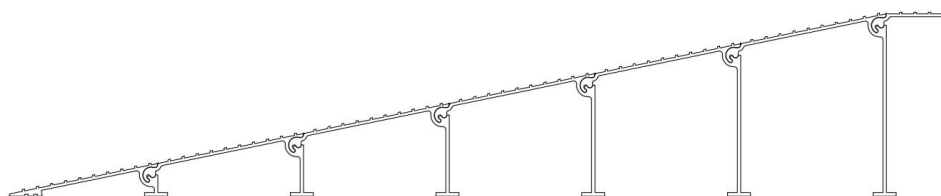


FIG.1


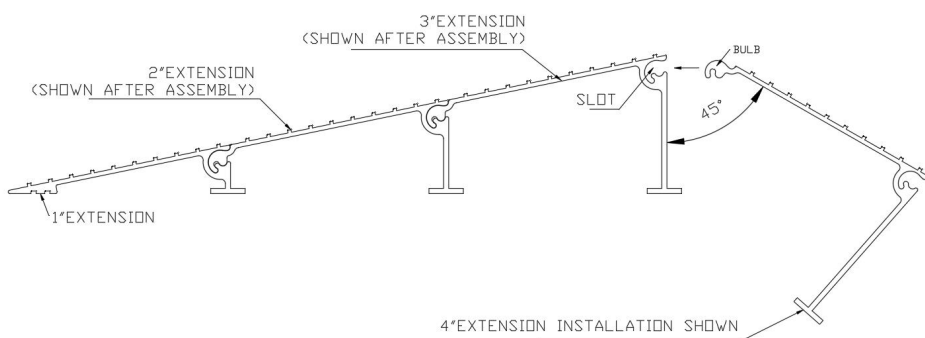


FIG.1

- (5) Utilizzare le viti fornite per stringere ciascuna sezione della rampa per garantire che la rampa non scivoli fuori o faccia rumore durante l'uso .

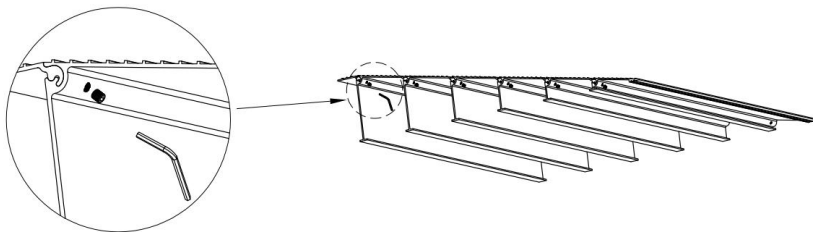

(5) Dopo l'installazione, verificare che la rampa sia stabile e ben fissata al terreno.

(6) Quando si utilizza la rampa, spingere l'attrezzatura su e giù per la rampa in modo costante, evitando curve strette o velocità eccessive.



six inch



five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **LÍMITE RAMPA MANUAL DEL USUARIO**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Modelo: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

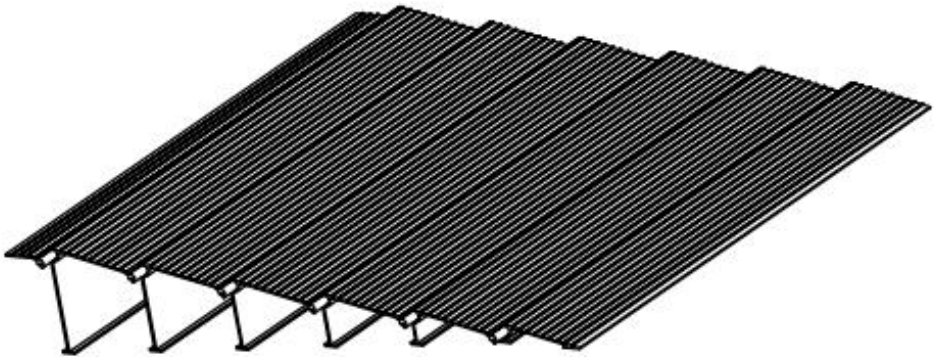

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## 1.Safety Instructions

### **ADVERTENCIA:**

Lea atentamente y comprenda las instrucciones y los procedimientos antes de instalar y utilizar la rampa de umbral.

No modifique el diseño de la rampa de umbral.

• No mueva la rampa de umbral mientras esté parado sobre ella.

No la utilice en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, nieve, etc. Se recomienda usarla en días despejados.

1. Durante la instalación, use guantes para evitar lesiones en las manos.
2. No apile artículos ni permita que los niños jueguen en la rampa.
3. Revise periódicamente la estructura y los sujetadores de la rampa para garantizar su estabilidad y seguridad.
4. Si la superficie de la rampa está desgastada o dañada, reemplácela o repárela a tiempo.

## 2.Maintenance Guide

1. Coloque el producto sobre un punto de partida firme, seguro, accesible y nivelado. La capacidad mínima de peso del punto de partida debe ser igual a la de la rampa (362 kg). No exceda la capacidad máxima de peso del producto.

2. Asegúrese de que el producto esté firmemente alineado con el punto de partida. Si no se encuentra un punto de partida seguro, accesible y nivelado, o si el producto no encaja firmemente en un punto de partida más alto, no utilice la rampa.

3. No manipule, intente reparar ni modificar ninguna pieza del producto. Tenga cuidado de no quedar atrapado durante el montaje y la manipulación.

4. Si utiliza el producto con otros equipos de movilidad, consulte el manual del usuario para comprender las pautas de uso aceptables, incluyendo la inclinación y la dirección de la silla. No exceda las recomendaciones del equipo de movilidad.

5. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente los sujetadores de la

rampa para asegurarse de que no estén flojos. Apriete los sujetadores sueltos si es necesario.

6. Al utilizar la rampa, asegúrese de que esté bien nivelada contra el punto de inicio para garantizar la seguridad.

7. Antes de cada uso, limpie la superficie de la rampa de hielo, nieve, polvo, hojas y otros residuos. Retire el hielo y la nieve acumulados y barra la superficie. Para eliminar el polvo y los residuos, utilice un cepillo de cerdas suaves y un detergente no alcalino para limpiar la superficie de la rampa y, a continuación, enjuague bien.

8. La superficie de la rampa puede volverse resbaladiza en condiciones húmedas. Camine con precaución y preste atención a dónde pisa para evitar resbalones.

9. Si la rampa no se utilizará durante un período prolongado, guárdela en un área seca y bien ventilada, lejos de la luz solar directa.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**






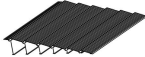
### **3.Product Description and Main Features**

La rampa de aleación de aluminio con enclavamiento de umbral está fabricada con extrusión de aleación de aluminio de alta calidad. Este producto es duradero y práctico. Es ligero, portátil, estable y duradero, y su diseño de enclavamiento facilita su instalación y almacenamiento.

➤ Características principales:

1. Material: Aleación de aluminio de alta resistencia, extruido.
2. Superficie: Tratamiento antideslizante, desbarbado.
3. Diseño entrelazado: la interfaz de cada sección está diseñada con precisión; alinee la interfaz de cada sección y presiónelas juntas para la instalación.
4. Límite de carga : hasta 800 libras .
5. Altura opcional : adecuado para umbrales de diferentes alturas.

## 4.Product Parameter

Artículo	Modelo	Imagen	Altura	Límite de carga	noroeste	GW
1	LD9YV0		1 pulgada	800 libras	1,5 kilogramos	1,9 kilogramos
2	LYIMV0		2 pulgadas	800 libras	2,7 kilogramos	3,2 kilogramos
3	Z2UAV0		3 pulgadas	800 libras	4,0 kilogramos	4,5 kilos
4	GRBRV0		4 pulgadas	800 libras	5,45 kilos	6,0 kilogramos
5	OVUSV0		5 pulgadas	800 libras	7,05 kilogramos	7,95 gramos
6	SNPTV0		6 pulgadas	800 libras	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Antes de comenzar la instalación, use guantes para proteger sus manos.
- (2) Elija una ubicación de instalación adecuada, asegurándose de que el suelo esté nivelado y firme.
- (3) Alinee y entrelace cada sección de la rampa hasta que todas las partes estén uniformes.
- (4) Comenzando con la extensión de 1", instale las extensiones del umbral en el orden mostrado (FIG. 1) hasta alcanzar la altura final. Junte las extensiones del umbral en un ángulo aproximado de 45° y gírelas hasta su posición una vez que la bombilla esté encajada en la ranura .

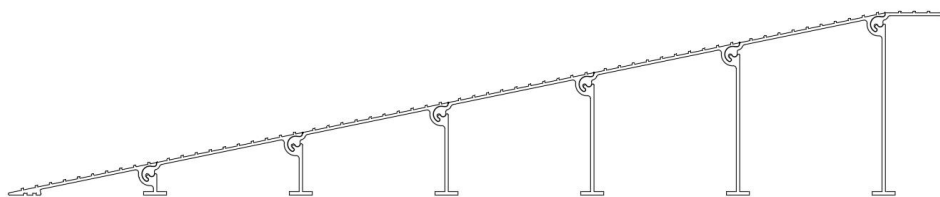


FIG.1


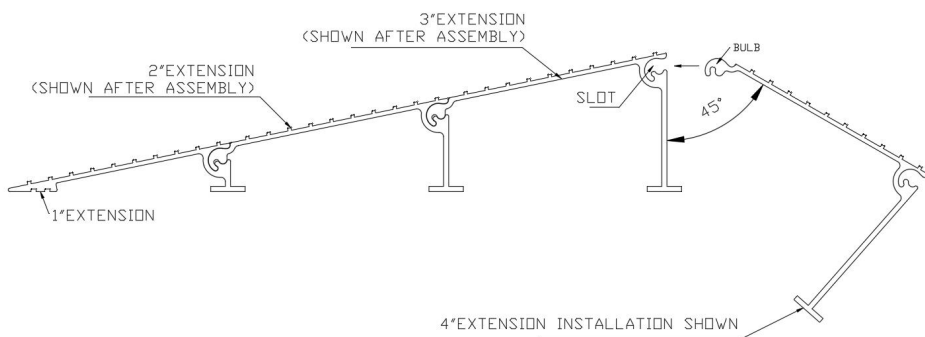



FIG.1

- (5) Utilice los tornillos provistos para apretar cada sección de la rampa para garantizar que la rampa no se resbale ni haga ruido durante el uso .

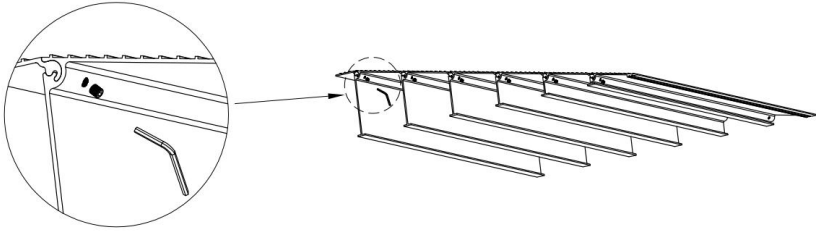


(5) Después de la instalación, verifique que la rampa esté estable y firmemente fijada al suelo.

(6) Al utilizar la rampa, empuje el equipo hacia arriba y hacia abajo de manera constante, evitando giros bruscos o exceso de velocidad.

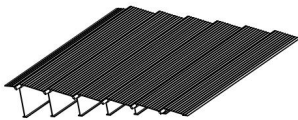

six inch

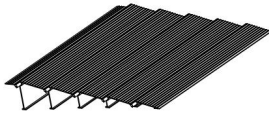

five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **PRÓG RAMPA INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Modele: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

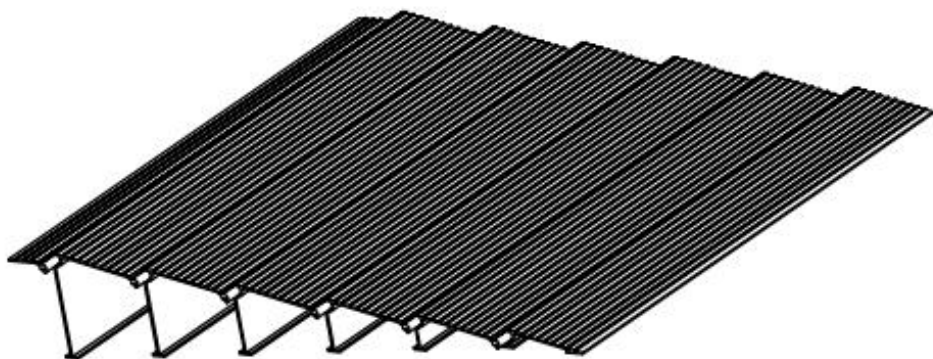

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## 1.Safety Instructions

### **OSTRZEŻENIE:**

Przed zainstalowaniem i użyciem rampy progowej należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcję oraz procedury .

Nie należy modyfikować konstrukcji rampy progowej.

- Nie przesuwaj progu rampy stojąc na nim.
  - Nie należy używać drabiny przy złej pogodzie, takiej jak wiatr, deszcz, śnieg itp. Zaleca się korzystanie z drabiny przy bezchmurnej pogodzie.
1. Podczas montażu należy nosić rękawice, aby uniknąć obrażeń dłoni.
  2. Nie układaj przedmiotów jeden na drugim i nie pozwalaj dzieciom bawić się na rampie.
  3. Regularnie sprawdzaj konstrukcję i elementy mocujące rampy, aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.
  4. Jeśli powierzchnia rampy jest zużyta lub uszkodzona, należy ją wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie.

## 2.Maintenance Guide

1. Umieść produkt na stabilnym, bezpiecznym, dostępnym i równym punkcie początkowym. Minimalna nośność punktu początkowego musi być równa nośności rampy (800 funtów). Nie przekraczaj maksymalnej nośności produktu.
2. Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie zamocowany na równi z punktem początkowym. Jeśli nie można znaleźć bezpiecznego, dostępnego i równego punktu początkowego lub jeśli produkt nie przylega bezpiecznie do wyższego punktu początkowego, nie używaj rampy.
3. Nie należy ingerować w żadną część produktu, podejmować prób naprawy ani modyfikacji. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć punktów zacisku podczas montażu i obsługi.
4. W przypadku korzystania z produktu z innym sprzętem wspomagającym mobilność, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego sprzętu, aby poznać wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, w tym dotyczące odpowiedniego nachylenia, pochylenia i kierunku ustawienia

krzesła. Nie należy przekraczać zaleceń dotyczących sprzętu wspomagającego mobilność.

5. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź, czy mocowania rampy nie są luźne. W razie potrzeby dokręć luźne mocowania.

6. Podczas korzystania z rampy należy upewnić się, że jest ona ściśle przylega do punktu początkowego, by zagwarantować bezpieczeństwo.

7. Przed każdym użyciem oczyść powierzchnię rampy z lodu, śniegu, kurzu, liści i innych zanieczyszczeń. Usuń nagromadzony lód i śnieg, a następnie zamiataj powierzchnię. Do czyszczenia kurzu i zanieczyszczeń użyj miękkiej szczotki i niealkalicznego detergentu, a następnie dokładnie spłucz powierzchnię rampy.

8. Nawierzchnia rampy może być śliska w mokrych warunkach. Zachowaj ostrożność i zwracaj uwagę na to, gdzie stąpasz, aby się nie poślizgnąć.

9. Jeżeli rampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy przechowywać ją w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE




### 3.Product Description and Main Features

Aluminiowa rampa progowa z blokadą progową wykonana jest z wysokiej jakości wylęczonego stopu aluminium. Produkt jest trwały i zapewnia wygodę. Jest lekki, przenośny, stabilny i trwały, a jego konstrukcja blokująca ułatwia montaż i przechowywanie.

➤ Główne cechy:

1. Materiał: Wysokowytrzymały stop aluminium, wylęczone.
2. Powierzchnia: obróbka antypoślizgowa, gratowanie.
3. Konstrukcja łącząca: interfejs każdej sekcji jest precyzyjnie zaprojektowany; należy wyrównać interfejs każdej sekcji i docisnąć je do siebie w celu instalacji.
4. Limit obciążenia : do 800 funtów .
5. Wysokość opcjonalna : nadaje się do progów o różnej wysokości.

## 4.Product Parameter

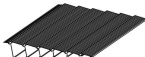Przedmiot	Model	Zdjęcie	Wysokość	Obciążenie L limit	Północny zachód	GW
1	LD9YV0		1 cal	800 funtów	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 cale	800 funtów	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 cale	800 funtów	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 cale	800 funtów	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 cali	800 funtów	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 cali	800 funtów	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Przed rozpoczęciem instalacji należy założyć rękawice w celu ochrony rąk.
- (2) Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, upewniając się, że podłoże jest równe i stabilne.
- (3) Wyrównaj i zablokuj każdą sekcję rampy, aż wszystkie części będą równe.
- (4) Zaczynając od przedłużki 1", zamontuj przedłużki progowe w kolejności pokazanej na rysunku (rys. 1), aż do osiągnięcia ostatecznej wysokości. Zbliź przedłużki progowe pod kątem około 45°, a następnie obróć je na miejsce po wsunięciu żarówki w gniazdo .

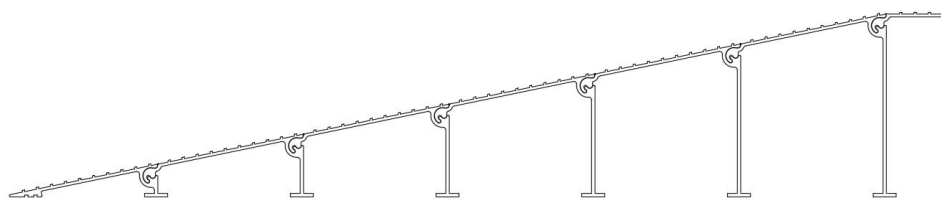


FIG.1


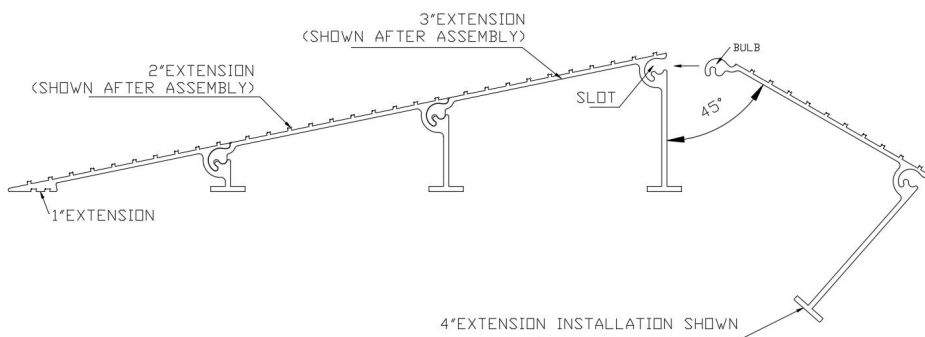


FIG.1

- (5) Za pomocą dołączonych śrub dokręć każdą sekcję rampy, aby mieć pewność, że rampa nie będzie się wysuwać ani hałasować podczas

użytkowania .

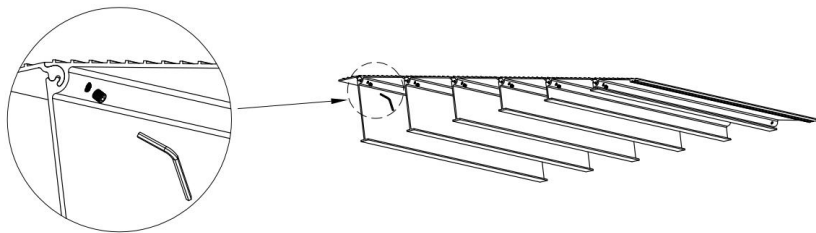

(5) Po montażu należy sprawdzić, czy rampa jest stabilna i dobrze przytwierdzona do podłoża.

(6) Podczas korzystania z rampy należy przesuwać sprzęt w górę i w dół rampy równomiernie, unikając ostrych zakrętów i nadmiernej prędkości.



six inch



five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Producent:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **DREMPELWAARDE OPRIT GEBRUIKERSHANDLEIDING**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Model: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

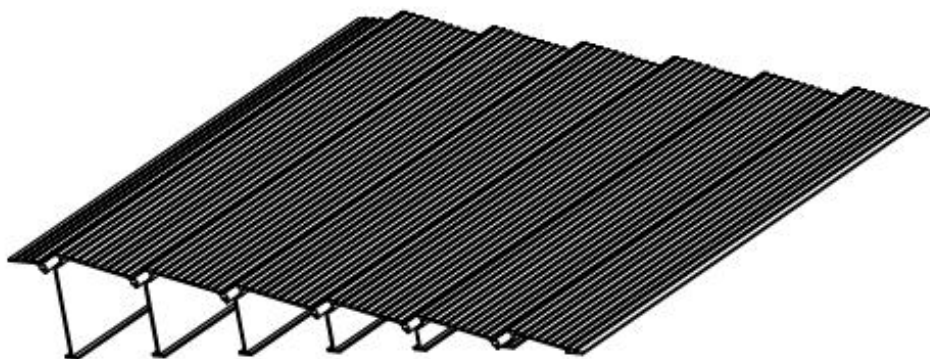

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## 1.Safety Instructions

### **WAARSCHUWING:**

Lees de instructies en procedures zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u de drempelhulp installeert en gebruikt .

Wijzig het ontwerp van de drempelhelling niet.

- Verplaats een drempelhulp niet terwijl u erop staat.
  - Gebruik de ladder niet bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw, enzovoort. Het wordt aanbevolen de ladder te gebruiken bij helder weer.
1. Draag tijdens de installatie handschoenen om handletsel te voorkomen.
  2. Stapel geen voorwerpen op de helling en laat kinderen er niet op spelen.
  3. Controleer regelmatig de structuur en de bevestigingsmiddelen van de hellingbaan om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.
  4. Indien het oppervlak van de oprit versleten of beschadigd is, vervang of repareer het dan tijdig.

## 2.Maintenance Guide

1. Plaats het product op een stevig, veilig, toegankelijk en vlak startpunt. Het minimale draagvermogen van het startpunt moet gelijk zijn aan dat van de oprijplaat (360 kg). Overschrijd het maximale draagvermogen van het product niet.
2. Zorg ervoor dat het product goed aansluit op het startpunt. Als er geen veilig, toegankelijk en vlak startpunt gevonden kan worden, of als het product niet goed aansluit op een hoger startpunt, gebruik de oprijplaat dan niet.
3. Knoei niet met het product, probeer het niet te repareren of te wijzigen. Wees voorzichtig om knelpunten te voorkomen tijdens de montage en het gebruik.
4. Raadpleeg bij gebruik van het product in combinatie met andere mobiliteitshulpmiddelen de gebruikershandleiding van het hulpmiddel voor de richtlijnen voor acceptabel gebruik, inclusief de juiste hellingshoek en stoelrichting. Overschrijd de aanbevelingen van het mobiliteitshulpmiddel niet.

5. Controleer voor elk gebruik zorgvuldig de bevestigingsmiddelen op de oprijplaat om er zeker van te zijn dat ze niet loszitten. Draai losse bevestigingsmiddelen indien nodig vast.
6. Zorg er bij het gebruik van de oprit voor dat deze goed aansluit op het startpunt om de veiligheid te garanderen.
7. Reinig het oppervlak van de oprijplaat vóór elk gebruik van ijs, sneeuw, stof, bladeren en ander vuil. Verwijder opgehoopt ijs en sneeuw en veeg het oppervlak schoon. Gebruik voor stof en vuil een zachte borstel en een niet-alkalisch reinigingsmiddel om het oppervlak van de oprijplaat schoon te maken en spoel het vervolgens grondig af.
8. Het oppervlak van de oprit kan glad worden bij natte omstandigheden. Wees voorzichtig en let goed op uw voeten om uitglijden te voorkomen.
9. Als de oprijplaat gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, berg deze dan op in een droge en goed geventileerde ruimte, uit de buurt van direct zonlicht.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**


### **3.Product Description and Main Features**

De drempel- en in elkaar grijpende aluminium oprijplaat is gemaakt van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium. Dit product is duurzaam en biedt gemak. Het is lichtgewicht, draagbaar, stabiel en duurzaam en heeft een in elkaar grijpend ontwerp voor eenvoudige installatie en opslag.

➤ **Belangrijkste kenmerken:**

1. **Materiaal:** Hoogwaardige aluminiumlegering, geëxtrudeerd.
2. **Oppervlakte:** Antislipbehandeling, ontbramen.
3. **In elkaar grijpend ontwerp:** de interface van elke sectie is nauwkeurig ontworpen. Lijn de interface van elke sectie uit en druk ze tegen elkaar voor installatie.
4. **Belastinglimiet :** tot 800 pond .
5. **Hoogte optioneel :** geschikt voor drempels van verschillende hoogtes.

## 4.Product Parameter

Ik tem	Model	Afbeelding	Hoogte	Belastingsl imiet	NW	GW
1	LD9YV0		1 inch	800 pond	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 inch	800 pond	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 inch	800 pond	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 inch	800 pond	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 inch	800 pond	7,05 kg	7,95 gram
6	SNPTV0		6 inch	800 pond	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Draag handschoenen om uw handen te beschermen voordat u met de installatie begint.
- (2) Kies een geschikte installatielocatie en zorg ervoor dat de grond waterpas en stevig is.
- (3) Lijn elk deel van de helling uit en vergrendel het totdat alle delen gelijk zijn.
- (4) Begin met de 1" verlenging en monteer de drempelverlengingen in de aangegeven volgorde (FIG. 1) totdat de uiteindelijke hoogte is bereikt. Breng de drempelverlengingen samen in een hoek van ongeveer 45° en draai ze vervolgens op hun plaats nadat de lamp in de gleuf is geplaatst .

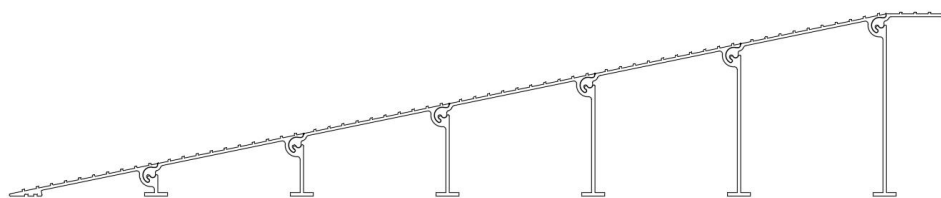


FIG.1


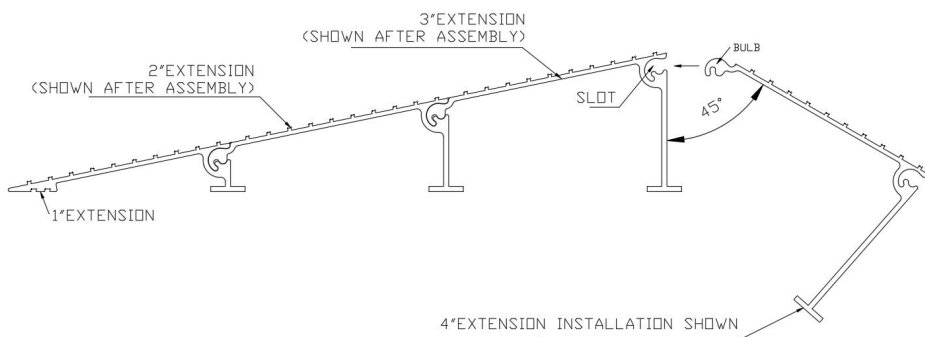



FIG.1

- (5) Gebruik de meegeleverde schroeven om elk deel van de helling vast te draaien om ervoor te zorgen dat de helling niet wegglijdt of geluid maakt tijdens gebruik .

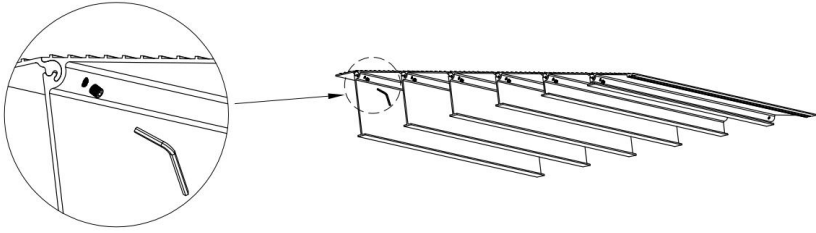


(5) Controleer na de installatie of de helling stabiel is en stevig aan de grond is bevestigd.

(6) Duw de apparatuur bij gebruik van de helling gelijkmatig omhoog en omlaag, en vermijd scherpe bochten of te hard rijden.

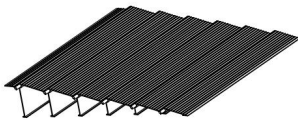

six inch

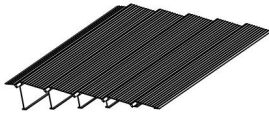

five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**


**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **TRÖSKEL RAMP ANVÄNDARMANUAL**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Modell: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0**

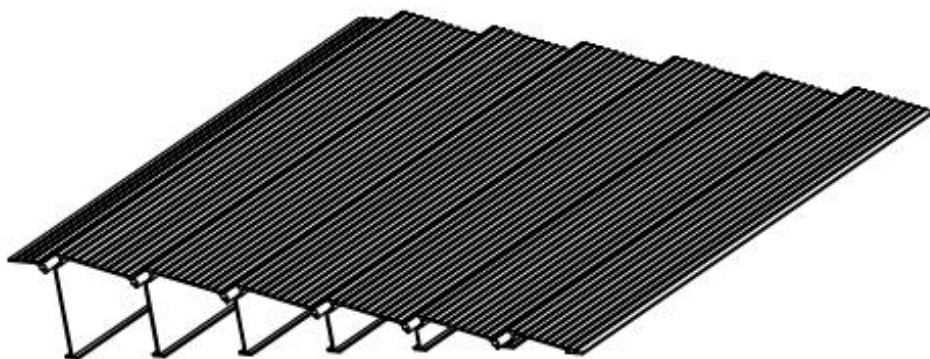

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## 1.Safety Instructions

### **WARNING:**

och förstå noggrant instruktioner och procedurer innan du installerar och använder tröskelrampen.

Modifiera inte tröskelrampens utformning.

- Flytta inte en tröskelramp medan du står på den.
  - Använd den inte i dåligt väder, såsom vind, regn, snö och så vidare. Det rekommenderas att använda stegen i klart väder.
1. Använd handskar under installationen för att förhindra handskador.
  2. Stapla inte föremål och låt inte barn leka på rampen.
  3. Kontrollera regelbundet rampens konstruktion och fästelement för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet.
  4. Om rampens yta är sliten eller skadad, vänligen byt ut eller reparera den i tid.

## 2.Maintenance Guide

1. Placera produkten på en stadig, säker, lättillgänglig och jämn startpunkt. Startpunktens minsta viktkapacitet måste vara lika med rampens (800 lbs). Överskrid inte produktens maximala viktkapacitet.
2. Se till att produkten är ordentligt ansluten till startpunkten. Om en säker, tillgänglig och jämn startpunkt inte kan hittas, eller om produkten inte passar ordentligt mot en högre startpunkt, använd inte rampen.
3. Manipulera inte, försök inte reparera eller modifiera någon del av produkten. Var försiktig för att undvika klämpunkter under montering och hantering.
4. Om produkten används med andra mobilitetshjälpmedel, se utrustningens bruksanvisning för att förstå acceptabla användningsriktlinjer, inklusive lämplig lutning, lutning och stolsriktning. Överskrid inte rekommendationerna för mobilitetshjälpmedlet.
5. Kontrollera noggrant fästena på rampen före varje användning för att säkerställa att de inte är lösa. Dra åt eventuella lösa fästen vid behov.

6. När du använder rampen, se till att den ligger ordentligt i jämnhöjd med startpunkten för att garantera säkerheten.
7. Rengör rampytan från is, snö, damm, löv och annat skräp före varje användning. Avlägsna ansamlad is och snö och sopa ytan ren. Använd en mjuk borste och icke-alkaliskt rengöringsmedel för att rengöra rampytan och skölj sedan noggrant.
8. Rampytan kan bli hal i vått underlag. Var försiktig och var uppmärksam på ditt fotfäste för att förhindra halka.
9. Om rampen inte ska användas under en längre tid, förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, skyddat från direkt solljus.

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

### **3.Product Description and Main Features**

Den tröskelmonterade rampen i aluminiumlegering är tillverkad av högkvalitativ aluminiumlegering. Produkten är hållbar och bekväm för människor. Den är lätt, bärbar, stabil och hållbar och har en sammankopplad design för enkel installation och förvaring.

➤ Huvudfunktioner:

1. Material: Höghållfast aluminiumlegering, extruderad.
2. Yta: Halkskyddsbehandling, avgradning.
3. Sammankopplande design: Varje sektionens gränssnitt är exakt utformat; justera varje sektionens gränssnitt och tryck ihop dem för installation.
4. Lastgräns : Upp till 800 pund .
5. Höjd valfri : lämplig för trösklar med olika höjder.

## 4.Product Parameter

Jag tem	Modell	Bild	H åtta	Belastning sgräns	nordväst	GW
1	LD9YV0		1 tum	800 pund	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 tum	800 pund	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 tum	800 pund	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 tum	800 pund	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 tum	800 pund	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 tum	800 pund	8,6 kg	9,56 kg

## 5. Installation Guide

- (1) Använd handskar för att skydda händerna innan installationen påbörjas.
- (2) Välj en lämplig installationsplats och se till att marken är jämn och fast.
- (3) Rikta in och sammanfoga varje sektion av rampen tills alla delar är jämna.
- (4) Börja med 2,5 cm-förlängningen och montera tröskelförlängningarna i den ordning som visas (FIG. 1) tills den slutliga höjden är uppnådd. För ihop tröskelförlängningarna i en vinkel på ungefär 45° och rotera dem sedan på plats efter att glödlampan har fästs i skåran .

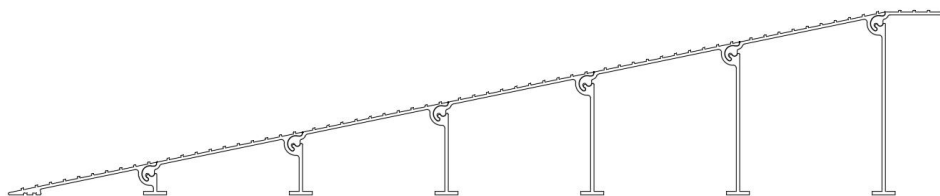


FIG.1


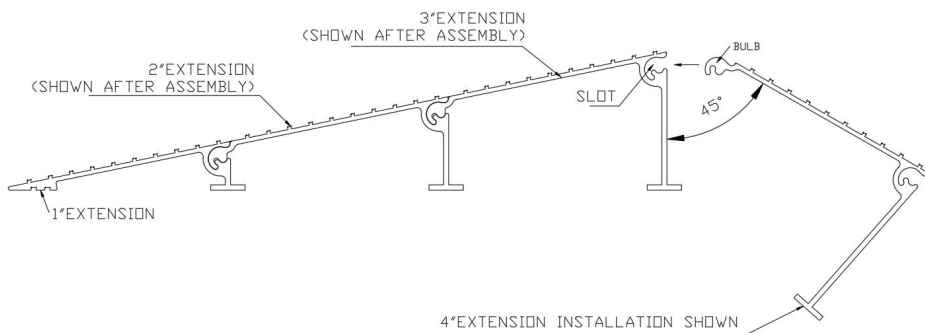



FIG.1

- (5) Använd de medföljande skruvarna för att dra åt varje del av rampen för att säkerställa att rampen inte glider ut eller låter illa under användning .

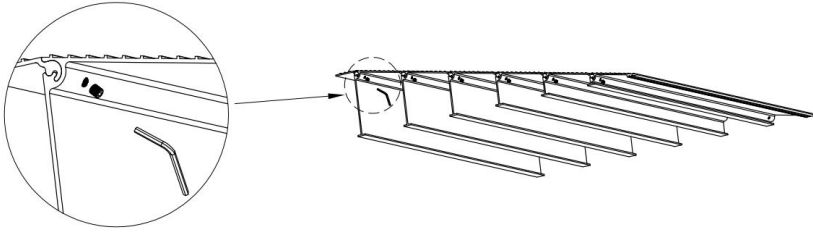


(5) Kontrollera efter installationen att rampen är stabil och ordentligt fäst vid marken.

(6) När du använder rampen, skjut utrustningen stadigt upp och ner längs rampen och undvik skarpa svängar eller fortkörning.

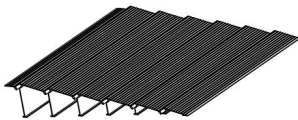

six inch

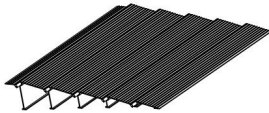

five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

