VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB CARTS

MODEL: K-ST122

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB CARTS

MODEL: K-ST122



Scan the QR code to install


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.



Please read and observe carefully all the assembly instructions before beginning assembly.

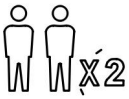

Unit should be assembled by two or more people.



Please do not let your child climb on the product.If you have kids or animals who like to climb, we highly recommend using the wall anchors and brackets/straps that come with the package.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Carts.

8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed weight capacities, before moving.
3. Use only on a flat, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Carts.
4. Use as intended only.


Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	K-ST122
Product Dimensions (LxWxH)	515*410*870mm
Net Weight	About 5.05kg


*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

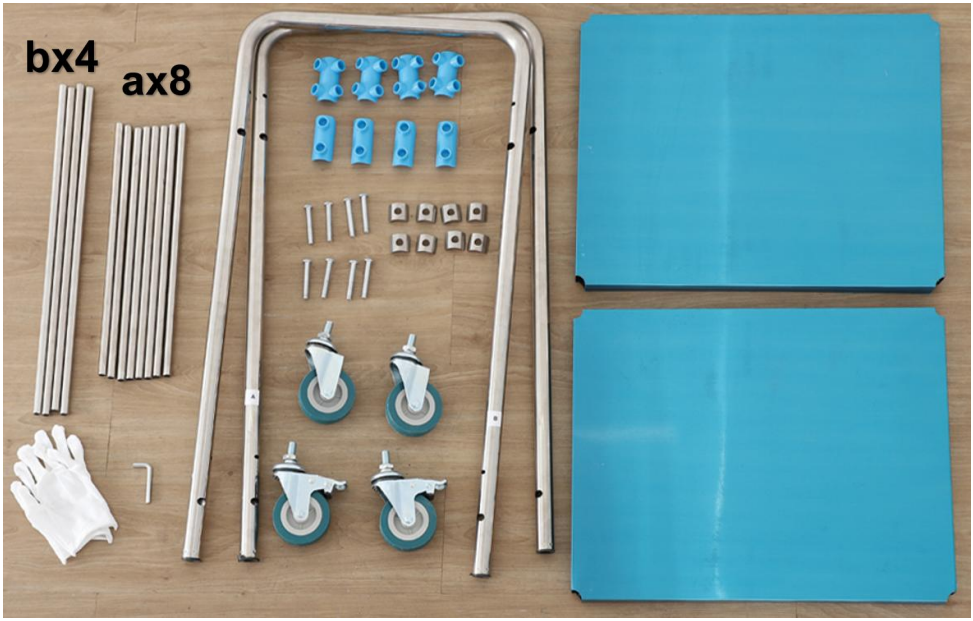


ASSEMBLY STEPS

STEP 1

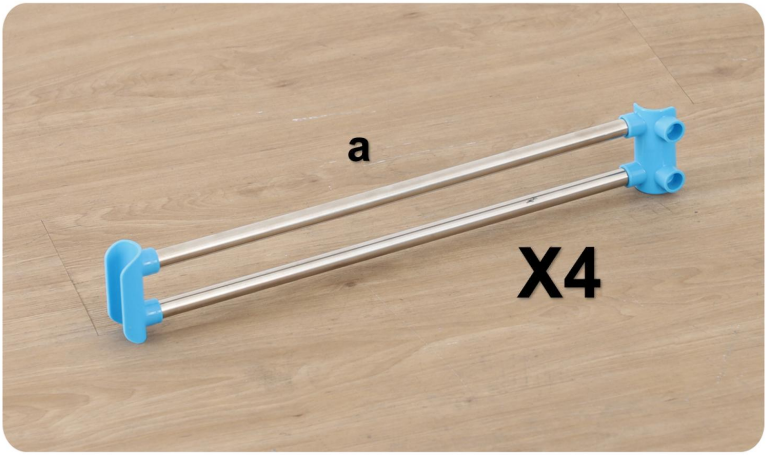

STEP 2

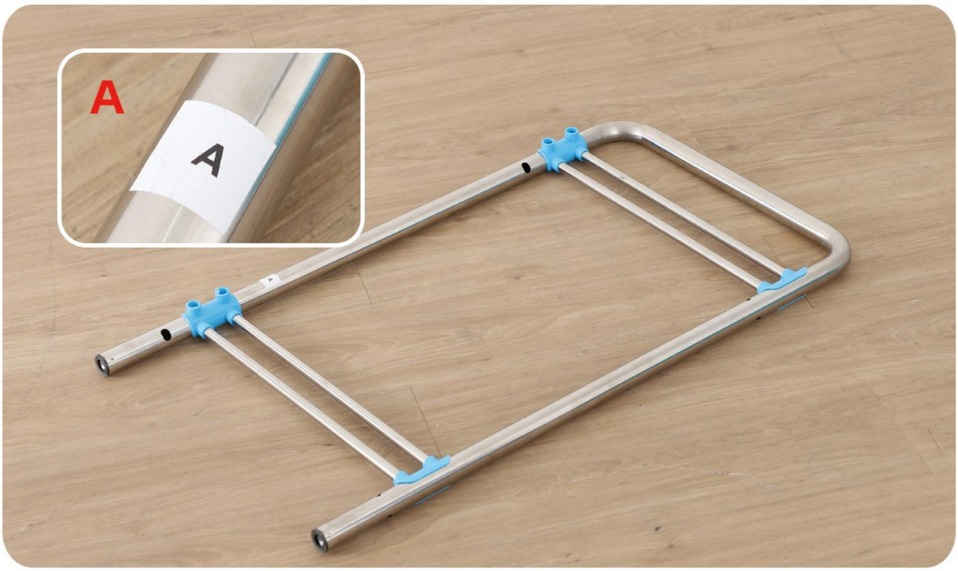
A
A


STEP 3


Don't tighten the screws yet. Tighten them after the entire trolley is installed.


STEP 4



STEP 5

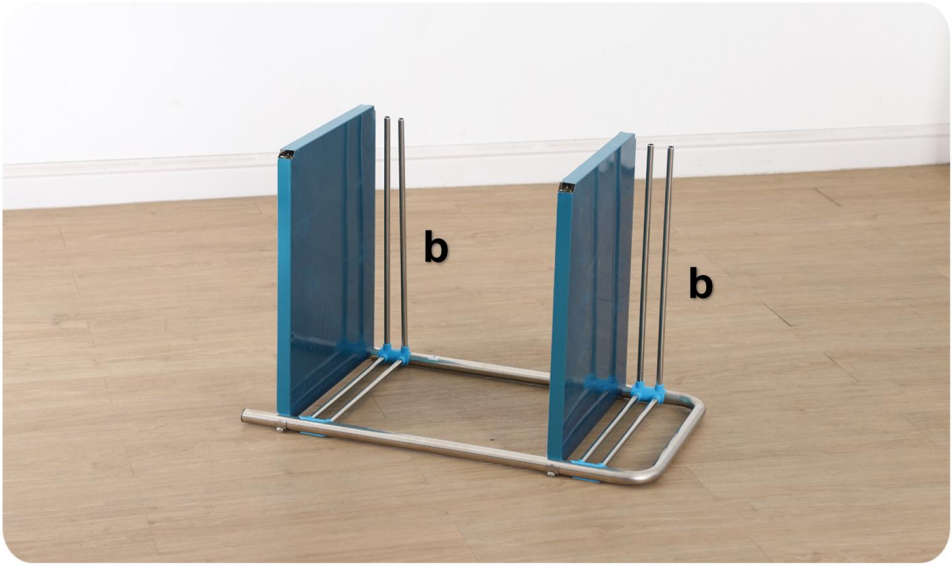

STEP 6

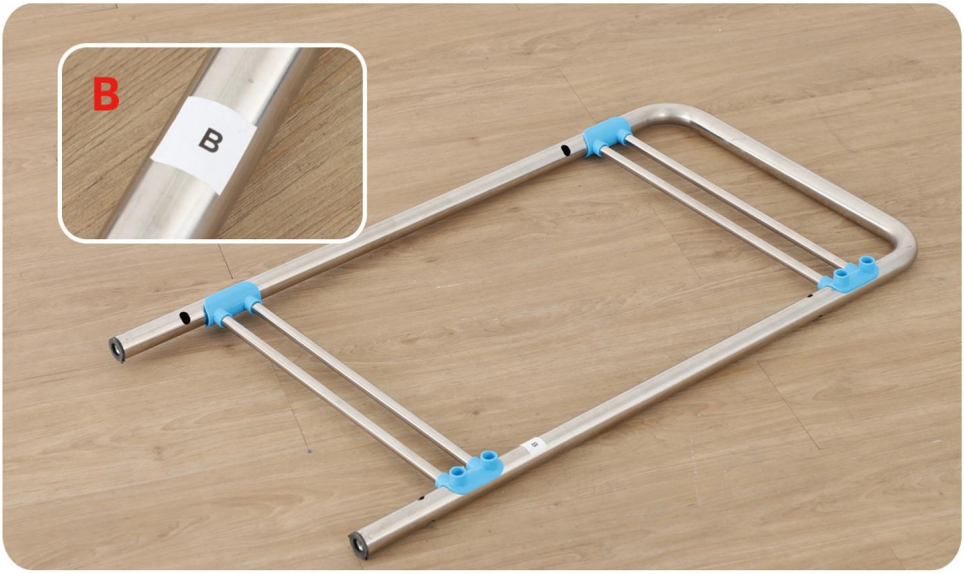

STEP 7



STEP 8



COMPLETION



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHARIOTS DE LABORATOIRE

MODÈLE : K-ST122

MODÈLE : K-ST122



Scannez le code QR

code à installer

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT:


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.

Cela pourrait entraîner des blessures graves.



Veuillez lire et observer attentivement toutes les instructions de montage.

Instructions avant de commencer le montage.

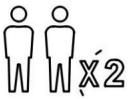

L'assemblage de cet appareil doit être effectué par au moins deux personnes.



Veuillez ne pas laisser votre enfant grimper sur le produit. Si vous

Si vous avez des enfants ou des animaux qui aiment grimper, nous vous recommandons vivement de les contacter.

Il est recommandé d'utiliser les chevilles et les supports/sangles muraux.

qui font partie du colis.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut

créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant

assemblée.

3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet.

produits seulement.

7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter le poids en toute sécurité.

soutien aux chariots de laboratoire.

8. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans la section suivante

Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et

Séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.

2. Ne pas dépasser les capacités de poids avant de déplacer.

3. À utiliser uniquement sur une surface plane, dure et lisse pouvant supporter sans danger

supporter un chariot de laboratoire entièrement chargé.

4. Utiliser uniquement comme prévu.

Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	K-ST122
Dimensions du produit (L x l x H)	515*410*870 mm
Poids net	Environ 5,05 kg

*Les caractéristiques telles que les spécifications, l'apparence et le design des produits sont


Sous réserve de modifications sans préavis.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

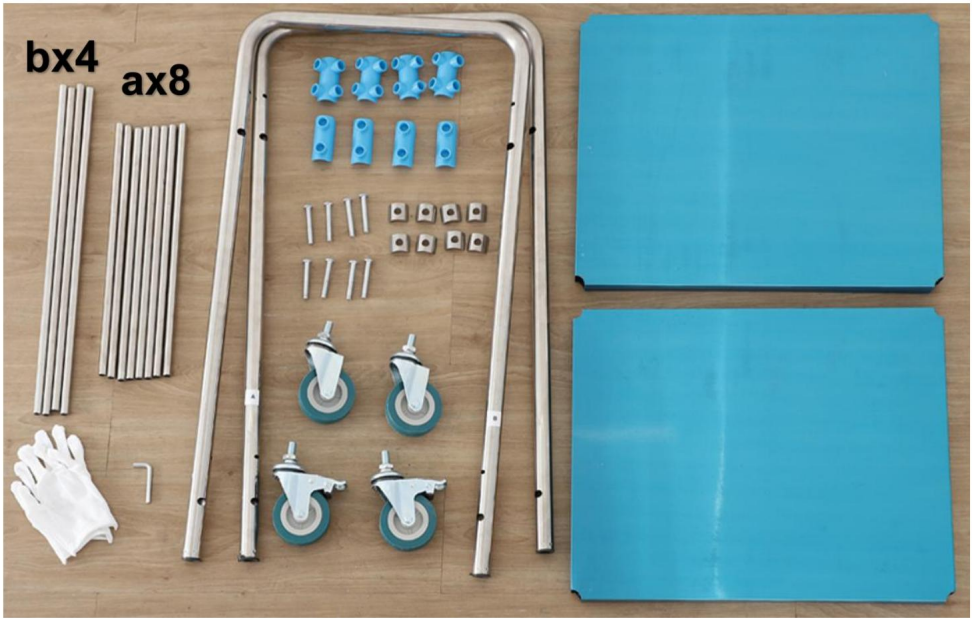


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

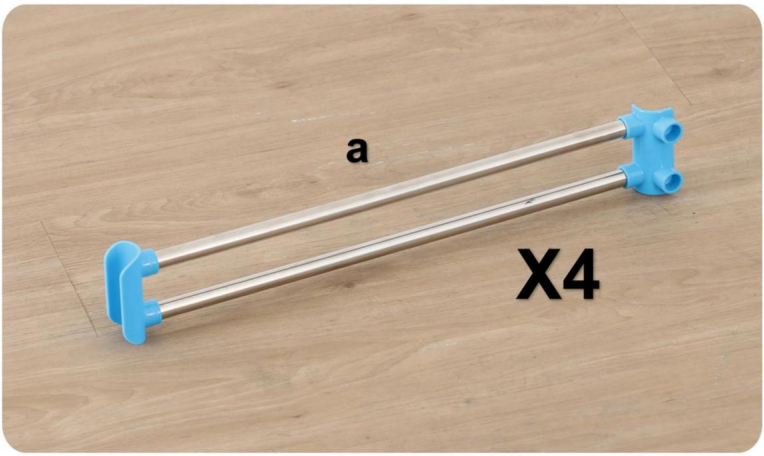

ÉTAPE 2

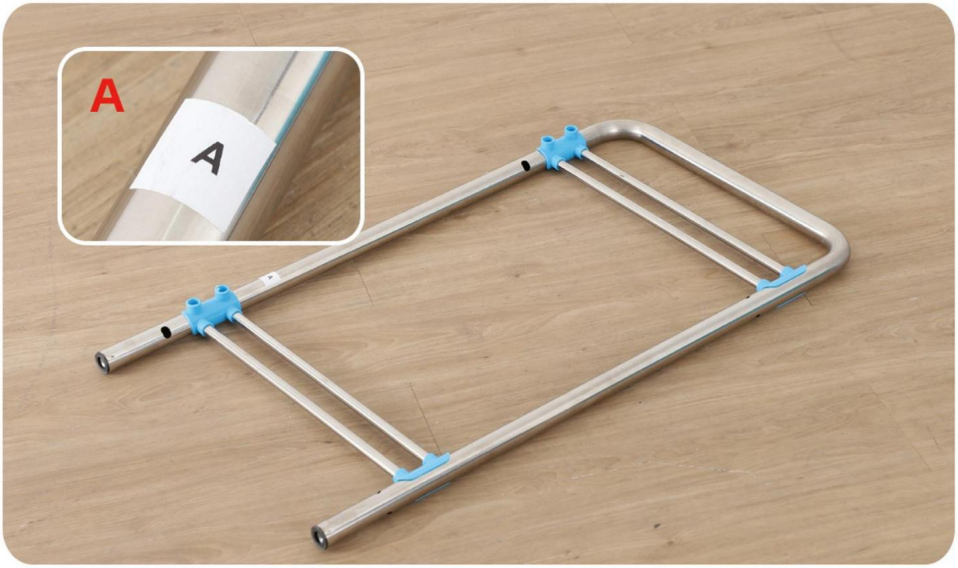


ÉTAPE 3




ÉTAPE 4



ÉTAPE 5

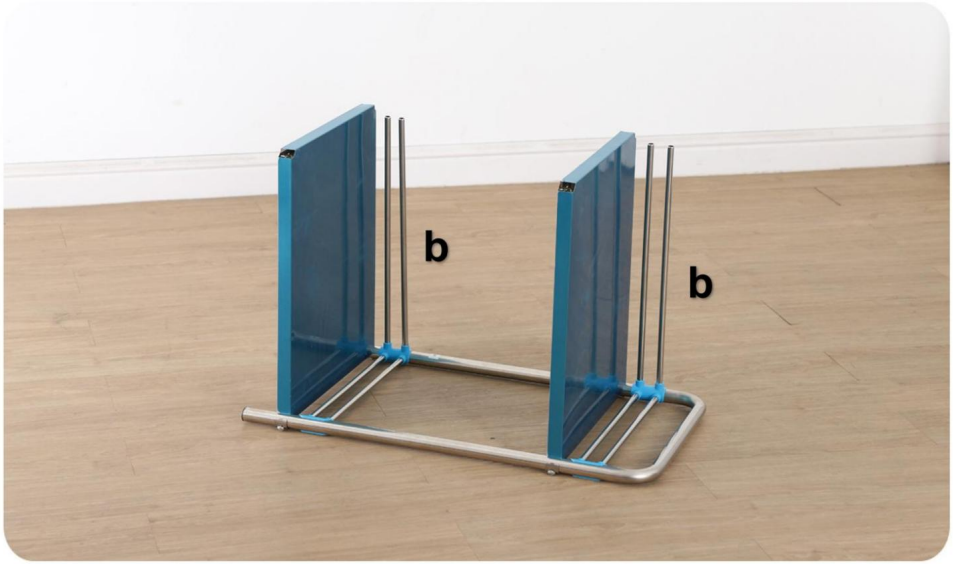

ÉTAPE 6

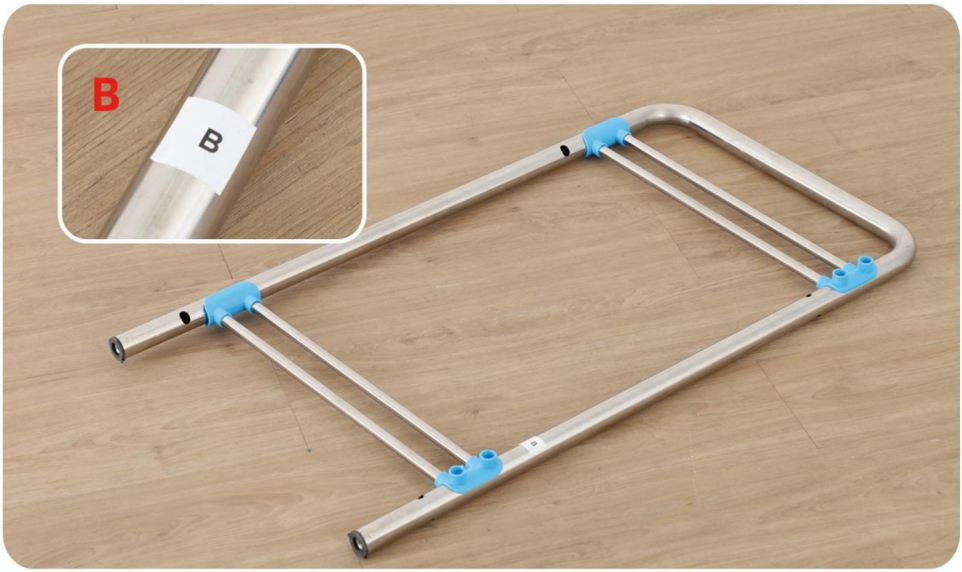

ÉTAPE 7



ÉTAPE 8



ACHÈVEMENT



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laborwagen

MODELL: K-ST122

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laborwagen

MODELL: K-ST122



QR-Code scannen

Code zum Installieren

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WARNUNG:


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.



Bitte lesen und beachten Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig.

Anweisungen vor Beginn der Montage befolgen.

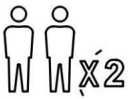

Das Gerät sollte von zwei oder mehr Personen zusammengebaut werden.



Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht auf das Produkt klettern.

Wenn Sie Kinder oder Tiere haben, die gerne klettern, empfehlen wir Ihnen dringend, dies zu tun.

Wir empfehlen die Verwendung von Wandankern und Halterungen/Gurten.

die im Lieferumfang enthalten sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.

5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen

oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

Nur Produkte.

7. Auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die einen sicheren Halt gewährleistet.

Unterstützung der Laborwagen.

8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie

Weitere Informationen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Auspacken und

Alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich trennen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit oder in der Nähe dieses Produkts spielen. Artikel.

2. Vor dem Transport die zulässigen Gewichtsgrenzen nicht überschreiten.

3. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die für eine sichere Anwendung geeignet ist.

Unterstützung eines voll beladenen Laborwagens.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

TECHNISCHE DATEN

Modell	K-ST122
Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	515*410*870mm
Nettogewicht	etwa 5,05 kg


*Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Packungsinhalt

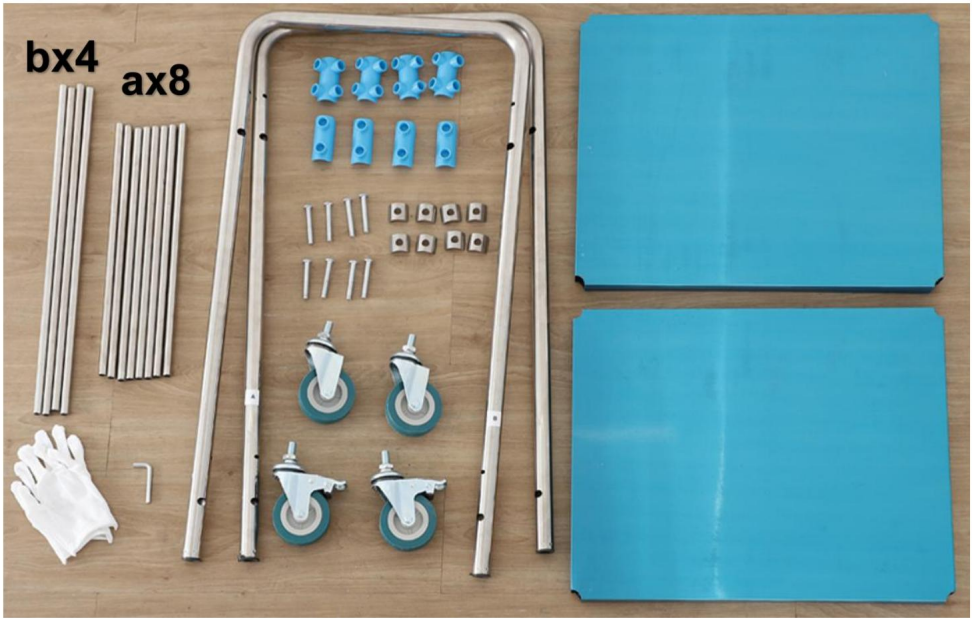


MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1

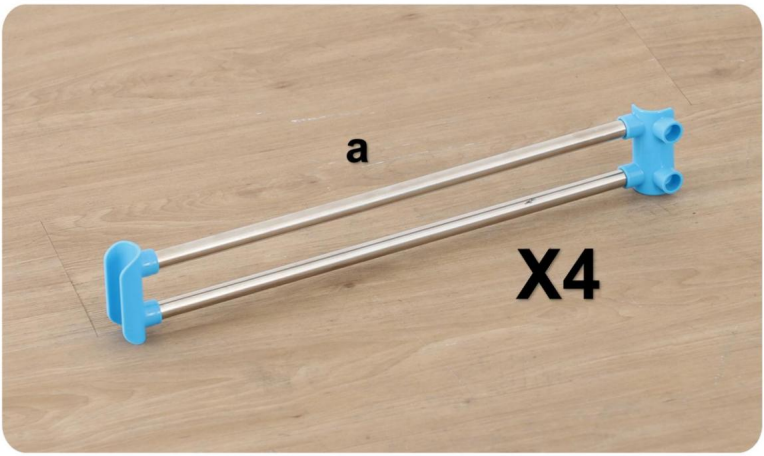

SCHRITT 2

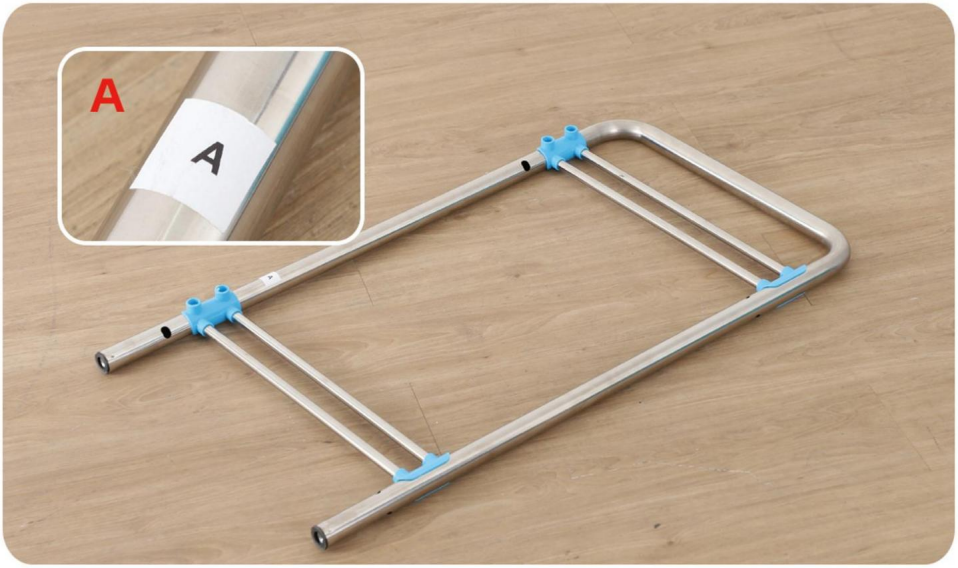


SCHRITT 3




SCHRITT 4



SCHRITT 5

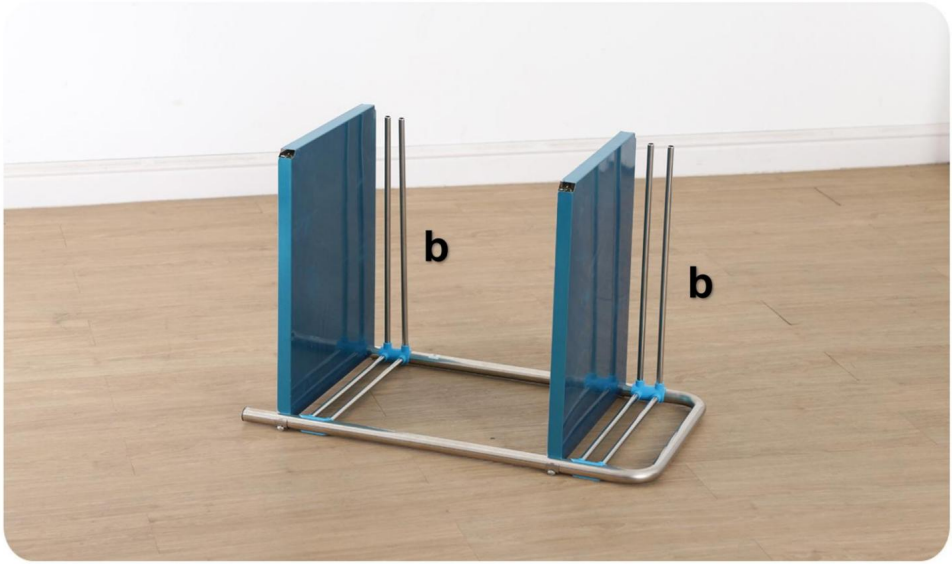

SCHRITT 6

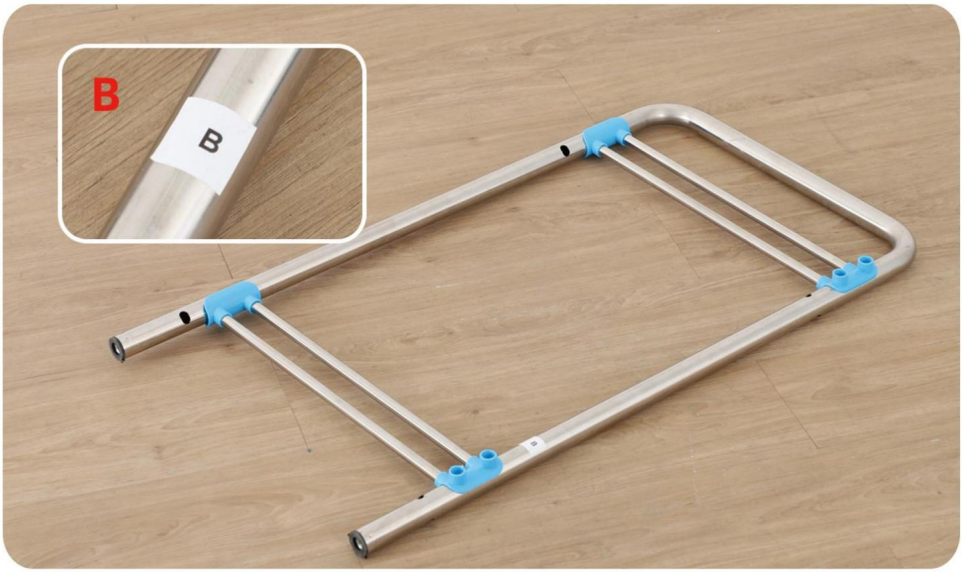

SCHRITT 7



SCHRITT 8



FERTIGSTELLUNG



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRELLI DA LABORATORIO

MODELLO: K-ST122

MODELLO: K-ST122



Scansiona il QR codice da installare


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni.



Si prega di leggere e osservare attentamente tutte le istruzioni di montaggio istruzioni prima di iniziare il montaggio.

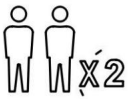

L'unità deve essere assemblata da due o più persone.



Si prega di non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.Se se avete bambini o animali a cui piace arrampicarsi, vi consigliamo vivamente si consiglia di utilizzare gli ancoraggi a parete e le staffe/cinghie che sono inclusi nella confezione.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto dei carrelli da laboratorio.

8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito
pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e
separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.

2. Non superare la capacità di peso prima dello spostamento.

3. Utilizzare solo su una superficie piana, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro
supportare carrelli da laboratorio completamente carichi.

4. Utilizzare solo come previsto.


Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	K-ST122
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	515*410*870mm
Peso netto	Circa 5,05 kg


*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

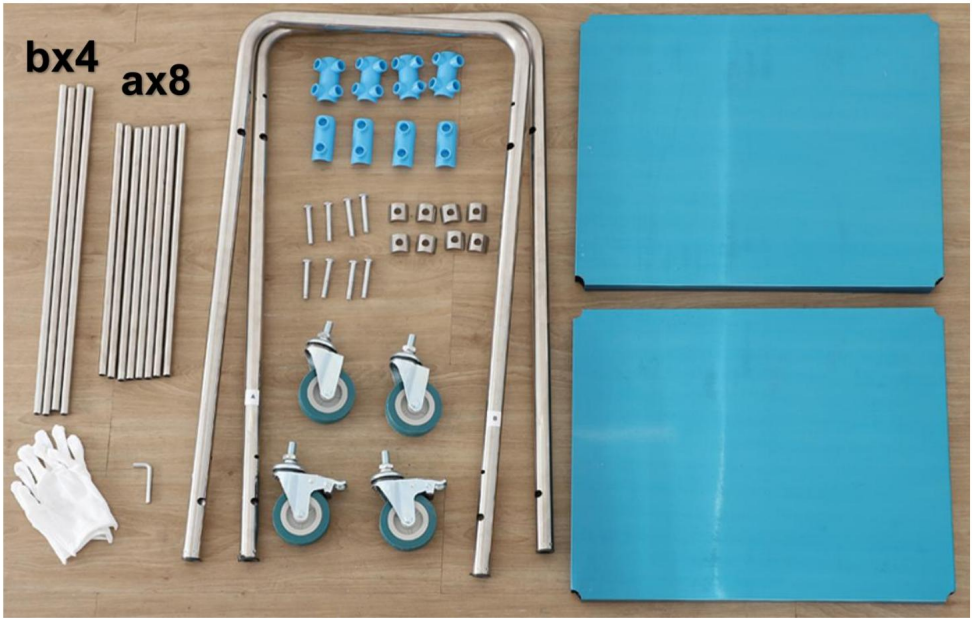


FASI DI MONTAGGIO

PASSO 1

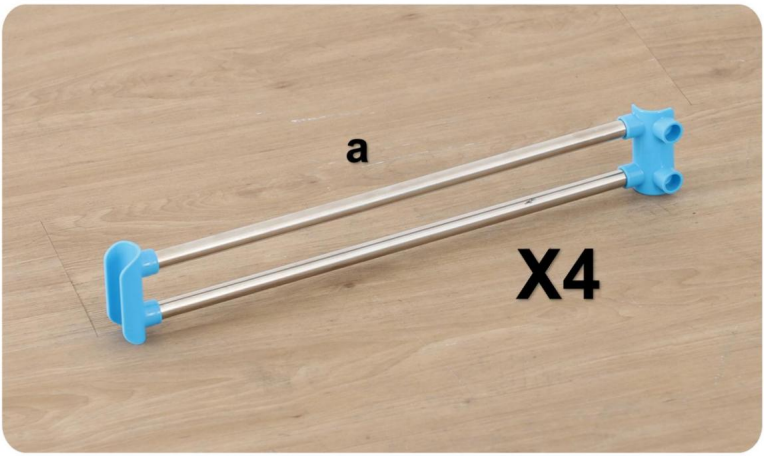

PASSO 2

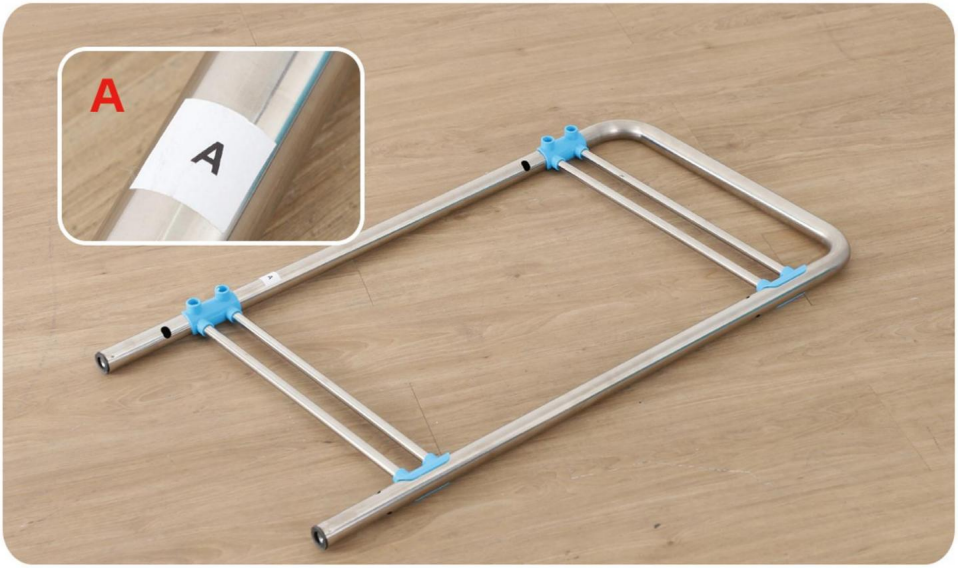


PASSO 3




PASSO 4



PASSO 5

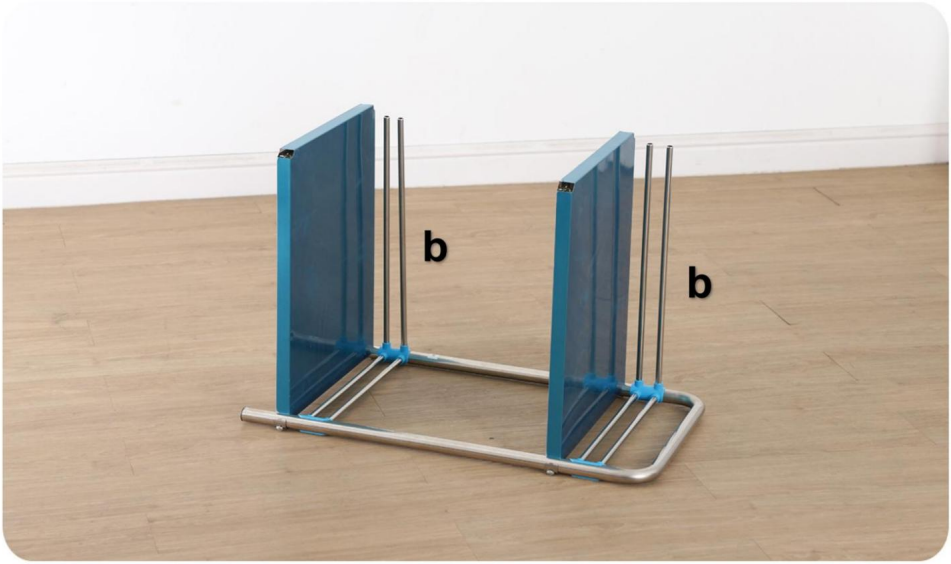

PASSO 6

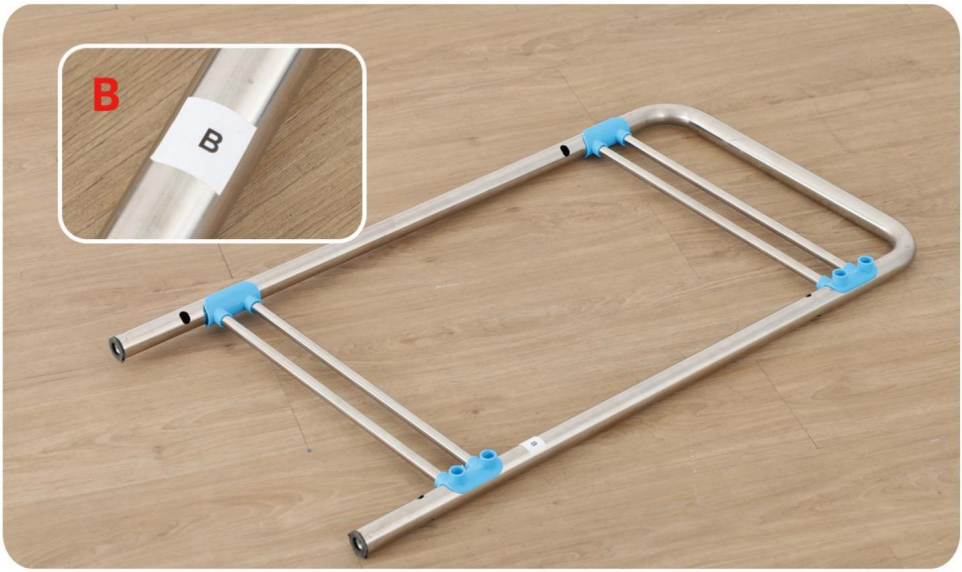

PASSO 7



PASSO 8



COMPLETAMENTO



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARROS DE LABORATORIO

MODELO: K-ST122

MODELO: K-ST122



Escanea el código QR

código para instalar


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de usar el producto. El incumplimiento de hacerlo podría resultar en lesiones graves.



Lea y observe atentamente todas las instrucciones de montaje.
Instrucciones antes de comenzar el montaje.

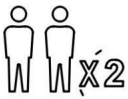

La unidad debe ser ensamblada por dos o más personas.



Por favor, no deje que su hijo se suba al producto. Si usted
Si tiene niños o animales a los que les gusta trepar, le recomendamos encarecidamente
Se recomienda utilizar los anclajes de pared y los soportes/correas.
que vienen con el paquete.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente siguiendo estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.

2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

3. Mantenga el área de ensamblaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.

5. No se arme cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a un ensamblaje correcto y completo.
Solo productos.

7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que permita una instalación segura.
Soporte para los carros de laboratorio.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en lo siguiente

Para consultar las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y

Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VOLCAMIENTO DE OBSTRUCCIONES:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.

artículo.

2. No exceda la capacidad de carga antes de moverlo.

3. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, dura y lisa capaz de soportarla de forma segura.

soporte para carros de laboratorio completamente equipados.

4. Utilizar únicamente según las instrucciones.


Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	K-ST122
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	515*410*870 mm
Peso neto	Aproximadamente 5,05 kg


*Los productos, como las especificaciones, la apariencia y el diseño, son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

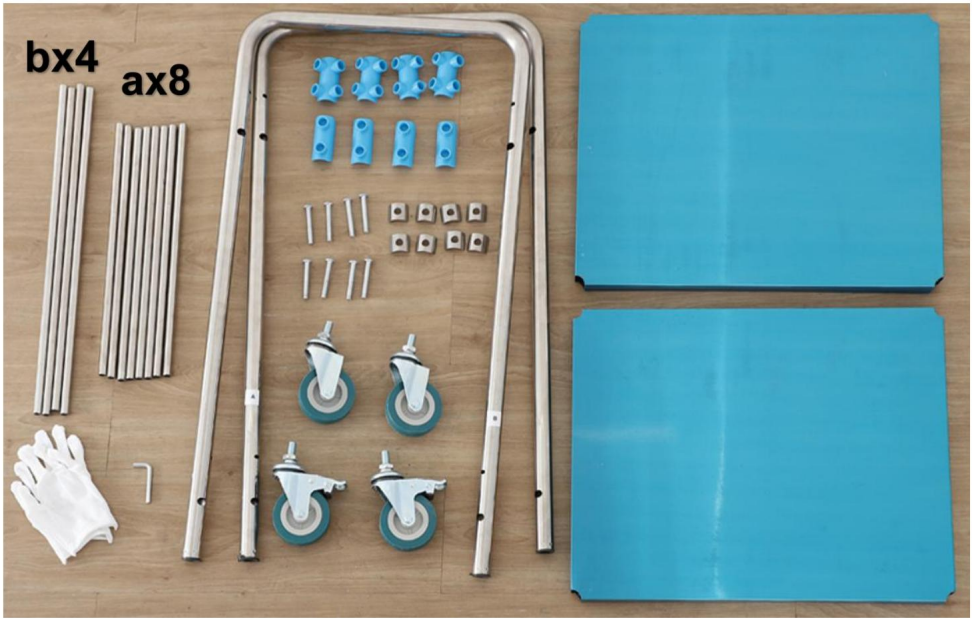


PASOS DE ENSAMBLAJE

PASO 1

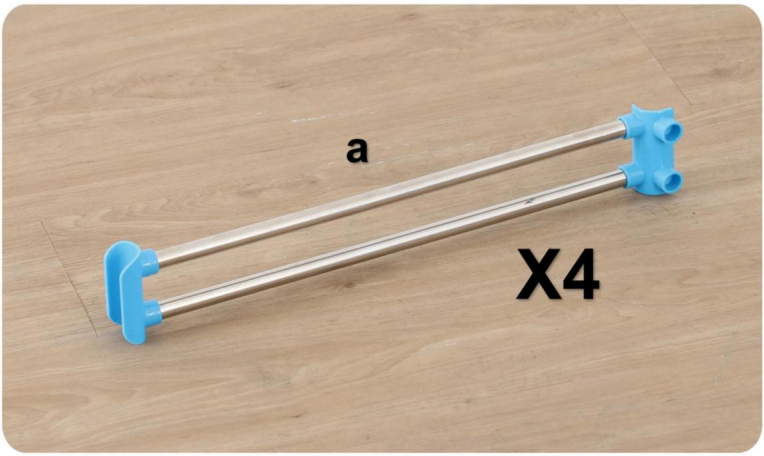

PASO 2

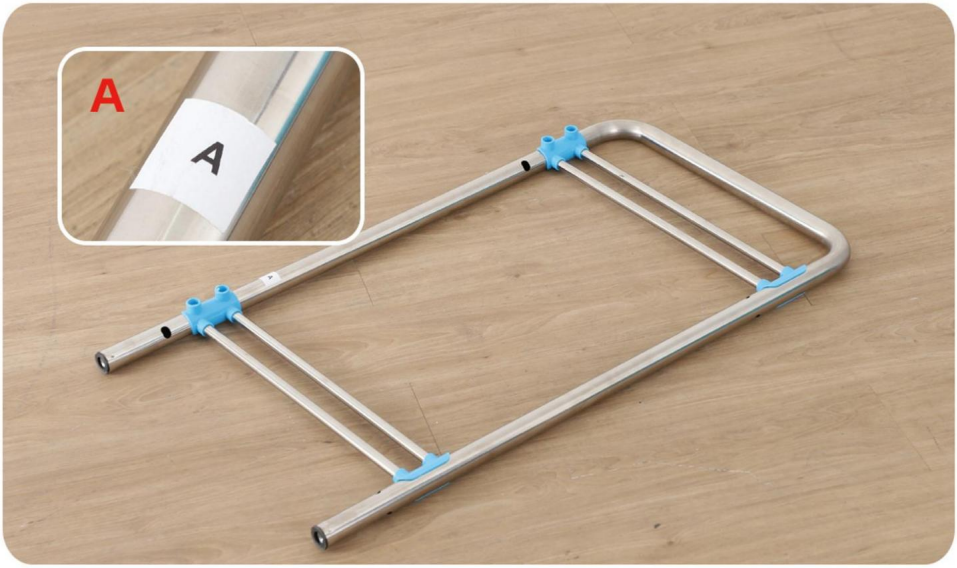
A
A


PASO 3


Don't tighten the screws yet. Tighten them after the entire trolley is installed.


PASO 4



PASO 5

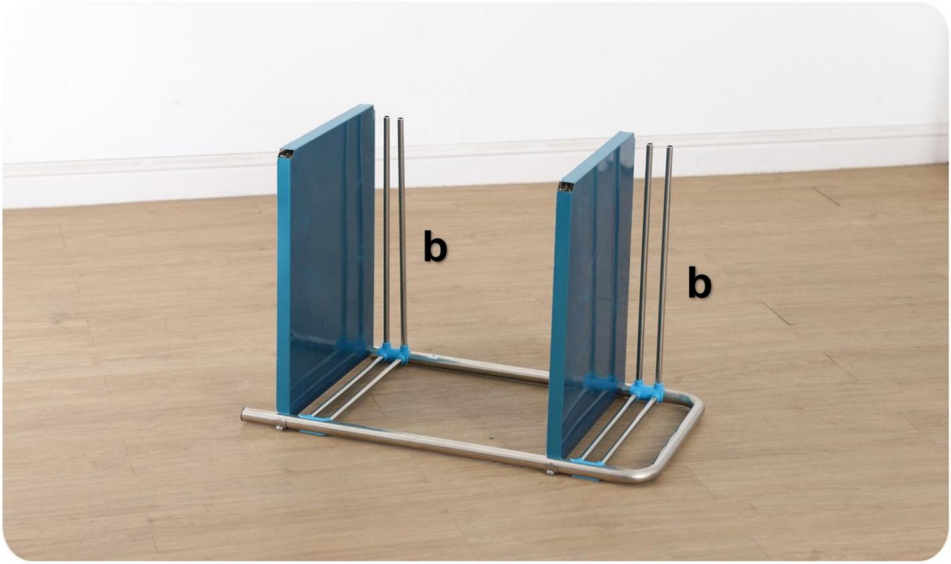

PASO 6

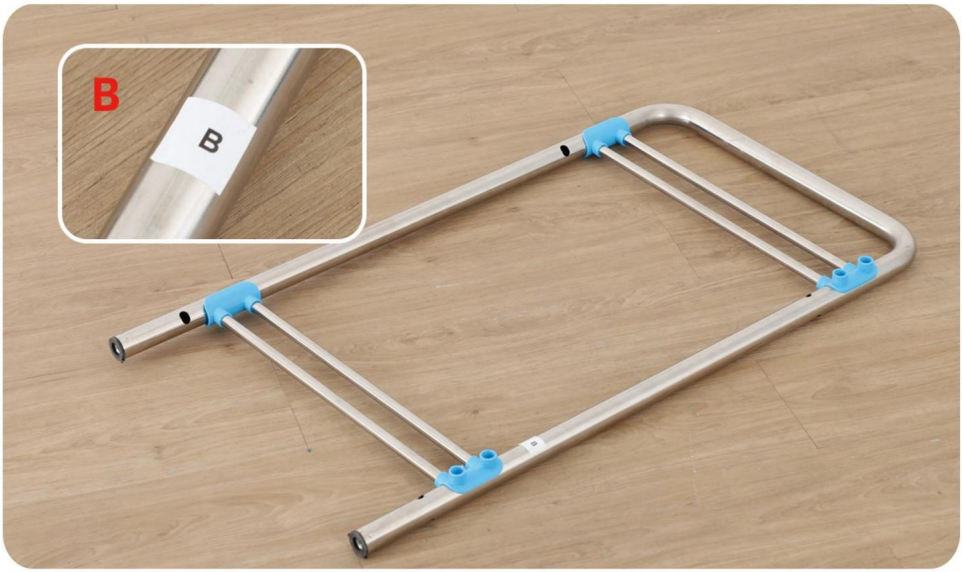

PASO 7



PASO 8



TERMINACIÓN



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WÓZKI LABORATORYJNE

MODEL: K-ST122

MODEL: K-ST122



Zeskanuj kod QR
kod do instalacji

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:


Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie

niestosowanie się do tego może skutkować poważnymi obrażeniami.



Proszę przeczytać i uważnie przestrzegać wszystkich instrukcji montażu

instrukcje przed rozpoczęciem montażu.

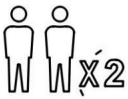

Jednostkę powinny montować co najmniej dwie osoby.



Prosimy nie pozwalać dziecku wspinać się na produkt. Jeśli

Jeśli masz dzieci lub zwierzęta, które lubią się wspinać, bardzo chętnie

zalecamy użycie kotew ściennych i wsporników/pasków

które są dołączone do zestawu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.

montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego

tylko produkty.

7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.

wspieranie wózków laboratoryjnych.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i
oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.

2. Przed przeprowadzką nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru.

3. Używać wyłącznie na płaskiej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne
obsługujący w pełni załadowane wózki laboratoryjne.

4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

DANE TECHNICZNE

Model	K-ST122
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	515*410*870 mm
Waga netto	Około 5,05 kg


*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

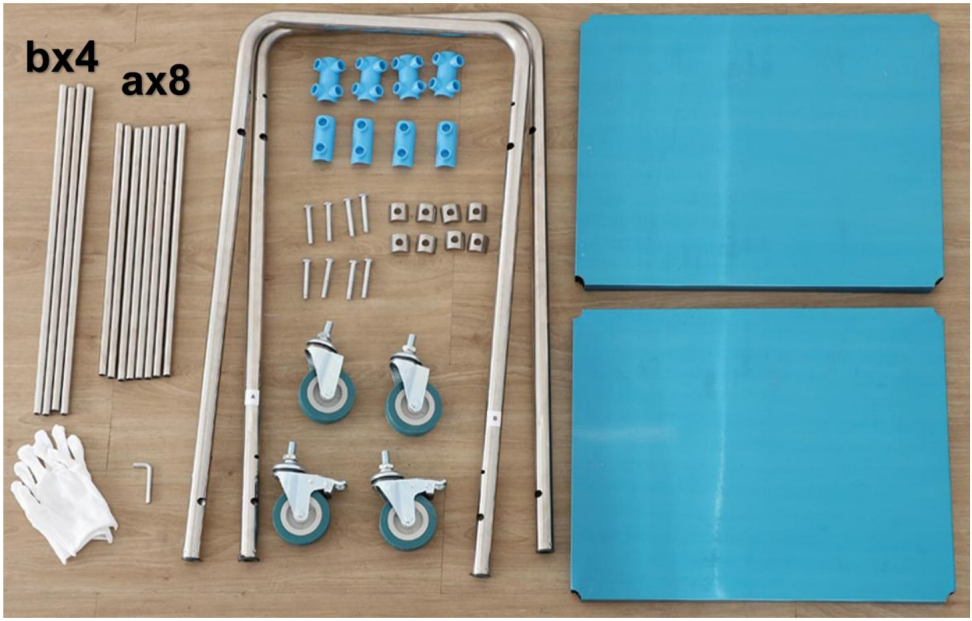


KROKI MONTAŻU

KROK 1

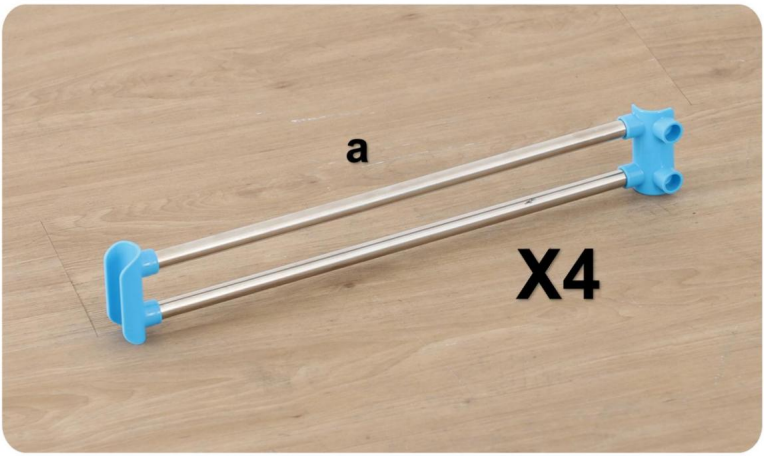

KROK 2

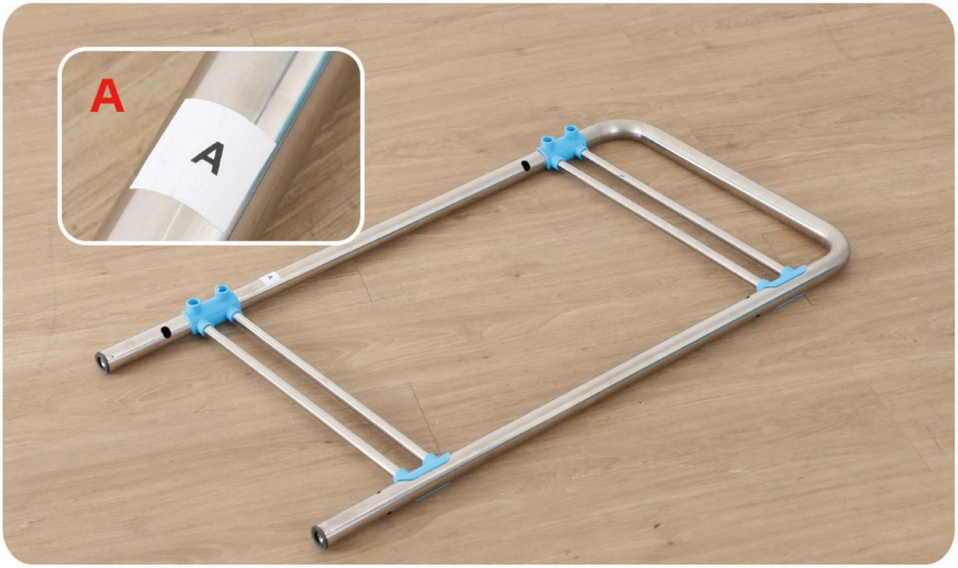
A
A


KROK 3


Don't tighten the screws yet. Tighten them after the entire trolley is installed.


KROK 4



KROK 5

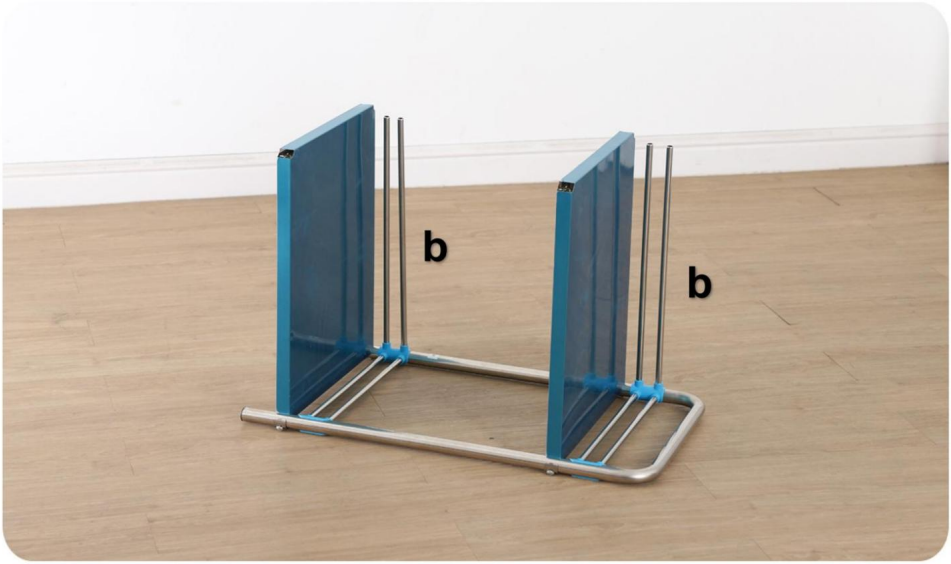

KROK 6

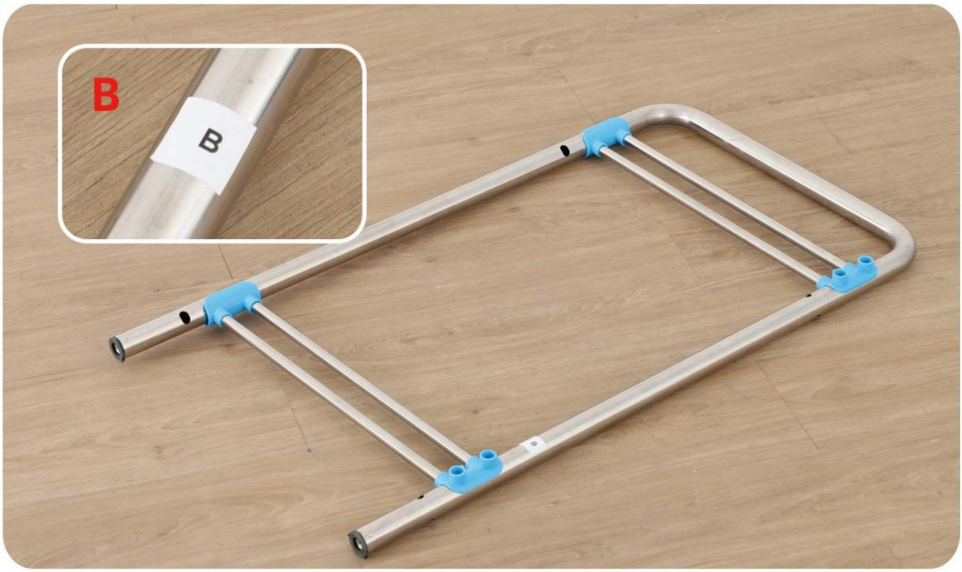

KROK 7



KROK 8



UKOŃCZENIE



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB-WAGENS

MODEL: K-ST122

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB-WAGENS

MODEL: K-ST122



Scan de QR

code om te installeren

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Als u dit toch doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.



Lees en observeer zorgvuldig alle montage-instructies
instructies voordat u met de montage begint.

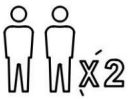

Het geheel dient door twee of meer personen gemonteerd te worden.



Laat uw kind niet op het product klimmen. Als u
hebben kinderen of dieren die graag klimmen, dan raden wij u ten zeerste aan
adviseren om de muurankers en beugels/riemen te gebruiken
die bij het pakket zitten.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan
gevaren creëren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
montage.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
alleen producten.

7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
ter ondersteuning van de Lab Carts.

8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.

2. Overschrijd het toegestane gewicht niet voordat u het verplaatst.

3. Gebruik het alleen op een vlak, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.

ter ondersteuning van volledig geladen laboratoriumkarren.

4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	K-ST122
Productafmetingen (LxBxH)	515*410*870mm
Nettogewicht	Ongeveer 5,05 kg

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn


Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD

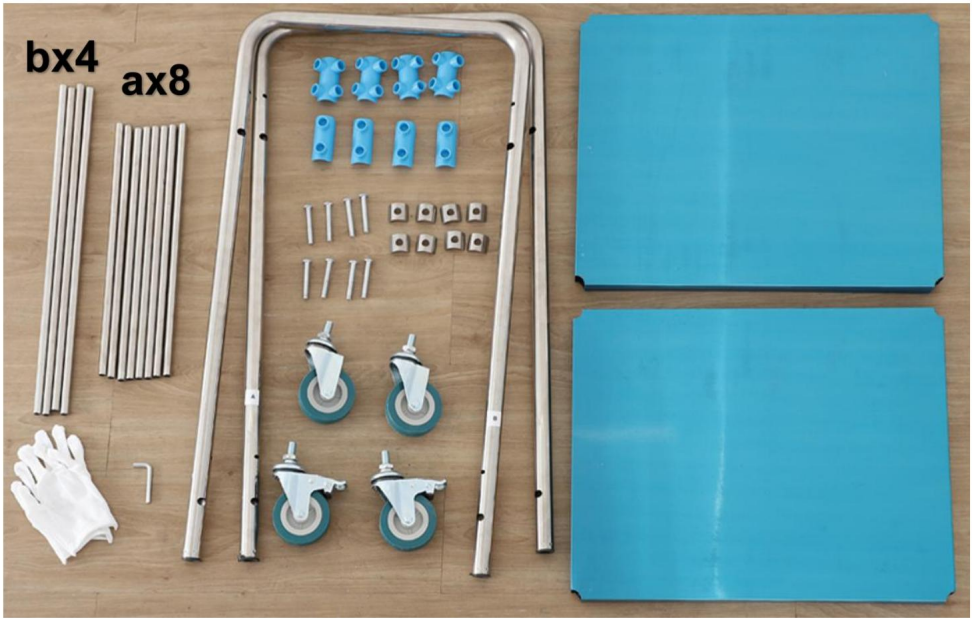


MONTAGESTAPPEN

STAP 1

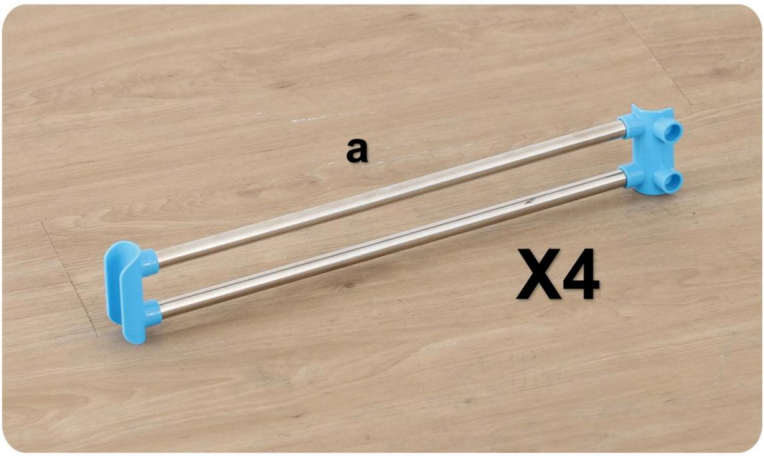

STAP 2

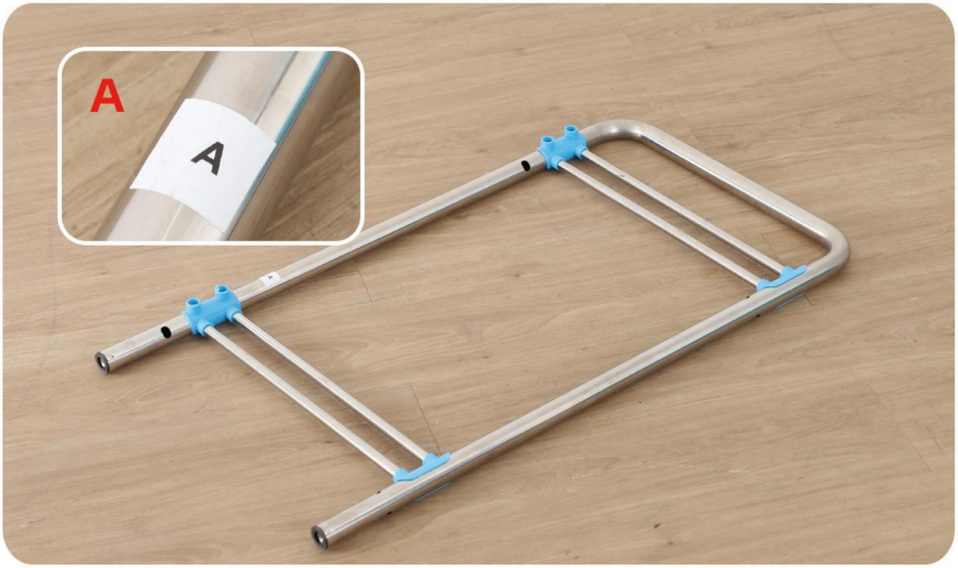
A
A


STAP 3


Don't tighten the screws yet. Tighten them after the entire trolley is installed.


STAP 4



STAP 5

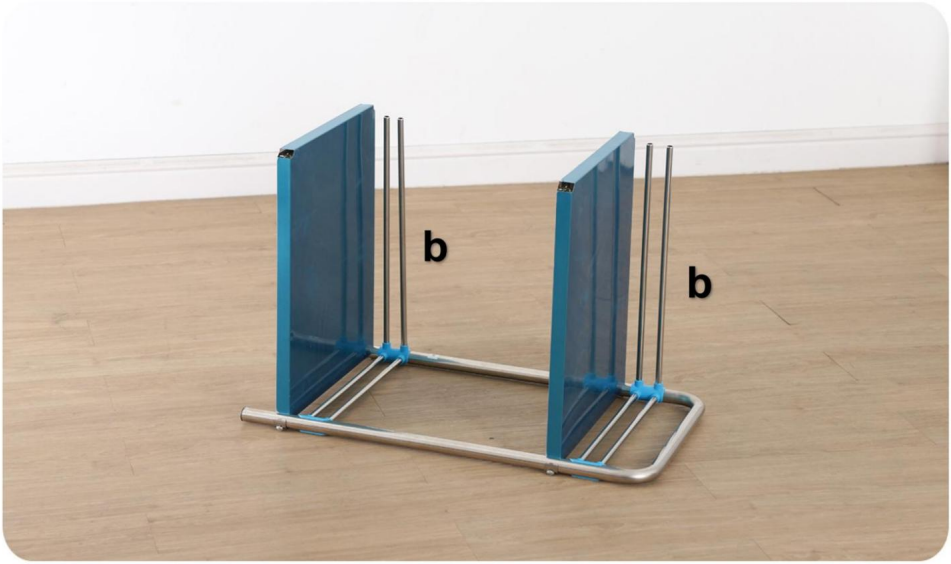

STAP 6

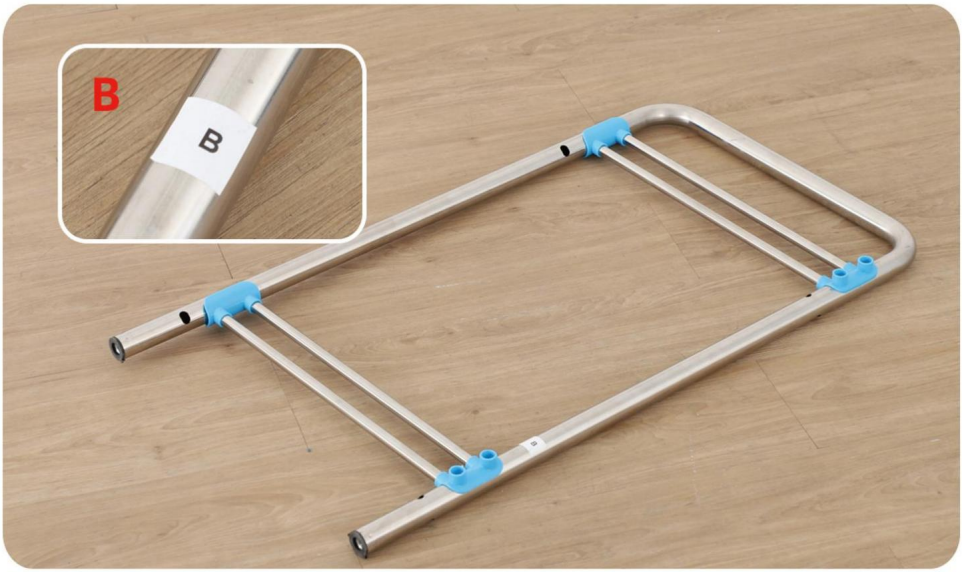

STAP 7



STAP 8



VOLTOOIING



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABVAGNAR

MODELL: K-ST122

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABVAGNAR

MODELL: K-ST122



Skanna QR-koden
kod för att installera


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att det kan leda till allvarliga skador.



Läs och observera noggrant alla monteringsanvisningar instruktionerna innan monteringen påbörjas.

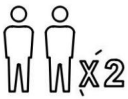

Enheten bör monteras av två eller fler personer.



Låt inte ditt barn klättra på produkten. Om du har barn eller djur som gillar att klättra, vi varmt rekommenderar rekommenderar att man använder väggankare och fästen/remmar som följer med paketet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja labbvagnarna.

8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidorna, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och Separera alla delar på en ren arbetsyta.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
2. Överskrid inte viktkapaciteten före förflyttning.
3. Använd endast på en plan, hård och slät yta som säkert kan användas stödja en fulladdad labbvagn.
4. Använd endast enligt avsikten.


Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	K-ST122
Produktens mått (LxBxH)	515*410*870 mm
Nettovikt	Cirka 5,05 kg


*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL

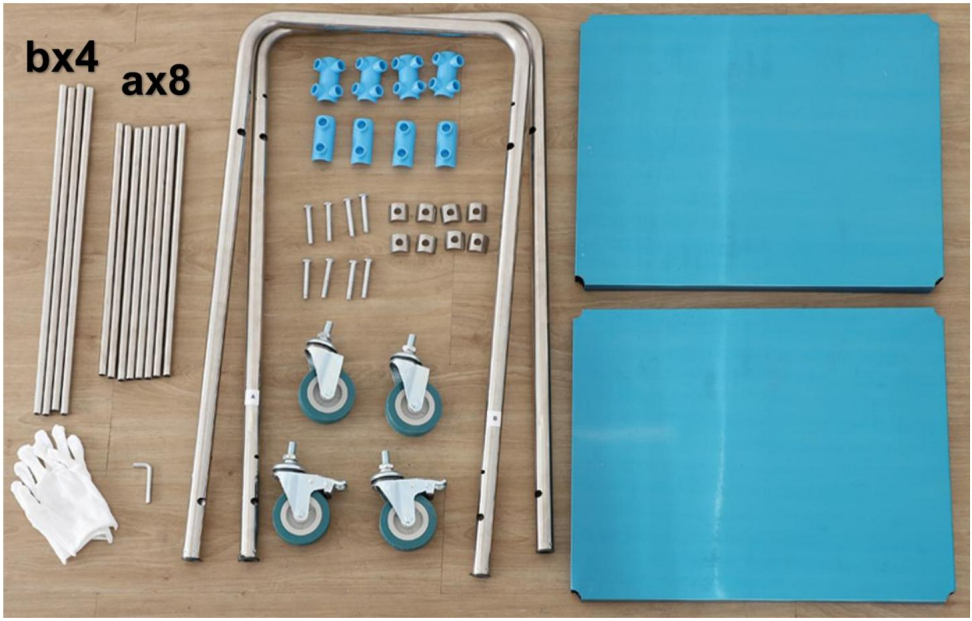


MONTERINGSSTEG

STEG 1

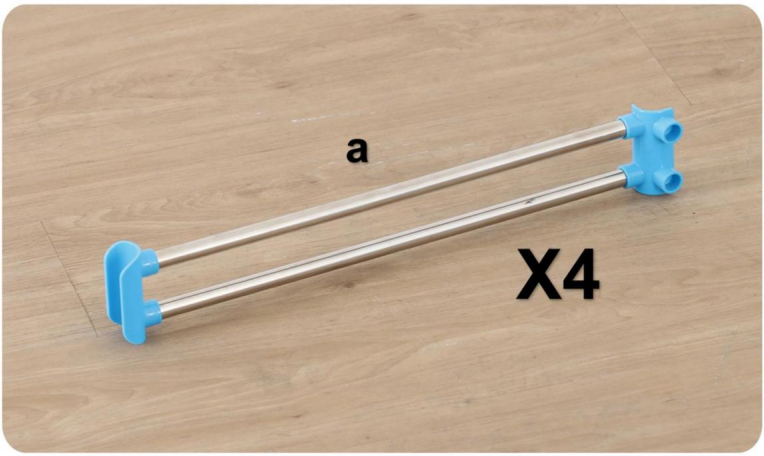

STEG 2

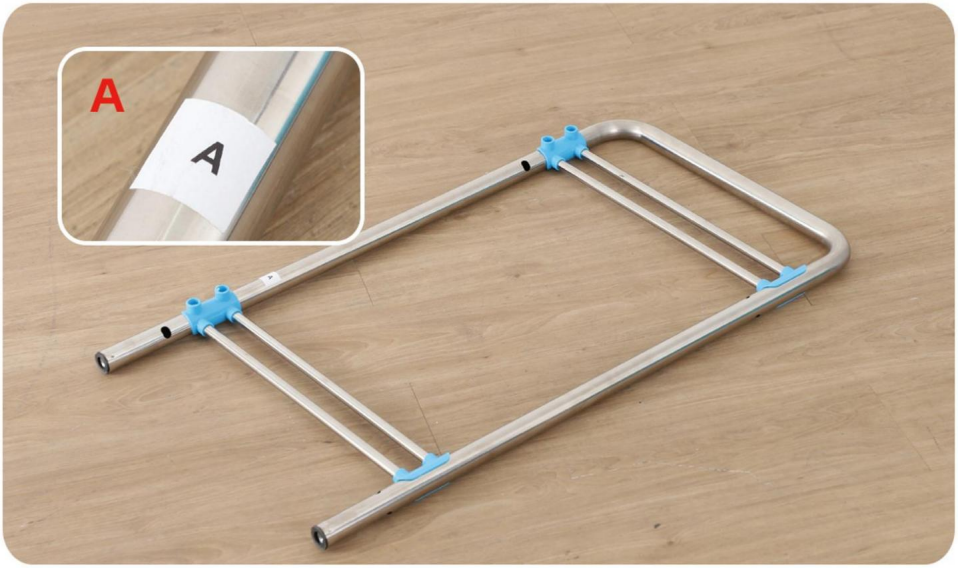
A
A


STEG 3


Don't tighten the screws yet. Tighten them after the entire trolley is installed.


STEG 4



STEG 5

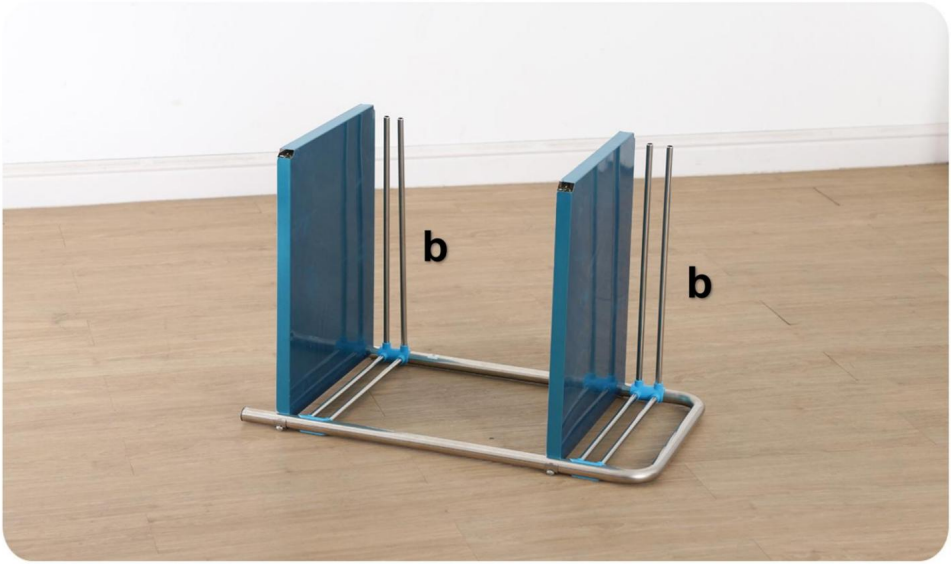

STEG 6

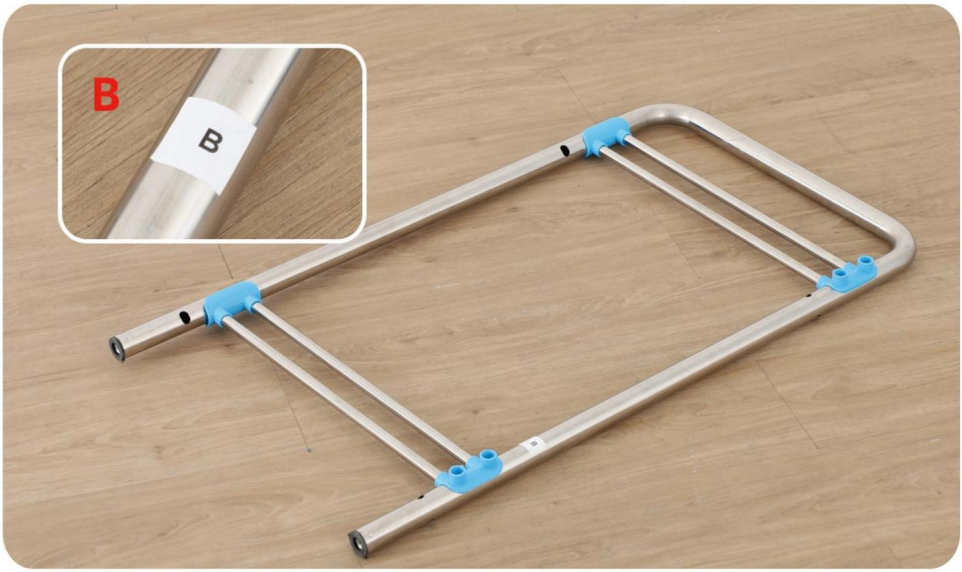

STEG 7



STEG 8



KOMPLETTERING



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

