VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tub Transfer Benches

MODEL: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODEL:SC6045C

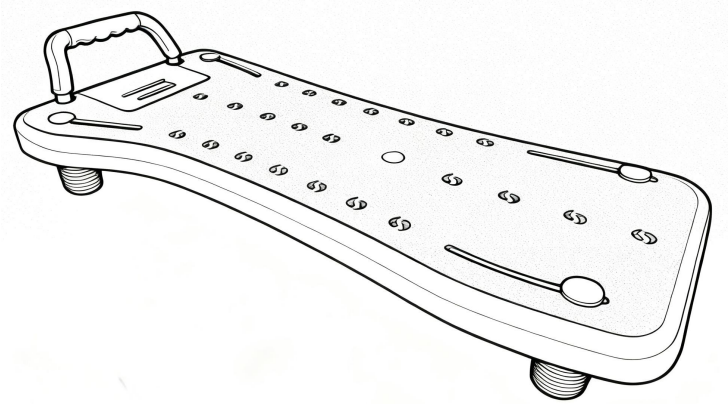

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. The product complies with relevant standards and regulations.Installation of this device must comply with all applicable regulations,and it should only be operated in well-ventilated areas.
8. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Please properly keep product.Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal,please stop using it.
10. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
11. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:



Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the weight limit.
Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product’s legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

IMPORTANT

1. Don’t exceed the maximum weight capacity.
2. Only for use on bathtubs that are stable and have flat surfaces on both sides.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, and rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect them for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

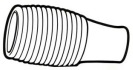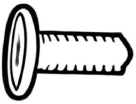NO	NAME	PICTURE	QTY
1	Handrail		1
2	Fixed leg		4
3	Screw A		4
4	Washer		4
5	Screw B		2
6	Manual	/	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	SC6045C
Main Materials	PP
The applicable inner width of the bathtub	41-62cm
Seat Rated Load	150kg/330lbs


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Installation Procedures


As shown in the figure, the various parts of the bath chair are combined. The armrests are fixed in the two installation holes at the end through screw B, and 4 fixed legs are respectively fixed in the four slots of the seat board through screw A.

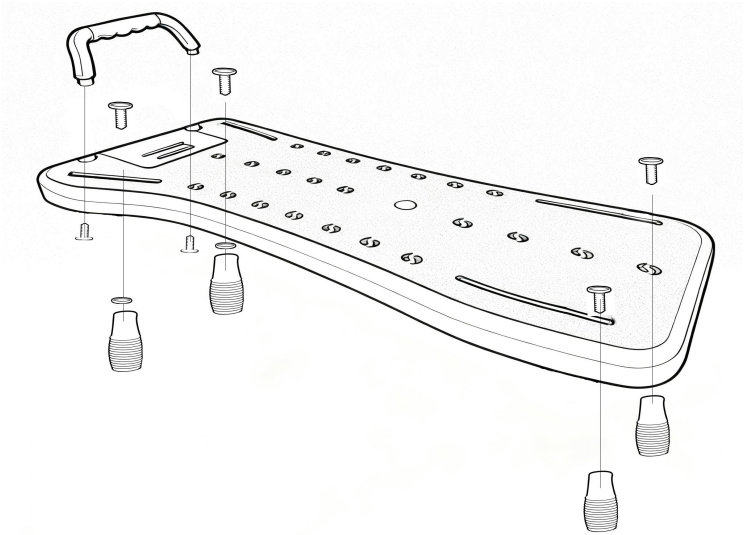


2. Adjustment Procedures

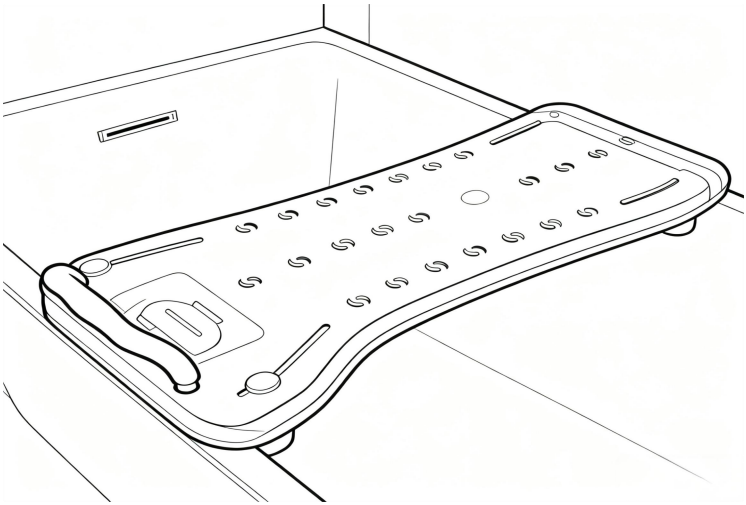

Press the fixed legs tightly against the bathtub wall, and then tighten them to fix the seat plate in the width direction of the bathtub.

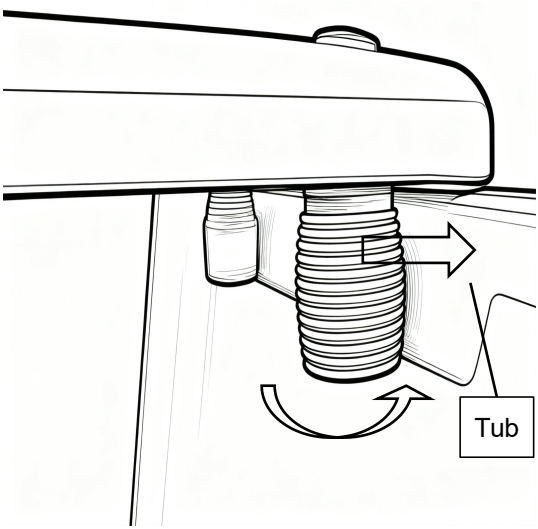

The 4 fixed legs can move left and right to fit the applicable bathtub width range, which is 41-62cm.

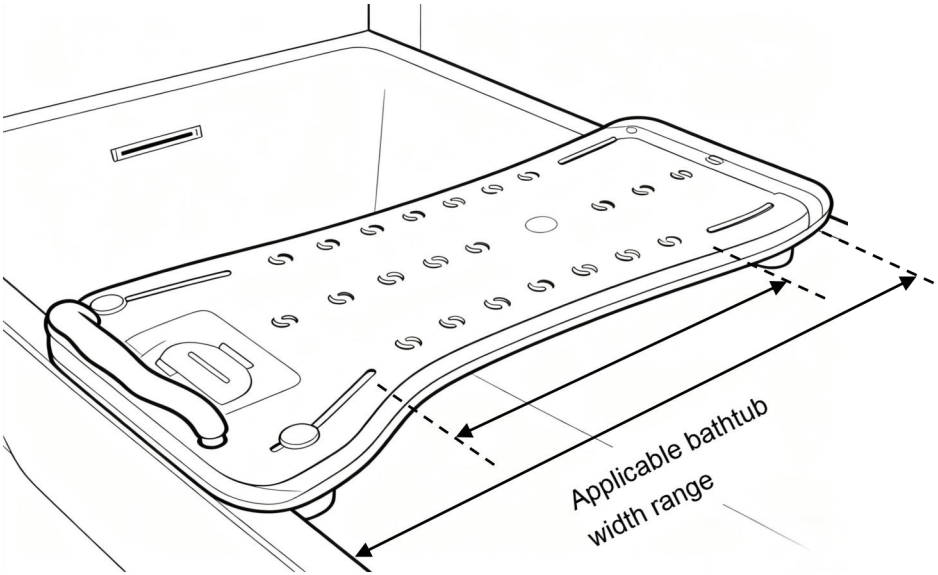

Manufacturer: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO..LTD
Address: 64-65 Building, zhongnan Industry Garden,No.88Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province, P.R.China
amy@suncare-medical.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bancs de transfert pour baignoires

MODÈLE : SC6045C

Tub Transfer Benches

MODÈLE : SC6045C

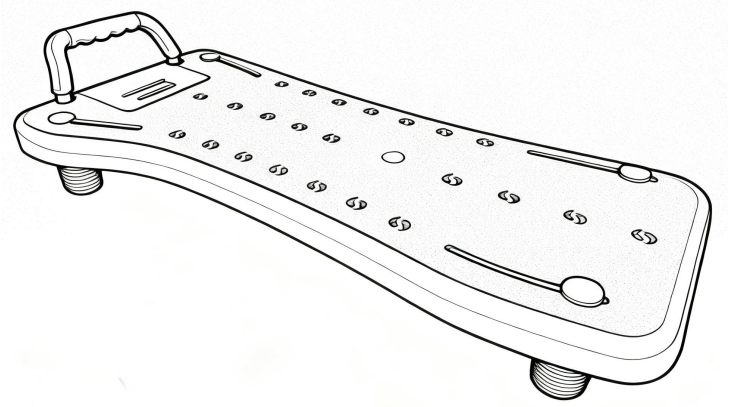

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent ce produit . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

12. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
13. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail

robustes pendant l'assemblage et l' utilisation .
14. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
15. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
16. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
17. Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
18. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et il ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées.
19. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
20. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
21. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
22. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation afin d'éviter tout risque de blessure, d'endommagement du produit ou d'annulation de la garantie. Consultez un professionnel de la santé en cas d'inconfort, de douleur ou d'aggravation des symptômes. Si nécessaire, faites-vous accompagner d'une personne pour assembler et utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids.
Vérifiez régulièrement la solidité de l'assemblage et contactez le service client en

cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien alignés et verrouillés avant utilisation et cessez immédiatement toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur des surfaces planes et stables. Ne le démontez pas sauf si cela est nécessaire, car cela pourrait réduire sa durée de vie. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.



IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale.
2. À utiliser uniquement sur des baignoires stables et présentant des surfaces planes des deux côtés.
3. Inspectez régulièrement pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de pièces détachées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, puis rincez abondamment pour éliminer tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, veuillez vérifier auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne sauraient se substituer à un avis médical.

PART LIST

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que toutes les pièces listées ci-dessous sont présentes et inspectez- les soigneusement afin de déceler tout dommage survenu pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NON	NOM	IMAGE	Qté
1	Rampe		1

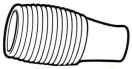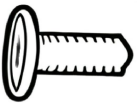2	Jambe fixe		4
3	Vis A		4
4	Rondelle		4
5	Vis B		2
6	Manuel	/	1


PRODUCT PAREMETERS

Modèle	SC6045C
Matériaux principaux	PP
La largeur intérieure applicable de la baignoire	41-62 cm
Siège Charge nominale	150 kg / 330 lbs


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

3. Procédures d'installation


Comme illustré sur la figure, les différentes parties du siège de bain sont assemblées. Les accoudoirs sont fixés aux deux trous de fixation situés à l'extrémité à l'aide de la vis B, et les quatre pieds fixes sont respectivement fixés aux quatre encoches de l'assise à l'aide de la vis A.

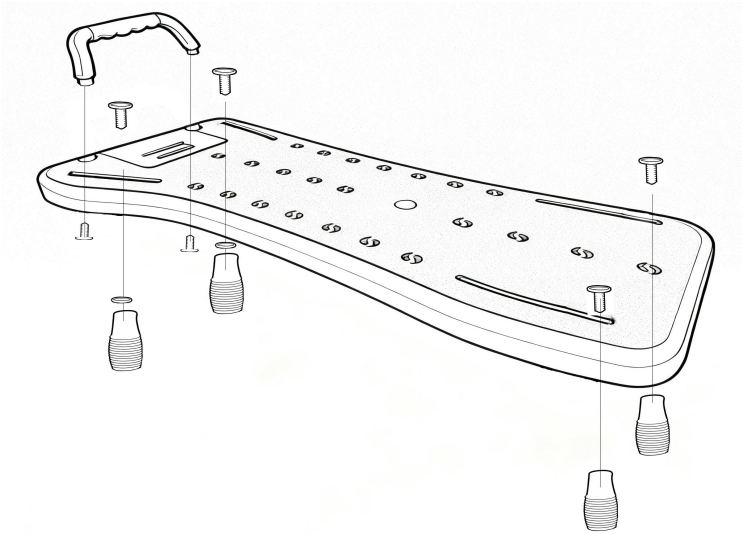


4. Procédures d'ajustement

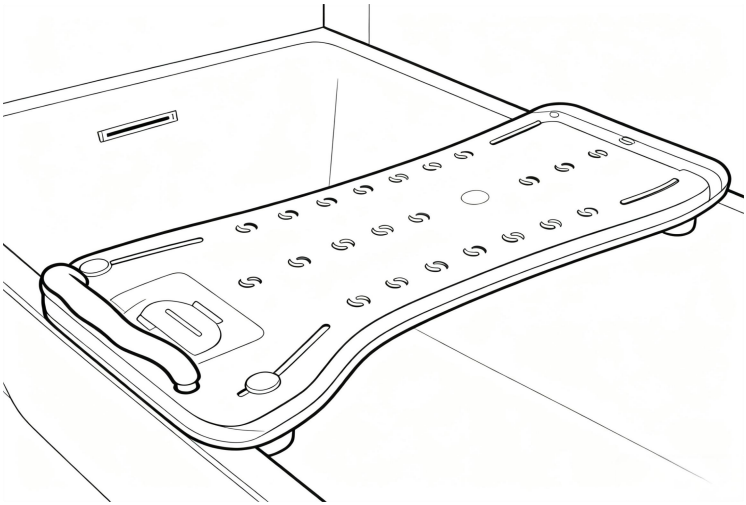

Appuyez fermement les pieds fixes contre la paroi de la baignoire, puis serrez-les pour fixer la plaque de siège dans le sens de la largeur de la baignoire.

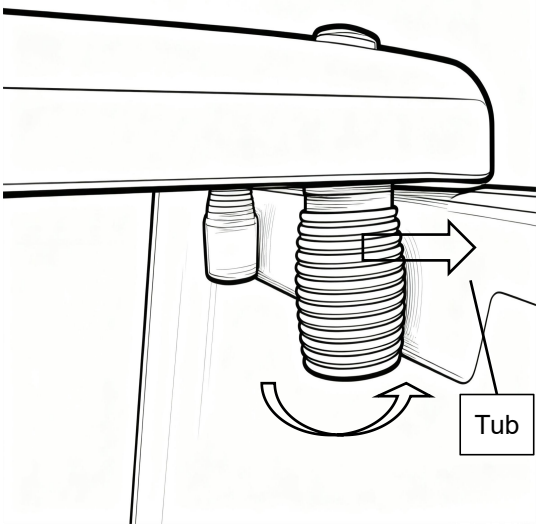

Les 4 pieds fixes peuvent se déplacer de gauche à droite pour s'adapter à la plage de largeur de baignoire applicable, qui est de 41 à 62 cm .

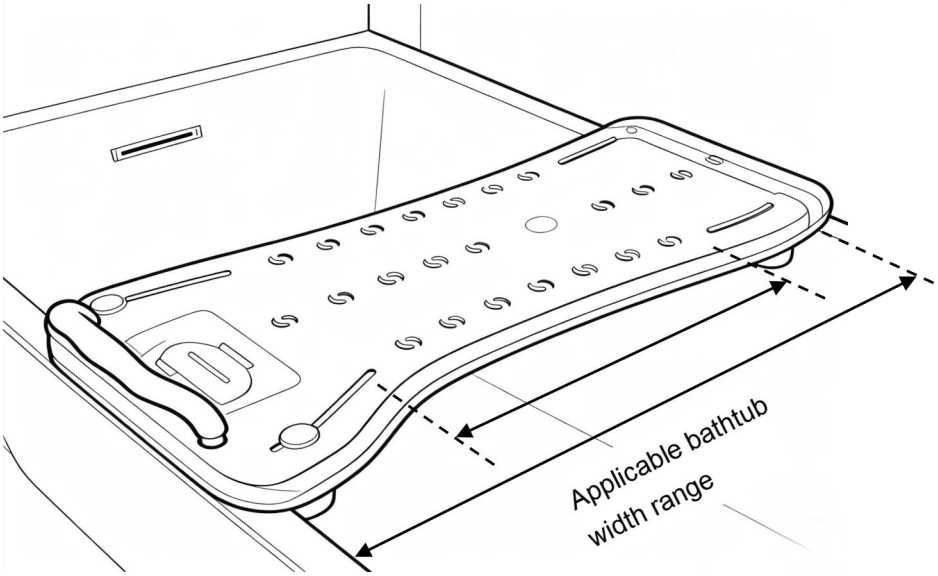

Fabricant : FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO..LTD
Adresse : Bâtiment 64-65, Jardin industriel de Zhongnan, n° 88, route haïtienne, District de Gaoming, Ville de Foshan, Province du Guangdong, Chine

amy@suncare-medical.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Badewannentransferbänke

MODELL: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODELL: SC6045C

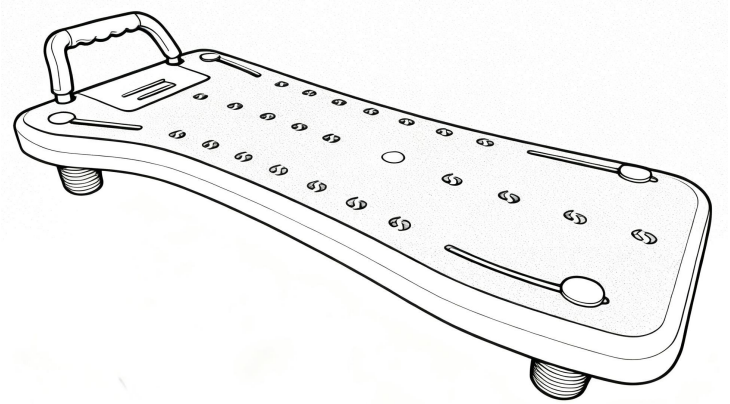

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- ♱♏❒❍♏♓♎♏■ ♦♓♏ ♎♓♏ 👌♏■◆♦⌘◆■♑ des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI VERSAMMLUNGEN

23. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

24. und Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .
25. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
26. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
27. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
28. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
29. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
30. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
31. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
32. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
33. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, um Verletzungen, Produktschäden oder den Verlust der Garantie zu vermeiden. Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlimmerung



der Symptome auftreten. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer Aufsichtsperson helfen, um das Produkt korrekt und sicher zu montieren und zu verwenden. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze.
Überprüfen Sie regelmäßig den sicheren Aufbau und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundendienst. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Standfüße des Produkts gleichmäßig ausgerichtet und eingerastet sind.
Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder fehlenden Teilen erkennbar sind. Das Produkt darf nur auf ebenen, stabilen Oberflächen verwendet werden. Zerlegen Sie das Produkt nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, es sei denn, diese sind in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.

WICHTIG

1. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
2. Nur zur Verwendung auf Badewannen, die stabil sind und auf beiden Seiten ebene Flächen aufweisen.
3. Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder lose Teile.
4. Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und Seifenreste abspülen. Nach der Reinigung gründlich trocknen lassen.
5. Bitte klären Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker ab, ob das Produkt Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Hinweise ersetzen keine ärztliche Beratung.

PART LIST

Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie diese sorgfältig auf Transportschäden. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

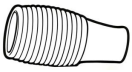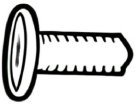NEIN	NAME	BILD	MENGE
1	Geländer		1
2	Festes Bein		4
3	Schraube A		4
4	Waschmaschine		4
5	Schrauben B		2
6	Handbuch	/	1

PRODUCT PAREMETERS


Modell	**SC6045C**
Hauptmaterialien	PP
Die anwendbare Innenbreite der Badewanne	41-62 cm
Sitz Nennlast	150 kg / 330 Pfund

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS


5. Installationsverfahren

Wie in der Abbildung dargestellt, werden die verschiedenen Teile des Badewannenstuhls zusammengefügt. Die Armlehnen werden mittels Schraube B in den beiden Befestigungslöchern am Ende fixiert, und die vier festen Beine


werden jeweils mittels Schraube A in den vier Schlitzen der Sitzfläche befestigt.

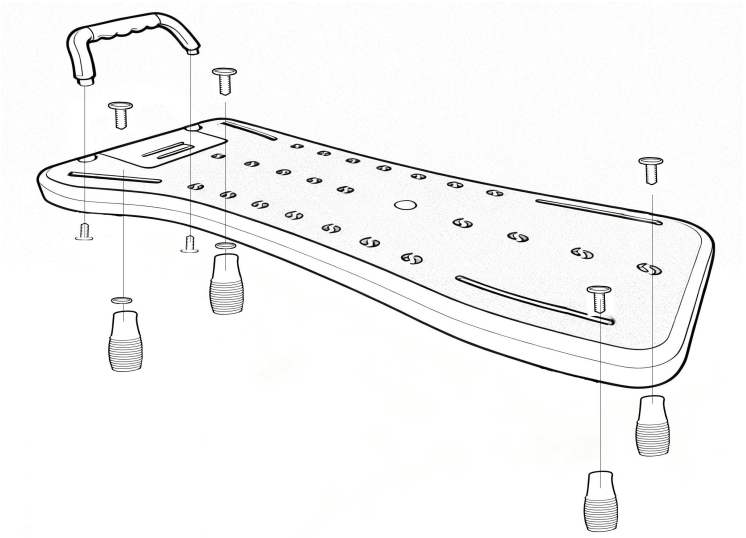


6. Anpassungsverfahren

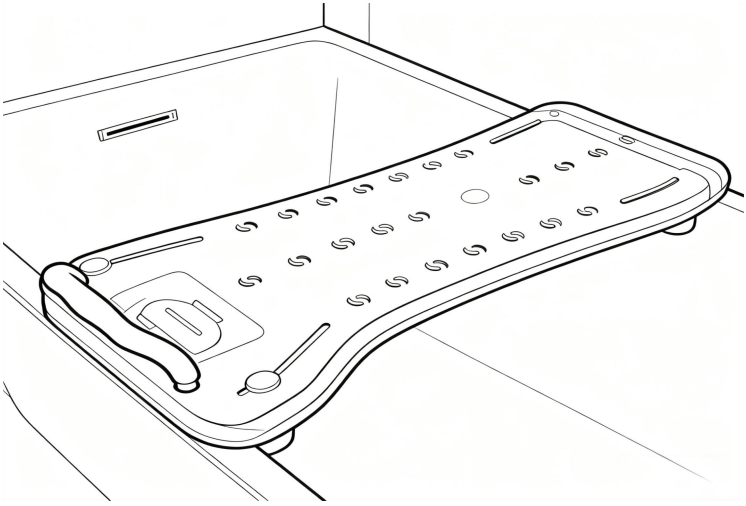

Drücken Sie die festen Füße fest gegen die Badewannenwand und ziehen Sie sie dann fest, um die Sitzplatte in Breitenrichtung der Badewanne zu fixieren.

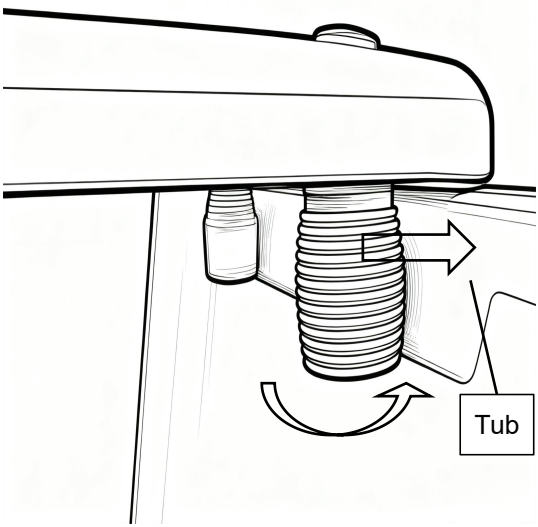

Die 4 festen Beine lassen sich nach links und rechts verschieben, um sich dem entsprechenden Badewannenbreitenbereich von 41-62 cm anzupassen .

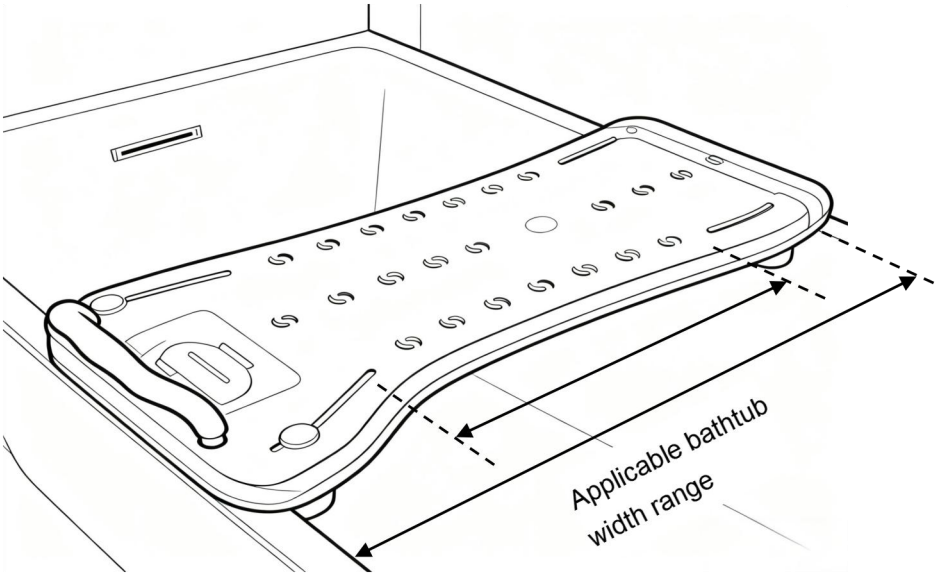

Hersteller: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO..LTD
Adresse: Gebäude 64-65, Zhongnan Industriepark, Nr. 88 Haitian Straße, Bezirk Gaoming, Stadt Foshan, Provinz Guangdong Volksrepublik China

amy@suncare-medical.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Panche per il trasferimento in vasca

MODELLO: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODELLO: SC6045C

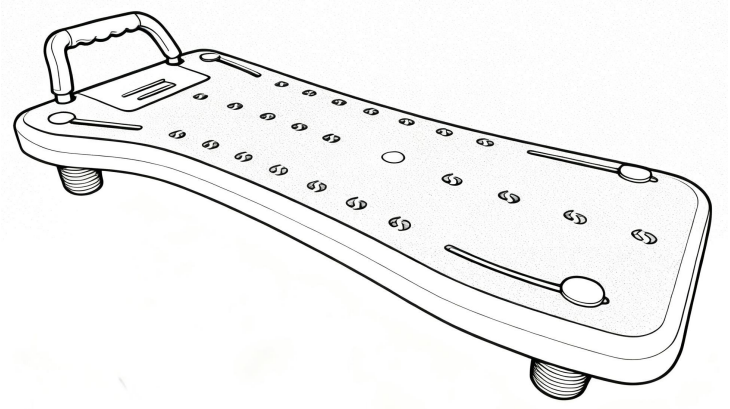

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il prodotto . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

34. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
35. e l' uso, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro

resistenti .
36. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
37. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
38. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
39. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
40. Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate.
41. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
42. Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso contrario, interrompere l'uso.
43. Utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvisando di possibili lesioni derivanti da un uso improprio.
44. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i ricambi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il manuale per evitare danni, lesioni o invalidare la garanzia. Consultare un professionista in caso di disagio, dolore o peggioramento dei sintomi. Se necessario, utilizzare il prodotto sotto supervisione medica per assemblarlo e utilizzarlo correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso.
Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare se non


necessario, poiché ciò potrebbe comprometterne la longevità. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.


IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso massima.
2. Da utilizzare solo su vasche da bagno stabili e con superfici piane su entrambi i lati.
3. Controllare regolarmente che non vi siano segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente con un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere del medico.

PART LIST

Quando si disimballa il prodotto, verificare che i componenti elencati di seguito siano inclusi e ispezionarli attentamente per verificare eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se un componente risulta mancante o danneggiato, non tentare di montare o utilizzare il prodotto.

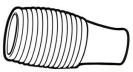NO	NOME	IMMAGINE	QUANTITÀ
1	Corrimano		1
2	Gamba fissa		4
3	Vite A		4

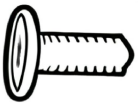4	Rondella		4
5	Vite B		2
6	Manuale	/	1


PRODUCT PAREMETERS

Modello	**SC6045C**
Materiali principali	PP
La larghezza interna applicabile della vasca da bagno	41-62 cm
Posto a sedere Carico nominale	150 kg/ 330 libbre


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

7. Procedure di installazione


Come mostrato in figura, le varie parti della sedia da bagno sono combinate. I braccioli sono fissati nei due fori di installazione all'estremità tramite la vite B, e le 4 gambe fisse sono rispettivamente fissate nelle quattro fessure del sedile tramite la vite A.

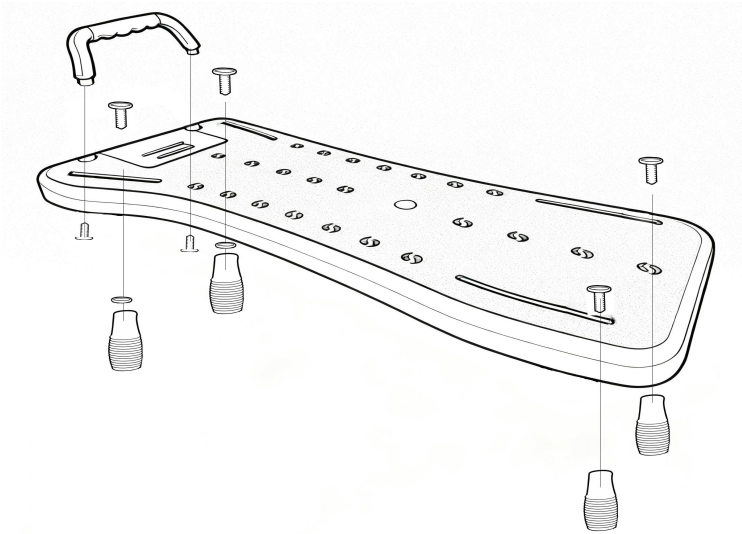


8. Procedure di adeguamento

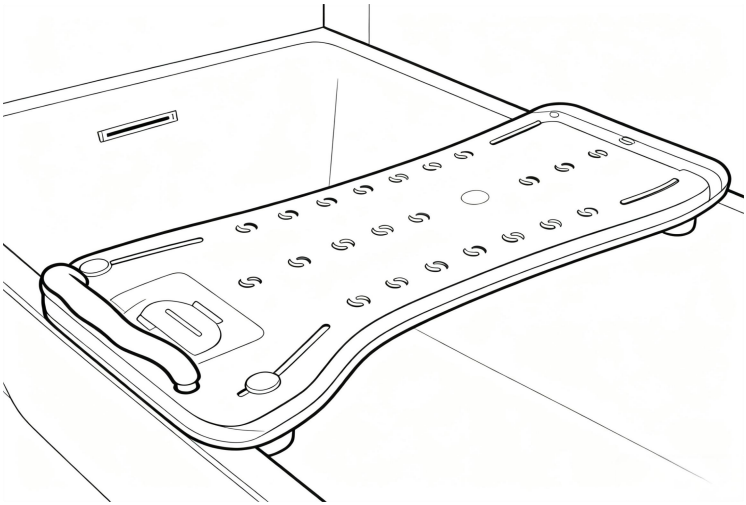

Premere saldamente le gambe fisse contro la parete della vasca da bagno, quindi serrarle per fissare la piastra del sedile nella direzione della larghezza della vasca.

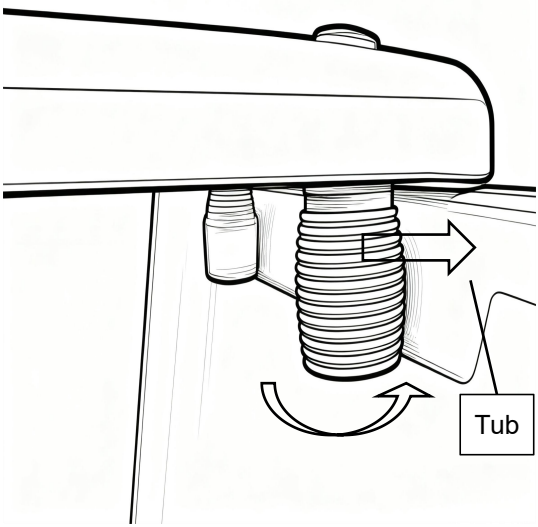

Le 4 gambe fisse possono muoversi a sinistra e a destra per adattarsi alla larghezza della vasca da bagno applicabile, che è di 41-62 cm .

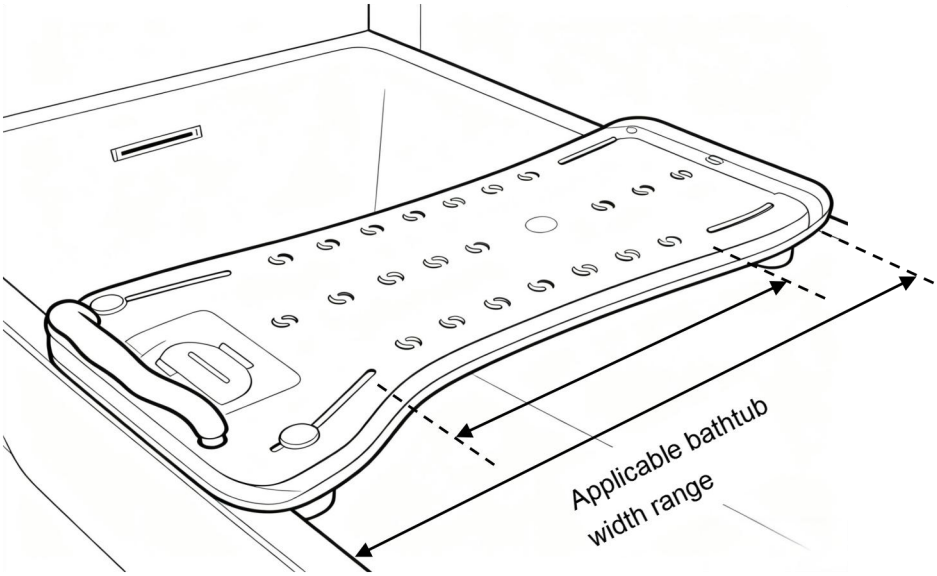

Produttore: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO..LTD
Indirizzo: Edificio 64-65, Giardino industriale di Zhongnan, n. 88 Haitian Road, Distretto di Gaoming, Città di Foshan, Provincia del Guangdong, Repubblica

Popolare Cinese
amy@suncare-medical.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bancos de transferencia de bañera

MODELO: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODELO: SC6045C

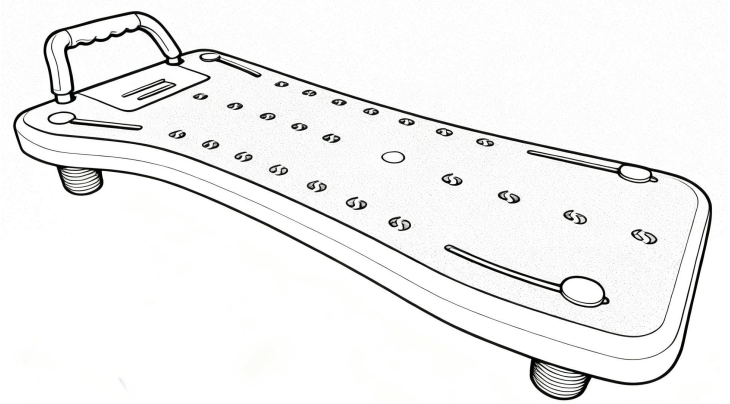

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o realizar cualquier mantenimiento a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen este producto . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

PRECAUCIONES DE MONTAJE

45. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
46. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes

durante el montaje y el uso .
47. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
48. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
49. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
50. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.
51. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.
52. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
53. Conserve el producto correctamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
54. Utilice el producto según el uso previsto y advierta de posibles lesiones por mal uso.
55. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

Lea el manual completo para evitar daños al producto o la anulación de la garantía. Busque ayuda profesional si experimenta molestias, dolor o empeoramiento de los síntomas. Si es necesario, utilice la supervisión de un profesional para ensamblar y usar este producto de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso.
Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y, en caso de duda, contacte con el servicio de asistencia. Asegúrese de que las patas del producto

estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. El producto debe utilizarse sobre superficies planas y estables. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.



IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad máxima de peso.
2. Solo para uso en bañeras que sean estables y tengan superficies planas en ambos lados.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia, y enjuague cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, seque bien.
5. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto satisface sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

PART LIST

Al desembalar este producto, compruebe que las piezas que se indican a continuación estén incluidas e inspecciónelas cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NO	NOMBRE	IMAGEN	CANTIDAD
1	Pretil		1

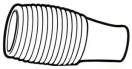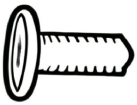2	Pierna fija		4
3	Tornillo A		4
4	Arandela		4
5	Tornillo B		2
6	Manual	/	1


PRODUCT PAREMETERS

Modelo	**SC6045C**
Materiales principales	PÁGINAS
El ancho interior aplicable de la bañera.	41-62 cm
Asiento Carga nominal	150 kg/ 330 libras


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

9. Procedimientos de instalación


Como se muestra en la figura, las distintas partes de la silla de baño están combinadas. Los reposabrazos se fijan en los dos orificios de instalación del extremo mediante el tornillo B, y las cuatro patas fijas se fijan respectivamente en las cuatro ranuras del asiento mediante el tornillo A.

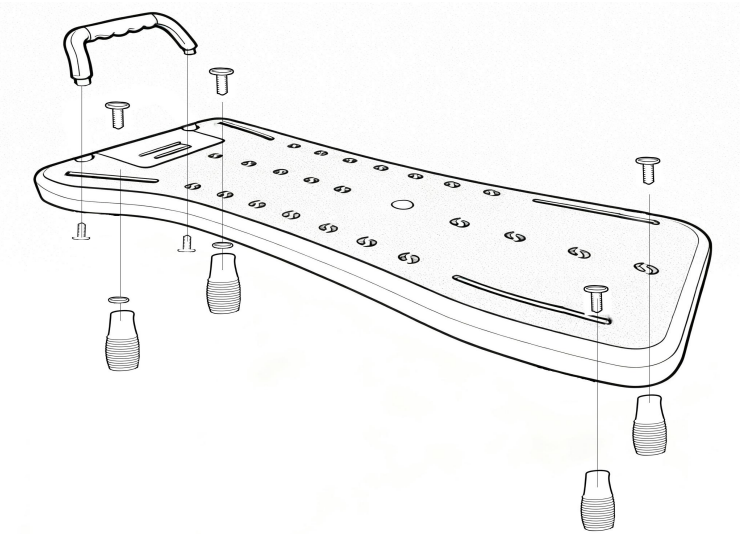


10. Procedimientos de ajuste

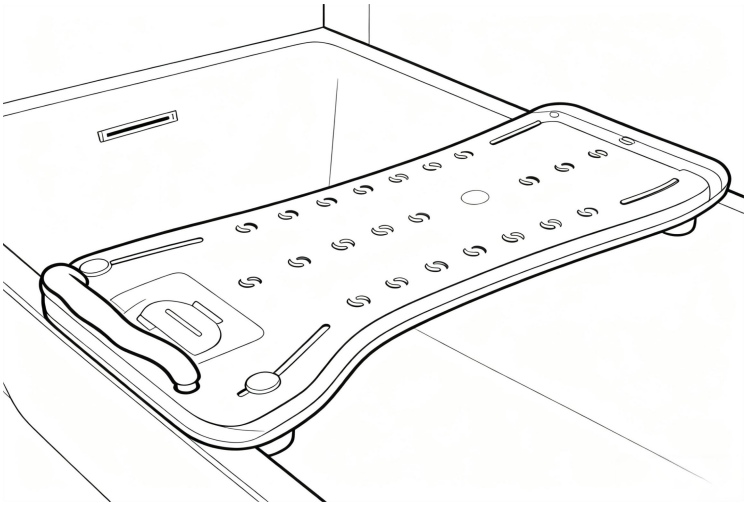

Presione las patas fijas firmemente contra la pared de la bañera y luego apriételas para fijar la placa del asiento en la dirección del ancho de la bañera.

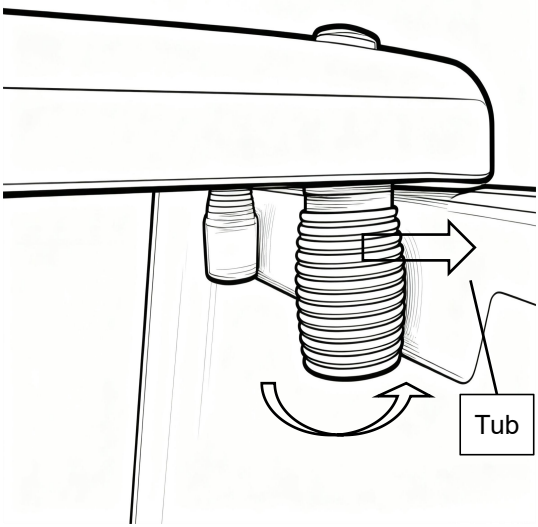

Las 4 patas fijas se pueden mover hacia la izquierda y la derecha para adaptarse al rango de ancho de la bañera aplicable, que es de 41 a 62 cm .

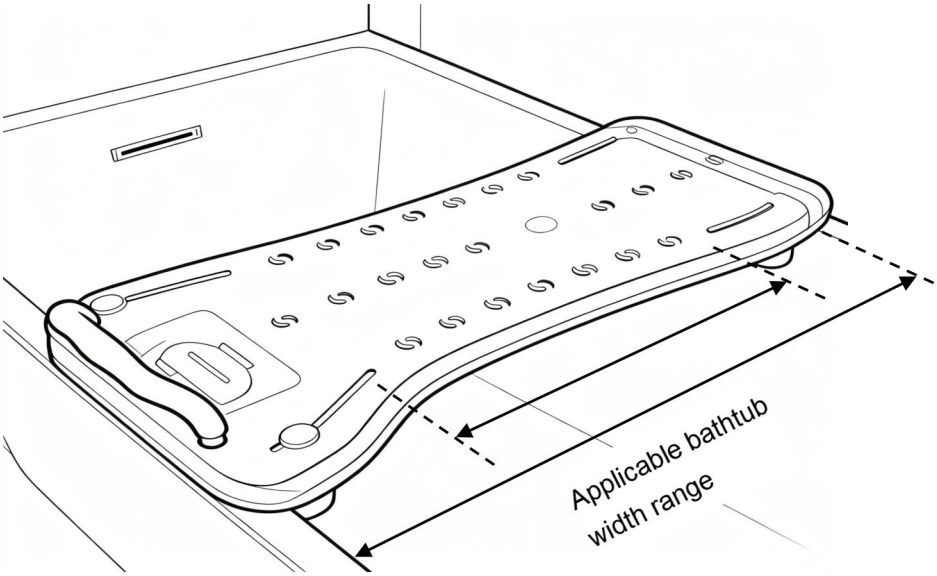

Fabricante: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD
Dirección: Edificio 64-65, Jardín Industrial Zhongnan, No. 88 Carretera Haitiana, distrito de gaoming, Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, República

Popular China
amy@suncare-medical.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ławki transferowe do wanny

MODEL: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODEL: SC6045C

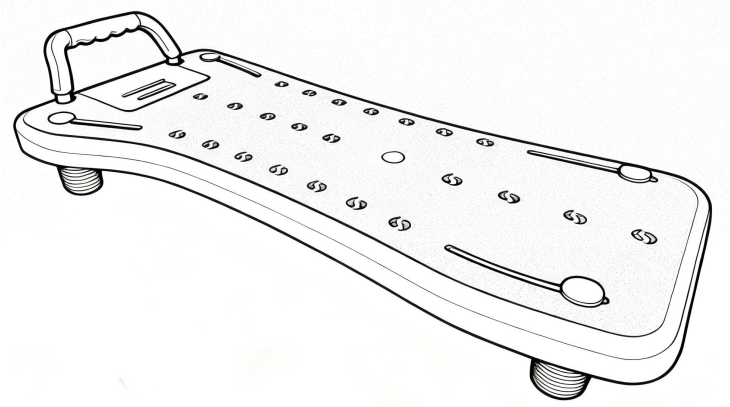

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania produktu przez dzieci . Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

56. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

57. i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
58. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
59. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
60. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
61. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
62. Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
63. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
64. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
65. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
66. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj instrukcję obsługi w całości, aby uniknąć obrażeń, uszkodzenia produktu lub utraty gwarancji. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub nasilenia objawów, zasięgnij porady specjalisty. W razie potrzeby zapewnij nadzór, aby umożliwić prawidłowy i bezpieczny montaż i użytkowanie produktu. Nie przekraczaj limitu wagowego.

Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Produkt jest przeznaczony do użytku na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.



WAŻNY

1. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciężaru.
2. Do stosowania wyłącznie w wannach stabilnych, posiadających płaskie powierzchnie po obu stronach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub luźnych części.
4. Regularnie czyść łagodnym detergentem i ciepłą wodą, a następnie spłucz pozostałości mydła. Po umyciu dokładnie osusz.
5. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy produkt spełnia Państwa indywidualne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.

PART LIST

Podczas rozpakowywania produktu należy upewnić się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części, i dokładnie je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu ani użytkowania produktu.

NIE	NAZWA	ZDJĘCIE	ILOŚĆ

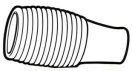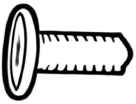1	Poręcz		1
2	Stała noga		4
3	Śruba A		4
4	Pralka		4
5	Śruba B		2
6	Podręcznik	/	1

PRODUCT PAREMETERS

Model	SC6045C
Główne materiały	PP
Obowiązująca szerokość wewnętrzna wanny	41-62 cm
Siedziba Obciążenie znamionowe	150 kg/ 330 funtów


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

11. Procedury instalacji


Jak pokazano na rysunku, poszczególne części krzesła kąpielowego są połączone.

Podłokietniki są mocowane w dwóch otworach montażowych na końcu za pomocą


śruby B, a 4 stałe nogi są mocowane w czterech otworach deski siedziska za pomocą śruby A.

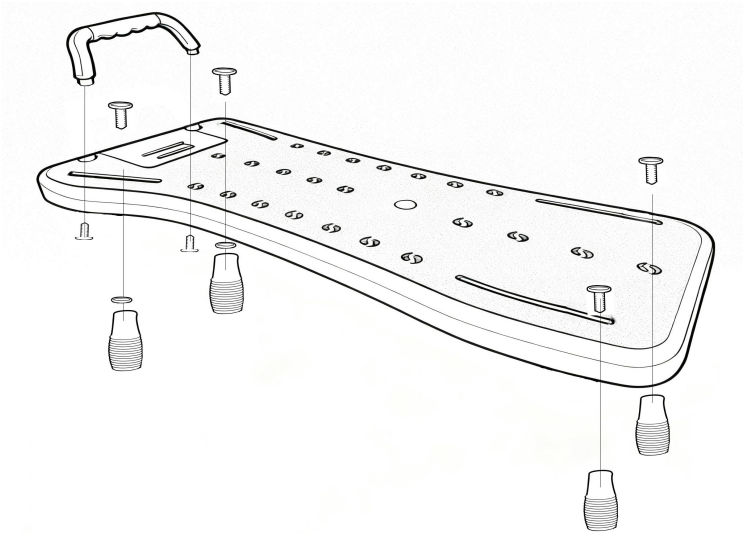


12. Procedury regulacyjne

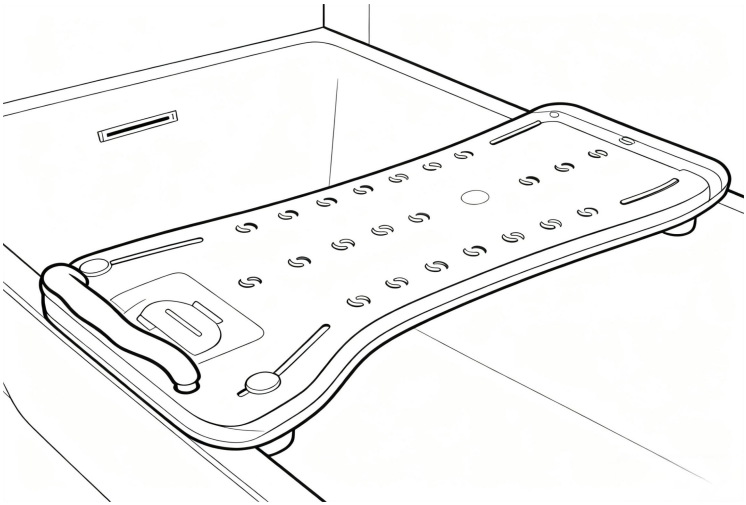

Dociśnij mocno nogi do ściany wanny, a następnie dokręć je, aby zamocować płytę siedziska wzdłuż szerokości wanny.

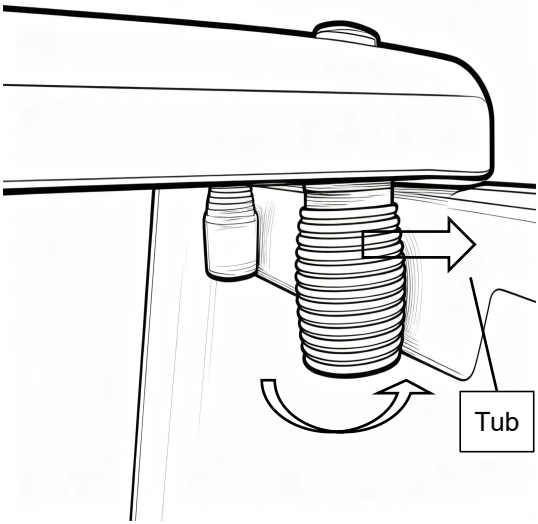

Cztery stałe nogi można przesuwać w lewo i w prawo, dopasowując je do szerokości wanny wynoszącej 41–62 cm .

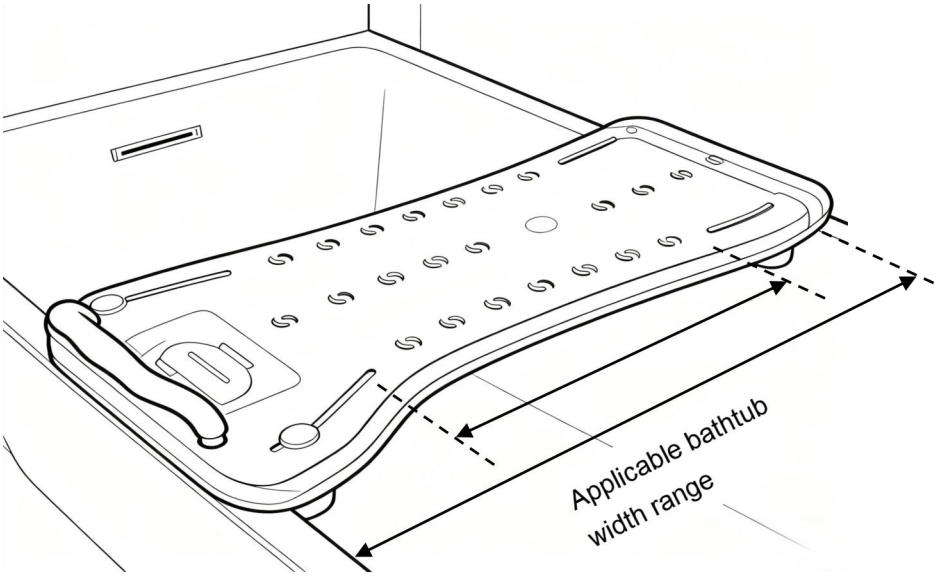

Producent: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO..LTD
Adres: Budynek 64-65, Ogród Przemysłowy Zhongnan, nr 88 Haitian Road, dzielnica Gaoming, Miasto Foshan, Prowincja Guangdong, PRChiny

amy@suncare-medical.com

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Badoverplaatsingsbanken

MODEL: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODEL: SC6045C

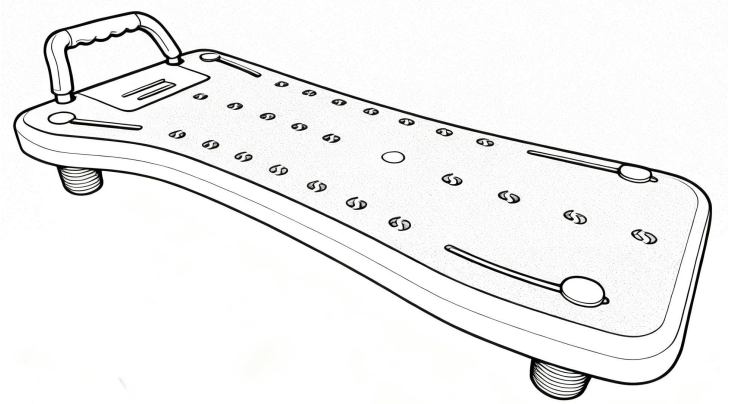

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

● ✞□□❒&□❍ ♎♋♦ &♓■♎♏❒♏■ dit product gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

67. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

68. en het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige

werkhandschoenen .
69. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
70. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
71. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
72. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.
73. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
74. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
75. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
76. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
77. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om letsel, productschade of het vervallen van de garantie te voorkomen. Raadpleeg een arts als u ongemak, pijn of verergering van uw symptomen ervaart. Schakel indien nodig een toezichthouder in om dit product correct en veilig te monteren en te gebruiken. Overschrijd de maximale belasting niet.
Controleer regelmatig of de montage goed is en neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Zorg ervoor dat de poten van het product recht staan en vergrendeld zijn voordat u het gebruikt, en stop het gebruik als er tekenen van


slijtage, beschadiging of ontbrekende onderdelen zijn. Het product dient op een vlakke, stabiele ondergrond te worden gebruikt. Demonteer het product niet als dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product kan verkorten. Wijzig het product niet, tenzij dit in de handleiding staat vermeld.


BELANGRIJK

1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet.
2. Uitsluitend te gebruiken op badkuipen die stabiel zijn en aan beide zijden een vlak oppervlak hebben.
3. Controleer regelmatig op slijtage, beschadigingen of losse onderdelen.
4. Reinig regelmatig met een mild reinigingsmiddel en warm water en spoel eventuele zeepresten af. Droog na het reinigen grondig af.
5. Controleer vóór gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer ze zorgvuldig op eventuele transportschade. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, probeer het product dan niet te monteren of te gebruiken.

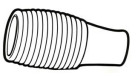NEE	NAAM	AFBEELDING	AANTAL
1	Leuning		1
2	Vaste poot		4

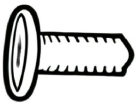3	Rot op A		4
4	Wasmachine		4
5	Schroef B		2
6	Handmatig	/	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	SC6045C
Belangrijkste materialen	PP
De toepasselijke binnenbreedte van het bad	41-62 cm
Stoel Nominale belasting	150 kg / 330 lbs


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

13. Installatieprocedures


Zoals in de afbeelding te zien is, zijn de verschillende onderdelen van de badstoel met elkaar verbonden. De armleuningen worden met schroef B in de twee bevestigingsgaten aan het uiteinde vastgezet, en de vier vaste poten worden met schroef A in de vier sleuven van de zitting bevestigd.

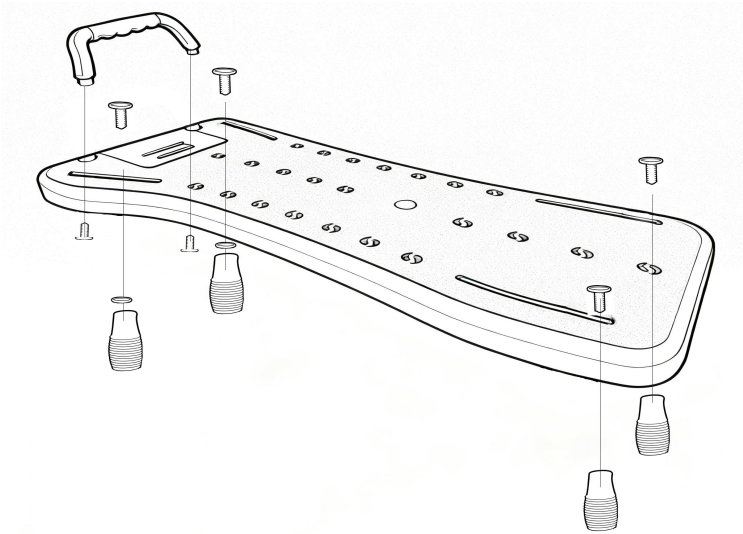


14. Aanpassingsprocedures

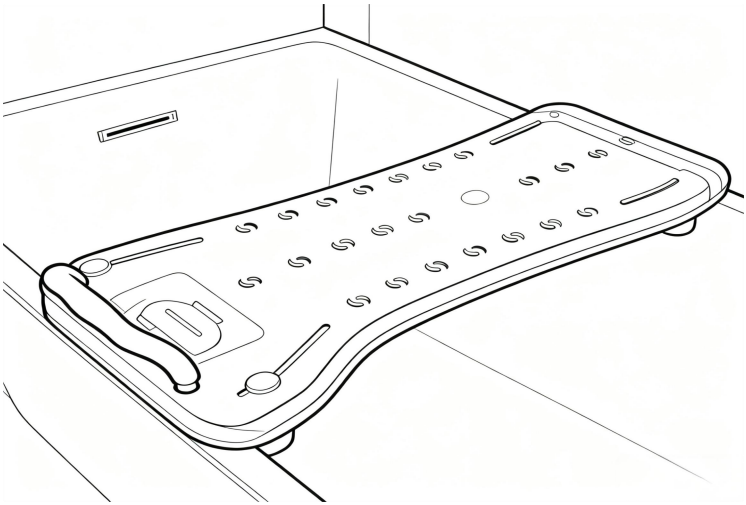

Druk de bevestigingspoten stevig tegen de badwand en draai ze vervolgens vast om de zitplaat in de breedterichting van het bad te bevestigen.

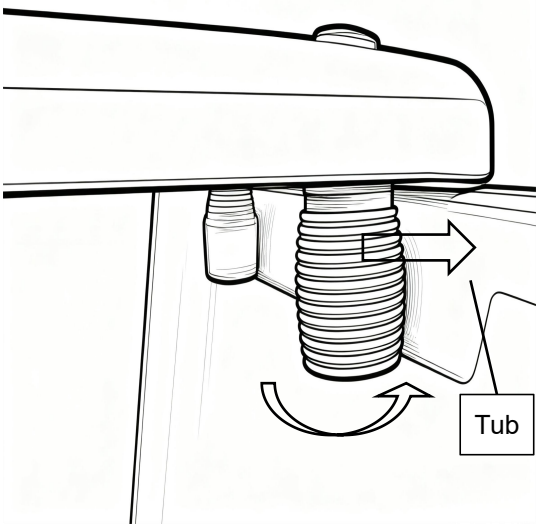

De 4 vaste poten kunnen naar links en rechts worden bewogen om zich aan te passen aan de breedte van het bad, die varieert van 41 tot 62 cm .

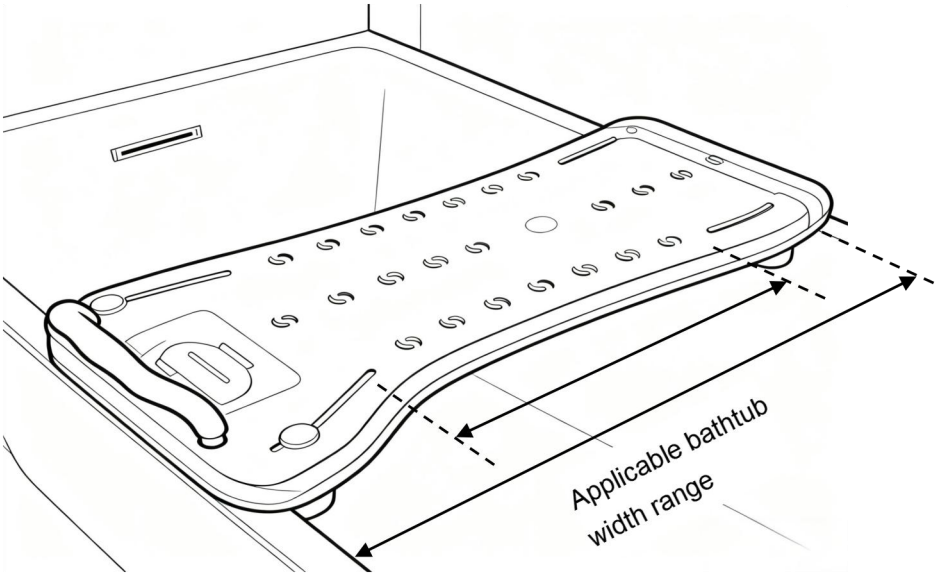

Fabrikant: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD
Adres: Gebouw 64-65, Zhongnan Industrieterrein, Haitian Road nr. 88, Gaoming-district, Foshan Stad, Provincie Guangdong, Volksrepubliek China

amy@suncare-medical.com

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Förflyttningsbänkar för badkar

MODELL: SC6045C

Tub Transfer Benches

MODELL: SC6045C

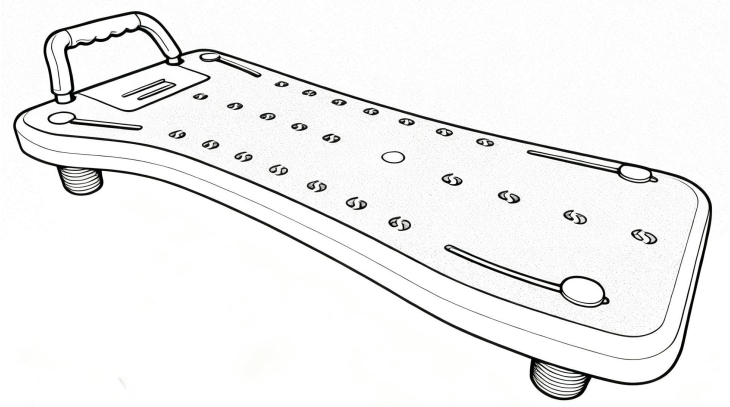

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder produkten . Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

78. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
79. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under

montering och användning .
80. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
81. Håll åskådare borta från området under monteringen.
82. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
83. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
84. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
85. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
86. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
87. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
88. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING:


Läs hela manualen för att undvika skada, produktskador eller att garantin inte gäller. Sök professionell hjälp om du upplever obehag, smärta eller förvärrade symtom. Om det behövs, använd övervakning för att montera och använda produkten korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen.
Kontrollera regelbundet att produkten är säkert monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.


VIKTIG

1. Överskrid inte den maximala viktkapaciteten.
2. Endast för användning på badkar som är stabila och har plana ytor på båda sidor.
3. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten och skölj bort eventuella tvålrester. Torka noggrant efter rengöring.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

PART LIST

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med och inspektera dem noggrant för att se om det finns några skador som kan ha uppstått under transporten. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte att montera eller använda produkten.

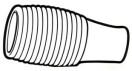INGA	NAMN	BILD	ANTAL
1	Ledstång		1
2	Fast ben		4
3	Skruv A		4
4	Tvättmaskin		4

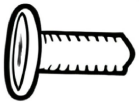5	Skruva B		2
6	Manuell	/	1


PRODUCT PAREMETERS

Modell	**SC6045C**
Huvudmaterial	PP
Badkarets tillämpliga innerbredd	41–62 cm
Plats Nominell belastning	150 kg / 330 lbs


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

15. Installationsprocedurer


Som visas i figuren är de olika delarna av badstolen kombinerade. Armstöden är fästa i de två installationshålen i änden med skruv B, och fyra fasta ben är fästa i de fyra spåren på sitsbrädan med skruv A.

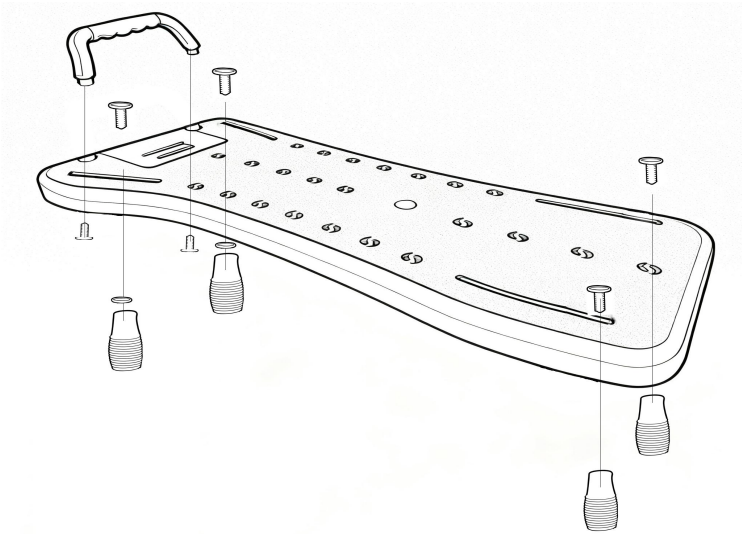


16. Justeringsprocedurer

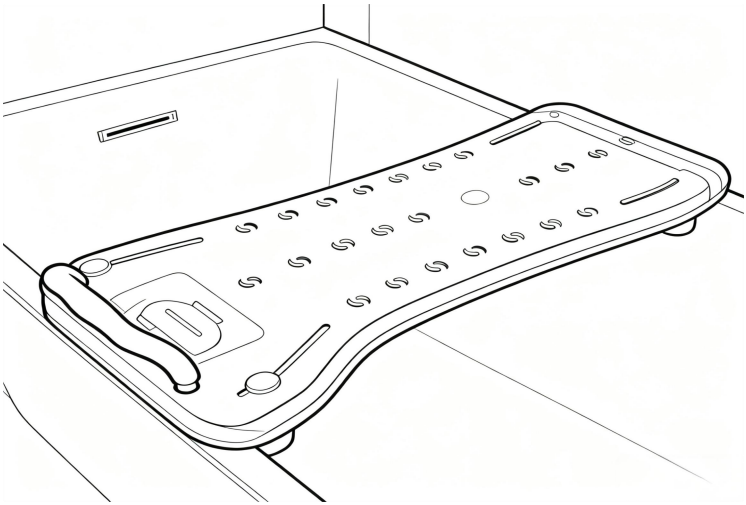

Tryck de fasta benen tätt mot badkarsväggen och dra sedan åt dem för att fixera sitsplattan i badkarets breddriktning.

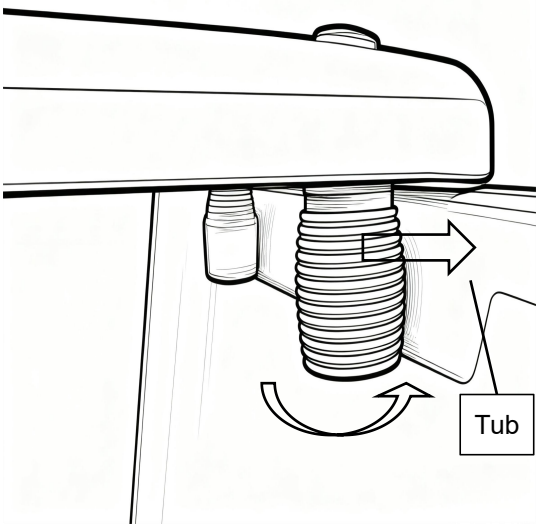

De fyra fasta benen kan röras åt vänster och höger för att passa badkarets breddintervall, vilket är 41–62 cm .

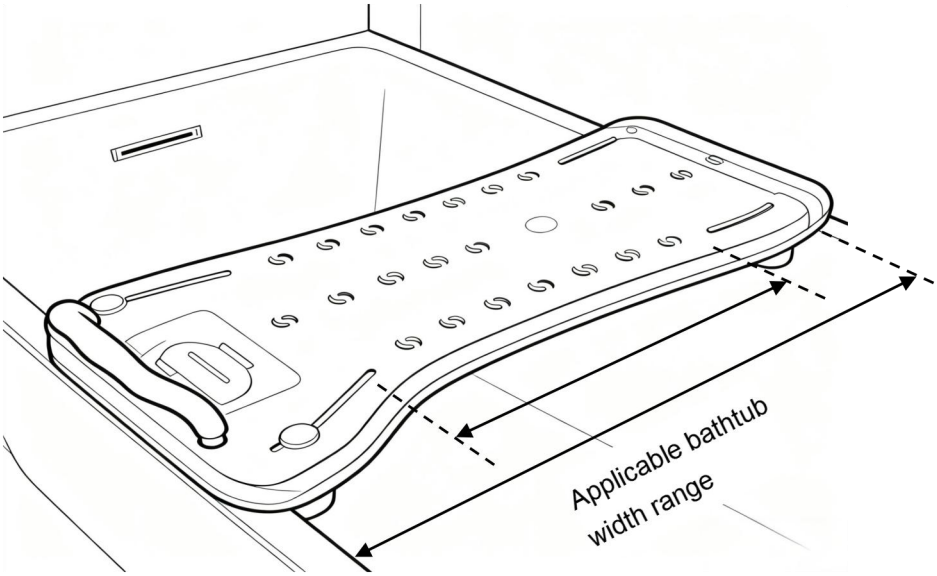

Tillverkare: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD
Adress: Byggnad 64-65, Zhongnan industriträdgård, Haitianvägen 88, Gaoming District, Foshan stad, Guangdong-provinsen, PRChina

amy@suncare-medical.com

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: support@indepsale.ie Tel:+353874373999

UK REP

VEVOR SMART LIMITED
2 Goldstone Close,Brighton and Hove, Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: supports@vevor.co.uk Tel:+447795204660

