VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS


USER MANUAL

MODEL:YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL:YHEO-8

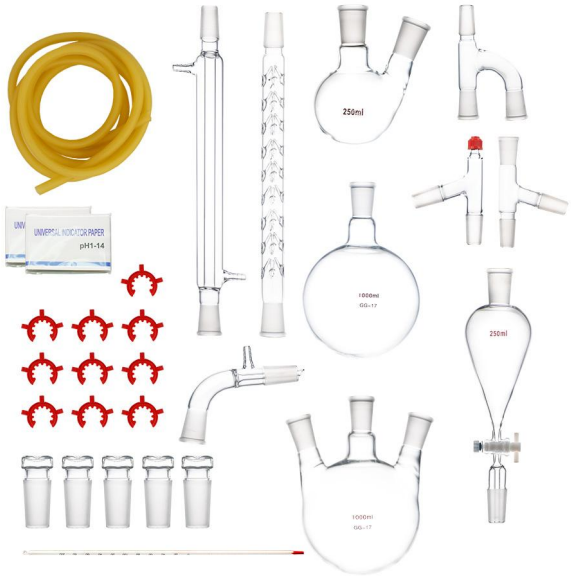

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this model.Glass fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Parts name	Number of parts	Description
flask	1	1000ml,24/40 ground glass joint
Two-necked flask	1	250ml,24/40 ground glass joint
Three-necked flask	1	1000ml,24/40 ground glass joint
Straight condenser	1	24/40 ground glass joint
Vigreaux column	1	24/40 ground glass joint
Vacuum adapter	1	/
Distilling head	1	/
Y-tube	1	/
Thermometer adapter	1	/
Separatory funnel	1	/
Glass stopper	5	/
thermometer	1	200℃
Plastic clip	10	/
Latex tubing	1	2m
PH test paper	2	/

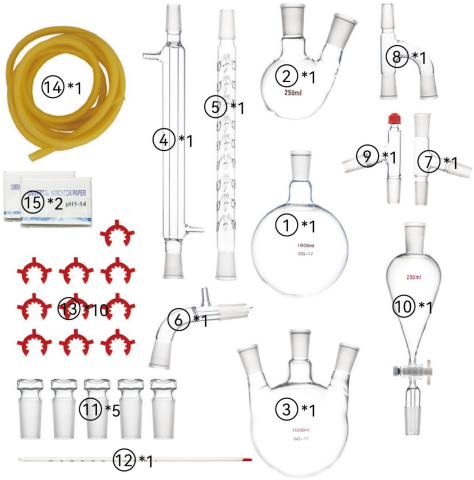

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

DIVERSE APPLICATION

Distillation apparatus kit is suitable for chemistry, medical treatment industries, also great for teaching activity, DIY essential oil.



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-8
Number of Kits	29
Glass Material	Borosilicate Glass

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APPAREIL DE DISTILLATION DE LABORATOIRE


MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DISTILLATION EN LABORATOIRE
APPAREIL

MODÈLE : YHEO-8

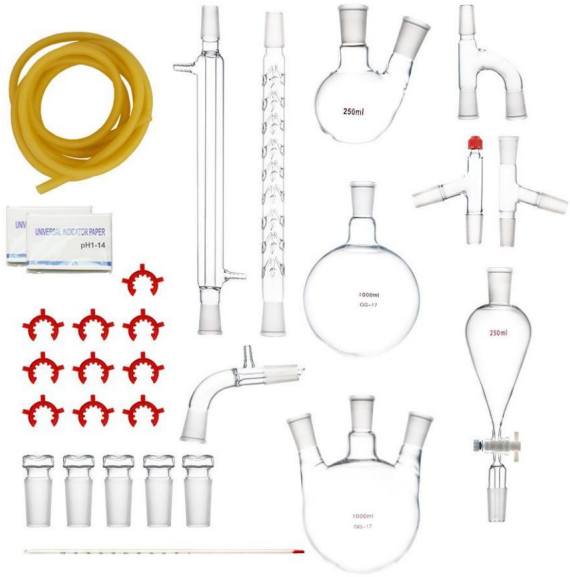

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir l'appareil de distillation de laboratoire.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi


1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité prenant en charge un appareil de distillation de laboratoire entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce modèle. Les ferrures en verre doivent toujours être manipulé avec précaution. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nom des pièces	Nombre de pièces	Description
ballon	1	1000 ml, 24/40 moulu joint de verre
Fiole à deux cols	1	250 ml, 24/40 moulu joint de verre
Fiole à trois cols	1	1000 ml, 24/40 moulu joint de verre
Condenseur droit	1	verre dépoli 24/40 articulation
colonne Vigreaux	1	verre dépoli 24/40 articulation
Adaptateur pour vide	1	/
Tête de distillation	1	/
tube en Y	1	/
Adaptateur de thermomètre	1	/
Séparateurs à entonnoir	1	/
Thermomètre à	5	/
bouchon en verre	1	200
Clip en plastique	10	/
Tubes en latex	1	2 m
Papier test PH	2	/

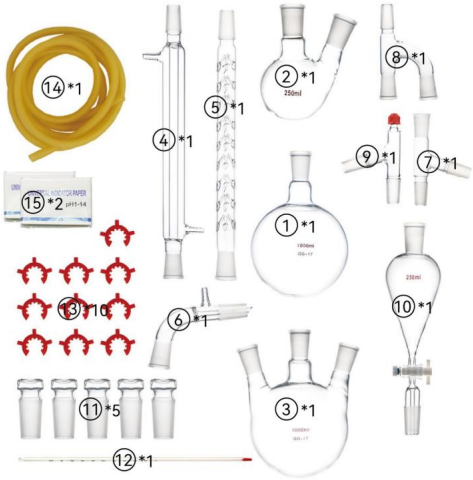

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

APPLICATIONS DIVERSES

Le kit d'appareil de distillation convient à la chimie, aux industries de traitement médical, également idéal pour les activités d'enseignement, les huiles essentielles de bricolage.



PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	YHEO-8
Nombre de kits	29
Matériau en verre	verre borosilicaté

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABOR-DESTILLATIONSGERÄTE


BENUTZERHANDBUCH

MODELL: YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORDESTILLATION GERÄT

MODELL: YHEO-8

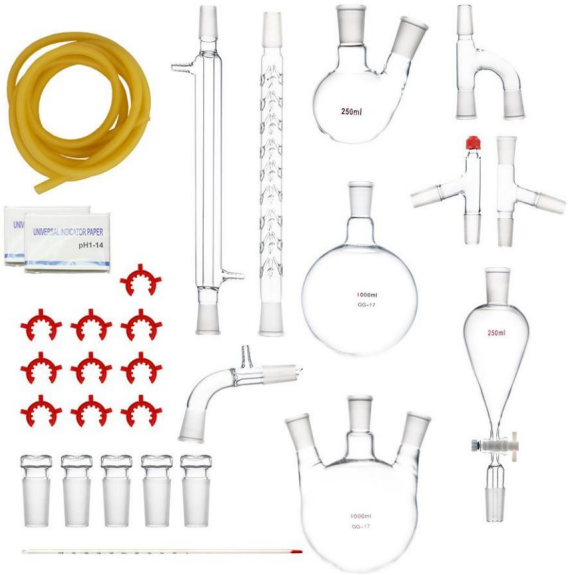

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, auf der es sicher Unterstützung des Labordestillationsgeräts.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen


1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Artikel.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in der Nähe Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützung eines voll beladenen Labordestillationsgeräts.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben. Glasbeschläge sollten immer mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Teilebezeichnung	Anzahl der Teile	Beschreibung
Flasche	1	1000ml,24/40 gemahlen Glasverbindung
Zweihalskolben	1	250ml, 24/40 gemahlen Glasverbindung
Dreihalskolben	1	1000ml,24/40 gemahlen Glasverbindung
Gerader Kondensator	1	24/40 Mattglas gemeinsam
Vigreaux-Säule	1	24/40 Mattglas gemeinsam
Vakuumadapter	1	/
Destillierkopf	1	/
Y-Rohr	1	/
Thermometeradapter	1	/
Trichterseparatoren	1	/
	5	/
Glasstopfenthermometer	1	200ÿ
Kunststoffclip	10	/
Latexschläuche	1	2 m
PH-Testpapier	2	/

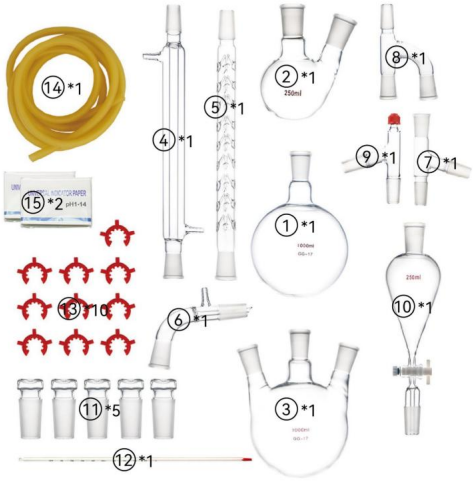

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

VIELFÄLTIGE ANWENDUNG

Das Destillationsapparate-Set eignet sich für die Chemie- und Medizinbranche und ist auch ideal für Lehrtätigkeiten und die Herstellung von ätherischen Ölen zum Selbermachen.



PRODUKTPARAMETER

Modell	YHEO-8
Anzahl der Kits	29
Glasmaterial	Borosilikatglas

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APPARECCHIO DI DISTILLAZIONE DA LABORATORIO

MANUALE D'USO


MODELLO:YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DISTILLAZIONE DI LABORATORIO

APPARECCHIO

MODELLO:YHEO-8

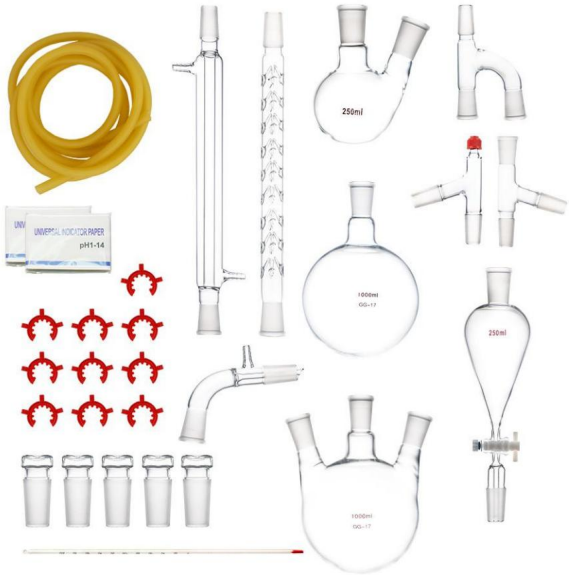

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto dell'apparato di distillazione di laboratorio.
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non superare la capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto di un apparecchio di distillazione da laboratorio completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo modello. Gli accessori in vetro devono sempre essere maneggiato con cura. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

Nome delle parti	Numero di parti	Descrizione
pallone	1	1000 ml, macinato 24/40 giunto di vetro
pallone a due colli	1	250 ml, macinato 24/40 giunto di vetro
pallone a tre colli	1	1000 ml, macinato 24/40 giunto di vetro
Condensatore dritto	1	vetro smerigliato 24/40 giunto
Colonna di Vigreaux	1	vetro smerigliato 24/40 giunto
Adattatore per aspirapolvere	1	/
Testa di distillazione	1	/
Tubo a Y	1	/
Adattatore per termometro	1	/
Separatori a imbuto	1	/
Termometro con	5	/
tappo in vetro	1	200ÿ
clip di plastica	10	/
tubi in lattice	1	2 metri
carta per il test del pH	2	/

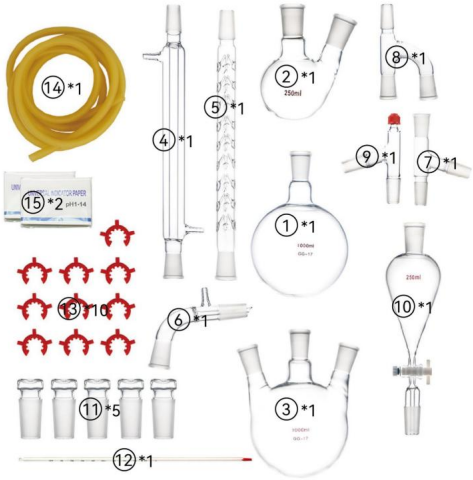

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

APPLICAZIONE DIVERSA

Il kit per apparecchi di distillazione è adatto per l'industria chimica e dei trattamenti medici, ed è ottimo anche per attività didattiche e per la produzione fai da te di oli essenziali.



PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	YHEO-8
Numero di kit	29
Materiale di vetro	Vetro borosilicato

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APARATO DE DESTILACIÓN DE LABORATORIO

MANUAL DEL USUARIO


MODELO: YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DESTILACIÓN DE LABORATORIO

APARATO

MODELO: YHEO-8

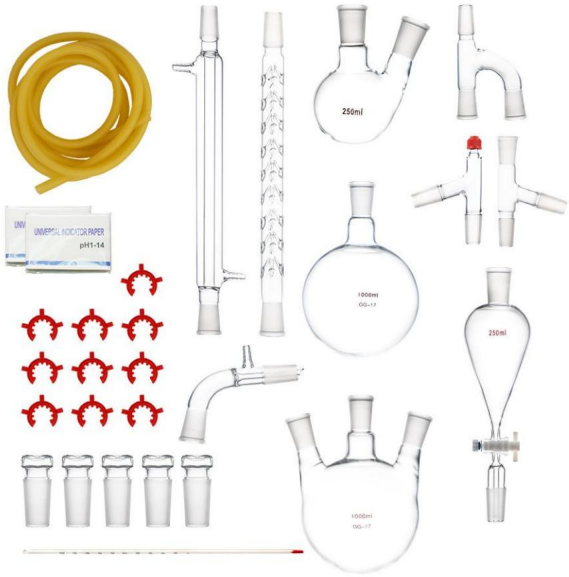

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede...

provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
   crear peligros.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
   apoyando el aparato de destilación de laboratorio.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
   artículo.
3. No exceda las capacidades de peso.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
   soporte de un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado.
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL


INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este modelo. Los herrajes de vidrio siempre deben

Manéjese con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Nombre de las piezas	Número de piezas	Descripción
matraz	1	1000 ml, molido 24/40 junta de vidrio
Matraz de dos bocas	1	250 ml, molido 24/40 junta de vidrio
Matraz de tres bocas	1	1000 ml, molido 24/40 junta de vidrio
Condensador recto	1	vidrio esmerilado 24/40 articulación
Columna de Vigreaux	1	vidrio esmerilado 24/40 articulación
Adaptador de vacío	1	/
Cabezal de destilación	1	/
Y-tube	1	/
Adaptador de termómetro	1	/
Separadores de embudo	1	/
termómetro con	5	/
tapón de vidrio	1	200
Clip de plástico	10	/
Tubos de látex	1	2 metros
Papel de prueba de pH	2	/

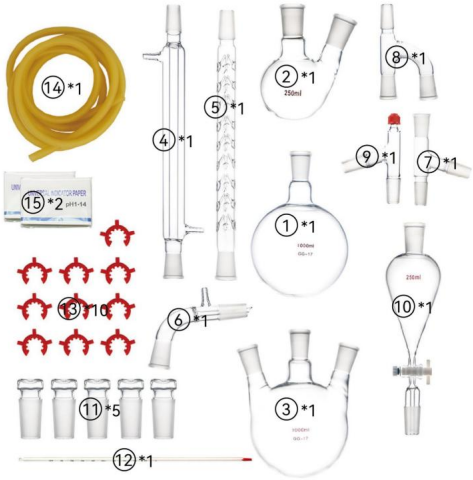

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

APLICACIÓN DIVERSA

El kit de aparato de destilación es adecuado para la química, las industrias de tratamiento médico, también es ideal para actividades de enseñanza, aceite esencial de bricolaje.



PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	YHEO-8
Número de kits	29
Material de vidrio	Vidrio de borosilicato

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORATORYJNY APARATURA DESTYLACYJNA


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Destylacja laboratoryjna
APARAT

MODEL: YHEO-8

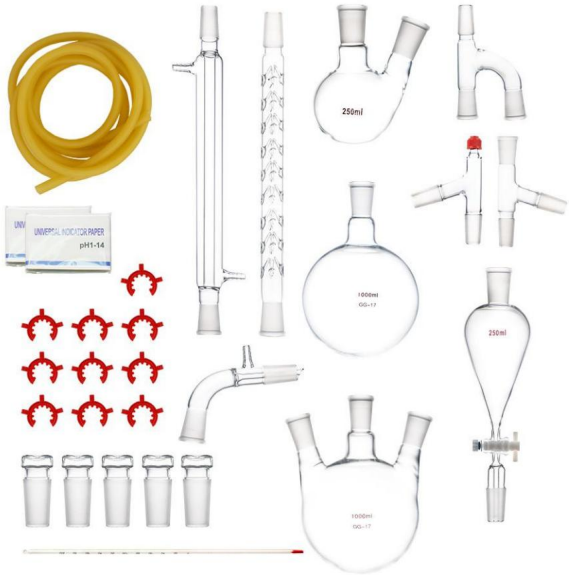

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie aparatury do destylacji laboratoryjnej.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności


1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne obsługujący w pełni wyposażony laboratoryjny aparat destylacyjny.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tego modelu. Okucia do szkła powinny być zawsze
Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
informacje pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Nazwa części	Liczba części	Opis
kolba	1	1000 ml, mielona w proporcji 24/40 złącze szklane
Kolba dwuszyjna	1	250ml, mielona 24/40 złącze szklane
Kolba trójszyjna	1	1000 ml, mielona w proporcji 24/40 złącze szklane
Kondensator prosty	1	Szkło szlifowane 24/40 wspólny
Kolumna Vigreaux	1	Szkło szlifowane 24/40 wspólny
Adapter próżniowy	1	/
Głowica destylacyjna	1	/
Rura Y	1	/
Adapter termometru	1	/
Separatory funnel	1	/
Termometr szklany	5	/
	1	200℃
Plastikowy klips	10	/
Rurki lateksowe	1	2m
Papierek testowy pH	2	/

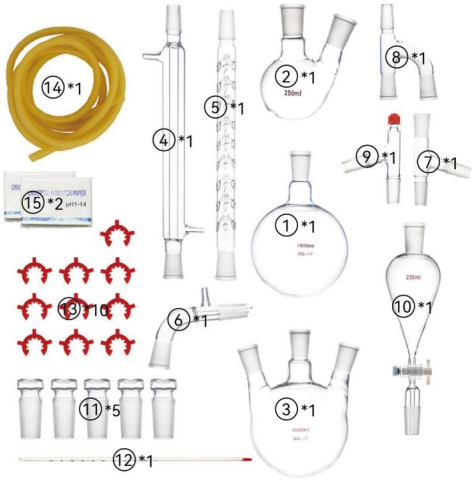

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIE

Zestaw do destylacji nadaje się do zastosowań w chemii, medycynie, świetnie nadaje się również do celów edukacyjnych, do samodzielnego wytwarzania olejków eterycznych.



PARAMETR PRODUKTU

Model	YHEO-8
Liczba zestawów	29
Materiał szklany	Szkło borokrzemianowe

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB-DESTILLATIEAPPARAAT


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATIE INRICHTING

MODEL:YHEO-8

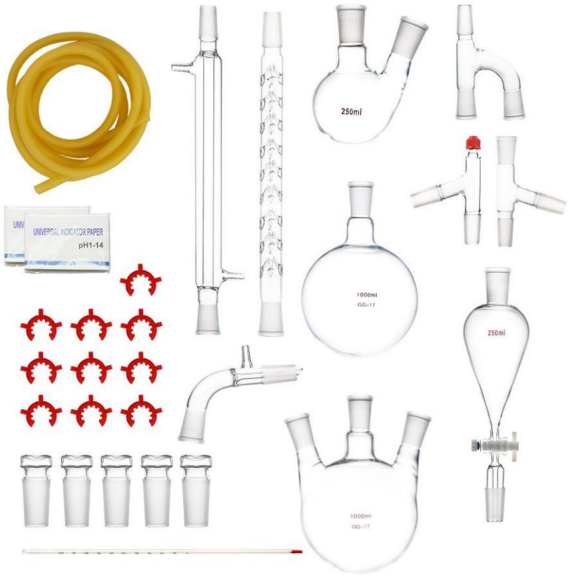

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:

ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan
   gevaren creëren.
2. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
   ondersteuning van het Lab Destillatieapparaat.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
   Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
   en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Gebruik voorzorgsmaatregelen


1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen.
   item.
3. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
   ter ondersteuning van een volledig uitgeruste laboratoriumdestillatie-inrichting.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit model hebt gekozen. Glasbeslag moet altijd voorzichtig worden behandeld. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Met behulp van deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

Naam van het onderdeel	Aantal onderdelen	Beschrijving
kolf	1	1000ml, 24/40 gemalen glazen voeg
Tweehalskolf	1	250 ml, 24/40 gemalen glazen voeg
Driehalskolf	1	1000ml, 24/40 gemalen glazen voeg
Rechte condensator	1	24/40 geslepen glas gewricht
Vigreaux-kolom	1	24/40 geslepen glas gewricht
Vacuümadapter	1	/
Distillatiekop	1	/
Y-buis	1	/
Thermometeradapter	1	/
Trechterscheiders	1	/
Glazen	5	/
stopthermometer	1	200ÿ
Kunststof clip	10	/
Latex slangen	1	2m
PH-testpapier	2	/

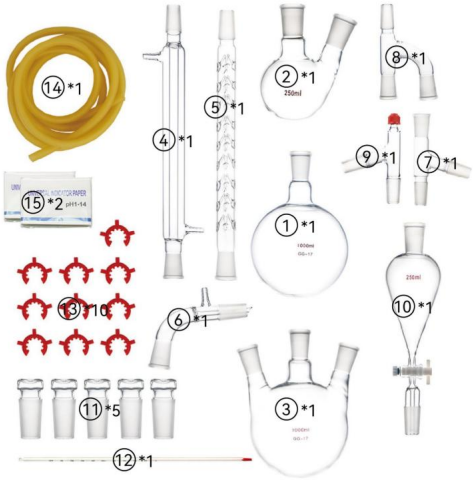

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

DIVERSE TOEPASSINGEN

De destillatieapparatuurset is geschikt voor de chemie, de medische behandelindustrie en is ook uitstekend geschikt voor lesactiviteiten en het zelf maken van etherische olie.



PRODUCTPARAMETER

Model	YHEO-8
Aantal kits	29
Glasmateriaal	Borosilicaatglas

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORATORIEDESTILLATIONSAPPARAT


ANVÄNDARMANUAL

MODELL: YHEO-8

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB-DESTILLATION ANORDNING

MODELL: YHEO-8

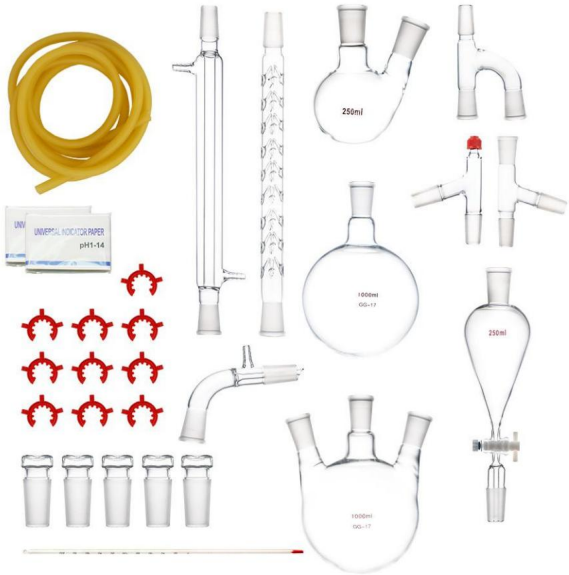

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer laboratoriedestillationsapparaten.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder


1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer en fullt laddad laboratoriedestillationsapparat.
5. Använd endast enligt avsikten.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde den här modellen. Glasarmaturer bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Delarnas namn	Antal delar	Beskrivning
kolv	1	1000 ml, 24/40 mald glasfog
Tvåhalsad kolv	1	250 ml, 24/40 mald glasfog
Trehalsad kolv	1	1000 ml, 24/40 mald glasfog
Rak kondensor	1	24/40 slipat glas gemensam
Vigreaux-kolonnen	1	24/40 slipat glas gemensam
Vakuumadapter	1	/
Destillationshuvud	1	/
Y-rör	1	/
Termometeradapter	1	/
Trattseparatorer	1	/
Glasproppthermometer	5	/
	1	200 ÿ
Plastklämma	10	/
Latexslang	1	2m
pH-testpapper	2	/

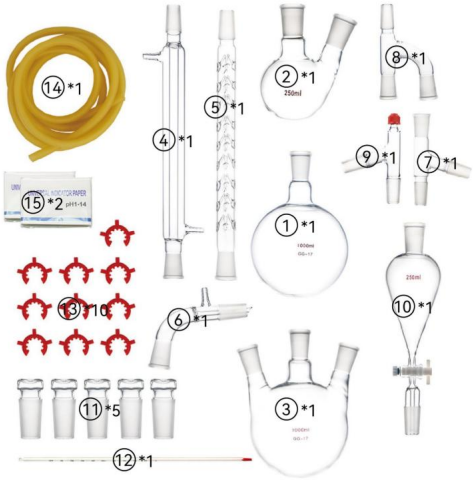

No.	Parts Name
1	Flask
2	Two-necked flask
3	Three-necked flask
4	Straight condenser
5	Vigreaux column
6	Vacuum adapter
7	Distilling head
8	Y-tube
9	Thermometer adapter
10	Separatory funnel
11	Glass stopper
12	Thermometer
13	Plastic clip
14	Latex tubing
15	PH test paper

MÅNGFALDIG ANVÄNDNING

Destillationsapparatkittet är lämpligt för kemi, medicinsk behandlingsindustri, även utmärkt för undervisningsaktiviteter, gör-det-själv-e



PRODUKTPARAMETER

Modell	YHEO-8
Antal kit	29
Glasmaterial	Borosilikatglas

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

