VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

USER MANUAL

MODEL:LD-134,LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODEL:LD-134,LD-135



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1.Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

2. After use, please assemble all the parts and keep them vertically.

3. Avoid high temperature and direct sunlight.

4.Remove minor stains with neutral detergent. The use of alcohol, benzene and other substances may damage the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

I.This model is suitable for nursing demonstration in health and nursing schools and medical colleges and universities at all levels.

II. The model is all made of PVC material. The material is firm, durable and light to use.

III. The joints of each part of the model can be moved, and the waist can be bent and all the components can be installed and removed.

IV.Teaching and operating items of this model:

(1) face washing and bed scrubbing;2) oral nursing;3) tracheotomy;4) oxygen inhalation therapy (nasal obstruction and nasocatheterization);5) nasal feeding;6)gastric lavage;7 intracardiac injection;8)extrathoracic cardiac resuscitation;9)Keywords pneumothorax;10) thoracic puncture;11) liver puncture;12) kidney puncture;13) celiac puncture;14) bone marrow puncture;15) lumbar puncture;16) deltoid muscle injection;17) hypodermic injection of deltoid muscle;18) intravenous injection;19) Venipuncture;20)intravenous infusion; 21)intravenous transfusion;22)female catheterization;23)buttock muscle injection;24)breast nursing.

V. Operating instructions for the use of the model:

1.All parts of the body were injected,large and small needle pieces in the puncture site were made of soft plastic,and a small plastic bottle was packed after the small needle block,which could contain20CC liquid,and the liquid of 20CC could be injected first as the pumping fluid before the drawing teaching.
2.The mouth and nose can be used as oxygen supply,nasal feeding and gastric lavage (the stomach is replaced by tube sac).
3.Intravenous injection,there is a large needle mass in the buttocks injection supply,nasal feeding and gastric lavage(the stomach is replaced by tube sac).
4.Intravenous injection,there is a large needle mass in the buttocks injection place,there is a skin tube(substitute vein tube),when the injection must be injected into the skin tube lumen,if a large amount of glucose infusion,the upper buttocks exposed skin tube should be put into the receptacle to loosen the clamp,And let the infusion run out.During the demonstration,a small amount of liquid is injected into the skin tube,and then the upper end of the skin tube can be clamped.
5.When injecting or puncturing,we must pay attention to the central part of the needle block.
6.The method of subcutaneous and intramuscular injection is the same as that of clinical operation.It can be injected with liquid,the sponge body can absorb water,and the water can be extruded and
dried.Do not too hard in the operation of the needle,you can use the finger to gently press the needle block,and then dial the needle is good.

VI. During the emergency treatment of extra thoracic heart resuscitation,the hand can be pressed 1 /3under the sternum to make the compressed place fall 2.5 cm.When the chest is heard whimpering,it will let go and restore,and the battery can be replaced when the battery is exhausted.o.If the injection or puncture needle block is damaged for a long time,it can be replaced.As long as the nut is rotated between the lower waist and the iron rod and the body is divided into two sections,the body can inspect the inner wall,spin down the small plastic bottle,and then

remove the damaged needle block to the outside and replace it with a new one.Then spin on a small plastic bottle,hip,arm needle block damage,can be pulled out,and then replaced with a new can.There are spare parts in each model of this kind of large and small needle block.

VII. Catheterization and enema teaching,can be inserted into the skin tube only for teaching (no liquid outflow).

VIII. Gastric lavage and nasal feeding can be used to insert nasal tubes from the nostril into the esophagus.Before insertion,the lower lip of the mouth (pressed inwards)can be opened and inserted with the finger,and then injected into the tube sac of the body.Hold the outer tube of the posterior buttocks and release the clamps when irrigation is done.(the skin of the back buttocks can be loosened by the release of the fluid.)

IX. After the practice is completed,check if the water in the tube bag is drained and clean it dry.

X. Use and maintenance of plastic models:This model is made of soft and rigid plastics.

1.In order to facilitate operation,the needle position can be slightly applied in the use of lubricating powder (that is,talc powder)to help smooth and smooth,with a clean test after use.


2.After the model is used,if there is dirt,you can use a little detergent to gently wipe away or a little soapy water and then clean with a cleaning cloth.

3.The model should be placed in a cool place,should not be exposed to the sun,and cover the cover.

PRODUCT PARAMETER

Model	LD-134	LD-135
Gender	Woman	Man
Material	PVC	PVC

PARTS LIST

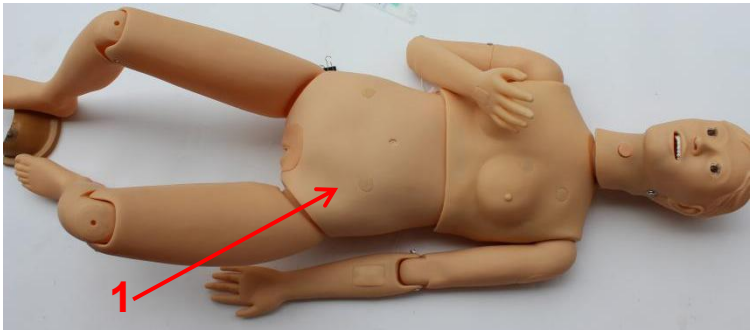

NO.	Name	PCS	
1	Lower Body Model	1	

NO.	Name	PCS	
A	**Clothes**	1	
B	**Syringe 10ml**	1	
C	**Urinary Catheter**	1	
D	**Gastric Tube**	1	
E	**Injection Module**	3	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODÈLES D'ENSEIGNEMENT DU CORPS HUMAIN

Manuel D'UTILISATION

MODÈLE : LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODÈLE : LD-134 , LD-135



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. Après utilisation, veuillez assembler toutes les pièces et les conserver verticalement.
3. Évitez les températures élevées et la lumière directe du soleil.
4. Enlever les taches mineures avec un détergent neutre. L'utilisation d'alcool, de benzène ou d'autres substances peut endommager le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

I. Ce modèle convient à la démonstration de soins infirmiers dans les écoles de santé et d'infirmières et dans les facultés de médecine et les universités à tous les niveaux.
II. Le modèle est entièrement fabriqué en PVC. Ce matériau est solide, durable et léger.
III. Les articulations de chaque partie du modèle peuvent être déplacées, la taille peut être pliée et tous les composants peuvent être installés et retirés.

IV. Éléments d'enseignement et d'exploitation de ce modèle :
(1) lavage du visage et nettoyage du lit ; 2) soins bucco-dentaires ; 3) trachéotomie ; 4) thérapie par inhalation d'oxygène (obstruction nasale et nasocathétérisme) ; 5) alimentation nasale ; 6) lavage gastrique ; 7) injection intracardiaque ; 8) réanimation cardiaque extrathoracique ; 9) Mots clés pneumothorax ; 10) ponction thoracique ; 11) ponction hépatique ; 12) ponction rénale ; 13) ponction cœliaque ; 14) ponction de moelle osseuse ; 15) ponction lombaire ; 16) injection du muscle deltoïde ; 17) injection hypodermique du muscle deltoïde ; 18) injection intraveineuse ; 19) ponction veineuse ; 20) intraveineuse infusion; 21)

transfusion intraveineuse ; 22) cathétérisme féminin ; 23) injection dans le muscle fessier ; 24) allaitement maternel.

V. Mode d'emploi du modèle :

1. Toutes les parties du corps ont été injectées, grandes et de petits morceaux d'aiguille ont été insérés dans le site de ponction en plastique souple et une petite bouteille en plastique était emballée après le petit bloc d'aiguille, qui pourrait contenir 20CC de liquide, et le liquide de 20CC pourrait être injecté en premier comme fluide de pompage avant le enseignement du dessin.
2. La bouche et le nez peuvent être utilisés comme oxygène alimentation, alimentation nasale et lavage gastrique (le l'estomac est remplacé par un sac tubulaire).
3. Injection intraveineuse, il y a une grosse masse d'aiguille dans l'approvisionnement en injection des fesses, l'alimentation nasale et lavage gastrique (l'estomac est remplacé par un sac tubulaire).
4. Injection intraveineuse, il y a une grosse masse d'aiguille au point d'injection des fesses, il y a un tube cutané (tube veineux de substitution), lorsque l'injection doit être injecté dans la lumière du tube cutané, si une grande quantité de perfusion de glucose, les fesses supérieures exposées le tube cutané doit être placé dans le réceptacle pour le desserrer la pince, et laissez couler la perfusion.Pendant la démonstration, une petite quantité de liquide est injectée dans le tube cutané, puis l'extrémité supérieure du le tube cutané peut être serré.
5. Lors de l'injection ou de la perforation, nous devons faire attention attention à la partie centrale du bloc aiguille.
6. La méthode sous-cutanée et intramusculaire l'injection est la même que celle de l'opération clinique.Il peut être injecté avec du liquide, le corps de l'éponge peut absorber l'eau, et l'eau peut être extrudée et
séché. Ne pas trop forcer dans le fonctionnement du aiguille, vous pouvez utiliser le doigt pour appuyer doucement sur le bloc d'aiguille, puis composez l'aiguille, c'est bon.


VI . Lors du traitement d'urgence d'un excès thoracique réanimation cardiaque, la main peut être pressée 1/3 sous le sternum pour rendre l'endroit comprimé chute de 2,5 cm. Lorsque la poitrine se fait entendre gémir, elle va lâcher prise et restaurer, et la batterie peut être remplacée lorsque la batterie est épuisée.o.Si le blocage de l'aiguille d'injection ou de ponction est endommagé pendant une longue période, il peut être remplacé. Tant que lorsque l'écrou est tourné entre la taille inférieure et la tige de fer et le corps est divisé en deux sections, le corps peut inspecter la paroi intérieure, faire tourner le petite bouteille en plastique, puis retirez la bouteille endommagée bloc d'aiguilles vers l'extérieur et remplacez-le par un nouveau
un. Ensuite, faites tourner une petite bouteille en plastique, une hanche, un bras dommages au bloc d'aiguille, peut être retiré, puis remplacé par une nouvelle boîte. Il y a des pièces de rechange dans chaque modèle de ce type d'aiguille grande et petite bloc.
VII . L'enseignement du cathétérisme et du lavement peut être inséré dans le tube cutané uniquement à des fins d'enseignement (pas sortie de liquide).
VIII . Le lavage gastrique et l'alimentation nasale peuvent être utilisés pour insérer des tubes nasaux de la narine dans le œsophage.Avant l'insertion, la lèvre inférieure de l' la bouche (pressée vers l'intérieur) peut être ouverte et insérée avec le doigt, puis injecté dans le sac tubulaire du corps. Tenez le tube extérieur du postérieur fesses et relâchez les pinces lorsque l'irrigation est
fait. (la peau du dos des fesses peut être relâchée par la libération du fluide.)
IX . Une fois la pratique terminée, vérifiez si l'eau dans le sac du tube est vidé et nettoyé, il est sec.
X. Utilisation et entretien des modèles en plastique :Ce modèle est fabriqué en plastiques souples et rigides.
1. Afin de faciliter l'opération, la position de l' aiguille peut être légèrement appliqué dans l'utilisation de lubrifiants poudre (c'est-à-dire du talc) pour aider à lisser et lisse, avec un test de nettoyage après utilisation.

2. Une fois le modèle utilisé, s'il y a de la saleté, vous pouvez utiliser un peu de détergent pour essuyer délicatement ou un peu de savon de l'eau puis nettoyer avec un chiffon de nettoyage.
3. Le modèle doit être placé dans un endroit frais, ne pas exposer au soleil et couvrir avec un couvercle.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	LD-134	LD-135
Genre	Femme	Homme
Matériel	PVC	PVC

PARTS LIST

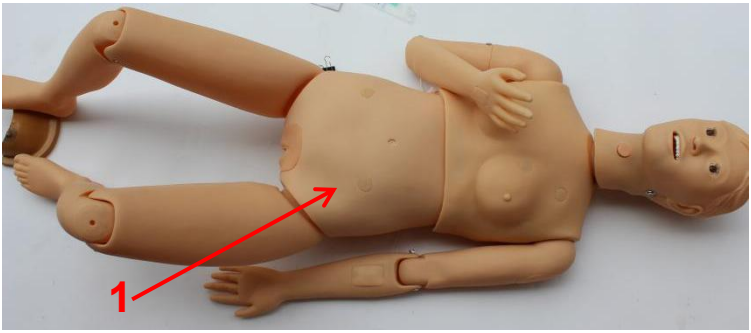

NO N.	Nom	PCS	
1	Modèle du bas du corps	1	

NON .	Nom	PCS	
UN	**Vêtements**	1	
B	**Seringue 10 ml**	1	
C	**Sonde urinaire**	1	
D	**sonde gastrique**	1	

E	**Module d' injection**	3	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LEHRMODELLE ZUM MENSCHLICHEN KÖRPER

Benutzerhandbuch

MODELL: LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODELL: LD-134 , LD-135



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Nach Gebrauch alle Teile zusammenbauen und senkrecht lagern.
3. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
4. Entfernen Sie kleinere Flecken mit einem neutralen Reinigungsmittel. Die Verwendung von Alkohol, Benzol und anderen Substanzen kann das Produkt beschädigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INSTRUCTIONS

I. Dieses Modell eignet sich für die Krankenpflegedemonstration an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen sowie medizinischen Hochschulen und Universitäten auf allen Ebenen.
II. Das Modell besteht vollständig aus PVC. Das Material ist fest, langlebig und leicht zu verwenden.
III. Die Gelenke der einzelnen Teile des Modells können bewegt werden, die Taille kann gebogen werden und alle Komponenten können installiert und entfernt werden.

IV. Lehr- und Bedienelemente dieses Modells:
(1) Gesicht waschen und Bett schrubben;2) Mundpflege;3) Tracheotomie;4) Sauerstoff-Inhalationstherapie (Nasenbehinderung und Nasenkatheterisierung);5) nasale Ernährung;6) Magenspülung;7) intrakardiale Injektion;8) extrathorakale Herzreanimation; 9) Schlüsselwörter Pneumothorax;10) Thoraxpunktion;11) Leberpunktion;12) Nierenpunktion;13) Zöliakiepunktion;14) Knochenmarkpunktion;15) Lumbalpunktion;16) Injektion in den Deltamuskel;17) subkutane Injektion in den Deltamuskel;18) intravenöse Injektion;19) Venenpunktion;20) intravenös Infusion; 21) intravenöse Transfusion; 22) Katheterisierung bei

Frauen; 23) Injektion in die Gesäßmuskulatur; 24) Stillen.

V. Bedienungsanleitung für den Einsatz des Modells:

1.Alle Körperteile wurden injiziert, große und kleine Nadelstücke in der Einstichstelle wurden gemacht aus weichem Kunststoff, und eine kleine Plastikflasche war verpackt nach dem kleinen Nadelblock, der 20CC Flüssigkeit enthalten könnte, und die Flüssigkeit von 20CC könnte zuerst als Pumpflüssigkeit eingespritzt, bevor die Zeichenunterricht.

2. Mund und Nase können als Sauerstoff verwendet werden Versorgung, nasale Ernährung und Magenspülung (die Magen wird durch Schlauchsack ersetzt).

3.Intravenöse Injektion, es gibt eine große Nadelmasse in das Gesäß Injektionsversorgung, nasale Fütterung und Magenspülung (der Magen wird durch einen Schlauch ersetzt).

4. Intravenöse Injektion, es gibt eine große Nadelmasse an der Injektionsstelle im Gesäß befindet sich ein Hautschlauch (Ersatzvenenschlauch), wenn die Injektion erfolgen muss in das Lumen des Hautschlauchs injiziert, wenn eine große Menge der Glukoseinfusion, das obere Gesäß freigelegt Hautschlauch sollte in den Behälter gelegt werden, um ihn zu lösen die Klemme, und lassen Sie die Infusion auslaufen. Während der Demonstration, eine kleine Menge Flüssigkeit wird injiziert in den Hautschlauch und dann das obere Ende des Hautschlauch kann abgeklemmt werden.

5. Beim Injizieren oder Punktieren müssen wir bezahlen Achten Sie auf den mittleren Teil des Nadelblocks.

6. Die Methode der subkutanen und intramuskulären Injektion ist die gleiche wie die der klinischen Operation.Es kann mit Flüssigkeit injiziert werden, der Schwammkörper kann Wasser aufnehmen, und das Wasser kann extrudiert werden und
getrocknet.Nicht zu hart in den Betrieb der Nadel, können Sie mit dem Finger sanft drücken die Nadelblock, und dann die Nadel wählen, ist gut.

VI . Bei der Notfallbehandlung von zusätzlichen Thorax

Herzwiederbelebung, die Hand kann 1/3 unter das Brustbein gedrückt werden, um die komprimierte Stelle zu machen 2,5 cm fallen.Wenn die Brust wimmert, ist es wird loslassen und wiederherstellen, und die Batterie kann Wenn die Batterie leer ist, muss sie ausgetauscht werden. o. Wenn der Injektions- oder Punktionsnadelblock beschädigt für eine lange zeit, es kann ersetzt werden. So lange wenn die Mutter zwischen der unteren Taille und der Eisenstange und der Körper ist in zwei Abschnitte unterteilt, der Körper kann die Innenwand inspizieren, drehen Sie die kleine Plastikflasche, und entfernen Sie dann die beschädigte Nadelblock nach außen und ersetzen Sie ihn durch einen neuen
eins.Dann drehen Sie auf einer kleinen Plastikflasche, Hüfte, Arm Nadelblockschaden, kann herausgezogen werden, und dann durch eine neue Dose ersetzt. Es gibt Ersatzteile in jedes Modell dieser Art von großen und kleinen Nadel Block.

VII . Katheterisierung und Einlauf Unterricht, kann nur zum Unterrichten in den Hautschlauch eingeführt (keine Flüssigkeitsaustritt).

VIII . Magenspülung und nasale Ernährung können verwendet werden, um Führen Sie Nasenröhrchen vom Nasenloch in die Speiseröhre. Vor dem Einführen wird die Unterlippe des Mund (nach innen gedrückt) kann geöffnet und eingeführt werden mit dem Finger und dann in den Eileitersack injiziert des Körpers. Halten Sie das äußere Rohr des hinteren Gesäß und lösen Sie die Klammern, wenn die Spülung
fertig.(die Haut der Gesäßrückseite kann gelockert werden durch die Freisetzung der Flüssigkeit.)

IX . Überprüfen Sie nach Abschluss der Übung, ob das Wasser im Schlauchbeutel abtropfen lassen und diesen trocken wischen.

X. Verwendung und Wartung von Kunststoffmodellen: Dieses Modell besteht aus weichem und hartem Kunststoff.


1. Um die Bedienung zu erleichtern, ist die Nadelposition kann leicht in der Verwendung von Schmiermittel angewendet werden Puder (das heißt Talkumpuder) zum Glätten und glatt, mit einem sauberen Test nach Gebrauch.
2. Nach der Verwendung des Modells, wenn es Schmutz gibt, können Sie

verwenden etwas Spülmittel zum sanften Abwischen oder etwas Seifenlauge Wasser und anschließend mit einem Reinigungstuch reinigen.
3. Das Modell sollte an einem kühlen Ort platziert werden, sollte nicht der Sonne ausgesetzt sein und die Abdeckung abdecken.

PRODUCT PARAMETER

Modell	LD-134	LD-135
Geschlecht	Frau	Mann
Material	PVC	PVC

PARTS LIST

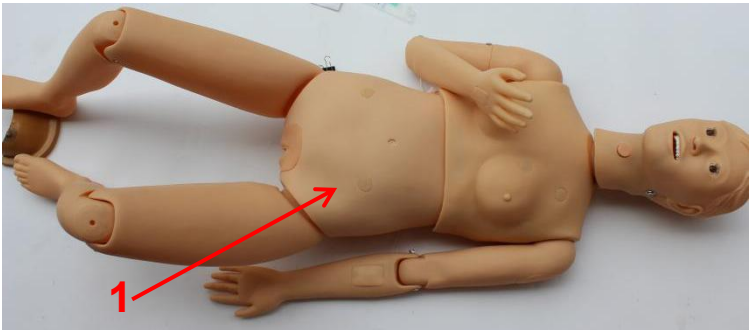

NEIN.	Name	PCS	
1	Unterkörpermodell	1	

NEIN.	Name	PCS	
A	**Kleidung**	1	
B	**Spritze 10ml**	1	
C	**Harnkatheter**	1	
D	**Magensonde**	1	

E	**Injektionsmodul**	3	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELLI DIDATTICI DEL CORPO UMANO

MANUALE utente

MODELLO: LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODELLO: LD-134 , LD-135



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
2. Dopo l'uso, rimontare tutti i componenti e conservarli in posizione verticale.
3. Evitare temperature elevate e luce solare diretta.
4. Rimuovere le macchie minori con un detergente neutro. L'uso di alcol, benzene e altre sostanze può danneggiare il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS

I. Questo modello è adatto per dimostrazioni infermieristiche nelle scuole di medicina e infermieristica, nelle facoltà di medicina e nelle università di tutti i livelli.

II. Il modello è interamente realizzato in PVC. Il materiale è solido, durevole e leggero.

III. Le giunture di ogni parte del modello possono essere spostate, la vita può essere piegata e tutti i componenti possono essere installati e rimossi.

IV. Elementi didattici e operativi di questo modello:

(1) lavaggio del viso e lavaggio del letto; 2) assistenza infermieristica orale; 3) tracheotomia; 4) terapia inalatoria di ossigeno (ostruzione nasale e nasocateterizzazione); 5) alimentazione nasale; 6) lavanda gastrica; 7) iniezione intracardiaca; 8) rianimazione cardiaca extratoracica; 9) Parole chiave pneumotorace; 10) puntura toracica; 11) puntura epatica; 12) puntura renale; 13) puntura celiaca; 14) puntura del midollo osseo; 15) puntura lombare; 16) iniezione nel muscolo deltoide; 17) iniezione ipodermica nel muscolo deltoide; 18) iniezione endovenosa; 19) Venipuntura; 20) endovenosa infusione; 21) trasfusione endovenosa; 22) cateterizzazione femminile; 23) iniezione nel muscolo gluteo; 24)

allattamento al seno.

V. Istruzioni operative per l'uso del modello:

1. Sono state iniettate tutte le parti del corpo, grandi e sono stati realizzati piccoli pezzi di ago nel sito di puntura di plastica morbida, e una piccola bottiglia di plastica era imballata dopo il piccolo blocco dell'ago, che potrebbe contenere 20CC di liquido, e il liquido di 20CC potrebbe essere iniettato prima come fluido di pompaggio prima del insegnamento del disegno.
2. La bocca e il naso possono essere utilizzati come ossigeno fornitura, alimentazione nasale e lavanda gastrica (il lo stomaco è sostituito da un sacco tubulare).
3. Iniezione endovenosa, c'è una grande massa di ago nella fornitura di iniezione dei glutei, alimentazione nasale e lavanda gastrica (lo stomaco viene sostituito da un sacco tubulare).
4. Iniezione endovenosa, c'è una grande massa di ago nel punto di iniezione dei glutei, c'è un tubo di pelle (tubo venoso sostitutivo), quando deve essere effettuata l'iniezione iniettato nel lume del tubo cutaneo, se una grande quantità di infusione di glucosio, la parte superiore dei glutei esposta il tubo della pelle deve essere inserito nel contenitore per allentarlo la pinza, e lasciare che l'infusione fuoriesca. Durante la dimostrazione, viene iniettata una piccola quantità di liquido nel tubo della pelle, e poi l'estremità superiore del il tubo di pelle può essere bloccato.
5. Quando si inietta o si punge, dobbiamo pagare attenzione alla parte centrale del blocco dell'ago.
6. Il metodo sottocutaneo e intramuscolare l'iniezione è la stessa di quella dell'operazione clinica. può essere iniettato con liquido, il corpo della spugna può assorbire l'acqua e l'acqua può essere estrusa e essiccato. Non usare troppa forza nel funzionamento del ago, puoi usare il dito per premere delicatamente l' blocco ago, quindi comporre l'ago è buono.

VI . Durante il trattamento di emergenza di extra toracico rianimazione


cardiaca, la mano può essere premuta 1/3 sotto lo sterno per rendere il posto compresso cadere 2,5 cm. Quando si sente il petto gemere, lascerà andare e ripristinerà, e la batteria può essere sostituita quando la batteria è scarica.o.Se il blocco dell'ago per iniezione o puntura è danneggiato per lungo tempo, può essere sostituito. Finché mentre il dado viene ruotato tra la vita inferiore e la barra di ferro e il corpo è diviso in due sezioni, il corpo può ispezionare la parete interna, girare verso il basso piccola bottiglia di plastica, e poi rimuovere quella danneggiata blocco ago verso l'esterno e sostituirlo con uno nuovo
uno. Poi gira su una piccola bottiglia di plastica, anca, braccio danni al blocco dell'ago, possono essere estratti e quindi sostituito con una nuova lattina. Ci sono pezzi di ricambio in ogni modello di questo tipo di ago grande e piccolo bloccare.
VII . L'insegnamento del cateterismo e del clistere può essere inserito nel tubo della pelle solo per l'insegnamento (no deflusso di liquido).
VIII . La lavanda gastrica e l'alimentazione nasale possono essere utilizzate per inserire i tubi nasali dalla narice nel esofago. Prima dell'inserimento, il labbro inferiore dell' la bocca (premuta verso l'interno) può essere aperta e inserita con il dito, e poi iniettato nel sacco tubulare del corpo. Tenere il tubo esterno del posteriore glutei e rilasciare i morsetti quando l'irrigazione è
fatto.(la pelle dei glutei posteriori può essere allentata tramite il rilascio del fluido.)
IX . Dopo aver completato la pratica, controlla se l'acqua nel sacchetto del tubo viene svuotato e pulito e asciugato.
X. Utilizzo e manutenzione dei modelli in plastica:Questo modello è realizzato in plastica morbida e rigida.
1. Per facilitare l'operazione, la posizione dell'ago può essere leggermente applicato nell'uso di lubrificanti polvere (cioè talco) per aiutare a lisciare e liscio, con un test di pulizia dopo l'uso.
2. Dopo aver utilizzato il modello, se c'è sporcizia, è possibile utilizzare un po' di detersivo per pulire delicatamente o un po' di sapone acqua e poi pulire con un panno.

3. Il modello deve essere posizionato in un luogo fresco, non esporre al sole e coprire il telo.

PRODUCT PARAMETER

Modello	LD-134	LD-135
Genere	Donna	Uomo
Materiale	PVC	PVC

PARTS LIST

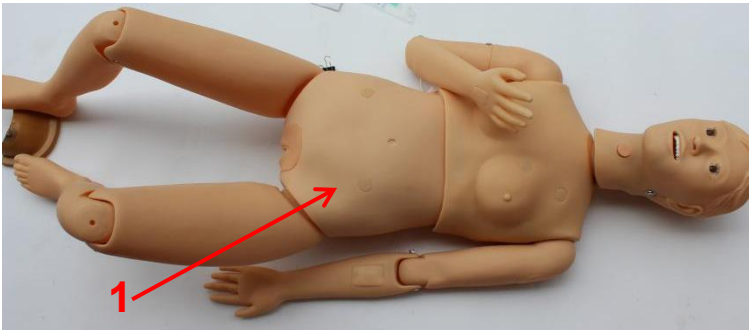

NO.	Nome	PCS	
1	Modello della parte inferiore del corpo	1	

NO.	Nome	PCS	
UN	**Vestiti**	1	
B	**Siringa da 10 ml**	1	
C	**Catetere urinario**	1	
D	**Tubo gastrico**	1	
E	**Modulo di iniezione**	3	

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELOS DE ENSEÑANZA DEL CUERPO HUMANO

MANUAL DEL usuario

MODELO: LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODELO: LD-134 , LD-135



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
2. Después de su uso, monte todas las piezas y manténgalas en posición vertical.
3. Evite las altas temperaturas y la luz solar directa.
4. Elimine las manchas pequeñas con detergente neutro. El uso de alcohol, benceno y otras sustancias puede dañar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

I. Este modelo es adecuado para demostraciones de enfermería en escuelas de salud y enfermería, facultades de medicina y universidades de todos los niveles.

II. El modelo está fabricado íntegramente en PVC. Este material es firme, duradero y ligero.

III. Las articulaciones de cada parte del modelo se pueden mover, la cintura se puede doblar y todos los componentes se pueden instalar y quitar.

IV. Elementos didácticos y operativos de este modelo:

(1) lavado de cara y fregado de cama; 2) enfermería oral; 3) traqueotomía; 4) terapia de inhalación de oxígeno (obstrucción nasal y nasocateterismo); 5) alimentación nasal; 6) lavado gástrico; 7 inyección intracardíaca; 8) reanimación cardíaca extratorácica; 9) Palabras clave neumotórax; 10) punción torácica; 11) punción hepática; 12) punción renal; 13) punción celíaca; 14) punción de médula ósea; 15) punción lumbar; 16) inyección en el músculo deltoides; 17) inyección hipodérmica del músculo deltoides; 18) inyección intravenosa; 19) venopunción; 20) inyección intravenosa infusión; 21) transfusión intravenosa; 22) cateterismo femenino; 23)

inyección en el músculo de los glúteos; 24) lactancia materna.

V. Instrucciones de uso del modelo:

1. Se inyectaron todas las partes del cuerpo, grandes y Se hicieron pequeños trozos de aguja en el sitio de punción. de plástico blando, y una pequeña botella de plástico estaba embalada Después del pequeño bloque de agujas, que podría contener 20 cc de líquido, y el líquido de 20 cc podría ser Se inyecta primero como fluido de bombeo antes del enseñanza del dibujo.
2.La boca y la nariz se pueden utilizar como oxígeno. suministro, alimentación nasal y lavado gástrico (el el estómago es reemplazado por un saco tubular).
3. Inyección intravenosa, hay una gran masa de aguja. En el suministro de inyección de glúteos, alimentación nasal y lavado gástrico(el estómago se reemplaza por un saco tubular).
4. Inyección intravenosa, hay una gran masa de aguja. En el lugar de inyección de los glúteos, hay un tubo de piel (tubo de vena sustituto), cuando la inyección debe ser inyectado en el lumen del tubo de la piel, si una gran cantidad de infusión de glucosa, las nalgas superiores expuestas El tubo de piel debe colocarse en el receptáculo para aflojarlo. la abrazadera, y dejar que la infusión salga.Durante el Demostración, se inyecta una pequeña cantidad de líquido. en el tubo de la piel, y luego el extremo superior del El tubo de piel se puede sujetar.
5. Al inyectar o perforar, debemos pagar Atención a la parte central del bloque de agujas.
6. El método de administración subcutánea e intramuscular. La inyección es la misma que la de la operación clínica. Se puede inyectar líquido, el cuerpo de la esponja puede absorber agua, y el agua puede extruirse y Seco. No lo presione demasiado fuerte durante la operación. aguja, puedes usar el dedo para presionar suavemente la Bloqueo de aguja, y luego marcar la aguja es buena.

VI . Durante el tratamiento de emergencia de extra torácico reanimación

cardíaca, la mano se puede presionar 1/3 debajo del esternón para hacer que el lugar comprimido Caída de 2,5 cm. Cuando se oye gemir el pecho, Se soltará y se restaurará, y la batería puede ser Se debe reemplazar cuando la batería se agote.o.Si el bloqueo de la aguja de inyección o punción está dañado durante mucho tiempo, se puede reemplazar. Siempre que A medida que la tuerca gira entre la cintura inferior y la La varilla de hierro y el cuerpo se dividen en dos secciones, el cuerpo puede inspeccionar la pared interior, girar hacia abajo pequeña botella de plástico y luego retire la dañada bloque de agujas hacia el exterior y reemplácelo por uno nuevo

1. Luego gira una pequeña botella de plástico, cadera, brazo. daño del bloque de aguja, se puede sacar y luego reemplazado por una lata nueva.Hay repuestos en Cada modelo de este tipo de aguja grande y pequeña. bloquear.

VII . La enseñanza del cateterismo y el enema se puede realizar insertado en el tubo de piel solo para enseñanza (no salida de líquido).

VIII . El lavado gástrico y la alimentación nasal se pueden utilizar para Insertar tubos nasales desde la fosa nasal hasta la esófago.Antes de la inserción, el labio inferior del La boca (presionada hacia adentro) se puede abrir e insertar con el dedo y luego se inyecta en el saco tubular del cuerpo. Sujete el tubo exterior de la parte posterior. glúteos y soltar las pinzas cuando se realiza la irrigación

Listo.(se puede aflojar la piel de la parte posterior de los glúteos) (por la liberación del fluido.)

IX . Una vez finalizada la práctica, verifique si el agua En la bolsa del tubo se drena y se limpia en seco.

INCÓGNITA. Uso y mantenimiento de modelos de plástico:Este modelo está fabricado con plásticos blandos y rígidos.


1. Para facilitar la operación, la posición de la aguja Se puede aplicar ligeramente en el uso de lubricantes. polvo (es decir, polvo de talco) para ayudar a suavizar y Suave, con una prueba limpia después del uso.
2. Después de usar el modelo, si hay suciedad, puede usarlo . un poco de detergente para limpiar suavemente o un poco de jabón agua y luego

limpiar con un paño de limpieza.
3. El modelo debe colocarse en un lugar fresco, debe No exponer al sol y cubrir con la funda.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	LD-134	LD-135
Género	Mujer	Hombre
Material	CLORURO DE POLIVINILO	CLORURO DE POLIVINILO

PARTS LIST

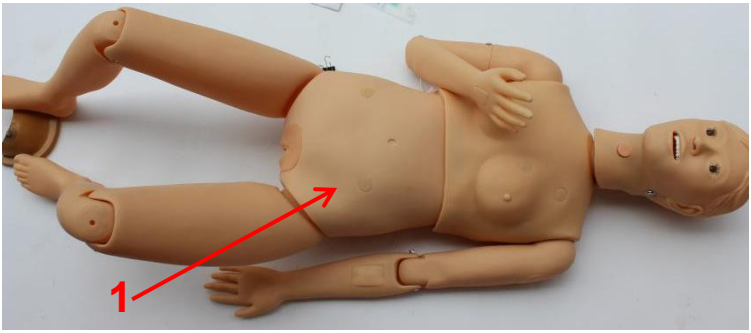

NO.	Nombre	PC	
1	Modelo de la parte inferior del cuerpo	1	

NO.	Nombre	PC	
A	**Ropa**	1	
B	**Jeringa de 10 ml**	1	
do	**Catéter urinario**	1	
D	**Sonda gástrica**	1	
mi	**Módulo de inyección**	3	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELE NAUCZANIA LUDZKIEGO CIAŁA

INSTRUKCJA obsługi

MODELE:LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODELE:LD-134 , LD-135



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. Po użyciu należy złożyć wszystkie części i trzymać je w pozycji pionowej.
3. Unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
4. Drobne plamy usuwać neutralnym detergentem. Stosowanie alkoholu, benzenu i innych substancji może uszkodzić produkt.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUCTIONS

I. Model ten nadaje się do demonstracji pielęgniarstwa w szkołach pielęgniarstwa i ochrony zdrowia oraz na uczelniach medycznych i uniwersytetach na wszystkich poziomach.
II. Model w całości wykonany jest z materiału PVC. Materiał jest wytrzymały, trwały i lekki w użyciu.
III. Połączenia każdej części modelu można przesuwać, talię można zginać, a wszystkie elementy można montować i demontować.

IV. Elementy dydaktyczne i operacyjne tego modelu:
(1) mycie twarzy i szorowanie łóżka; 2) pielęgnacja jamy ustnej; 3) tracheotomia; 4) terapia inhalacyjna tlenem (niedrożność nosa i nasocewnikowanie); 5) karmienie przez nos; 6) płukanie żołądka; 7) wstrzyknięcie dożylne; 8) zewnątrzklatkowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa; 9) Słowa kluczowe: odma opłucnowa; 10) nakłucie klatki piersiowej; 11) nakłucie wątroby; 12) nakłucie nerki; 13) nakłucie trzewne; 14) nakłucie szpiku kostnego; 15) nakłucie lędźwiowe; 16) wstrzyknięcie do mięśnia naramiennego; 17) wstrzyknięcie podskórne do mięśnia naramiennego; 18) wstrzyknięcie dożylne; 19) nakłucie żyły; 20) dożylne napar; 21) transfuzja dożylna; 22) cewnikowanie kobiet; 23)

zastrzyk w mięsień pośladkowy; 24) karmienie piersią.

V. Instrukcja obsługi modelu:

1.Wszystkie części ciała zostały wstrzyknięte, duże i w miejscu nakłucia wykonano małe kawałki igły z miękkiego plastiku i zapakowano w małą plastikową butelkę po małym bloku igłowym, który mógł pomieścić 20 ml cieczy, a ciecz o pojemności 20 ml mogła być wstrzyknięty jako pierwszy jako płyn pompujący przed nauczanie rysunku.

2. Usta i nos mogą służyć jako tlen zaopatrzenie, karmienie przez nos i płukanie żołądka (żołądek zostaje zastąpiony workiem rurowym).

3. Wstrzyknięcie dożylne, występuje duża masa igły w pośladkach, wstrzyknięcia, karmienie przez nos i płukanie żołądka (zastąpienie żołądka rurką).

4. Wstrzyknięcie dożylne, występuje duża masa igły w miejscu wstrzyknięcia w pośladki znajduje się rurka skórna (zastępcza rurka żylna), gdy wstrzyknięcie musi zostać wykonane wstrzyknąć do światła rurki skórnej, jeśli jest duża ilość wlewu glukozy, odsłonięte górne partie pośladków rurkę skórną należy włożyć do pojemnika, aby ją poluzować zacisku i pozwól, aby płyn wypłynął. Podczas demonstracja, wstrzykuje się niewielką ilość płynu do rurki skórnej, a następnie do górnego końca rurkę skórną można zacisnąć.

5. Podczas wstrzykiwania lub nakłuwania musimy zapłacić zwróć uwagę na środkową część bloku igły.

6.Metoda podskórna i domięśniowa wstrzyknięcie jest takie samo jak operacja kliniczna.To można wstrzykiwać płyn, ciało gąbki może absorbują wodę, a wodę można wycisnąć i
wysuszone. Nie należy zbyt mocno naciskać na działanie igłę, możesz użyć palca, aby delikatnie nacisnąć Blokada igły, a następnie pokrętło, czy igła jest dobra.

VI . W trakcie leczenia doraźnego dodatkowego piersiowy resuscytacja

serca, dłoń może być dociśnięta 1/3 pod mostkiem, aby utworzyć miejsce ucisku spadek 2,5 cm. Kiedy słychać jęk w klatce piersiowej, puści i przywróci, a bateria może być wymienić, gdy bateria jest rozładowana.o.Jeśli blokada igły do wstrzykiwań lub nakłuwania jest Jeśli jest uszkodzony przez długi czas, można go wymienić. gdy nakrętka obraca się pomiędzy dolną talią a pręt żelazny, a korpus podzielony na dwie sekcje, korpus może sprawdzać wewnętrzną ścianę, obracać się w dół małą plastikową butelkę, a następnie usuń uszkodzoną blokadę igły na zewnątrz i wymień ją na nową

1. Następnie kręć małą plastikową butelką, biodrem, ramieniem uszkodzenie blokady igły, można ją wyciągnąć, a następnie wymieniona na nową puszkę. Są części zamienne każdy model tego rodzaju dużej i małej igły blok.

VII . Nauczanie cewnikowania i lewatywy może być włożona do rurki skórnej wyłącznie w celu nauki (nie (wypływ cieczy).

VIII . Płukanie żołądka i karmienie przez nos mogą być stosowane w celu: włożyć rurki nosowe z nozdrza do przełyku. Przed wprowadzeniem dolna warga przełyku usta (wciśnięte do wewnątrz) można otworzyć i włożyć palcem, a następnie wstrzyknąć do worka rurowego ciała. Trzymaj zewnętrzną rurkę tylnej części pośladki i zwolnij zaciski, gdy irygacja jest gotowe. (skórę pośladków można rozluźnić (przez uwolnienie płynu.)

IX . Po zakończeniu ćwiczeń sprawdź, czy woda woreczek rurowy odsączyć i wyczyścić do sucha.

X. Użytkowanie i konserwacja modeli plastikowych:Ten model wykonany jest z miękkiego i sztywnego tworzywa sztucznego.


1. Aby ułatwić obsługę, położenie igły może być lekko stosowany w przypadku stosowania środków smarujących puder (czyli talk), który pomaga wygładzić i gładkie, z czystym testem po użyciu.
2. Po użyciu modelu, jeśli jest on zabrudzony, można go użyć trochę

detergentu do delikatnego wytarcia lub odrobina mydła wodą, a następnie wyczyścić ściereczką czyszczącą.
3. Model należy umieścić w chłodnym miejscu , nie wystawiać na działanie słońca i przykryć pokrywą.

PRODUCT PARAMETER

Model	LD-134	LD-135
Płeć	Kobieta	Człowiek
Materiał	PCV	PCV

PARTS LIST

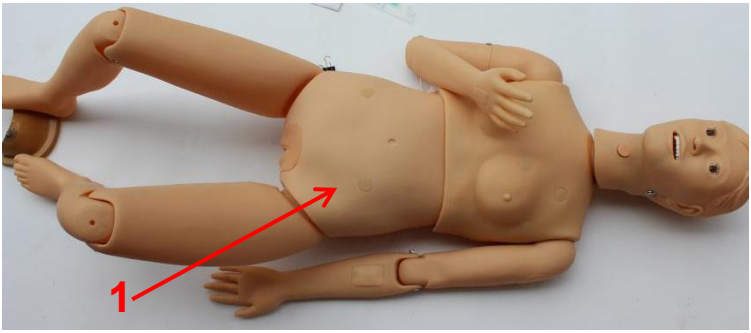

NIE.	Nazwa	PCS	
1	Model dolnej części ciała	1	

NIE.	Nazwa	PCS	
A	**Odzież**	1	
B	**Strzykawka 10ml**	1	
C	**Cewnik moczowy**	1	
D	**Sonda żołądkowa**	1	

mi	**Moduł wtryskowy**	3	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ONDERWIJSMODELLEN VOOR HET MENSELIJK LICHAAM

Gebruikershandleiding

MODEL: LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODEL: LD-134 , LD-135



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. Monteer na gebruik alle onderdelen weer en bewaar ze verticaal.
3. Vermijd hoge temperaturen en direct zonlicht.
4. Verwijder kleine vlekken met een neutraal reinigingsmiddel. Het gebruik van alcohol, benzeen en andere stoffen kan het product beschadigen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIONS

I. Dit model is geschikt voor verpleegkundige demonstraties op scholen voor gezondheidszorg en verpleegkunde, medische hogescholen en universiteiten op alle niveaus.

II. Het model is volledig gemaakt van PVC-materiaal. Het materiaal is stevig, duurzaam en licht in gebruik.

III. De gewrichten van elk onderdeel van het model kunnen worden verplaatst, de taille kan worden gebogen en alle componenten kunnen worden geïnstalleerd en verwijderd.

IV. Onderwijs- en bedieningsonderdelen van dit model:

(1) gezicht wassen en bed schrobben; 2) mondverpleging; 3) tracheotomie; 4) zuurstofinhalatietherapie (neusobstructie en nasocatheterisatie); 5) neusvoeding; 6) maagspoeling; 7) intracardiale injectie; 8) extrathoracale reanimatie; 9) Trefwoorden pneumothorax ; 10) thoraxpunctie; 11) leverpunctie; 12) nierpunctie; 13) coeliakiepunctie; 14) beenmergpunctie; 15) lumbaalpunctie; 16) injectie in de deltoïde spier; 17) hypodermische injectie in de deltoïde spier; 18) intraveneuze injectie; 19) venapunctie; 20) intraveneus infuus; 21) intraveneuze transfusie; 22) katheterisatie bij vrouwen; 23) injectie in de bilspier; 24) borstvoeding.

V. Gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het model:

1. Alle delen van het lichaam werden geïnjecteerd, groot en kleine naaldjes werden in de prikplaats gemaakt van zacht plastic, en een klein plastic flesje was verpakt na het kleine naaldblok, dat 20CC vloeistof kon bevatten, en de vloeistof van 20CC kon eerst geïnjecteerd als pompvloeistof vóór de tekenles.

2.De mond en neus kunnen als zuurstof worden gebruikt voeding, neusvoeding en maagspoeling (de (de maag wordt vervangen door een buiszak).

3. Intraveneuze injectie, er is een grote naaldmassa in de billen injectietoevoer, neusvoeding en Maagspoeling (de maag wordt vervangen door een buisje).

4. Intraveneuze injectie, er is een grote naaldmassa Op de injectieplaats in de billen bevindt zich een huidbuis (vervangende aderbuis), wanneer de injectie moet worden toegediend geïnjecteerd in het lumen van de huidbuis, indien een grote hoeveelheid van glucose-infusie, de bovenste billen blootgelegd huidbuis moet in de houder worden geplaatst om los te maken de klem,En laat de infusie eruit lopen.Tijdens de demonstratie, een kleine hoeveelheid vloeistof wordt geïnjecteerd in de huidbuis en vervolgens het bovenste uiteinde van de huidbuis kan worden afgeklemd.

5. Bij injectie of punctie moeten we betalen Let op het centrale deel van het naaldblok.

6. De methode van subcutane en intramusculaire injectie is hetzelfde als die van klinische operatie.Het kan worden geïnjecteerd met vloeistof, het sponslichaam kan water absorberen, en het water kan worden uitgeperst en
gedroogd. Niet te hard werken tijdens het gebruik van de naald, je kunt de vinger gebruiken om voorzichtig op de naaldblok, en dan de naald instellen is goed.

VI . Tijdens de spoedbehandeling van extra thoracaal hartreanimatie, de hand kan 1/3 onder het borstbeen worden gedrukt om de samengedrukte plaats te maken 2,5 cm vallen. Als de borstkas gejank hoort, zal loslaten en


herstellen, en de batterij kan worden vervangen wanneer de batterij leeg is.o.Als het injectie- of punctienaaldblok is Als het langere tijd beschadigd is, kan het vervangen worden. Zolang terwijl de moer tussen de onderste taille en de ijzeren staaf en het lichaam is verdeeld in twee secties, het lichaam kan de binnenwand inspecteren, de kleine plastic fles, en verwijder vervolgens de beschadigde naaldblok naar buiten en vervang het door een nieuw
een. Draai dan aan een klein plastic flesje, heup, arm naaldblok beschadigd, kan eruit worden getrokken en dan vervangen door een nieuw blik. Er zijn reserveonderdelen in elk model van dit soort grote en kleine naald blok.
VII . Katheterisatie en klysma-instructie kunnen zijn alleen in de huidbuis ingebracht voor instructie (geen vloeistofuitstroom).
VIII . Maagspoeling en neusvoeding kunnen worden gebruikt om neusbuisjes vanuit het neusgat inbrengen in de slokdarm.Voordat het wordt ingebracht, wordt de onderlip van de mond (naar binnen gedrukt) kan worden geopend en ingebracht met de vinger, en vervolgens in de buiszak geïnjecteerd van het lichaam. Houd de buitenste buis van de achterste billen en laat de klemmen los wanneer de irrigatie is klaar.(de huid van de achterste billen kan worden losgemaakt (door het vrijkomen van de vloeistof.)
IX . Controleer na afloop van de oefening of het water in de buiszak laten uitlekken en droogmaken.
X. Gebruik en onderhoud van kunststofmodellen: Dit model is gemaakt van zachte en stijve kunststoffen.
1. Om de bediening te vergemakkelijken, moet de naaldpositie kan licht worden toegepast bij gebruik van smeermiddelen poeder (dat wil zeggen talkpoeder) om de huid gladder en gladder te maken glad, met een schone test na gebruik.
2. Nadat het model is gebruikt, kunt u, als er vuil op zit , een beetje afwasmiddel om voorzichtig weg te vegen of een beetje zeepachtig water en maak het daarna schoon met een schoonmaakdoekje.
3. Het model moet op een koele plaats worden geplaatst. niet aan de zon

worden blootgesteld en dek af.

PRODUCT PARAMETER

Model	LD-134	LD-135
Geslacht	Vrouw	Man
Materiaal	PVC	PVC

PARTS LIST

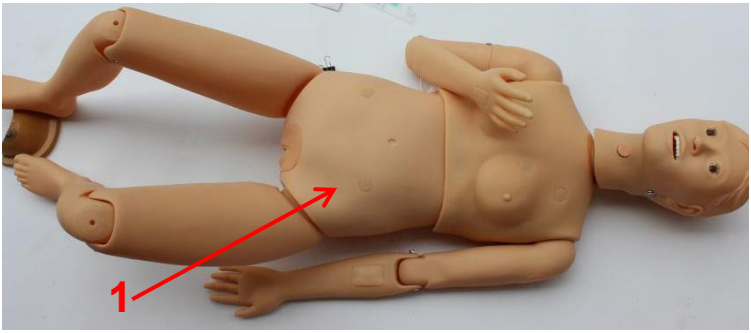

NEE.	Naam	PCS	
1	Onderlichaammodel	1	

NEE.	Naam	PCS	
A	**Kleren**	1	
B	**Spuit 10 ml**	1	
C	**Urinekatheter**	1	
D	**Maagsonde**	1	

E	**Injectiemodule**	3	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MÄNNISKOKROPPENS UNDERVISNINGSMODELLER

Användarmanual

MODELL: LD-134 , LD-135

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HUMAN BODY TEACHING MODELS

MODELL: LD-134 , LD-135



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
2. Montera alla delar och förvara dem vertikalt efter användning.
3. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.
4. Avlägsna mindre fläckar med ett neutralt rengöringsmedel. Användning av alkohol, bensen och andra ämnen kan skada produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTRUCTIONS

I. Denna modell är lämplig för omvårdnadsdemonstrationer på hälso- och sjuksköterskeskolor och medicinska högskolor och universitet på alla nivåer.

II. Modellen är helt tillverkad av PVC-material. Materialet är fast, hållbart och lätt att använda.

III. Lederna i varje del av modellen kan flyttas, och midjan kan böjas och alla komponenter kan monteras och tas bort.

IV. Inlärnings- och manövreringselement för denna modell:

(1) ansiktstvätt och sängskrubbning;2) munvård;3) trakeotomi;4) syrgasinhalationsbehandling (näsobstruktion och nasokateterisering);5) nasal matning;6) magsköljning;7 intrakardiell injektion;8) extratorakal hjärt-räddning; 9) Nyckelord pneumothorax;10) thoraxpunktion;11) leverpunktion;12) njurpunktion;13) celiakipunktion;14) benmärgspunktion;15) lumbalpunktion;16) injektion i deltamuskeln;17) hypodermisk injektion av deltamuskeln;18) intravenös injektion;19) Venpunktion;20) intravenös infusion; 21) intravenös transfusion; 22) kateterisering av kvinnor; 23) injektion i sätesmuskeln; 24) amning.

V. Bruksanvisning för modellen:

1. Alla delar av kroppen injicerades, stora och små nålbitar på punkteringsstället gjordes av mjuk plast, och en liten plastflaska var förpackad efter det lilla nålblocket, som kan innehålla 20CC vätska, och vätskan från 20CC kan vara injiceras först som pumpvätska innan teckningsundervisning.
2. Munnen och näsan kan användas som syre tillförsel, nasal matning och magsköljning (den magsäcken ersätts av en sondsäck).
3. Intravenös injektion, det finns en stor nålmassa i skinkorna injektionstillförsel, nasal matning och magsköljning (magsäcken ersätts av en sondpåse).
4. Intravenös injektion, det finns en stor nålmassa På injektionsstället i skinkorna finns ett hudrör (ett ersättningsvenrör) när injektionen måste göras. injiceras i hudrörets lumen, om en stor mängd av glukosinfusion, den övre delen av skinkorna exponerad hudtuben bör placeras i behållaren för att lossa klämman, och låt infusionen rinna ut. Under demonstration, en liten mängd vätska injiceras in i hudröret och sedan den övre änden av hudröret kan klämmas fast.
5. Vid injektion eller punktering måste vi betala uppmärksamhet på den centrala delen av nålblocket.
6. Metoden för subkutan och intramuskulär administrering injektionen är densamma som vid klinisk operation. Det kan injiceras med vätska, svampkroppen kan absorberar vatten, och vattnet kan extruderas och torkad. Använd inte för hårt under användning av nålen kan du använda fingret för att försiktigt trycka på nålblocket och sedan vrid nålen är bra.


VI . Under akutbehandling av extra bröstkorg hjärtåterupplivning, handen kan tryckas 1/3 under bröstbenet för att skapa den komprimerade platsen falla 2,5 cm. När bröstet hörs gnälla, kommer att släppa taget och återställa, och batteriet kan byts ut när batteriet är urladdat. o. Om injektions- eller punkteringsnålsblocket är skadad under lång tid kan den bytas ut. Så länge när muttern roteras mellan den nedre midjan och järnstången och kroppen är uppdelad i två sektioner, kroppen kan inspektera innerväggen, snurra ner liten plastflaska och ta sedan bort den skadade nålblocket utåt

och byt ut det mot ett nytt
en. Snurra sedan på en liten plastflaska, höft, arm nålblockskada, kan dras ut och sedan ersatt med en ny burk. Det finns reservdelar i varje modell av denna typ av stor och liten nål blockera.
VII . Kateterisering och lavemangsundervisning kan vara införd i hudröret endast för inlärning (ingen vätskeutflöde).
VIII . Magsköljning och nasal matning kan användas för att för in nässlangarna från näsborren in i matstrupe. Före införing, underläppen på munnen (tryckt inåt) kan öppnas och föras in med fingret och injiceras sedan i rörsäcken av kroppen. Håll i det yttre röret på den bakre delen av skinkorna och släpp klämmorna när bevattning är påbörjad
klart. (huden på baksidan av skinkorna kan lossas) genom utsläpp av vätskan.)
IX . När övningen är klar, kontrollera om vattnet i tubpåsen är avrunnad och rengör den torr.
X. Användning och underhåll av plastmodeller: Denna modell är tillverkad av mjuk och styv plast.
1. För att underlätta användningen , nålpositionen kan appliceras lätt vid användning av smörjmedel pulver (det vill säga talkpulver) för att hjälpa till att jämna ut och slät, med ett rent test efter användning.
2. Om modellen har använts kan den användas om den är smutsig . lite tvättmedel att försiktigt torka bort eller lite tvål vatten och rengör sedan med en rengöringsduk.
3. Modellen bör placeras på en sval plats , inte utsättas för solen och täck över locket.

PRODUCT PARAMETER

Modell	LD-134	LD-135
Kön	Kvinna	Människa
Material	PVC	PVC

PARTS LIST

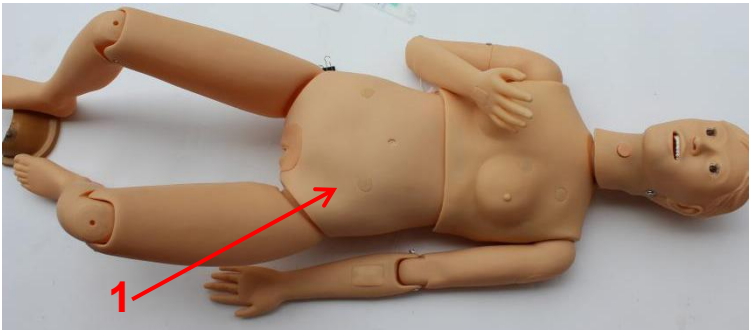

ING A.	Namn	PCS	
1	Modell för underkroppen	1	

ING A.	Namn	PCS	
En	**Kläder**	1	
B	**Spruta 10 ml**	1	
C	**Urinkateter**	1	
D	**Magsond**	1	

E	**Injektionsmodul**	3	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

