VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060H




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Thank you very much for choosing this product. Please always handle it with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Raised height	load
SC7060H	50/100/150mm	300lbs/136kg

- Adapt to toilet： Toilet interior width ≥ 240mm, toilet exterior width ≤ 350mm, suitable depth of the toilet: from 430mm to 470mm.
- Please check the size of your toilet before choosing the raised toilet seat.

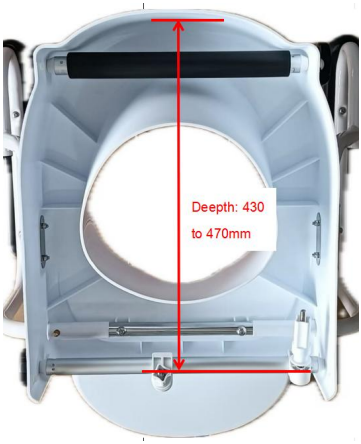

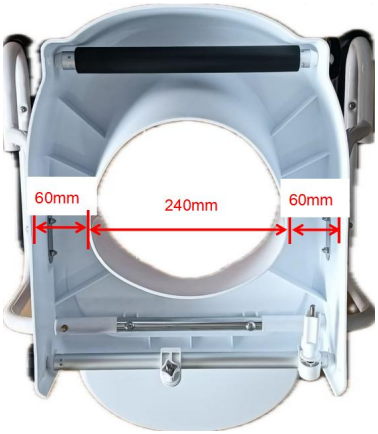

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	**SC7060H**
1	Raised Toilet Seat with cover		1
2	Armrest		2

3	Manual		1

CAUTIOUS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times, thus securing the seat to the toilet bowl. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat MUST NOT be used when overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.
4. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.
5. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. DO NOT try to use the arms to support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.
6. If you have a style of commode that this product will not fit properly, or cannot be tightened securely as noted above, it is recommended that you discontinue usage.
7. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.
8. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.
9. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for

medical advice.

INSTRUCTIONS


1. Remove your existing toilet seat from the bowl. Seats are generally attached by a pair of bolts/nuts located under the rear rim of the toilet.
Unscrew and remove the long plastic nuts from the rear of the toilet seat raiser.






2. Position the unit onto your toilet bowl, inserting the rear mounting bolts through the existing holes on your toilet.
Ensure the unit is centred over the toilet bowl.

3. The position of the mounting bolts can be adjusted to match different toilets. To adjust, slide the mounting bolts along the rear bar to achieve the correct distance.

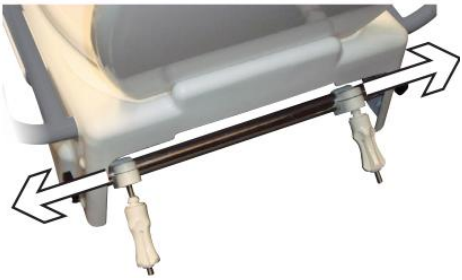

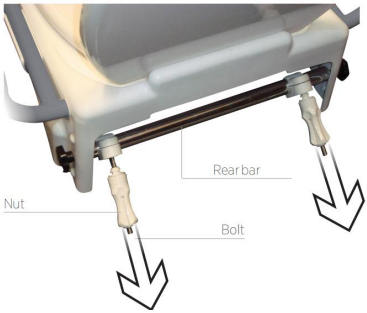

Mounting nuts must be loose for mounting bolts to slide freely along the bar.

Reattach both long plastic nuts to the mounting bolts and tighten firmly.
4. Check that the toilet seat raiser is firmly clamped against the toilet bowl before use.



Adjusting seat height

The toilet seat raiser can be adjusted to 3different height settings, adding 50,100 or 150 mm to the height of the toilet bowl Height can be adjusted either before or after installation.

When adjusting after the toilet seat raiser is installed, be careful not to drop components into the toilet.



Armrests assembly

The toilet seat raiser can be used with or without armrests.One or both armrests can be used to suit individual users and/or bathroom set up. A brass locking button is used to secure each armrest.

To insert the armrests, press in the locking button located under the frame

of the armrest and slide the armrest into the arm hole at the side of the toilet seat. Check that the armrest is stable and secure before use.



MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.
3. Regular maintenance

Regularly check that the mounting screws are tight and that the toilet seat raiser is firmly clamped to the toilet bowl.

Care & cleaning

To clean the unit after each use, wipe with a mild soap and warm water solution and rinse well. Dry with a clean cloth.

For heavier soiling, wipe clean with a diluted bleach solution and rinse well before drying.

Do not use water temperatures in excess of 80°c.

Do not use high pressure cleaners, steam cleaners or harsh, abrasive cleaning agents or utensils (such as a wire brush) as these can lead to deterioration of the unit.

Manufacturer: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
Address: 2-3 Floor of 65 Building, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siège de toilette surélevé

Modèle : SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modèle : SC7060H



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.


Merci d'avoir choisi ce produit . Veuillez le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces


informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	Hauteur surélevée	charger
SC7060H	50/10 0 /1 50 mm	3 0 0 lb/136 kg

- Adapté aux toilettes : largeur intérieure des toilettes ⩾ 240 mm, largeur extérieure des toilettes ⩽ 350 mm, profondeur appropriée des toilettes : de 430 mm à 470 mm.
- Veuillez vérifier la taille de vos toilettes avant de choisir le siège de toilette surélevé.

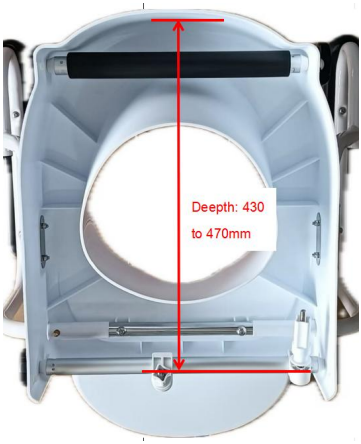

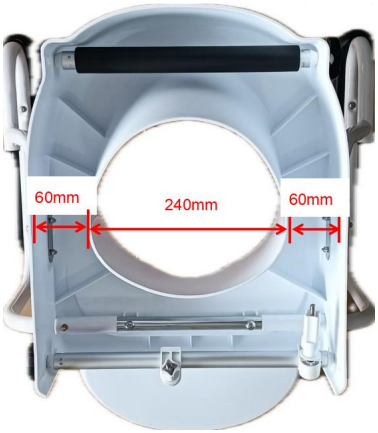

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	SC7060H
1	Siège de toilette surélevé avec couvercle		1

2	Accoudoir		2
3	Manuel		1

CAUTIOUS

1. Assurez-vous toujours que le siège est correctement et bien verrouillé en place avant utilisation.
2. Assurez-vous que le verrouillage de le siège est serré à tout moment, sécurisant ainsi le siège à la cuvette des toilettes. Les utilisateurs handicapés physiques doivent être supervisé ou assisté lors de l'utilisation de ce produit.
3. Le siège de toilette surélevé NE DOIT PAS être utilisé en cas de surcharge. Le poids de l'utilisateur doit être centré au-dessus du siège des toilettes, ni trop en avant ni trop loin d' un côté, car l'appareil pourrait basculer.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart types courants de toilettes. Elles ne conviennent pas à tous types de commodes ; assurez-vous que l'unité est correctement installé, s'adapte correctement et est stable avant utilisation.
5. Pour les modèles avec accoudoirs : Les accoudoirs sont pour le but de fournir une assistance lorsque monter et descendre du siège. N'essayez PAS de utiliser les bras pour supporter tout le poids du corps pendant transfert, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil et un risque de blessure .
6. Si vous avez un style de commode qui correspond à celui-ci le produit ne s'adaptera pas correctement ou ne pourra pas être serré solidement comme indiqué ci-dessus, il est il est recommandé d'arrêter l'utilisation.
7. Vérifiez régulièrement la solidité du montage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et

verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ne démontez pas le produit si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans le manuel.

8. Soyez prudent lors de l'utilisation et du montage. Évitez les températures extrêmes et les flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

9. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.

INSTRUCTIONS

1. Supprimez votre existant siège de toilette de la cuvette. Les sièges sont généralement fixé par une paire de boulons/écrous situés sous l'arrière bord de les toilettes.

Dévisser et retirez le longs écrous en plastique de la arrière de le rehausseur de siège de toilette.







2. Positionnez l'appareil sur votre cuvette de toilette, insertion de l'arrière boulons de montage à travers le trous existants sur vos toilettes.

Assurez-vous que l'unité est centrée sur la cuvette des toilettes.

3. La position de les boulons de montage peuvent être ajustés pour correspondre différentes toilettes. Pour régler, faites glisser les boulons de

fixation le long de l'arrière barre pour atteindre la bonne distance.

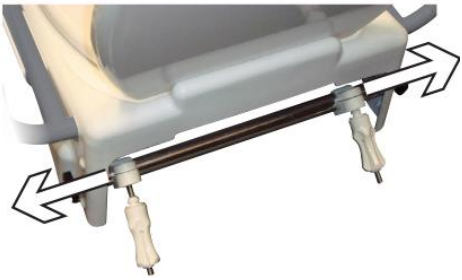

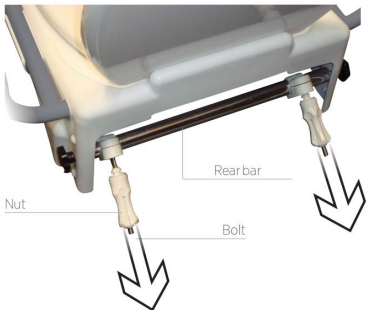

Les écrous de montage doivent être lâche pour les boulons de montage à glisser librement le long de la barre. Rattachez les deux longs plastiques écrous aux boulons de montage et serrez fermement.

4. Vérifiez que le rehausseur de siège de toilette est fermement serré contre la cuvette des toilettes avant utilisation .



Réglage de la hauteur du siège

Le rehausseur de siège de toilette peut être réglé à 3 hauteurs différentes paramètres, en ajoutant 50,10 0 ou 15 0 mm à la hauteur de la cuvette des toilettes La hauteur peut être réglée avant ou après installation.

Lors du réglage après le rehausseur de siège de toilette est installé, être attention à ne pas laisser tomber les composants dans les toilettes.



Assemblage des accoudoirs

Le rehausseur de siège de toilette peut être utilisé avec ou sans accoudoirs.Un ou les deux accoudoirs peuvent être utilisés pour s'adapter à chaque individu utilisateurs et/ou aménagement de salle de bain. Un bouton de verrouillage en laiton est utilisé pour sécuriser chaque accoudoir.

À insérez les accoudoirs, appuyez dans le bouton de verrouillage situé sous le cadre de l'accoudoir et faites glisser l'accoudoir dans le trou du bras à le côté de l'abattant des toilettes. Vérifiez que l'accoudoir est stable et sécurisé. avant utilisation.



MAINTENANCE

1. UN NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ. UTILISEZ UN

NETTOYANT OU UN DÉTERGENT NON ABRASIF. RINCER À L'EAU TIÈDE ET SÉCHER. COMPLÈTEMENT. LES CHIFFONS ABRASIFS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE.

2. VEUILLEZ INSPECTER RÉGULIÈREMENT VOTRE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC BRAS ET SES PIÈCES POUR DÉTECTER TOUTE CORROSION, CASSE, COMPRESSION OU USURE.

3. Entretien régulier

Vérifiez régulièrement que les vis de montage sont bien serrées et que le rehausseur de siège de toilette est fermement fixé à la cuvette des toilettes.

Entretien et nettoyage

Pour nettoyer l'appareil après chaque utilisation, essuyez-le avec un savon doux et de l'eau tiède, puis rincez abondamment. Séchez avec un chiffon propre.

Pour les salissures plus importantes, essuyez avec une solution d'eau de Javel diluée et rincez bien avant de sécher.

Ne pas utiliser d'eau dont la température dépasse 80°C.

N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression, de nettoyeurs à vapeur ou de produits ou ustensiles de nettoyage agressifs et abrasifs (comme une brosse métallique), car ils peuvent entraîner une détérioration de l'appareil.

Fabricant : FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adresse : 2-3 étage du bâtiment 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINE .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erhöhter Toilettensitz

Modell: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modell: SC7060H



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte gehen Sie stets sorgsam damit um . Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte


Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	Erhöhte Höhe	laden
SC7060H	50/10 0 /1 50mm	3 0 0 lbs/136 kg

- An Toilette anpassen: Toiletteninnenbreite ⩾ 240 mm, Toilettenaußenbreite ⩽ 350 mm, geeignete Toilettentiefe: von 430 mm bis 470 mm.
- Bitte überprüfen Sie die Größe Ihrer Toilette, bevor Sie sich für die Toilettensitzerhöhung entscheiden.

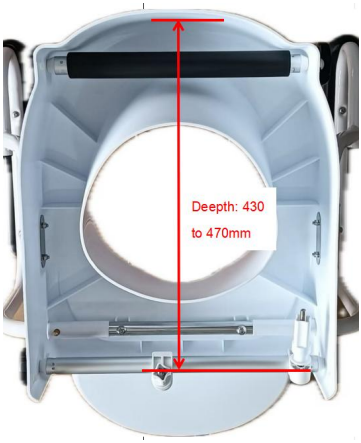

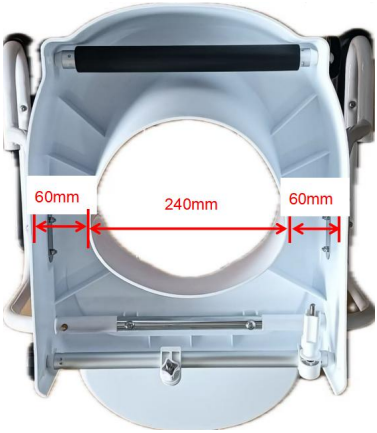

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	**SC7060H**
1	Toilettensitzerhöhung mit Deckel		1

2	Armlehne		2
3	Handbuch		1

CAUTIOUS

1. Achten Sie immer darauf, dass der Sitz richtig sitzt und vor der Verwendung sicher verriegelt.
2. , dass die Verriegelung Der Sitz ist jederzeit fest und sichert so die Sitz zur Toilettenschüssel. Körperlich eingeschränkte Benutzer sollten beaufsichtigt oder unterstützt werden, wenn Sie dieses Produkt.
3. Der erhöhte Toilettensitz darf NICHT verwendet werden bei Überlastung. Das Gewicht des Benutzers sollte zentriert sein über dem Toilettensitz, nicht zu weit nach vorne oder zu weit zur Seite , da das Gerät kippen könnte.
4. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den meisten gängige Arten von Kommoden. Es passt nicht für alle Toilettentypen; stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert, sitzt fest und ist stabil vor Gebrauch.
5. Bei Modellen mit Armlehnen: Die Armlehnen sind für der Zweck der Hilfeleistung, wenn Ein- und Aussteigen aus dem Sitz. Versuchen Sie NICHT Verwenden Sie die Arme, um das gesamte Körpergewicht zu stützen Übertragen Sie das Gerät nicht, da dies zu einem Geräteausfall und zu Verletzungsgefahr führen kann .
6. Wenn Sie einen Toilettenstil haben, der Produkt passt nicht richtig oder kann nicht fest angezogen ist, wie oben beschrieben, Es wird empfohlen, die Verwendung einzustellen.
7. Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder

fehlenden Teilen vorliegen. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

8. Seien Sie bei der Bedienung und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und offenes Feuer. Bei allergischen Reaktionen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

9. Lassen Sie sich vor der Anwendung von Ihrem Arzt bestätigen, dass das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

INSTRUCTIONS

1. Entfernen Sie Ihre vorhandenen Toilettensitz von der Schüssel. Sitzplätze sind in der Regel befestigt durch ein Paar Schrauben/Muttern unter der Rückseite Rand von die Toilette.
Abschrauben und entfernen Sie die langen Kunststoffmuttern aus dem Rückseite von die Toilettensitzerhöhung.






2. Positionieren Sie das Gerät auf Ihrem Toilettenschüssel, Einsetzen der hinteren Befestigungsschrauben durch die vorhandene Löcher in Ihrer Toilette.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät zentriert ist die Toilettenschüssel.

3. Die Position von Die Befestigungsschrauben können angepasst werden, um verschiedene Toiletten. Zum Einstellen schieben Sie die

Befestigungsschrauben entlang der Rückseite Stange, um den richtigen Abstand zu erreichen.



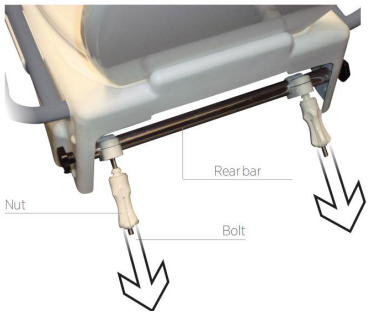

Befestigungsmuttern müssen lose für Befestigungsschrauben an frei entlang der Stange gleiten. Befestigen Sie die beiden langen Plastik Muttern an den Befestigungsschrauben und fest anziehen.

4. Überprüfen Sie , ob die Toilettensitzerhöhung ist fest gegen die Toilettenschüssel vor der Benutzung .



Sitzhöhe einstellen

Die Toilettensitzerhöhung kann auf 3 verschiedene Höhen eingestellt werden Einstellungen, Hinzufügen von 50,10 0 oder 15 0 mm auf die Höhe von die Toilettenschüssel Die Höhe kann entweder vor oder nach Installation.

Beim Verstellen nach der Toilettensitzerhöhung Ist installiert sein Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Toilette fallen.



Armlehnenmontage

Die Toilettensitzerhöhung kann mit oder ohne Armlehnen verwendet werden. oder beide Armlehnen können individuell angepasst werden Benutzer und/oder Badezimmereinrichtung. Zur Sicherung wird jeweils ein Messing-Verriegelungsknopf verwendet Armlehne.

Zu Armlehnen einsetzen, drücken im Verriegelungsknopf unter der Rahmen von die Armlehne und schieben Sie die Armlehne in die Armöffnung an die Seite des Toilettensitzes. Überprüfen Sie , ob die Armlehne stabil und sicher ist vor Gebrauch.



MAINTENANCE

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE EIN NICHT SCHEUERNDES REINIGUNGSMITTEL. SPÜLEN SIE

MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE VOLLSTÄNDIG. SCHEUERNDE TÜCHER KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.
2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ERHÖHTEN TOILETTENSITZ MIT ARMLEHNEN UND SEINE TEILE REGELMÄSSIG AUF KORROSION, BRÜCHE, KOMPRESSION ODER VERSCHLEISS.
3. Regelmäßige Wartung
Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Befestigungsschrauben fest angezogen sind und die Toilettensitzerhöhung fest an der Toilettenschüssel befestigt ist.
Pflege & Reinigung
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einer milden Seifenlösung und warmem Wasser und spülen Sie es gut ab. Trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch ab.
Bei stärkerer Verschmutzung mit einer verdünnten Bleichlösung abwischen und vor dem Trocknen gut abspülen.

Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur über 80 °C.

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder scharfe, scheuernde Reinigungsmittel oder Utensilien (wie z. B. eine Drahtbürste), da diese zu einer Beschädigung des Geräts führen können.
Hersteller: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adresse: 2.–3. Stock, Gebäude 65, Zhongnan Industry Garden, Haitian

Road Nr. 88, Bezirk Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone siedzisko sedesowe

Model: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060H



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Prosimy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji.


Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	Podniesiona wysokość	obciążenie
SC7060H	50/10 0 /1 50mm	3 0 0 funtów/136 kg

- Dostosowanie do toalety: szerokość wewnętrzna toalety ⩾ 240 mm, szerokość zewnętrzna toalety ⩽ 350 mm, odpowiednia głębokość toalety: od 430 mm do 470 mm.
- Przed wyborem podwyższonego siedziska należy sprawdzić rozmiar swojej toalety.

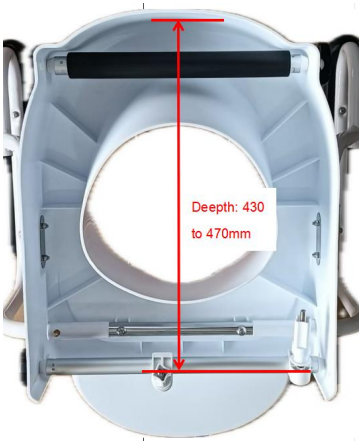

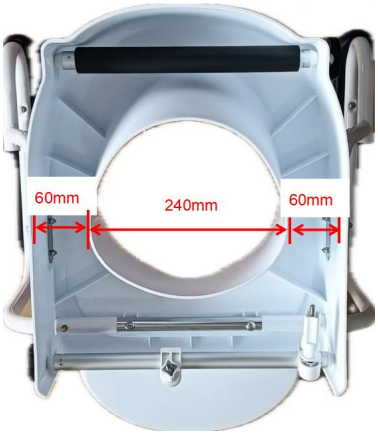

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	**SC7060H**
1	Podwyższone siedzisko sedesowe z pokrowcem		1

2	Podłokietnik		2
3	Podręcznik		1

CAUTIOUS

1. Zawsze upewnij się, że siedzenie jest prawidłowo i Przed użyciem należy je bezpiecznie zablokować.
2. Upewnij się, że blokada siedzenie jest zawsze szczelne, co zapewnia bezpiecze ń stwo siedzisko do muszli klozetowej. Użytkownicy niepełnosprawni fizycznie powinni nadzorowany lub wspomagany podczas korzystania z tego produkt.
3. NIE WOLNO używać podwyższonego siedziska sedesowego w przypadku przeciążenia. Ciężar użytkownika powinien być wyśrodkowany nad deską sedesową, nie za bardzo do przodu i nie za bardzo na bok , ponieważ może się przewrócić.
4. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania z większością popularne typy komód. Nie pasują do wszystkich typy komód; upewnij się, że jednostka jest prawidłowo zainstalowany, pasuje prawidłowo i jest stabilny przed użyciem.
5. W przypadku modeli z podłokietnikami: Podłokietniki są przeznaczone do celem zapewnienia pomocy, gdy wsiadanie i wysiadanie z siedzenia. NIE próbuj użyj ramion do podtrzymywania ciężaru całego ciała podczas przeniesienia, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia i ryzyko obrażeń .
6. Jeśli masz styl komody, który to produkt nie będzie pasował prawidłowo lub nie będzie mógł być mocno dokręcone, jak wskazano powyżej, jest Zaleca się zaprzestanie stosowania.
7. Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą

techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że jest to zalecane w instrukcji obsługi.

8. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

9. Przed użyciem należy upewnić się u lekarza, że produkt spełnia Twoje indywidualne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.

INSTRUCTIONS

1. Usuń istniejący deskę sedesową z miski. Miejsca są zazwyczaj przymocowane za pomocą pary śrub/nakrętek znajdujących się pod tylną częścią krawędź toaleta.

Odkręcić i usuń długie plastikowe nakrętki z tył podwyższenie deski sedesowej.






2. Umieść jednostkę na swoim muszla klozetowa, wkładając tylną część śruby montażowe przez istniejących otworów w Twojej toalecie.

Upewnij się, że jednostka jest wyśrodkowana muszla klozetowa.

3. Pozycja śruby montażowe można regulować, aby dopasować różne

toalety. Aby wyregulować, przesuń śruby mocujące wzdłuż tylnej części drążek, aby uzyskać właściwą odległość.



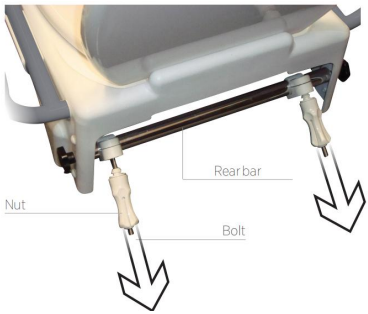

Nakrętki montażowe muszą być luźne do śrub montażowych przesuwać się swobodnie wzdłuż drążka. Ponownie zamontuj obie długie plastikowe części nakrętki do śrub montażowych i mocno dokręć.

4. Sprawdź , czy podwyższenie siedziska sedesowego jest jest mocno zaciśnięty muszlę klozetową przed użyciem .



Regulacja wysokości siedziska

Podwyższenie siedziska sedesowego można regulować na 3 różnych wysokościach ustawienia, dodawanie 50,10 0 lub 15 0 mm do wysokości muszla klozetowa Wysokość można regulować zarówno przed, jak i po Po instalacja.

Podczas regulacji po podniesieniu siedziska sedesowego Jest zainstalowany, być uważaj, aby nie wrzucić elementów do toalety.



Montaż podłokietników

Podwyższenie siedziska sedesowego można stosować z podłokietnikami lub bez.Jeden Lub oba podłokietniki można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownicy i/lub wyposażenie łazienki. Do zabezpieczenia każdego z nich używany jest mosiężny przycisk blokujący podłokietnik. Do włóż podłokietniki, naciśnij w przycisk blokujący znajdujący się pod rama podłokietnik i wsuń podłokietnik w otwór na rękę bok deski sedesowej. Sprawdź , czy podłokietnik jest stabilny i bezpieczny. przed użyciem.



MAINTENANCE

1. ZALECA SIĘ REGULARNE CZYSZCZENIE. UŻYWAĆ NIEŚCIERNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO LUB DETERGENTU.

SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I WYSUSZYĆ. CAŁKOWICIE. TKANINY ŚCIERNE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ.
2. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ PODWYŻSZONĄ DESKĘ TOALETOWĄ Z PODŁOKIETNIKAMI I JEJ CZĘŚCI POD KĄTEM KOROZJI, PĘKNIĘCIA, ŚCISKANIA LUB ZUŻYCIA.
3. Regularna konserwacja
Regularnie sprawdzaj , czy śruby montażowe są dobrze dokręcone i czy podwyższenie deski sedesowej jest pewnie zamocowane do muszli klozetowej.
Pielęgnacja i czyszczenie
Aby wyczyścić urządzenie po każdym użyciu, przetrzyj je łagodnym roztworem mydła i ciepłej wody, a następnie dokładnie spłucz. Wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

W przypadku silniejszych zabrudzeń należy przetrzeć je rozcieńczonym roztworem wybielacza i dokładnie wypłukać przed suszeniem.

Nie należy stosować wody o temperaturze przekraczającej 80°C.

Nie należy używać urządzeń do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, urządzeń parowych ani silnych, ściernych środków czyszczących ani przyborów kuchennych (takich jak szczotka druciana), ponieważ może to doprowadzić do pogorszenia stanu urządzenia.

Producent: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adres: 2-3 piętro budynku nr 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, dzielnica Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINY .
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verhoogde toiletzitting

Model: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060H



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het


gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	Verhoogde hoogte	laden
SC7060H	50/10 0 /1 50mm	3 0 0 lbs/136 kg

- Aangepast aan het toilet: Binnenbreedte van het toilet ⩾ 240 mm, buitenbreedte van het toilet ⩽ 350 mm, geschikte diepte van het toilet: van 430 mm tot 470 mm.
- Controleer de afmetingen van uw toilet voordat u een verhoogde toiletzitting kiest.

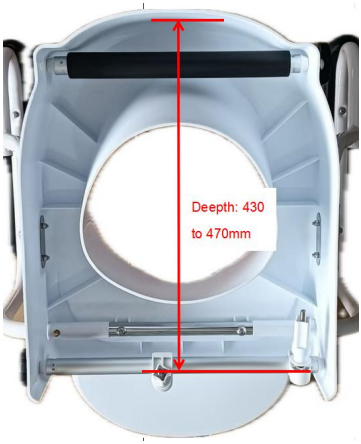

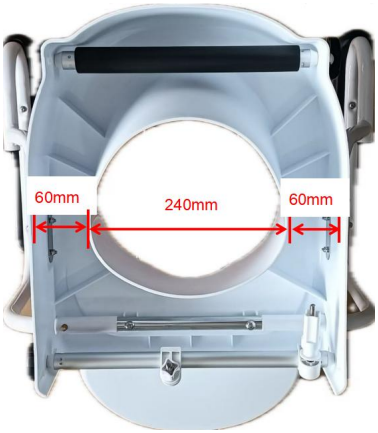

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	**SC7060H**
1	Verhoogde toiletzitting met deksel		1

2	Armsteun		2
3	Handmatig		1

CAUTIOUS

1. Zorg er altijd voor dat de stoel goed vastzit en goed vastgezet zijn voordat u het gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van de zitting zit altijd goed vast, waardoor de van de zitting naar de toiletpot. Lichamelijk beperkte gebruikers moeten: begeleid of bijgestaan wanneer u dit gebruikt product.
3. De verhoogde toiletzitting MAG NIET worden gebruikt bij overbelasting. Het gewicht van de gebruiker moet gecentreerd zijn boven de toiletbril, niet te ver naar voren of te ver opzij , aangezien het apparaat dan kan kantelen.
4. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meeste Veelvoorkomende soorten toiletten. Het past niet bij iedereen. commode-typen; zorg ervoor dat het apparaat is correct geïnstalleerd, past goed en is stabiel voor gebruik.
5. Voor modellen met armleuningen: De armen zijn voor het doel om hulp te bieden wanneer op en af de stoel stappen. Probeer NIET om Gebruik de armen om het volledige lichaamsgewicht te ondersteunen tijdens overdracht, aangezien dit kan leiden tot storingen in het apparaat en tot risico op letsel .
6. Als u een stijl van commode heeft die dit product past niet goed of kan niet worden stevig vastgedraaid zoals hierboven vermeld, is het wordt aanbevolen om het gebruik ervan te staken.
7. Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product recht en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen

van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

8. Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Stop onmiddellijk met het gebruik als er een allergische reactie optreedt en raadpleeg een arts.

9. Controleer vóór gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

INSTRUCTIONS

1. Verwijder uw bestaande toiletbril uit de pot halen. Stoelen zijn over het algemeen bevestigd door een paar bouten/moeren die zich onder de achterkant bevinden rand van het toilet.
Losdraaien en verwijder de lange plastic moeren van de achterkant van de toiletverhoger.







2. Plaats het apparaat op uw toiletpot, achterkant erin zetten bevestigingsbouten door de bestaande gaten in uw toilet.
Zorg ervoor dat de eenheid gecentreerd is de toiletpot.

3. De positie van de bevestigingsbouten kunnen worden aangepast om te passen verschillende toiletten. Om af te stellen, schuift u de bevestigingsbouten langs de achterkant balk om de juiste afstand te

bereiken.

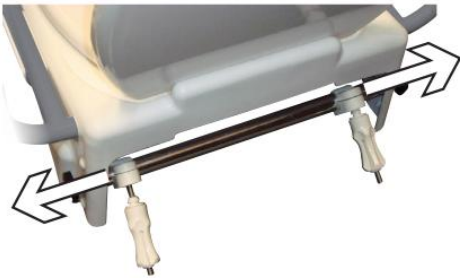

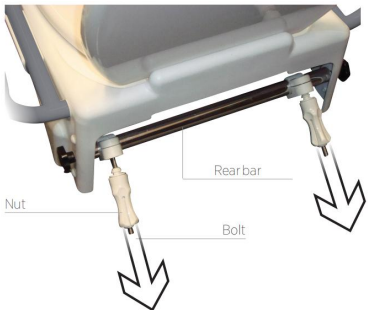

Montagemoeren moeten los voor montagebouten aan vrij over de balk kunnen glijden. Bevestig beide lange plastic moeren aan de bevestigingsbouten en draai ze stevig vast.

4. Controleer of de toiletverhoger is stevig vastgeklemd tegen de toiletpot voor gebruik .



Zithoogte aanpassen

De toiletverhoger is in 3 verschillende hoogtes verstelbaar instellingen, toevoegen van 50,10 0 of 15 0 mm tot de hoogte van de toiletpot De hoogte kan zowel voor als na de operatie worden aangepast. na installatie. Bij het verstellen na de toiletverhoger is geïnstalleerd, zijn Zorg ervoor dat er geen onderdelen in het toilet vallen.



Armleuningen montage

De toiletverhoger kan met of zonder armleuningen worden gebruikt.Een of beide armleuningen kunnen individueel worden aangepast gebruikers en/of badkamer ingericht. Een messing vergrendelingsknop wordt gebruikt om elk armsteun.

Naar armleuningen plaatsen, aandrukken in de vergrendelingsknop onder het frame van de armleuning en schuif de armleuning in het armsgat bij de zijkant van de toiletbril. Controleer of de armleuning stabiel en veilig is. voor gebruik.



MAINTENANCE

1. REGELMATIGE REINIGING WORDT AANBEVOLEN. GEBRUIK EEN NIET-SCHURENDE REINIGER OF WASMIDDEL. SPOEL AF MET WARM

WATER EN DROOG AF. VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KUNNEN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.
2. CONTROLEER REGELMATIG UW VERHOOGDE TOILETBRIL MET ARMEN EN DE ONDERDELEN OP CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE OF SLIJTAGE.
3. Regelmatig onderhoud
Controleer regelmatig of de bevestigingsschroeven goed vastzitten en of de toiletverhoger goed vastgeklemd zit aan de toiletpot.
Verzorging en reiniging
Reinig het apparaat na elk gebruik door het af te nemen met een milde zeepoplossing en warm water en goed af te spoelen. Droog het vervolgens af met een schone doek.
Bij hardnekkige vervuiling kunt u het schoonmaken met een verdunde bleekoplossing en het daarna goed naspoelen voordat u het laat drogen.

Gebruik geen watertemperaturen hoger dan 80°C.

Gebruik geen hogedrukreinigers, stoomreinigers of agressieve, schurende reinigingsmiddelen of hulpmiddelen (zoals een staalborstel), omdat deze het apparaat kunnen aantasten.
Fabrikant: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD . Adres: 2-3e verdieping van gebouw 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Asiento de inodoro elevado

Modelo: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modelo: SC7060H



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


Muchas gracias por elegir este producto . Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo . La información le ayudará a


conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	Altura elevada	carga
SC7060H	50/10 0 /1 50 mm	300 libras /136 kg

- Adaptable al inodoro: ancho interior del inodoro ⩾ 240 mm, ancho exterior del inodoro ⩽ 350 mm, profundidad adecuada del inodoro: de 430 mm a 470 mm.
- Compruebe el tamaño de su inodoro antes de elegir el asiento de inodoro elevado.

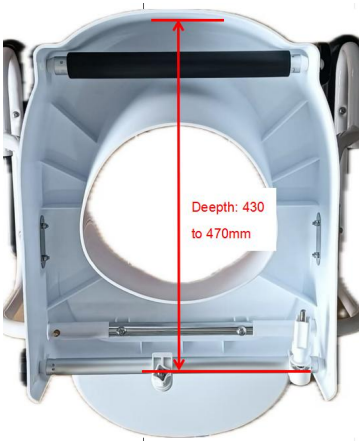

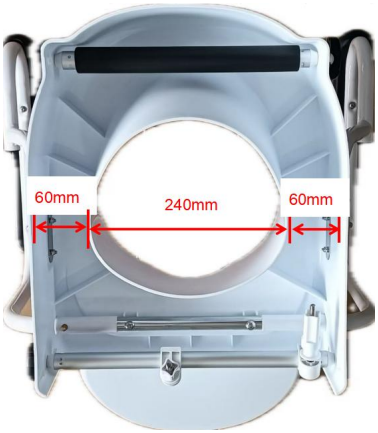

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	**SC7060H**
1	Asiento de inodoro elevado con tapa		1

2	Brazo		2
3	Manual		1

CAUTIOUS

1. Asegúrese siempre de que el asiento esté correctamente colocado y bien bloqueado en su lugar antes de usarlo.
2. Asegúrese de que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento, asegurando así la asiento de la taza del inodoro. Los usuarios con discapacidades físicas deben ser supervisado o asistido siempre que utilice este producto.
3. El asiento de inodoro elevado NO DEBE utilizarse Cuando esté sobrecargado, el peso del usuario debe estar centrado. sobre el asiento del inodoro, ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia un lado, ya que la unidad podría volcarse.
4. Este producto está diseñado para usarse con la mayoría Tipos comunes de inodoros. No se adapta a todos. tipos de inodoro; asegúrese de que la unidad esté Correctamente instalado, encaja correctamente y es estable Antes de usar.
5. Para modelos con apoyabrazos: Los brazos son para el propósito de proporcionar asistencia cuando subir y bajar del asiento. NO intente Utilice los brazos para soportar todo el peso del cuerpo durante transferencia, ya que esto puede provocar una falla de la unidad y riesgo de lesiones .
6. Si tienes un estilo de cómoda que este El producto no encajará correctamente o no se podrá Apretado firmemente como se indicó anteriormente, es Se recomienda suspender su uso.
7. Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y contacte con el servicio de asistencia en caso de duda. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su

uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer la vida útil del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.
8. Tenga cuidado durante el funcionamiento y el montaje. Evite temperaturas extremas y llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.
9. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto satisface sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

INSTRUCTIONS


1. Eliminar su existente asiento del inodoro de la taza. Los asientos son generalmente Se fija mediante un par de pernos/tuercas ubicados debajo de la parte trasera. borde de el baño.
Destornillar y quitar el Tuercas de plástico largas de la parte trasera de El elevador del asiento del inodoro.






2. Coloque la unidad sobre su Inodoro, inserción de la parte trasera pernos de montaje a través del agujeros existentes en su inodoro.
Asegúrese de que la unidad esté centrada la taza del inodoro.

3. La posición de Los pernos de montaje se pueden ajustar para que coincidan Diferentes inodoros. Para ajustar, deslice los pernos de montaje a lo largo de la parte trasera. barra para lograr la distancia correcta.

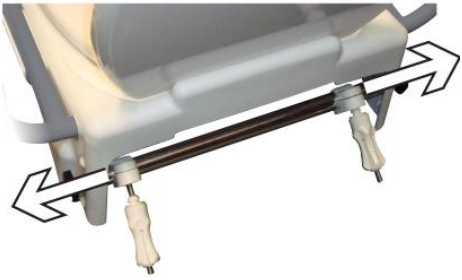

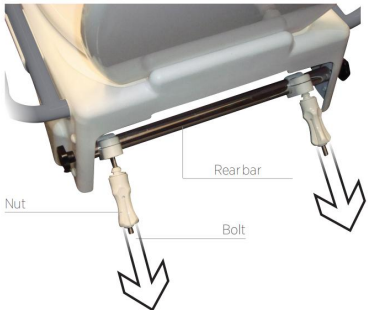

Las tuercas de montaje deben ser sueltos para los pernos de montaje Deslícese libremente a lo largo de la barra. Vuelva a colocar ambos plásticos largos tuercas a los pernos de montaje y apriete firmemente.

4. Compruebe que el elevador del asiento del inodoro está firmemente sujetado contra La taza del inodoro antes de usarla .



Ajuste de la altura del asiento

El elevador del asiento del inodoro se puede ajustar a 3 alturas diferentes. ajustes, sumando 50,10 0 o 15 0 mm a la altura de la taza del inodoro La altura se puede ajustar antes o después instalación.

Al ajustar después del elevador del asiento del inodoro es instalado, ser Tenga cuidado de no dejar caer los componentes en el inodoro.



Conjunto de apoyabrazos

El elevador de asiento de inodoro se puede utilizar con o sin apoyabrazos.Uno o Ambos apoyabrazos se pueden utilizar para adaptarse individualmente usuarios y/o Instalación del baño. Se utiliza un botón de bloqueo de latón para asegurar cada uno brazo.

A Inserte los apoyabrazos, presione en el botón de bloqueo ubicado debajo El marco de el apoyabrazos y deslícelo en el orificio del brazo en El lateral del asiento del inodoro. Compruebe que el reposabrazos esté estable y seguro. Antes de usar.



MAINTENANCE

1. SE RECOMIENDA UNA LIMPIEZA REGULAR. UTILICE UN LIMPIADOR O DETERGENTE NO ABRASIVO. ENJUAGUE CON AGUA

TIBIA Y SEQUE. COMPLETAMENTE. LOS PAÑOS ABRASIVOS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE.

2. POR FAVOR INSPECCIONE REGULARMENTE SU ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y SUS PIEZAS PARA VER SI HAY CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.

3. Mantenimiento regular

Compruebe periódicamente que los tornillos de montaje estén bien apretados y que el elevador del asiento del inodoro esté firmemente sujeto a la taza del inodoro.

Cuidado y limpieza

Para limpiar la unidad después de cada uso, límpiela con una solución de agua tibia y jabón suave y enjuáguela bien. Séquela con un paño limpio. Para suciedad más intensa, limpie con una solución de blanqueador diluido y enjuague bien antes de secar.

No utilice agua a temperaturas superiores a 80°c.

No utilice limpiadores de alta presión, limpiadores a vapor ni agentes o utensilios de limpieza abrasivos y fuertes (como un cepillo de alambre) ya que pueden provocar el deterioro de la unidad.

Fabricante: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD . Dirección: Planta 2-3 del Edificio 65, Zhongnan Industry Garden, Carretera Haitiana n.° 88, Distrito de Gaoming, Foshan, Guangdong, 528500, CHINA .

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sedile del water rialzato

Modello: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modello: SC7060H



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni


ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	Altezza rialzata	carico
SC7060H	50/10 0 /1 50mm	3 0 0 libbre/136 kg

- Adatto al WC: larghezza interna del WC ⩾ 240 mm, larghezza esterna del WC ⩽ 350 mm, profondità adatta del WC: da 430 mm a 470 mm.
- Prima di scegliere il sedile rialzato per WC, verifica le dimensioni del tuo WC.

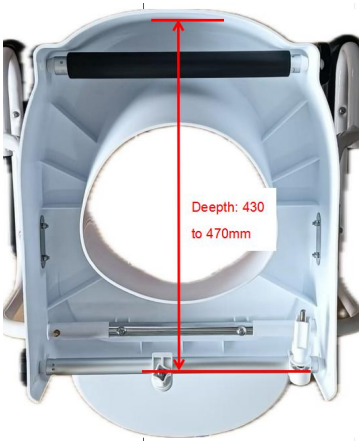

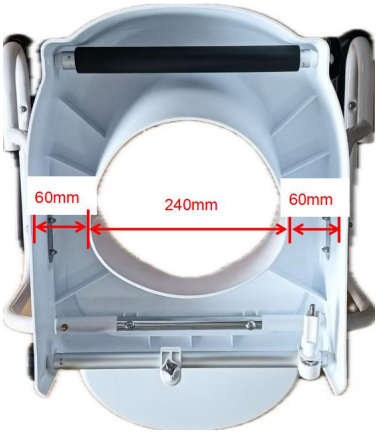

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	**SC7060H**
1	Sedile rialzato per WC con coperchio		1

2	Bracciolo		2
3	Manuale		1

CAUTIOUS

1. Assicurarsi sempre che il sedile sia correttamente e saldamente bloccato in posizione prima dell'uso.
2. Assicurarsi che il bloccaggio di il sedile è sempre ben saldo, assicurando così il sedile del water. Gli utenti con disabilità fisiche dovrebbero essere supervisionato o assistito ogni volta che si utilizza questo prodotto.
3. Il sedile rialzato per WC NON DEVE essere utilizzato in caso di sovraccarico. Il peso dell'utente deve essere centrato sopra il sedile del water, non troppo in avanti né troppo di lato , altrimenti l'unità potrebbe ribaltarsi.
4. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con la maggior parte tipi comuni di comò. Non si adatta a tutti tipi di comò; assicurarsi che l'unità sia installato correttamente, si adatta correttamente ed è stabile prima dell'uso.
5. Per i modelli con braccioli: I braccioli sono per lo scopo di fornire assistenza quando salire e scendere dal sedile. NON provare a utilizzare le braccia per sostenere tutto il peso corporeo durante trasferimento, poiché ciò potrebbe causare il guasto dell'unità e il rischio di lesioni .
6. Se hai uno stile di comò che questo il prodotto non si adatta correttamente o non può essere serrato saldamente come indicato sopra, è si consiglia di interromperne l'uso.
7. Verificare regolarmente il corretto montaggio e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura,

danni o parti mancanti. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe compromettere la longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.
8. Prestare attenzione durante l'uso e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
9. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere del medico.

INSTRUCTIONS


1. Rimuovi il tuo esistente il sedile del water dalla tazza. I posti sono generalmente fissato tramite una coppia di bulloni/dadi situati sotto la parte posteriore bordo di il bagno.
Svitare e rimuovere il lunghi dadi di plastica dal retro di il rialzo del sedile del water.






2. Posizionare l'unità sul tuo tazza del water, inserendo la parte posteriore bulloni di montaggio attraverso il fori esistenti sul water.
Assicurarsi che l'unità sia centrata sopra la tazza del water.

3. La posizione di i bulloni di montaggio possono essere regolati per adattarsi diversi servizi igienici. Per regolare, far scorrere i bulloni di montaggio lungo la parte posteriore barra per raggiungere la distanza corretta.

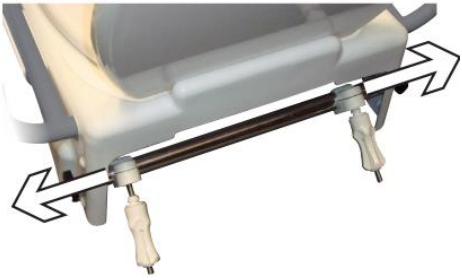

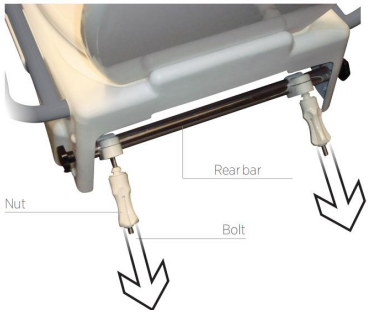

I dadi di montaggio devono essere allentato per i bulloni di montaggio a scorrere liberamente lungo la barra. Riattaccare entrambe le lunghe parti in plastica dadi ai bulloni di montaggio e stringere saldamente.

4. Controllare che il rialzo del sedile del water è saldamente bloccato contro la tazza del water prima dell'uso .



Regolazione dell'altezza del sedile

Il rialzo del sedile del water può essere regolato a 3 diverse altezze impostazioni, aggiungendo 50,10 0 o 15 0 mm all'altezza di la tazza del water L'altezza può essere regolata prima o Dopo installazione.

Durante la regolazione dopo il rialzo del sedile del water È installato, essere fare attenzione a non far cadere i componenti nel water.



Montaggio braccioli

Il rialzo per il sedile del water può essere utilizzato con o senza braccioli. O entrambi i braccioli possono essere utilizzati per adattarsi alle esigenze individuali utenti e/o allestimento del bagno. Per fissare ogni pezzo viene utilizzato un pulsante di bloccaggio in ottone. bracciolo.

A inserire i braccioli, premere nel pulsante di bloccaggio situato sotto la cornice di il bracciolo e far scorrere il bracciolo nel foro del bracciolo a il lato del sedile del water. Verificare che il bracciolo sia stabile e sicuro prima dell'uso.



MAINTENANCE

1. SI CONSIGLIA UNA PULIZIA REGOLARE, USARE UN DETERGENTE O UN DETERGENTE NON ABRASIVO. RISCIACQUARE CON ACQUA

TIEPIDA E ASCIUGARE COMPLETAMENTE. I PANNI ABRASIVI POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
2. SI PREGA DI CONTROLLARE REGOLARMENTE IL SEDILE WC RIALZATO CON BRACCIOLI E I SUOI COMPONENTI PER EVENTUALI CORROSIONI, ROTTURE, COMPRESSIONI O USURA.
3. Manutenzione ordinaria
Controllare regolarmente che le viti di montaggio siano ben strette e che il rialzo per WC sia fissato saldamente alla tazza del WC.
Cura e pulizia
Per pulire l'unità dopo ogni utilizzo, strofinare con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro e risciacquare bene. Asciugare con un panno pulito.
In caso di sporco ostinato, pulire con una soluzione di candeggina diluita e risciacquare bene prima di asciugare.

Non utilizzare temperature dell'acqua superiori a 80°C.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione, pulitori a vapore o detergenti o utensili aggressivi e abrasivi (ad esempio una spazzola metallica), poiché potrebbero deteriorare l'unità.
Produttore: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Indirizzo: 2-3 piano dell'edificio 65, Zhongnan Industry Garden, n. 88 Haitian Road, distretto di Gaoming, città di Foshan, Guangdong, 528500, CINA .
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Upphöjd toalettsits

Modell: SC7060H

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modell: SC7060H



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


Tack så mycket för att du valde den här produkten . Hantera den alltid varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen


kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	Höjd höjd	ladda
SC7060H	50/10 0 /1 50mm	136 kg

- Anpassa till toalett: Toalettens inre bredd ⩾ 240 mm, toalettens ytterbredd ⩽ 350 mm, lämpligt toalettdjup: från 430 mm till 470 mm.
- Kontrollera storleken på din toalett innan du väljer en upphöjd toalettsits.

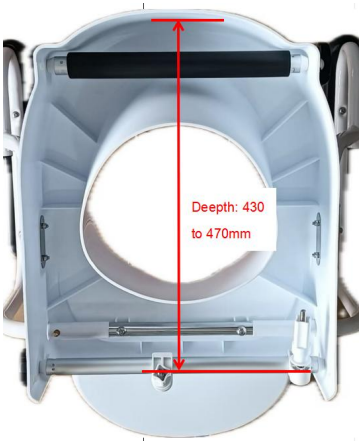

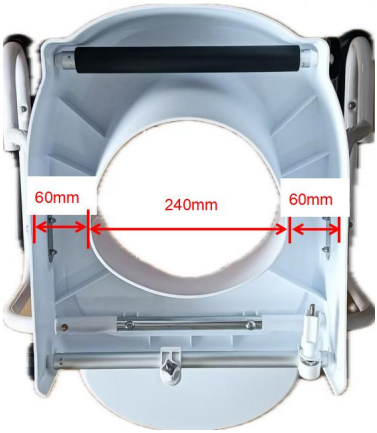

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	**SC7060H**
1	Upphöjd toalettsits med lock		1

2	Armstöd		2
3	Manuell		1

CAUTIOUS

1. Se alltid till att sätet är korrekt och ordentligt låst på plats före användning.
2. Se till att låsningen av sätet är tätt hela tiden, vilket säkrar sitsen till toalettstolen. Fysiskt funktionshindrade användare bör övervakad eller assisterad närhelst detta används produkt.
3. Den upphöjda toalettsitsen FÅR INTE användas vid överbelastning. Användarens vikt ska vara centrerad över toalettsitsen, inte för framåt eller för långt åt sidan , eftersom enheten kan välta.
4. Denna produkt är utformad för användning med de flesta vanliga typer av toaletter. Det passar inte alla toaletttyper; se till att enheten är korrekt installerad, passar ordentligt och är stabil före användning.
5. För modeller med armstöd: Armstöden är avsedda för syftet att ge hjälp när att ta sig på och av sätet. FÖRSÖK INTE att använd armarna för att stödja hela kroppsvikten under överföring, eftersom detta kan leda till att enheten slutar fungera och risk för skador .
6. Om du har en toalettstil som den här produkten passar inte ordentligt, eller kan inte ordentligt åtdragen enligt ovanstående, är den rekommenderas att du slutar använda det.
7. Kontrollera regelbundet att produkten är säkert monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.

8. Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontakta sjukvårdspersonal.
9. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

INSTRUCTIONS


1. Ta bort dina befintliga toalettsitsen från skålen. Sätena är generellt fäst med ett par bultar/muttrar placerade under baksidan kanten av toaletten.
Skruva loss och ta bort långa plastmuttrar från baksidan av toalettsitsförhöjaren.






2. Placera enheten på din toalettstolen, sätta in den bakre monteringsbultar genom befintliga hål i din toalett.
Se till att enheten är centrerad över toalettstolen.

3. Positionen för Monteringsbultarna kan justeras för att passa olika toaletter. För att justera, skjut monteringsbultarna längs baksidan stången för att uppnå rätt avstånd.

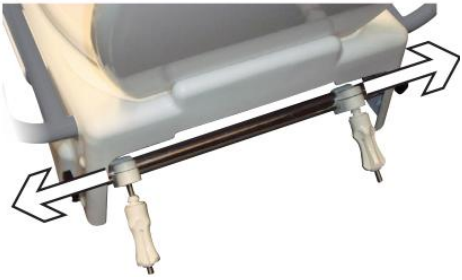

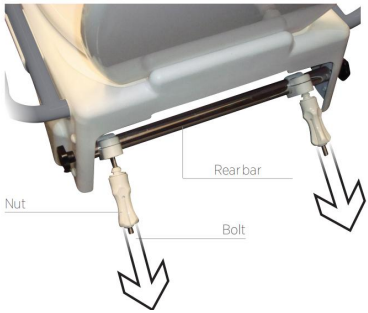

Monteringsmuttrar måste vara lös för monteringsbultar till glida fritt längs stången. Sätt tillbaka båda de långa plastmaterialen muttrar till monteringsbultarna och dra åt ordentligt.

4. Kontrollera att toalettsitsförhöjaren är ordentligt fastklämd mot toalettstolen före användning .



Justera sitthöjden

Toalettsitsförhöjaren kan justeras i 3 olika höjder inställningar, lägga till 50, 10 0 eller 150 mm till höjden av toalettstolen Höjden kan justeras antingen före eller efter installation.

Vid justering efter toalettsitsförhöjaren är installerad, vara Var försiktig så att du inte tappar komponenterna i toaletten.



Armstödsmontering

Toalettsitsförhöjaren kan användas med eller utan armstöd. eller båda armstöden kan användas för att passa individuellt användare och/eller badrumsuppsättning. En låsknapp i mässing används för att säkra varje armstöd.

Till sätt in armstöden, tryck i låsknappen sitter under ramen av armstödet och skjut in det i armhålet vid sidan av toalettsitsen. Kontrollera att armstödet är stabilt och säkert före användning.



MAINTENANCE

1. REGELBUNDEN RENGÖRING REKOMMENDERAS, ANVÄND ETT ICKE-SLIPANDE RENGÖRINGS- ELLER TVÄTTMEDEL. SKÖLJ MED VARMT VATTEN OCH TORKA. HELT. SKIDDUGAR KAN SKADA YTAN.

2. INSPEKTERA REGELBUNDET DIN UPPHÖJDA TOALETTSITS MED ARMARNA OCH DESS DELAR FÖR EVENTUELLA KORROSIONER, BROTT, KOMPRESSIONER ELLER SLITAGE.

3. Regelbundet underhåll

Kontrollera regelbundet att monteringsskruvarna är åtdragna och att toalettsitsförhöjaren är ordentligt fastklämd i toalettstolen.

Skötsel och rengöring

Rengör enheten efter varje användning genom att torka av den med en mild tvållösning och varmt vatten och skölja noggrant. Torka med en ren trasa.

Vid kraftigare smuts, torka rent med en utspädd blekmedelslösning och skölj noga innan torkning.

Använd inte vattentemperaturer över 80°C.

Använd inte högtryckstvättar, ångtvättar eller starka, slipande rengöringsmedel eller redskap (som en stålborste) eftersom dessa kan leda till att enheten försämras.

Tillverkare: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adress: 2-3 våningen i byggnad 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, Gaoming-distriktet, Foshan City, Guangdong, 528500, KINA .

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

